




Nuance Audio Charging Pad

# Instruções de Utilização Segurança e Garantia

## Carregamento

1

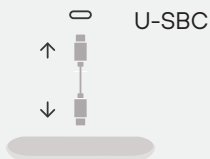

2



3



## Indicadores LED



 20-100%

 0-20%

## Base de Carregamento Nuance Audio™

\*Especifica-se que os regulamentos que se aplicam aos Óculos Nuance Audio™ podem variar consoante o país em que são comercializados. Como resultado, pode não haver uma correspondência total entre a terminologia utilizada nas diferentes versões linguísticas das "Instruções de Utilização – Segurança e Garantia".

A Base de Carregamento Nuance Audio™ é referida nestas Instruções de Utilização também como "Produto", "Dispositivo" ou "Equipamento".

### USOS PREVISTOS E UTILIZADORES

**Uso previsto.** O acessória Base de Carregamento Nuance Audio™ destina-se a permitir a funcionalidade dos Óculos Nuance Audio™ em termos de carregamento do aparelho auditivo\*. A Base de Carregamento Nuance Audio™ destina-se a ser utilizada apenas em conjunto com os Óculos Nuance Audio™ e destina-se apenas a ser utilizada por indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos. A Base de Carregamento Nuance Audio™ é utilizada para carregar os Óculos Nuance Audio™ sem fios. Tem um LED, na vista superior, para fornecer informações ao utilizador sobre o estado de carregamento dos Óculos Nuance Audio™ e é sem bateria, funcionando graças a um cabo USB-C.

**Para maiores de 18 anos.** A Base de Carregamento Nuance Audio™ destina-se a ser utilizada apenas em conjunto com os Óculos Nuance Audio™ e destina-se apenas a ser utilizada por indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos.

Não permita que ninguém com menos de 18 anos utilize a Base de Carregamento Nuance Audio™. As crianças podem engasgar-se ou sufocar se engolirem a Base de Carregamento Nuance Audio™. Mantenha a Base de Carregamento Nuance Audio™ afastada das crianças. Consulte o Guia Rápido para imagens e explicações sobre o uso da Base de Carregamento Nuance Audio™.

**Restrições a combinações.** A Base de Carregamento Nuance Audio™ deve ser utilizada apenas em conjunto com os Óculos Nuance Audio™. Para carregar os Óculos Nuance Audio™, utilize o Cabo de carregamento USB-C fornecido ou outro cabo do tipo USB-C, com uma tomada elétrica/adaptador USB (não incluído). É proibido ligar a Base de Carregamento Nuance Audio™ a uma tomada elétrica/adaptador que não esteja certificado para o mercado em que a Base de Carregamento Nuance Audio™ é comercializada, e que não foi testada nem aprovada de acordo com as normas nacionais e locais. A tomada elétrica/adaptador deve ter um nível mínimo de saída de DC5V/1A.

**Leia as instruções.** Leia e siga todas as instruções incluídas com a Base de Carregamento Nuance Audio™ antes de a utilizar.

### Precauções.

1. Não utilize a Base de Carregamento Nuance Audio™ se alguma parte dela estiver danificada ou a aquecer, se emitir algum ruído alto e incomum; se isso acontecer, desligue imediatamente a Base de Carregamento Nuance Audio™ da fonte de alimentação. Em seguida, visite-nos em [www.nuanceaudio.com](http://www.nuanceaudio.com) para obter informações úteis sobre serviços e contactos.
2. Não faça alterações não autorizadas à Base de Carregamento Nuance Audio™.

**IMPORTANTE!** Se a bateria dos Óculos Nuance Audio™ não for totalmente recarregada a cada 6 meses desde a última utilização, isso pode levar a danos permanentes na bateria, o que pode tornar os Óculos Nuance Audio™ inoperáveis.

### INFORMAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA

**AVISO** Para reduzir o risco de lesões pessoais, desconforto ou danos no objeto, por favor, leia e siga as informações de saúde e segurança abaixo antes de utilizar a Base de Carregamento Nuance Audio™.

**Interferência com dispositivos médicos pessoais.** A Base de Carregamento Nuance Audio™ contém material magnético e componentes que emitem ondas de rádio, o que pode afetar o funcionamento de dispositivos médicos, como, mas não se limitando a, pacemakers ou bombas de insulina, ou outros dispositivos implantáveis. Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico antes de usar a Base de Carregamento Nuance Audio™. Desligue a Base de Carregamento Nuance Audio™ da corrente e afaste-a de outro dispositivo médico se notar alguma interferência com o seu dispositivo médico.

**Interferência.** Verifique antes de usar a Base de Carregamento Nuance Audio™ em áreas onde eletrónicos ou dispositivos sem fios estão restritos. Isto pode causar interferência.

**Água e líquidos.** Não submergir em água e mantê-la afastada de líquidos. A exposição à água ou a outros líquidos pode danificar a Base de Carregamento Nuance Audio™ e causar lesões. Não é resistente à água e não foi concebida para resistir à submersão ou à exposição a outros líquidos. Em caso de exposição à água, seque bem a Base de Carregamento Nuance Audio™. Não mergulhe em água nem permaneça num ambiente húmido durante muito tempo.

## **AVISO Atmosferas potencialmente explosivas**

Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que a Base de Carregamento Nuance Audio™. Não utilize a Base de Carregamento Nuance Audio™ quando estiver numa área com atmosferas potencialmente explosivas.

### **Não utilize se estiver partida ou danificada.**

**Sobreaquecimento.** Mantenha a Base de Carregamento Nuance Audio™ longe do fogo e de calor excessivo (por exemplo, de armazenamento à luz direta do sol, perto de velas ou num carro quente) para evitar queimaduras ou danos na Base de Carregamento Nuance Audio™. A Base de Carregamento Nuance Audio™ não deve aquecer em excesso durante o uso normal. Se isso acontecer, pare de a usar imediatamente e contacte o suporte. Mantenha a Base de Carregamento Nuance Audio™ afastada do fogo e de fontes de calor.

**Manusear com cuidado e evitar danos.** A Base de Carregamento Nuance Audio™ é um equipamento eletrónico sensível e deve ser manuseada com cuidado. Não aqueça nem dobre a Base de Carregamento Nuance Audio™, pois pode ficar danificada e até pegar fogo. Não deixe cair, bater ou agitar excessivamente a Base de Carregamento Nuance Audio™. Não utilize a Base de Carregamento Nuance Audio™ se estiver danificada. Não tente abrir, desmontar ou interferir com a Base de Carregamento Nuance Audio™. Não a exponha ao sol. Não a coloque perto de produtos elétricos de alta potência. Não esteja num ambiente magnético forte. Se o Produto deixar de funcionar, o seu funcionamento normal pode ser restaurado afastando-o do campo magnético.

## **Interações e ambientes Limitações de Uso e Funcionalidade**

**1:** Coloque a Base de Carregamento Nuance Audio™ plana sobre a secretária para garantir que não oscila.

**2:** Coloque os Óculos Nuance Audio™ dobrados e de cabeça para baixo na Base de Carregamento Nuance Audio™. Consulte o Guia de Início Rápido para ver as imagens.

**3:** Certifique-se de que os Óculos Nuance Audio™ estão alinhados com os componentes magnéticos na Base de Carregamento Nuance Audio™. O LED da Base de Carregamento Nuance Audio™ acender-se-á em laranja ou verde quando estiver corretamente alinhado. Se o alinhamento não for preciso, pode tentar ajustar o ângulo ou a posição dos Óculos Nuance Audio™.

**4:** Durante o processo de carregamento, não mova nem vibre os Óculos Nuance Audio™ de forma significativa para evitar afetar o efeito de carregamento.

**5:** Se a Base de Carregamento Nuance Audio™ não conseguir carregar corretamente ou apresentar alguma avaria, por favor, pare de a usar imediatamente.

Os requisitos de sistema detalhados e os termos e condições estão disponíveis em - [www.nuanceaudio.com](http://www.nuanceaudio.com).

**Em voo.** Verifique as restrições de segurança da aviação aplicáveis a eletrónicos pessoais antes de voar com a Base de Carregamento Nuance Audio™. Utilize a Base de Carregamento Nuance Audio™ em conformidade com todas as leis, regras e regulamentos locais aplicáveis. Use o bom senso e respeite os direitos, a privacidade e a confidencialidade de terceiros.

**Condições de operação.** -10°C (14°F) a 45°C (113°F); 101,3kPa a 61,9kPa; humidade entre 20% e 60% até 35°C (95°F) durante 1000 horas; altitude máxima de 13 000 pés durante 1 hora a 0°C (32°F) e 35°C (95°F).

**Transporte e Armazenamento.** A Base de Carregamento Nuance Audio™ deve permanecer funcional após a recuperação de temperaturas de armazenamento mínimas de -30°C (-22°F) ou máximas de 75°C (167°F); alta humidade de 90% e temperatura de 45°C (113°F) durante 288 horas; exposição a uma altitude de 40 000 pés (12 192 m) (18,8kPa) durante 12 horas tanto a -10°C (14°F) como a 45°C (113°F).

**Limpeza e manutenção.** Para limpar a Base de Carregamento Nuance Audio™, utilize um pano humedecido e sabão neutro, evitando todos os tipos de sprays, solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool ou amoníaco. Não utilize panos sujos ou abrasivos que possam danificar a Base de Carregamento Nuance Audio™. Mantenha a Base de Carregamento Nuance Audio™ seca. Se o Produto ficar excessivamente molhado, há o risco de danificar a função de carregamento; seque-o bem, armazene-o num recipiente com dessecantes ou numa caixa de secagem.

## **Carregamento, eletricidade e calor**

**Carregamento.** Utilize apenas a Base de Carregamento Nuance Audio™ para carregar os Óculos Nuance Audio™. Utilize o Cabo de carregamento USB-C fornecido ou outros cabos do tipo USB-C, C para C, com uma tomada elétrica/adaptador USB (não incluído). É proibido ligar a Base de Carregamento Nuance Audio™ a uma tomada elétrica/adaptador que não esteja certificado para o mercado em que a Base de Carregamento Nuance Audio™ é comercializada, e que não tenha sido testada e aprovada de acordo com as normas nacionais e locais. A tomada elétrica/adaptador deve ter um nível mínimo de saída de DC5V/1A.

Não limpe a Base de Carregamento Nuance Audio™ enquanto estiver a carregá-la. Não carregue os Óculos Nuance Audio™ em superfícies metálicas ou em ambientes com campos elétricos ou magnéticos fortes. Inspeccione periodicamente a Base de Carregamento Nuance Audio™ e o Cabo de carregamento

USB-C quanto a danos ou sinais de desgaste. Não utilize se alguma parte estiver danificada, rachada ou se algum componente interno estiver exposto. Não tente reparar a Base de Carregamento Nuance Audio™ ou substituir peças você mesmo, em vez disso, contacte o suporte em [www.nuanceaudio.com](http://www.nuanceaudio.com).

**Acessórios.** Utilize apenas com os cabos USB-C e tomadas elétricas/adaptadores compatíveis indicados acima. O uso de acessórios não aprovados pode danificar permanentemente a Base de Carregamento Nuance Audio™ ou os Óculos Nuance Audio™, anular a Garantia Limitada Luxottica e aumentar o risco de lesões ou danos a outros bens.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

| CARREGAMENTO SEM FIOS          |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Frequência de transmissão      | 13,56 MHz                                                        |
| Frequência de recepção         | 13,56 MHz                                                        |
| Potência máxima radiada        | 69,72 dBuV/m a 3 m                                               |
| Tipo de modulação a transmitir | PEÇA 100% modificado Miller                                      |
| Tipo de modulação de recepção  | Modulação de carga subportadora fc/16 (848kbit/s) OOK Manchester |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Bateria           | Bateria menos |
| Vida útil         | 3 anos        |
| Prazo de validade | 5 anos        |

## CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura                    | De -30°C (-22°F) a 75°C (167°F)                                                                     |
| Humidade                       | De 20% a 90% de humidade e temperatura de 45°C (113°F) durante 288 horas                            |
| Altitude e pressão atmosférica | Altitude de 40 000 pés (12.192 m) (18,8 kPa) durante 12 horas em ambos. 14°F (-10°C) e 45°C (113°F) |

## CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura                    | De -10°C (14°F) a 45°C (113°F)                                                         |
| Humidade                       | De 20% a 60% de humidade a 35°C (95°F) durante 1000 horas                              |
| Altitude e pressão atmosférica | Altitude de 13 000 pés durante 1 hora a 0°C (32°F) e 35°C (95°F); 101,3 kPa a 61,9 kPa |

**Nota: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o Equipamento.**

**Nenhuma parte deste trabalho pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem autorização prévia por escrito.**

### Declaração de conformidade da UE

O Grupo Luxottica S.p.A declara que este Dispositivo está em conformidade com a Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE, o Regulamento da UE sobre Dispositivos Médicos para Aparelhos Auditivos 2017/745 sobre Dispositivos Médicos e

Diretiva RoHS II 2011/65/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration](http://www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration)

Mantenha a Base de Carregamento Nuance Audio™ afastada do ventre de mulheres grávidas. Mantenha a Base de Carregamento Nuance Audio™ afastada da parte inferior do abdómen de adolescentes. Utilize a Base de Carregamento Nuance Audio™ em boas condições de recepção para reduzir a quantidade de radiação eletromagnética recebida.



O utilizador final é obrigado a comunicar qualquer incidente grave que ocorra em relação à utilização do Dispositivo à autoridade competente do Estado-membro onde o incidente ocorreu e ao fabricante do Dispositivo.

### Informação sobre eliminação

A Base de Carregamento Nuance Audio™ e o Cabo de carregamento USB-C não devem ser descartados como resíduos domésticos e devem ser entregues a uma instalação de recolha apropriada para reciclagem. Para mais informações sobre a eliminação adequada, por favor visite [www.nuanceaudio.com](http://www.nuanceaudio.com).

### Informação sobre Eliminação da UE e do Reino Unido

Os símbolos de conteúdo com rodas riscado abaixo significam que, de acordo com as leis e regulamentos locais, a Base de Carregamento Nuance Audio™ e o Cabo de carregamento USB-C devem ser descartados separadamente dos resíduos domésticos. Quando a Base de Carregamento Nuance Audio™ e/ou o Cabo de Carregamento atingem o fim da sua vida útil, leve-os para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. Em alternativa, utilize a Base de Carregamento Nuance Audio™ e o Cabo de carregamento USB-C para uma loja afiliada. A recolha e reciclagem separadas da Base de Carregamento Nuance Audio™ e do Cabo de Carregamento no momento da eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e garantir que sejam reciclados de uma forma que proteja a saúde humana e o meio ambiente.



### Informação sobre REEE

A Luxottica está comprometida com a correta eliminação, reutilização, reciclagem e recuperação de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos ("REEE"). Os REEE não devem ser descartados nos contentores normais de resíduos domésticos. Para mais informações sobre a eliminação adequada, por favor visite [www.nuanceaudio.com](http://www.nuanceaudio.com).

Nuance Audio™ é uma marca comercial registada da Essilor International SAS.

### GARANTIA LIMITADA LUXOTTICA

Esta garantia limitada ao consumidor (a "Garantia") é fornecida pela Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milão, Itália ("Luxottica"). Esta garantia cobre defeitos e avarias no novo Produto Luxottica que a acompanha. A garantia é válida por um (1) ano a partir da data de compra do Produto (o "Período de Garantia Limitada"). No entanto, se adquirir o Produto dentro da UE, Reino Unido ou EFTA, o Período de Garantia Limitada será de dois (2) anos.

Garantimos que o Produto funcionará, sob uso normal e pretendido, de acordo com as especificações técnicas ou documentação do Produto que o acompanha (a "Funcionalidade Garantida") durante o Período de Garantia Limitada. Para evitar dúvidas, quaisquer serviços que sejam necessários para alcançar a Funcionalidade Garantida podem ser atualizados, modificados ou limitados, desde que continuem a manter (ou a exceder) a Funcionalidade Garantida. Esta Garantia não está disponível para produtos que foram adquiridos de qualquer fonte que não seja a Luxottica ou um revendedor autorizado. Esta garantia é válida apenas com prova de compra que mostre claramente a data da compra. Se nos enviar um Produto sem prova de compra válida, reservamo-nos o direito de devolver o Produto a si, às suas custas, sujeito a pré-pagamento, ou, se tais custos não forem pré-pagos, manteremos o Produto durante trinta (30) dias para que o possa levantar. Se o seu Produto estiver defeituoso ou a funcionar mal, iremos reparar ou substituir esse Produto, de forma a que o Produto funcione substancialmente de acordo com a Funcionalidade Garantida. Em alguns casos, podemos em vez disso reembolsar o preço de compra pago pelo Produto. O seu remédio ao abrigo desta garantia será a reparação, substituição ou reembolso do Produto, a menos que seja impossível ou desproporcionado para nós fazê-lo.

Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos, e poderá também ter outros direitos ao abrigo das leis ou regulamentos de proteção ao consumidor na jurisdição de compra ou, se diferente, no seu país de residência. Esses direitos variam de estado para estado e de país para país. Os benefícios conferidos por esta Garantia são adicionais e não afetam quaisquer direitos e recursos conferidos por tais leis e regulamentos de proteção ao consumidor (incluindo, sem limitação, leis nacionais que implementam a Diretiva 1999/44/CE e a Diretiva 2019/771). Tem direito a remédios gratuitos no caso de o Produto não estar em conformidade com os requisitos estabelecidos pelas leis na sua jurisdição. Os outros recursos disponíveis para si de acordo com as leis da sua jurisdição não são afetados por esta garantia. Para obter informações completas sobre os seus direitos de acordo com as leis da sua jurisdição, consulte abaixo e/ou contacte a sua organização local de defesa do consumidor/gabinete de aconselhamento aos cidadãos.

Esta garantia aplica-se apenas aos países para os quais a Luxottica envia e dá suporte. Por favor, visite-nos em [www.nuanceaudio.com](http://www.nuanceaudio.com) para informações sobre os países que a Luxottica apoia e para obter informações úteis de serviço e de contacto. O âmbito do suporte técnico oferecido pela Luxottica consiste em ajudar a diagnosticar e resolver problemas com defeitos no Produto. Por favor, note que

ao contactar a Luxottica por telefone, podem aplicar-se taxas de longa distância, dependendo da sua área de chamada.

## **REGISTO**

O registo do produto não é necessário como condição para a cobertura ao abrigo desta garantia, mas alguns produtos Luxottica requerem uma ligação periódica a uma conta online para garantir a funcionalidade total.

## **COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA**

Se tiver um problema com o seu Produto, por favor, visite-nos em [www.nuanceaudio.com](http://www.nuanceaudio.com) para obter uma assistência útil e informações de contacto, e para obter assistência de garantia.

Salvo indicação em contrário nesta garantia e exceto conforme previsto pela legislação estatal aplicável, para fazer uma reclamação de garantia, tem de devolver o seu Produto à Luxottica ou ao revendedor autorizado onde o Produto foi comprado, juntamente com o seu comprovativo de compra.

Se a sua reclamação de garantia for considerada válida e encontrarmos um defeito ou mau funcionamento coberto por esta Garantia, iremos substituir ou reparar o Produto para que este forneça a funcionalidade garantida. Sujeito aos seus direitos ao abrigo de quaisquer leis locais, se determinarmos que um Produto deve ser substituído, a substituição pode ser um Produto novo, recondicionado ou remanufaturado. O Período de Garantia Limitada é alargado por uma duração igual ao tempo durante o qual tivemos o Produto na nossa posse para a execução da Garantia, conforme descrito acima. Salvo os seus direitos e recursos disponíveis ao abrigo das leis locais, a disponibilização de um Produto reparado ou substituído não reinicia nem prolonga de outra forma o Período de Garantia Limitada. Se se verificar que nenhum dos meios listados é razoável para corrigir um defeito ou avaria, poderemos reembolsar-lhe o preço que pagou pelo Produto. Podemos não lhe devolver o Produto original. Se a sua reclamação de garantia não for considerada válida, reservamo-nos o direito de devolver o Produto a si, às suas custas, sujeito a pré-pagamento, ou, se tais custos não forem pré-pagos, manteremos o Produto durante trinta (30) dias para que o possa levantar antes de ser eliminado.

Salvo disposição em contrário da lei, quaisquer despesas em que você incorrer ao devolver o Produto para avaliação de garantia serão suportadas pela Luxottica, utilizando uma etiqueta de devolução pré-paga que lhe será fornecida para permitir que devolva o seu Produto para avaliação de garantia sem custos, ou outros métodos listados em [www.nuanceaudio.com](http://www.nuanceaudio.com). Se o Produto devolvido for considerado (a critério da Luxottica) elegível para uma reclamação de garantia válida, a Luxottica incorrerá automaticamente nos custos de quaisquer encargos de transporte adicionais necessários para lhe devolver o Produto reparado ou substituído.

Se a reclamação de garantia for considerada inválida e não encontrarmos um defeito ou avaria coberta por esta Garantia, entraremos em contacto consigo para saber se deseja que realizemos reparações à sua custa e, em qualquer caso, ser-lhe-á cobrado o transporte de devolução do seu Produto com base nas tarifas de envio padrão da Luxottica.

## **LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES**

ESTA GARANTIA NÃO COBRE, E A LUXOTTICA NÃO É RESPONSÁVEL POR:

CUSTOS DE ENTREGA OU INSTALAÇÃO, CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA PARA A CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO E/OU AJUSTE DOS CONTROLOS DO CLIENTE NO PRODUTO. DANOS CAUSADOS POR MÁ UTILIZAÇÃO, ABUSO, ACIDENTES, INCÊNDIO, FURTO, DESAPARECIMENTO, PERDA, FLUTUAÇÕES E PICO DE ENERGIA, LIGAÇÕES A VOLTAGEM INCORRETA OU VOLTAGEM DE LINHA ELÉTRICA INCORRETA, VÍRUS, MALWARE, CONDUTA IMPRUDENTE, DOLOSA OU INTENCIONAL OU NEGLIGÊNCIA. DANOS CAUSADOS POR SERVIÇOS NO PRODUTO QUE NÃO FORAM PRÉ-AUTORIZADOS PELA LUXOTTICA. DANOS CAUSADOS POR UTILIZAÇÃO QUE NÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES/ DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO. DANOS CAUSADOS POR NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES/ DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO OU POR NÃO REALIZAR A LIMPEZA OU MANUTENÇÃO PREVENTIVA. DANOS CAUSADOS PELA COMBINAÇÃO DO PRODUTO COM OUTROS PRODUTOS, ACESSÓRIOS, PEÇAS OU COMPONENTES NÃO MARCADOS LUXOTTICA OU PELO USO DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SISTEMAS, UTILIDADES, SERVIÇOS, SOFTWARE, FORNECIMENTOS DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, APLICAÇÕES, INSTALAÇÕES, REPARAÇÕES, FIOS EXTERNOS OU CONECTORES NÃO FORNECIDOS OU AUTORIZADOS PELA LUXOTTICA QUE DANIFICAM O PRODUTO. PROBLEMAS DE SINAL, PROBLEMAS DE RECEÇÃO E DISTORÇÃO RELACIONADOS COM RUÍDO, ECO, INTERFERÊNCIA OU OUTROS PROBLEMAS DE TRANSMISSÃO E ENTREGA DE SINAL. QUALQUER EQUIPAMENTO OU COMPONENTES QUE NÃO ESTIVERAM INCLUÍDOS NO SEU PRODUTO OU QUE NÃO FORAM VENDIDOS COM ELE ORIGINALMENTE. DESGASTE NORMAL. DANO CAUSADO COMO RESULTADO DE TRANSPORTE OU EMBALAMENTO INCORRETOS AO DEVOLVER O PRODUTO À LUXOTTICA OU A UM DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. DANOS CAUSADOS POR MODIFICAÇÃO OU ADAPTAÇÃO QUE PODERÃO SER NECESSÁRIAS PARA PERMITIR QUE UM PRODUTO FUNCIONE EM QUALQUER PAÍS QUE NÃO O PAÍS PARA O QUAL FOI

DESENHADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU REPARAÇÃO DO PRODUTO QUE RESULTA EM DANOS COMO RESULTADO DESTAS MODIFICAÇÕES. DANO A PRODUTOS CUJO CÓDIGO ANTI-FALSIFICAÇÃO (OU EQUIVALENTE) FOI REMOVIDO, APAGADO, DESFIGURADO, ALTERADO OU TORNADO ILEGÍVEL. Esta garantia não inclui quaisquer garantias específicas de que o Produto estará isento de erros. Exceto nos EUA e na medida em que seja proibido por qualquer lei aplicável em qualquer outro país, esta garantia é nula se um produto for devolvido com rótulos removidos, danificados ou adulterados ou qualquer alteração (incluindo a remoção não autorizada de qualquer componente ou cobertura externa).

#### **GARANTIAS IMPLÍCITAS**

EXCETO NA UE, EFTA E REINO UNIDO E EXCETO NA MEDIDA EM QUE SEJA PROIBIDO POR QUALQUER NORMATIVA APLICÁVEL A LEI EM QUALQUER OUTRO PAÍS, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO É DESCONHECIDA.

APENAS PARA OS EUA, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE NÃO POSSAM SER RENUNCIADAS SÃO EXPRESSAMENTE LIMITADAS À DURAÇÃO DO PERÍODO DE GARANTIA LIMITADA CONFORME ESTABELECIDO NESTA GARANTIA. SE VOCÊ É UM CONSUMIDOR SUJEITO À LEI DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DO QUEBEC, A ISENÇÃO DE GARANTIA CONTIDA NESTA SECÇÃO NÃO LIMITA OS SEUS DIREITOS E RECURSOS AO ABRIGO DESSA LEI, INCLUINDO O DIREITO DE APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO AO ABRIGO DE QUALQUER UMA DAS GARANTIAS LEGAIS PREVISTAS NAS SECÇÕES 34 A 54 DESSA LEI.

#### **LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE**

EXCETO NA MEDIDA EM QUE SEJA PROIBIDO POR QUALQUER LEI APLICÁVEL, A LUXOTTICA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, SOB ESTA GARANTIA, POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS POR VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA. EXCETO NA MEDIDA EM QUE SEJA PROIBIDO POR LEI, A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA LUXOTTICA POR QUAISQUER RECLAMAÇÕES DECORRENTES OU RELACIONADAS A ESTA GARANTIA É LIMITADA AO PREÇO DE COMPRA PAGO POR SI PELO PRODUTO, MAIS QUAISQUER JUROS PERMITIDOS POR LEI, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DA RECLAMAÇÃO.

NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI, A LUXOTTICA NÃO É RESPONSÁVEL POR EVENTOS FORA DO SEU CONTROLO, TAIS COMO ACONTECIMENTOS FORTUITOS, VÍRUS, DANOS A PROPRIEDADES, PERDA DE UTILIZAÇÃO, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, LUCROS PERDIDOS, DADOS PERDIDOS OU OUTROS DANOS CONSEQUENTES, PUNITIVOS OU ESPECIAIS, SEJA COMO FOR CAUSADOS, POR VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA, CONTRATO OU DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA).

Esta Garantia não afeta os seus direitos legais ao abrigo de qualquer legislação estatal e nacional aplicável que rege a venda de bens de consumo.

Alguns países, estados, províncias e territórios (incluindo a UE, EFTA e Reino Unido) não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, a exclusão ou limitação de certos danos ou tipos de perda, ou permitem limitações sobre a duração de uma garantia ou condição implícita, pelo que as limitações ou exclusões descritas nesta garantia podem não se aplicar a si.



**Luxottica Group S.p.A.**  
Piazzale Cadorna 3,  
20123 Milão, Itália



Feito na China  
Fabriqué en Chine



[www.nuancaudio.com](http://www.nuancaudio.com)



Para as Instruções de Utilização - Segurança e Garantia mais recentes e atualizadas, consulte as Instruções na secção de Suporte da App Nuanca Audio™ e na seguinte página do website: [nuancaudio.com/support/manual-guide](http://nuancaudio.com/support/manual-guide)





Suporte: [nuanceaudio.com/contact-us](https://nuanceaudio.com/contact-us)

Este guia de início rápido é aplicável ao Charging Pad AAW0001EL e REL0063AO Nuance Audio™.



Raccolta carta  
Papel y cartón

