

Nuance Audio™ Remote Control

USA	Instructions For Use & Safety FOR USA		3
EN	Instructions For Use & Safety		11
	IT	Istruzioni per l'uso & Sicurezza	17
	FR	Notice d'utilisation & Sécurité	23
	ES	Instrucciones de uso & Seguridad	29
	DE	Gebrauchsanweisung & Sicherheit	35
EN	Warranty		41
	IT	Garanzia	46
	FR	Garantie	49
	ES	Garantía	53
	DE	Garantie	58

FOR USA ONLY

Nuance Audio™ Remote Control

Nuance Audio™ Remote Control is referred to within this Instructions For Use as the “Product”. The Remote Control is an optional accessory that is intended to assist the Nuance Audio™ hearing aid functionality in terms of controlling limited settings of the hearing aid. The Remote Control is intended to be used only in conjunction with the Nuance Audio™ Glasses, to wirelessly control the hearing aid volume and modes. The Remote Control works via Bluetooth—paired with the Glasses, and it includes one coin cell battery. The coin cell battery (CR2450) is customer replaceable. The Nuance Audio™ Hearing Aid is a SaMD OTC air conduction hearing aid feature software-only medical device. The Remote Control is to be used as an accessory to the Nuance Audio™ Glasses. Please refer to the User Guide for images and usage explanation of the Remote Control.

Restrictions to combinations The Remote Control works only with Nuance Audio™ Glasses, meaning that the Product isn't compatible with other devices.

Read instructions. Read and follow all instructions included with the Remote Control before using it.

Cautions.

1. When adjusting the volume, turn it up gradually until you reach a comfortable listening level.
2. Do not use the Remote Control if any part of it is damaged or overheating. If this happens, stop using the Remote Control immediately, then please visit us at www.nuanceaudio.com to get helpful service and contact information.
3. Do not make unauthorized alterations to this Product..

HEALTH & SAFETY INFORMATION

WARNING To reduce the risk of personal injury, discomfort, or property damage, please read and follow the health and safety information below before using the Remote Control.

Intended uses & users

Intended use. The Remote Control accessory is intended to assist the air conduction hearing aid functionality in terms of controlling settings on the hearing aid. The Remote Control is used to wirelessly control the Nuance Audio™ Glasses' volume and modes. The two possible hearing aid modes are:

- **Frontal:** Frontal mode enhances sound coming from the front, making it easier to focus on conversations with someone directly in front.
- **All-around:** All-around mode amplifies sounds and speech from all directions.

Generally the Remote Control works BT-paired with the Glasses, and it includes a coin cell battery. The Remote Control is intended to be used only in conjunction with the Nuance Audio™ Glasses and is intended only for use by individuals 18 years old and older.

For ages 18 and up. The Remote Control is intended to be used only in conjunction with the Nuance Audio™ Hearing Aid and is intended only for use by individuals 18 years old and older. Do not allow anyone under 18 to use the Remote Control. Children can choke or suffocate in case of swallowing of this Product. Keep this Product away from children.

Interference with personal medical devices. This Product contains components that emit radio waves, which could affect the operation of medical devices such as but not limited to pacemakers or other implantable devices, or insulin pumps, consult your doctor or the medical device manufacturer before using the Product. Turn off the electronic functionalities of the Product if you notice any interference with your medical device.

Interference. Check before using the Remote Control in areas where electronics or wireless devices are restricted. This may cause interference.

Interactions & environments. Pay attention. Interacting with the Remote Control may distract you or increase the time it takes to react to hazards. Always pay attention to your surroundings, including signage and obstacles.

Driving. Do not use the Remote Control while driving.

Limitations of Use. Do not use the Remote Control in environments with strong electric or magnetic fields. The effective usage distance of the Remote Control is less than 25 meters. The Remote Control expected lifetime is 5 years from manufacturing date.

Flying. Check applicable aviation security restrictions on personal electronics before flying with the Remote Control. Use the Remote Control in compliance with all the applicable local laws, rules, and regulations.

Intended handling & maintenance

Handle with care & avoid damage The Remote Control is sensitive electronic equipment, it contains sensitive electronic hardware and should be handled with responsible care. Do not heat or bend, as it may become damaged and even catch fire. Do not drop, strike, or shake the Remote Control excessively. Do not use the Remote Control if it is damaged. Do not attempt to open, disassemble, or tamper with the Remote Control. Do not expose to the sun.

Operating conditions: 14°F (-10°C) to 113°F (+45°C); 101.3kPa to 61.9kPa; humidity between 20% and 60% under 95°F (+35°C) for 1000 hours; maximum altitude of 13,000 ft for 1 hour at 32°F (0°C) and 95°F (+35°C).

Transport and Storage: -40°F (-40°C) to 185°F (+85°C); humidity between 20% and 90%; Remote Control shall remain functional after recovery from non-operational exposure to altitude of 40,000 ft (18,8kPa) for 12 hours at both 14°F (-10°C) and 113°F (+45°C).

Cleaning and maintenance. To clean the Remote Control use a dampened cloth and neutral soap avoiding all types of sprays, solvents, chemicals or cleaning solutions containing alcohol or ammonia. Do not use dirty or abrasive cloths which could damage the Remote Control. If the Product becomes excessively wet, there is a risk of damaging it, thoroughly dry it, store them in a container with desiccants or in a drying case.

WARNING Potentially explosive atmospheres. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the Remote Control. Turn off your Remote Control, and do not remove or install batteries when you are in an area with potentially explosive atmospheres.

Water & liquids. Do not expose to or submerge in water. Extended exposure to water may damage the Remote Control. The Remote Control is not designed to resist submersion or extended exposure to water or other liquids. In case of water exposure, dry the Remote Control thoroughly with dry cloth.

Do not use if broken or damaged. Periodically inspect the Remote Control for damage or signs of wear. Do not use it if any part is damaged, cracked, or if any internal component is exposed. Do not try to repair the Remote Control yourself, instead contact support at www.nuanceaudio.com.

Charging, electrical & heat

Overheating. Keep the Remote Control away from fire and excessive heat (e.g., from storage in direct sunlight, near candles, or in a hot car) to avoid burns or damage to the Remote Control. The Remote Control shouldn't overheat during normal use. If it does, stop using it immediately and contact support. Keep the Remote Control away from fire and heat sources.

Battery. The Remote Control contains a coin battery that is user replaceable. The battery may present a fire or chemical burn hazard if misused. Do not leave in the car under direct sunlight or expose to excessive heat or incinerate. Dispose of the battery in line with instructions and local requirements. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.

Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. Expected battery lifetime is at least 6 months under standard use conditions from the moment of pulling out the battery protective tab. For battery replacement procedure, please follow the indications on the User Guide accompanying the Remote Control and use a pin or small pen tip or toothpick to open remote LID. Be cautious when replacing the battery to avoid damaging the structure of the Remote Control. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -). Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns.

Battery related hazards are fire, explosion and burn. Do not short circuit, crush, incinerate the battery, or expose contents to water. Always keep your batteries away from children to prevent swallowing. Do not ingest battery. Compatible batteries are lithium 3V CR2450 coin cell batteries.

Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.

KEY FEATURES

Audio Mode Control	On device button
Volume Control	On device buttons

WIRELESS CONNECTIVITY

Bluetooth® Compatible	Yes, BLE
Bluetooth® Phone Call Compatible	No
Operation frequency	2480-2402 MHz
Max radiated power	Free space max EIRP is -3.22 dBm
Modulation	GFSK
Channel spacing	2MHz
Channel bandwidth	2MHz
Number of channels	40

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery	Lithium 3V CR2450 coin cell battery
Lifetime	5 years
Shelf life	5 years

TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS

Temperature	From -40°F (-40°C) to +185°F (+85°C)
Humidity	From 20% to high humidity 90% and temperature 113°F (+45°C) for 288 hours
Altitude & atmospheric pressure	Altitude of 40,000 ft (18,8kPa) for 12 hours at both 14°F (-10°C) and 113°F (+45°C)

OPERATING CONDITIONS

Temperature	From 14°F (-10°C) to 113°F (+45°C)
Humidity	From 20% to humidity 60% under 95°F (+35°C) for 1000 hours
Altitude & atmospheric pressure	Altitude of 13,000 ft for 1 hour at 32°F (0°C) and 95°F (+35°C); 101.3kPa to 61.9kPa

FCC compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission. Keep the Product away from the womb of pregnant women. Keep the Product away from the lower abdomen of adolescents. Use the Product in good reception conditions to reduce the amount of electromagnetic radiation received.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Disposal Information

The Nuance Audio™ Remote Control and the coin battery should not be discarded as household waste and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. For more info on proper disposal, please visit www.nuanceaudio.com.

Safety certifications for the Remote Controls' battery

This article describes the international safety standards that the Remote Control's battery meet. All the Remote Controls' batteries are tested, certified, and in compliance with these international safety standards:

- United Nations (UN) Transport Regulations UN38.3: Covers battery safety during air transport.
- Regulation (EU) 2023/1542
- UL1642 Standard for Lithium Batteries

WARNING The battery contains no mercury. Do not puncture or incinerate, do not squeeze or soak in water.



WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
- **Battery is hazardous, KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body**, it can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less.





Nuance Audio™ is a registered trademark of Essilor International SAS.
FCC ID: 2AYOA-4006



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy



Made in China
Fabriqué en Chine



www.nuanceaudio.com



For the latest and up-to-date Instructions For Use – Safety and Warranty, please refer to the Instructions in the Support section of the Nuance Audio™ App and to the following website page: nuanceaudio.com/support/manual-guide

Nuance Audio™ Remote Control

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
- **Battery is hazardous, KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body**, it can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less.



* Product availability, regulatory requirements, and warranty terms may differ from country to country. Please note that the local market product category of Nuance Audio™ Glasses may vary depending on the market in which the product is sold, and some countries do not adopt a dedicated local category (such as the UK, Australia, and New Zealand). As a result, the terminology used to denote the product's category may vary across the language versions of these Instructions for Use – Safety & Warranty (e.g., "assistant d'écoute" in France vs. "hearing aid" elsewhere). As this document is organized by language rather than by country, the terminology used to address the product in a given language version does not necessarily reflect the category applicable in all countries where that language is used. For example, although French is one of Switzerland's official languages, the terminology used in the French version does not apply to the Swiss market; for Switzerland, the correct terminology is "hearing aid".

Nuance Audio™ Remote Control is referred to within this Instructions For Use also as "Product", "Device" or "Equipment".

INTENDED USES & USERS

Intended use. The Nuance Audio™ Remote Control accessory is intended to assist the Nuance Audio™ Glasses functionality in terms of controlling settings on the hearing aid*. The Nuance Audio™ Remote Control is used to wirelessly control the Nuance Audio™ Glasses' volume and modes.

The two possible hearing aid modes are:

- **Frontal:** when this functionality is selected, the amplified sounds are the ones coming from the direction you are looking at, and all the other sounds are attenuated. Generally, this feature is used in a noisy environment when you would like to hear better the person that is talking to you.
- **All-around:** this functionality amplifies indistinctly all sounds around you.

The Nuance Audio™ Remote Control is intended to be used only in conjunction with the Nuance Audio™ Glasses and is intended only for use by individuals 18 years old and older.

The Nuance Audio™ Remote Control works when paired with the Glasses via Bluetooth, and it includes a coin cell battery. The coin cell battery (CR2450) is customer replaceable.

The Nuance Audio™ Glasses are a medical device. The Nuance Audio™ Remote Control is to be used as an accessory to the Nuance Audio™ Glasses.

For ages 18 and up. The Nuance Audio™ Remote Control is intended to be used only in conjunction with the Nuance Audio™ Glasses and is intended only for use by individuals 18 years old and older. Do not allow anyone under 18 to use the Nuance Audio™ Remote Control. Children can choke or suffocate in case of swallowing of this Product. Keep this Product away from children.

Please refer to the User Guide for images and usage explanation of the Nuance Audio™ Remote Control.

Restrictions on combinations. The Nuance Audio™ Remote Control works only with Nuance Audio™ Glasses, meaning that the Product can't work with other devices.

Read instructions. Read and follow all instructions included with the Nuance Audio™ Remote Control before using it.

Cautions.

1. When adjusting the volume, turn it up gradually until you reach a comfortable listening level.
2. Do not use the Nuance Audio™ Remote Control if any part of it is damaged or overheating. If this happens, stop using the Nuance Audio™ Remote Control immediately, then please visit us at www.nuanceaudio.com to get helpful service and contact information.

Do not make unauthorised alterations to this Product.

HEALTH & SAFETY INFORMATION

WARNING To reduce the risk of personal injury, discomfort, or property damage, please read and follow the health and safety information below before using the Nuance Audio™ Remote Control.

Interference with personal medical devices. This Product contains magnetic material and components that emit radio waves, which could affect the operation of medical devices such as but not limited to pacemakers or other implantable devices, or insulin pumps, consult your doctor or the medical device manufacturer before using the Product. Turn off the electronic functionalities of the Product if you notice any interference with your medical device.

Interference. Check before using the Nuance Audio™ Remote Control in areas where electronics or wireless devices are restricted. This may cause interference.

Driving. Do not use the Nuance Audio™ Remote Control while driving.

Water & liquids. Do not expose to or submerge in water. Extended exposure to water may damage the Nuance Audio™ Remote Control. The Nuance Audio™ Remote Control is not designed to resist submersion or extended exposure to water or other liquids. In case of water exposure, dry the Nuance Audio™ Remote Control thoroughly with dry cloth.

WARNING Potentially explosive atmospheres. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the Nuance Audio™ Remote Control. Turn off your Nuance Audio™ Remote Control, and do not remove or install batteries when you are in an area with potentially explosive atmospheres.

Do not use if broken or damaged.

Periodically inspect the Nuance Audio™ Remote Control for damage or signs of wear. Do not use it if

any part is damaged, cracked, or if any internal component is exposed. Do not try to repair the Nuance Audio™ Remote Control yourself, instead contact support at www.nuanceaudio.com.

Overheating. Keep the Nuance Audio™ Remote Control away from fire and excessive heat (e.g., from storage in direct sunlight, near candles, or in a hot car) to avoid burns or damage to the Nuance Audio™ Remote Control. The Nuance Audio™ Remote Control shouldn't overheat during normal use. If it does, stop using it immediately and contact support.

Keep the Nuance Audio™ Remote Control away from fire and heat sources.

Handle with care & avoid damage. The Nuance Audio™ Remote Control is sensitive electronic Equipment, it contains sensitive electronic hardware and should be handled with responsible care. Do not heat or bend, as it may become damaged and even catch fire. Do not drop, strike, or shake the Nuance Audio™ Remote Control excessively.

Do not use the Nuance Audio™ Remote Control if it is damaged. Do not attempt to open, disassemble, or tamper with the Nuance Audio™ Remote Control. Do not expose to the sun.

Interactions & environments. Pay attention. Interacting with the Nuance Audio™ Remote Control may distract you or increase the time it takes to react to hazards. Always pay attention to your surroundings, including signage and obstacles.

Lifetime. The Nuance Audio™ Remote Control expected lifetime is 5 years from manufacturing date.

Limitations of Use. Do not use the Nuance Audio™ Remote Control in environments with strong electric or magnetic fields. The effective usage distance of the Nuance Audio™ Remote Control is less than 25 meters.

Flying. Check applicable aviation security restrictions on personal electronics before flying with the Nuance Audio™ Remote Control. Use Nuance Audio™ Remote Control in compliance with all the applicable local laws, rules, and regulations.

Operating conditions. -10°C (14°F) to 45°C (113°F); 101.3kPa to 61.9kPa; humidity between 20% and 60% under 35°C (95°F) for 1000 hours; maximum altitude of 13,000 ft for 1 hour at 0°C (32°F) and 35°C (95°F).

Transport and Storage. -40°C (-40°F) to 85°C (185°F); humidity between 20% and 90%; Remote Control shall remain functional after recovery from non-operational exposure to altitude of 40,000 ft (18,8kPa) for 12 hours at both -10°C (14°F) to 45°C (113°F).

Cleaning and maintenance. To clean the Nuance Audio™ Remote Control use a dampened cloth and neutral soap avoiding all types of sprays, solvents, chemicals or cleaning solutions containing alcohol or ammonia.

Do not use dirty or abrasive cloths which could damage the Nuance Audio™ Remote Control. If the Product becomes excessively wet, there is a risk of damaging it, thoroughly dry it, store them in a container with desiccants or in a drying case.

Battery. The Nuance Audio™ Remote Control contains a coin battery that is user replaceable. The battery may present a fire or chemical burn hazard if misused. Do not leave in the car under direct sunlight or expose to excessive heat or incinerate. Dispose of the battery in line with instructions and local requirements. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from Equipment not used for an extended period of time according to local regulations. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. Expected battery lifetime is at least 6 months under standard use conditions from the moment of pulling out the battery protective tab. For battery replacement procedure, please follow the indications on the User Guide accompanying the Nuance Audio™ Remote Control and use a pin as small pen tip or toothpick to open remote LID. Be cautious when replacing the battery to avoid damaging the structure of the Nuance Audio™ Remote Control. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -). Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the Product, remove the batteries, and keep them away from children. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns. Battery related hazards are fire, explosion and burn. Do not short circuit, crush, incinerate the battery, or expose contents to water. Always keep your batteries away from children to prevent swallowing. Do not ingest the battery. Compatible batteries are lithium 3V CR2450 coin cell batteries. Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control centre for treatment information.

KEY FEATURES

Audio Mode Control	On device button
Volume Control	On device buttons

WIRELESS CONNECTIVITY

Bluetooth® Compatible	Yes, BLE
Bluetooth® Phone Call Compatible	No
Operation frequency	2480-2402 MHz
Max radiated power	Free space max EIRP is -3.22 dBm
Modulation	GFSK
Channel spacing	2MHz
Channel bandwidth	2MHz
Number of channels	40

KEY FEATURES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery	Lithium 3V CR2450 coin cell battery
Lifetime	5 years
Shelf life	5 years

TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS

Temperature	From -40°C (-40°F) to 85°C (185°F)
Humidity	From 20% to high humidity 90% and temperature 45°C (113°F) for 288 hours
Altitude & atmospheric pressure	Altitude of 40,000 ft (18,8kPa) for 12 hours at both -10°C (-14°F) and 45°C (113°F)

OPERATING CONDITIONS

Temperature	From -10°C (14°F) to 45°C (113°F)
Humidity	From 20% to humidity 60% under 35°C (95°F) for 1000 hours
Altitude & atmospheric pressure	Altitude of 13,000 ft for 1 hour at 0°C (32°F) and 35°C (95°F); 101.3kPa to 61.9kPa

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the Equipment.

No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission.

EU compliance statement

Luxottica Group S.p.A hereby declares that this Device is in compliance with Radio Equipment Directive 2014/53/EU, EU Medical Device Regulation 2017/745 on Medical Devices and RoHS II Directive 2011/65/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration

Radio Frequency and Power: BLE of the Product: 2402–2480 MHz < 20dBm;

Keep the Nuance Audio™ Remote Control away from the womb of pregnant women. Keep the Nuance Audio™ Remote Control away from the lower abdomen of adolescents. Use the Nuance Audio™ Remote Control in good reception conditions to reduce the amount of electromagnetic radiation received.



The end user is required to report any serious incident that occurs in relation to the use of the Device to the competent authority of the Member State where the incident occurred and to the manufacturer of the Device.

Disposal Information

The Nuance Audio™ Remote Control should not be discarded as household waste and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. For more info on proper disposal, please visit www.nuanceaudio.com.

EU and UK Disposal Information

The crossed-out wheeled bin symbols below mean that, according to local laws and regulations, the Nuance Audio™ Remote Control and/or Nuance Audio™ Remote Control's battery shall be disposed

of separately from household waste.

When the Nuance Audio™ Remote Control reaches its end of life, take it and the battery to a collection point designated by local authorities. In alternative, take the Product and the battery to an affiliated store. The battery can be safely removed by the end user according to the indications given in the User Guide. The separate collection and recycling of the Product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.



WEEE information

Luxottica is committed to the proper disposal, reuse, recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment ("WEEE"). WEEE should not be disposed of in normal domestic waste bins. Dispose of batteries in an environmentally friendly way in accordance with Federal and State requirements. For more info on proper disposal, please visit www.nuanceaudio.com.

Safety certifications for the Remote Controls' battery

This article describes the international safety standards that the Remote Control's battery meets. All the Remote Controls' batteries are tested, certified, and in compliance with these international safety standards:

- United Nations (UN) Transport Regulations UN38.3: Covers battery safety during air transport.
- Regulation (EU) 2023/1542
- UL1642 Standard for Lithium Batteries

WARNING The battery contains no mercury. Do not puncture or incinerate, do not squeeze or soak in water.

Nuance Audio™ is a registered trademark of Essilor International SAS.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy



Made in China
Fabriqué en Chine



www.nuanceaudio.com



For the latest and up-to-date Instructions For Use - Safety and Warranty, please refer to the Instructions in the Support section of the Nuance Audio™ App and to the following website page: nuanceaudio.com/support/manual-guide

Nuance Audio™ Remote Control

AVVERTENZA

- **PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.
- Può essere causa di causare **MORTE** o di lesioni gravi se ingerita.
- Una batteria a bottone o a moneta ingerita può causare ustioni chimiche interne in appena 2 ore.
- **La batteria è pericolosa, TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA** dei **BAMBINI**.
- **Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo**, poiché può provocare lesioni gravi o anche fatali in appena 2 ore.



* La disponibilità del prodotto, i requisiti normativi e i termini di garanzia possono variare da paese a paese. Attenzione: la categoria di prodotto dei Nuance Audio Glasses può variare a seconda del mercato in cui il prodotto è venduto. Alcuni paesi non adottano una categoria locale dedicata (come il Regno Unito, l'Australia e la Nuova Zelanda). Di conseguenza, la terminologia utilizzata per indicare la categoria del prodotto può variare tra le diverse versioni linguistiche delle Istruzioni per l'uso - Sicurezza e Garanzia (ad esempio, "assistant d'écoute" in Francia rispetto a "apparecchio acustico" altrove). Poiché questo documento è organizzato per lingua e non per paese, la terminologia utilizzata per indicare il prodotto in una determinata versione potrebbe non corrispondere necessariamente alla categoria prevista in tutti i paesi in cui quella lingua è utilizzata. Ad esempio, sebbene il francese sia una delle lingue ufficiali della Svizzera, la terminologia utilizzata nella versione francese non si applica al mercato svizzero; per la Svizzera, la terminologia corretta è "aide auditive".

Il Nuance Audio™ Remote Control è indicato in queste Istruzioni per l'uso anche come "Prodotto", "Dispositivo" o "Apparecchiatura".

USI E UTILIZZATORI PREVISTI

Uso previsto. L'accessorio Nuance Audio™ Remote Control è progettato per essere utilizzato insieme ai Nuance Audio™ Glasses per regolare le impostazioni dell'apparecchio acustico*. Il Nuance Audio™ Remote Control viene utilizzato per controllare in modalità wireless il volume e le impostazioni dei Nuance Audio™ Glasses.

Le due modalità disponibili dell'apparecchio acustico sono:

- **Frontale:** quando viene selezionata questa modalità, i suoni amplificati sono quelli provenienti dalla direzione in cui si sta guardando, e tutti gli altri suoni sono attenuati. Generalmente, questa modalità viene utilizzata in un ambiente rumoroso e quando si desidera ascoltare meglio la persona che sta parlando.
- **360°:** questa modalità amplifica indistintamente tutti i suoni intorno a te.

Il Nuance Audio™ Remote Control è destinato ad essere utilizzato solo in combinazione con i Nuance Audio™ Glasses ed è destinato solo a persone di età pari o superiore a 18 anni.

Il Nuance Audio™ Remote Control funziona in modalità Bluetooth quando abbinato ai Nuance Audio™ Glasses e include una batteria a bottone. La batteria a bottone (CR2450) è sostituibile dall'utilizzatore. I Nuance Audio™ Glasses sono un dispositivo medico. Il Nuance Audio™ Remote Control deve essere utilizzato come accessorio dei Nuance Audio™ Glasses.

Per età pari o superiore a 18 anni. Il Nuance Audio™ Remote Control è destinato ad essere utilizzato solo in combinazione con i Nuance Audio™ Glasses e solo da persone di età pari o superiore a 18 anni. Non consentire a nessuno di età inferiore ai 18 anni di utilizzare il Nuance Audio™ Remote Control. I bambini possono soffocare in caso di ingestione di questo Prodotto. Tenere questo Prodotto lontano dai bambini. Si prega di fare riferimento alla guida utente per immagini e alle istruzioni per l'uso del Nuance Audio™ Remote Control.

Limitazioni sulle combinazioni. Il Nuance Audio™ Remote Control funziona solo con i Nuance Audio™ Glasses: ciò significa che il Prodotto non può funzionare con altri dispositivi.

Leggere le istruzioni. Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni incluse con il Nuance Audio™ Remote Control prima di utilizzarlo.

Avvertenze.

1. Quando si regola il volume, aumentare il livello gradualmente fino a raggiungere un livello di ascolto confortevole.
2. Non utilizzare il Nuance Audio™ Remote Control se una parte risulta danneggiata o surriscaldata. Se ciò accade, interrompere immediatamente l'uso del Nuance Audio™ Remote Control, quindi visitare il sito www.nuanceaudio.com per ricevere assistenza e informazioni di contatto utili.

Non apportare modifiche non autorizzate a questo Prodotto.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E SICUREZZA

AVVERTENZE Per ridurre il rischio di lesioni personali, disagio o danni alle cose, prima di utilizzare il Nuance Audio™ Remote Control leggere e seguire le informazioni sulla salute e sicurezza riportate di seguito.

Interferenza con dispositivi medici personali. Questo Prodotto contiene materiale magnetico e componenti che emettono onde radio, che potrebbero influenzare il funzionamento di dispositivi medici quali, a titolo esemplificativo, pacemaker o pompe per insulina, o altri dispositivi impiantabili. Consulta il tuo medico o il produttore del dispositivo medico prima di utilizzare il Prodotto. Se il tuo dispositivo medico rileva interferenze, disattiva le funzionalità elettroniche del Prodotto.

Interferenza. Prima di utilizzare il Nuance Audio™ Remote Control, controllare se ci sono restrizioni per dispositivi elettronici o wireless nella zona, in quanto potrebbero verificarsi interferenze.

Guida. Non utilizzare il Nuance Audio™ Remote Control durante la guida.

Acqua e liquidi. Evitare il contatto con l'acqua e l'immersione. L'esposizione prolungata all'acqua può danneggiare il Nuance Audio™ Remote Control. Il Nuance Audio™ Remote Control non è progettato per resistere all'immersione o all'esposizione prolungata all'acqua o ad altri liquidi. In caso di esposizione all'acqua, asciugare accuratamente il Nuance Audio™ Remote Control con un panno asciutto.

AVVERTENZE Ambienti con rischio di esplosione. Non conservare o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso compartimento del Nuance Audio™ Remote Control. In ambienti con rischio di esplosione, non rimuovere o installare batterie e spegnere il Nuance Audio™ Remote Control. Non utilizzare se rotto o danneggiato. Ispezionare periodicamente il Nuance Audio™ Remote Control per danni o segni di usura. Non utilizzare se una parte è danneggiata, incrinata o se un componente

interno è esposto. Non tentare di riparare il Nuance Audio™ Remote Control in autonomia; contattare invece l'assistenza su www.nuanceaudio.com.

Surriscaldamento. Tenere il Nuance Audio™ Remote Control lontano dal fuoco e dal calore eccessivo (ad esempio, non conservare alla luce diretta del sole, vicino a candele o in un'auto calda) per evitare ustioni o danni al Nuance Audio™ Remote Control. Il Nuance Audio™ Remote Control non dovrebbe surriscaldarsi durante l'uso normale. Se lo fa, smetti immediatamente di utilizzarlo e contatta l'assistenza. Tenere il Nuance Audio™ Remote Control lontano dal fuoco e dalle fonti di calore.

Maneggiare con cura ed evitare danni. Il Nuance Audio™ Remote Control è un accessorio elettronico sensibile, che contiene un hardware elettronico sensibile e deve essere maneggiato con cura. Non riscaldare o piegare, poiché potrebbe danneggiarsi e persino prendere fuoco. Non far cadere, colpire o scuotere eccessivamente il Nuance Audio™ Remote Control e non utilizzarlo se è danneggiato. Non tentare di aprire, smontare o manomettere il Nuance Audio™ Remote Control, e non esporlo al sole.

Interazioni e ambienti. Prestare attenzione. Interagire con il Nuance Audio™ Remote Control può distrarti o aumentare il tempo necessario per reagire ai pericoli. Prestare sempre attenzione all'ambiente circostante, inclusi segnali e ostacoli.

Vita utile. La vita utile prevista del Nuance Audio™ Remote Control è di 5 anni dalla data di fabbricazione.

Limitazioni d'uso. Non utilizzare il Nuance Audio™ Remote Control in ambienti con campi elettrici o magnetici forti. La distanza di utilizzo effettivo del Nuance Audio™ Remote Control è inferiore a 25 metri.

Volo. Controlla le restrizioni di sicurezza aerea applicabili sui dispositivi elettronici personali prima di volare con il Nuance Audio™ Remote Control. Utilizzare il Nuance Audio™ Remote Control in conformità con tutte le leggi, regole e regolamenti locali applicabili.

Condizioni operative. Da -10°C +45°C; 101,3kPa a 61,9kPa; umidità tra il 20% e il 60% sotto i +35°C per 1000 ore; altitudine massima di 3.900 metri per 1 ora a 0°C e 35°C.

Trasporto e stoccaggio. Da -40°C a +85°C; umidità tra il 20% e il 90%; il Remote Control deve rimanere funzionale dopo il recupero da un'esposizione, mentre non era in uso, a un'altitudine di 12.000 metri (18,8 kPa) per 12 ore sia a -10°C che a +45°C.

Pulizia e manutenzione. Per pulire il Nuance Audio™ Remote Control, utilizzare un panno inumidito e sapone neutro evitando tutti i tipi di spray, solventi, prodotti chimici o soluzioni contenenti alcol o

ammoniaca. Non utilizzare panni sporchi o abrasivi che potrebbero danneggiare il Nuance Audio™ Remote Control. Se il Prodotto diventa eccessivamente bagnato, c'è il rischio che si danneggi, asciugarlo accuratamente e conservarlo in un contenitore con essiccanti o in una custodia di asciugatura.

Batteria. Il Nuance Audio™ Remote Control contiene una batteria a bottone sostituibile dall'utilizzatore. La batteria può presentare un rischio di incendio o ustione chimica se usata in modo improprio. Non lasciare in auto sotto la luce diretta del sole, esporre a calore eccessivo o incenerire. Smaltire la batteria in conformità con le normative e i requisiti locali. Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie usate secondo le normative locali e tenerle lontano dalla portata dei bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerire. Rimuovere e riciclare immediatamente le batterie da apparecchiature non utilizzate per un periodo prolungato secondo le normative locali. Non mescolare batterie vecchie e nuove, marche o tipi di batterie diversi, come alcaline, zinco-carbone o batterie ricaricabili. La durata prevista della batteria è di almeno 6 mesi in condizioni di uso standard dal momento della rimozione della linguetta protettiva. Per sostituire la batteria, seguire le indicazioni riportate nella guida utente fornita insieme al Nuance Audio™ Remote Control; utilizzare uno spillo con una punta piccola o uno stuzzicadenti per aprire il coperchio del Nuance Audio™ Remote Control. Prestare attenzione durante la sostituzione della batteria per evitare di danneggiare la struttura del Nuance Audio™ Remote Control. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -) e verificare sempre che il vano batteria sia completamente chiuso. Se il comparto batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il Prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dai bambini. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non scaricare in modo forzato, ricaricare, smontare, riscaldare sopra i 100 °C o incenerire, poiché ciò potrebbe causare lesioni a causa di sfiato, perdita o esplosione con conseguenti ustioni chimiche. I pericoli associati alle batterie includono incendi, esplosioni e ustioni. Non causare cortocircuiti, schiacciare, incenerire la batteria o esporre il contenuto all'acqua. Tenere sempre le batterie lontano dai bambini per prevenire l'ingestione. Non ingerire la batteria. Le batterie compatibili sono batterie a bottone al litio 3V CR2450. Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o morte. Contattare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Controllo modalità audio	Pulsante sul Dispositivo
Controllo del volume	Pulsanti sul Dispositivo
CONNETTIVITÀ WIRELESS	
Compatibilità Bluetooth®	Sì, BLE
Compatibilità chiamate telefoniche Bluetooth®	No
Frequenza operativa	2480-2402 MHz
Potenza irradiata massima	Il valore massimo di EIRP nello spazio libero è -3,22 dBm
Modulazione	GFSK
Spaziatura dei canali	2MHz
Larghezza di banda del canale	2MHz
Numero di canali	40

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria	Batteria a bottone al litio 3V CR2450
Vita utile Prodotto	5 anni
Durata di conservazione	5 anni

CONDIZIONI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO

Temperatura	Da -40°C a +85°C
Umidità	Dal 20% a umidità elevata al 90% e temperatura +45°C per 288 ore
Altitudine e pressione atmosferica	Altitudine di 12.000 metri (18,8kPa) per 12 ore, sia -10°C che a +45°C

CONDIZIONI OPERATIVE

Temperatura	Da -10°C a +45°C
Umidità	Dal 20% al 60% sotto i +35°C per 1000 ore
Altitudine e pressione atmosferica	Altitudine di 3.900 metri per 1 ora a 0°C e +35°C; da 101,3kPa a 61,9kPa

Nota: Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'Apparecchiatura. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o altrimenti utilizzata senza previa autorizzazione scritta.

Dichiarazione di conformità UE

Luxottica Group S.p.A dichiara che questi Dispositivi sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, al Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici e alla Direttiva 2011/65/EU RoHS II. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration

Frequenza radio e potenza: BLE del Prodotto: 2402–2480 MHz < 20dBm;

Tenere il Nuance Audio™ Remote Control lontano dall'utero delle donne in gravidanza. Tenere il Prodotto lontano dalla parte inferiore dell'addome degli adolescenti. Utilizzare il Prodotto in buone condizioni di ricezione per ridurre la quantità di radiazioni elettromagnetiche ricevute.



L'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione all'uso del Dispositivo all'autorità competente dello Stato Membro in cui si è verificato l'incidente e al fabbricante del Dispositivo.

Informazioni sullo smaltimento

Il Nuance Audio™ Remote Control non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclo. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento, visitare il sito www.nuanceaudio.com.

Informazioni sullo smaltimento nell'UE

Il simbolo del bidone barrato riportato di seguito significa che, secondo le leggi e le normative locali, il Nuance Audio™ Remote Control e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando il Nuance Audio™ Remote Control raggiunge la fine della sua vita utile, portalo insieme alla

batteria a un punto di raccolta designato dalle autorità locali. In alternativa, portare il Prodotto e la batteria a un negozio affiliato. La batteria può essere rimossa in sicurezza seguendo le indicazioni fornite nella guida utente. La raccolta separata e il riciclaggio del Prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiuteranno a conservare le risorse naturali e garantiranno che venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.



Informazioni RAEE

Luxottica si impegna per il corretto smaltimento, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RAEE"). I prodotti RAEE non devono essere smaltiti nei normali bidoni dei rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento, visitare www.nuanceaudio.com.

Certificazioni di sicurezza per la batteria del Nuance Audio™ Remote Control

Questa sezione descrive gli standard internazionali di sicurezza che la batteria del Nuance Audio™ Remote Control deve soddisfare. Tutte le batterie sono testate, certificate e conformi a questi standard internazionali di sicurezza:

- Certificazione di trasporto delle Nazioni Unite (UN) UN38.3: riguarda la sicurezza delle batterie durante il trasporto aereo.
- Regolamento (UE) 2023/1542
- Standard UL1642 per batterie al litio

AVVERTENZA La batteria non contiene mercurio. Non perforare o incenerire, non schiacciare o immergere in acqua.

Nuance Audio™ è un marchio registrato di Essilor International SAS.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy



Made in China
Fabriqué en Chine



www.nuanceaudio.com



Per le più recenti e aggiornate Istruzioni per l'uso - Sicurezza e Garanzia, si prega di fare riferimento alle Istruzioni contenute nella sezione Supporto della Nuance Audio™ App e del seguente sito:
nuanceaudio.com/support/manual-guide

Nuance Audio™ Remote Control

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : ce produit contient une pile bouton ou une de type pièce de monnaie.
- Son ingestion peut entraîner la **MORT** ou des blessures graves.
- Une pile bouton ou de type pièce de monnaie avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures.
- **Les piles sont dangereuses, GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE PORTÉE des ENFANTS.**
- **Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps**, elle peut causer des blessures graves, voire mortelles, en 2 heures ou moins.



* La disponibilité des produits, les exigences réglementaires et les conditions de garantie peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez noter que la catégorie de produit des Nuance Audio™ Glasses sur le marché local peut varier en fonction du marché dans lequel le produit est vendu, et certains pays n'adoptent pas de catégorie locale dédiée (comme le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande). En conséquence, la terminologie utilisée pour désigner la catégorie du produit peut varier selon les versions linguistiques de ces instructions d'utilisation – Sécurité et Garantie (par exemple, « assistant d'écoute » en France contre « aide auditive » ailleurs). Comme ce document est organisé par langue plutôt que par pays, la terminologie utilisée pour désigner le produit dans une version linguistique donnée ne reflète pas nécessairement la catégorie applicable dans tous les pays où cette langue est utilisée. Par exemple, bien que le français soit l'une des langues officielles de la Suisse, la terminologie utilisée dans la version française ne s'applique pas au marché suisse ; pour la Suisse, la terminologie correcte est « aide auditive ».

La Nuance Audio™ Remote Control est également désignée dans cette notice comme « Produit », « Appareil » ou « Équipement ».

UTILISATIONS ET UTILISATEURS PRÉVUS

Description et utilisation prévue. La Nuance Audio™ Remote Control est un accessoire conçu pour faciliter l'utilisation des Nuance Audio™ Glasses en ce qui concerne le contrôle des réglages de l'assistant d'écoute*. La Nuance Audio™ Remote Control est utilisée pour contrôler à distance le volume et les différents modes des Nuance Audio™ Glasses.

Les deux modes possibles de l'assistant d'écoute sont :

- **Frontal**: lorsque cette fonctionnalité est sélectionnée, les sons amplifiés sont ceux provenant de la direction vers laquelle vous regardez, et tous les autres sons sont atténués. En général, cette fonction est utilisée dans un environnement bruyant lorsque vous souhaitez mieux entendre la personne qui vous parle.
- **Ambiant** : cette fonctionnalité amplifie indistinctement tous les sons autour de vous.

La Nuance Audio™ Remote Control a vocation à être utilisée uniquement avec les lunettes Nuance Audio™ et est destinée uniquement aux personnes âgées de 18 ans et plus.

La Nuance Audio™ Remote Control fonctionne™ en Bluetooth appairée avec les lunettes, et elle comprend une pile bouton. La pile bouton (CR2450) est remplaçable par l'utilisateur.

Les Nuance Audio™ Glasses sont un dispositif médical. La Nuance Audio™ Remote Control doit être utilisée comme un accessoire des Nuance Audio™ Glasses et constitue elle-même un dispositif médical.

Pour les personnes de 18 ans et plus. La Nuance Audio™ Remote Control est destinée à être utilisée uniquement avec les lunettes Nuance Audio™ et est réservée aux personnes de 18 ans et plus. Ne laissez pas les personnes de moins de 18 ans utiliser la Nuance Audio™ Remote. Les enfants peuvent s'étouffer ou suffoquer en cas d'ingestion de ce produit. Gardez ce Produit hors de portée des enfants. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur pour des images et des explications sur l'utilisation de la Nuance Audio™ Remote Control.

Restrictions de combinaisons. La Nuance Audio™ Remote Control fonctionne uniquement avec les Nuance Audio™ Glasses, ce qui signifie que le Produit ne peut pas fonctionner avec d'autres appareils.

Lire les instructions. Lisez et suivez toutes les instructions incluses avec la Nuance Audio™ Remote Control avant de l'utiliser.

Précautions.

When adjusting the volume, turn it up gradually until you reach a comfortable listening level.

1. Lors du réglage du volume, augmentez-le progressivement jusqu'à atteindre un niveau d'écoute confortable.
2. N'utilisez pas la Nuance Audio™ Remote Control si une partie de celle-ci est endommagée ou surchauffe. Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser la Nuance Audio™ Remote Control, puis veuillez nous rendre visite sur www.nuanceaudio.com pour obtenir des informations utiles sur le service et les contacts.

Ne faites pas de modifications non autorisées sur ce produit.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure personnelle, d'inconfort ou de dommages matériels, veuillez lire et suivre les informations de santé et de sécurité ci-dessous avant d'utiliser la Nuance Audio™ Remote Control.

Interférences avec les dispositifs médicaux personnels. Ce Produit contient des matériaux magnétiques et des composants qui émettent des ondes radio, ce qui pourrait affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux tels que, mais sans s'y limiter, les stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs implantables, ou les pompes à insuline, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif médical avant d'utiliser le produit. Éteignez les fonctionnalités électroniques du Produit si vous remarquez des interférences avec votre dispositif médical.

Interférences. Vérifiez avant d'utiliser la Nuance Audio™ Remote Control dans les zones où les appareils électroniques ou sans fil sont restreints. Cela peut causer des interférences.

Conduite. N'utilisez pas la Nuance Audio™ Remote Control en conduisant.

Eau et liquides. Ne pas exposer ou immerger dans l'eau. Une exposition prolongée à l'eau peut endommager la Nuance Audio™ Remote Control. La Nuance Audio™ Remote Control n'est pas conçue pour résister à l'immersion ou à une exposition prolongée à l'eau ou à d'autres liquides. En cas d'exposition à l'eau, séchez soigneusement la Nuance Audio™ Remote Control avec un chiffon sec.

AVERTISSEMENT Atmosphères potentiellement explosives. Ne pas stocker ou transporter de liquides inflammables, de gaz, ou matériaux explosifs dans le même compartiment que la Nuance Audio™ Remote Control. Éteignez votre Nuance Audio™ Remote Control et ne retirez pas ou n'installez

pas les piles lorsque vous vous trouvez dans une zone à l'atmosphère potentiellement explosive. Ne pas utiliser si cassé ou endommagé. Inspectez périodiquement la Nuance Audio™ Remote Control pour détecter des dommages ou des signes d'usure. Ne l'utilisez pas si une partie est endommagée, fissurée ou si un composant interne est exposé. Ne tentez pas de réparer la Nuance Audio™ Remote Control vous-même, contactez plutôt le support à www.nuanceaudio.com.

Surchauffe. Gardez la Nuance Audio™ Remote Control à l'écart du feu et de la chaleur excessive (par exemple, lors du stockage en plein soleil, près de bougies ou dans une voiture chaude) pour éviter les brûlures ou les dommages à la Nuance Audio™ Remote Control. La Nuance Audio™ Remote Control ne doit pas surchauffer lors d'une utilisation normale. Si c'est le cas, arrêtez de l'utiliser immédiatement et contactez le service support. Gardez la Nuance Audio™ Remote Control à l'écart du feu et des sources de chaleur.

Manipulez avec soin et évitez les dommages. La Nuance Audio™ Remote Control est un Équipement électronique sensible, elle contient du matériel électronique sensible et doit être manipulée avec soin. Ne la faites pas chauffer et ne la pliez pas, car elle pourrait être endommagée et même prendre feu. Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas excessivement la Nuance Audio™ Remote Control. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de manipuler la Nuance Audio™ Remote Control. Ne l'exposez pas au soleil. Interactions et environnements. Faites attention. Interagir avec la Nuance Audio™ Remote Control peut vous distraire ou augmenter le temps de réaction face aux dangers. Soyez toujours attentif à votre environnement, y compris la signalisation et les obstacles.

Durée de vie. La durée de vie prévue de la Nuance Audio™ Remote Control est de 5 ans à partir de la date de fabrication.

Limitations d'utilisation. N'utilisez pas la Nuance Audio™ Remote Control dans des environnements aux champs électriques ou magnétiques forts. La distance d'utilisation effective de la Nuance Audio™ Remote Control est inférieure à 25 mètres.

Voyage aérien. Vérifiez les restrictions de sécurité aérienne applicables aux appareils électroniques personnels avant de voler avec la Nuance Audio™ Remote Control. Utilisez la Nuance Audio™ Remote Control en conformité avec toutes les lois, règles et réglementations locales applicables.

Conditions de fonctionnement. -10°C à +45°C ; 101,3 kPa à 61,9 kPa ; humidité entre 20 % et 60 % sous +35°C pendant 1 000 heures ; altitude maximale de 3 900 mètres pendant 1 heure à 0°C et 35°C.

Transport et stockage. -40°C à +85°C ; humidité entre 20 % et 90 % ; la Nuance Audio™ Remote Control doit rester fonctionnelle après récupération d'une exposition non opérationnelle à une altitude de 12 000 mètres (18,8 kPa) pendant 12 heures à la fois à -10°C et +45°C.

Nettoyage et entretien. Pour nettoyer la Nuance Audio™ Remote Control, utilisez un chiffon humide et du savon neutre en évitant tous types de sprays, solvants, produits chimiques ou solutions de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniac. N'utilisez pas de chiffons sales ou abrasifs qui pourraient endommager la Nuance Audio™ Remote Control. Si le Produit devient excessivement humide, il y a un risque de l'endommager, séchez-le soigneusement, rangez-le dans un contenant avec des absorbeurs d'humidité ou dans un étui de séchage.

Batterie. La Nuance Audio™ Remote Control contient une pile bouton remplaçable par l'utilisateur. La batterie peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne la laissez pas dans la voiture en plein soleil ou ne l'exposez pas à une chaleur excessive. Éliminez la batterie conformément aux instructions et aux exigences locales. Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ou les brûler. Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales. Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles, de marques ou de types différents, tels que les piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables. La durée de vie prévue de la batterie est d'au moins 6 mois dans des conditions d'utilisation standard à partir du moment où l'onglet de protection de la batterie est retiré. Pour la procédure de remplacement de la batterie, veuillez suivre les indications du guide de l'utilisateur accompagnant la Nuance Audio™ Remote Control et utilisez une épingle aussi petite qu'une pointe de stylo ou un cure-dent pour ouvrir le couvercle de la Nuance Audio™ Remote Control.

Soyez prudent lors du remplacement de la batterie pour éviter d'endommager la structure de la Nuance Audio™ Remote Control. Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -). Assurez-vous de toujours de bien sécuriser le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le Produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de 100 °C ou ne l'incinerez pas. Cela

pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques. Les dangers liés à la batterie sont le feu, l'explosion et la brûlure.

Ne court-circuitez pas, ne broyez pas, n'incinerez pas la batterie, et n'exposez pas le contenu à l'eau. Gardez toujours vos piles hors de portée des enfants pour éviter l'ingestion. Ne pas ingérer la batterie. Les piles compatibles sont des piles bouton au lithium 3V CR2450. Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Contrôle du mode audio	Bouton sur l'Appareil
Contrôle du volume	Boutons sur l'Appareil

CONNECTIVITÉ SANS FIL

Compatibilité Bluetooth®	Oui, BLE
Compatibilité appel téléphonique Bluetooth®	Non
Fréquence de fonctionnement	2480-2402 MHz
Puissance rayonnée maximale	La puissance EIRP maximale en espace libre est de -3,22 dBm
Modulation	GFSK
Espacement des canaux	2MHz
Largeur de bande des canaux	2MHz
Nombre de canaux	40

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Batterie	Pile bouton au lithium 3V CR2450
Durée de vie	5 ans
Durée de conservation	5 ans

CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Température	de -40°C à +85°C
Humidité	de 20 % à une humidité élevée de 90 % et température de +45°C pendant 288 heures
Altitude et pression atmosphérique	Altitude de 12 000 mètres (18,8kPa) pendant 12 heures à la fois à -10°C et +45°C

CONDITIONS D'UTILISATION

Température	de -10°C à +45°C
Humidité	de 20 % à une humidité de 60 % sous +35°C pendant 1 000 heures
Altitude et pression atmosphérique	Altitude de 3 900 mètres pendant 1 heure à 0°C et +35°C ; 101,3kPa à 61,9kPa

Note : Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, modifiée, distribuée ou utilisée de quelque manière que ce soit sans une autorisation écrite préalable.

Déclaration de conformité UE

Luxottica Group S.p.A déclare que cet Appareil respecte la Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio, le Règlement européen 2017/745 sur les dispositifs médicaux et la Directive RoHS II 2011/65/UE.

Le texte intégral de la Déclaration de Conformité UE est disponible à l'adresse suivante :

www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration

Fréquences radio et puissance : BLE du Produit : 2402–2480 MHz < 20 dBm;

Précautions d'utilisation :

- Eloigner la Nuance Audio™ Remote Control du ventre des femmes enceintes.
- Eloigner la Nuance Audio™ Remote Control du bas ventre des adolescents
- Utiliser la Nuance Audio™ Remote Control dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.




L'utilisateur final est tenu de signaler tout incident grave survenant en relation avec l'utilisation de l'Appareil à l'autorité compétente de l'État membre où l'incident s'est Produit (pour la France, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) et au fabricant de l'appareil.

Informations sur le recyclage

La Nuance Audio™ Remote Control ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers et doit être déposée dans un centre de collecte approprié pour le recyclage. Pour plus d'informations sur l'élimination appropriée, veuillez visiter www.nuanceaudio.com.

Informations sur l'élimination dans l'UE

Le symbole de la poubelle barrée ci-dessous signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, la Nuance Audio™ Remote Control et/ou la batterie de la Nuance Audio™ Remote Control doivent être jetées séparément des déchets ménagers. Lorsque la Nuance Audio™ Remote Control arrive en fin de vie, apportez-la ainsi que la batterie à un point de collecte désigné par les autorités locales. Alternativement, apportez le Produit et la batterie à un magasin affilié. La batterie peut être retirée en toute sécurité par l'utilisateur final selon les indications données dans le guide de l'utilisateur. La collecte séparée et le recyclage du Produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine.

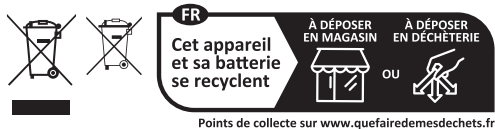

Informations sur les DEEE

Luxottica s'engage à l'élimination, la réutilisation, le recyclage et la récupération appropriés des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (« DEEE »). Les DEEE ne doivent pas être éliminés dans les poubelles domestiques normales. Pour plus d'informations sur l'élimination appropriée, veuillez consulter l'adresse www.nuanceaudio.com.

Certifications de sécurité pour la batterie de la Nuance Audio™ Remote Control

Cet article décrit les normes de sécurité internationales que la batterie de la Nuance Audio™ Remote Control respecte. Toutes les batteries de la Nuance Audio™ Remote Control sont testées, certifiées et conformes à ces normes de sécurité internationales :

- Règlement des Nations Unies (ONU) sur le transport UN38.3 : Couvre la sécurité des batteries lors du transport aérien

- Règlement (UE) 2023/1542
- Norme UL1642 pour les batteries au lithium

AVERTISSEMENT La batterie ne contient pas de mercure. Ne pas percer ou incinérer, ne pas mettre dans l'eau.

Nuance Audio™ est une marque déposée d'Essilor International SAS.

FR



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy



Made in China
Fabriqué en Chine



www.nuanceaudio.com



Pour obtenir les instructions les plus récentes et à jour concernant l'utilisation, la sécurité et la garantie, veuillez consulter les instructions disponibles dans la section Support de l'application Nuance Audio™ ainsi que sur la page suivante : nuanceaudio.com/support/manual-guide.

Nuance Audio™ Remote Control

ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o pila tipo moneda.
- Si se ingiere, puede provocar la **MUERTE** o lesiones graves.
- La ingestión de una pila de botón o una pila de moneda puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.
- **Las pilas son peligrosas, MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **Busque atención médica inmediata si sospecha que se ha ingerido o insertado una pila en cualquier parte del cuerpo,** ya que puede provocar lesiones graves o mortales en 2 horas o menos.



* La disponibilidad del producto, los requisitos normativos y las condiciones de garantía pueden variar de un país a otro. Tenga en cuenta que la categoría de producto de Nuance Audio™ Glasses en el mercado local puede variar en función del mercado en el que se venda el producto, y que algunos países no adoptan una categoría local específica (como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda). Como resultado, la terminología utilizada para designar la categoría del producto puede variar entre las versiones lingüísticas de estas Instrucciones de uso: seguridad y garantía (por ejemplo, «assistant d'écoute» en Francia frente a «audífono» en otros lugares). Dado que este documento está organizado por idiomas y no por países, la terminología utilizada para referirse al producto en una versión lingüística determinada no refleja necesariamente la categoría aplicable en todos los países en los que se habla ese idioma. Por ejemplo, aunque el francés es uno de los idiomas oficiales de Suiza, la terminología utilizada en la versión francesa no se aplica al mercado suizo; para Suiza, la terminología correcta es «aide auditive».

Nuance Audio™ Remote Control se denomina en estas Instrucciones de uso también como «Producto», «Dispositivo» o «Equipo».

USOS Y USUARIOS PREVISTOS

Uso previsto. El accesorio Nuance Audio™ Remote Control está diseñado para ayudar a la funcionalidad de las Nuance Audio™ Glasses en términos de control de la configuración del audífono*. El Nuance Audio™ Remote Control se utiliza para controlar de forma inalámbrica el volumen y las modalidades de las Nuance Audio™ Glasses. Las dos modalidades posibles del audífono* son:

- **Frontal:** cuando se selecciona esta funcionalidad, se amplifican los sonidos provenientes de la dirección en la que está mirando, y los sonidos alrededor se atenúan. Generalmente, esta función se utiliza en un entorno ruidoso cuando desea escuchar mejor a la persona que le está hablando.
- **360°:** esta funcionalidad amplifica indistintamente todos los sonidos a su alrededor.

El Nuance Audio™ Remote Control está destinado para ser utilizado únicamente con las Nuance Audio™ Glasses, y para usuarios mayores de 18 años.

El Nuance Audio™ Remote Control funciona con Bluetooth® emparejado con las Nuance Audio™ Glasses e incluye una pila de botón. La pila de botón (CR2450) puede ser reemplazada por el usuario. Las Nuance Audio™ Glasses son un producto sanitario. El Nuance Audio™ Remote Control debe usarse como un accesorio de las Nuance Audio™ Glasses.

Para mayores de 18 años. El Nuance Audio™ Remote Control está destinado para ser utilizado únicamente con las Nuance Audio™ Glasses, y para usuarios mayores de 18 años. No permita que ninguna persona menor de 18 años utilice el Nuance Audio™ Remote Control. Los niños pueden ahogarse o asfixiarse en caso de tragarse este Producto. Mantenga este Producto fuera del alcance de los niños. Consulte la Guía del usuario para obtener imágenes y explicaciones acerca del uso del Nuance Audio™ Remote Control.

Restricciones a las combinaciones. El Nuance Audio™ Remote Control funciona únicamente con las Nuance Audio™ Glasses, lo que significa que el Producto no puede funcionar con otros dispositivos.

Lea las instrucciones. Lea y siga todas las instrucciones incluidas con el Nuance Audio™ Remote Control antes de usarlo.

Precauciones.

1. Al ajustar el volumen, súbalo gradualmente hasta alcanzar un nivel de escucha cómodo.
2. No use el Nuance Audio™ Remote Control si alguna de sus partes está dañada o se sobrecalienta. Si esto ocurre, deje de usar el Producto inmediatamente y visítenos en www.nuanceaudio.com para obtener información útil de contacto y asistencia.

No realice alteraciones no autorizadas a este Producto.

INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones personales, molestias o daños materiales, lea y siga la información de salud y seguridad a continuación antes de usar el Nuance Audio™ Remote Control.

Interferencia con productos sanitarios personales. Este Producto contiene material magnético y componentes que emiten ondas de radio, lo que podría afectar al funcionamiento de productos sanitarios como, entre otros, marcapasos u otros dispositivos implantables o bombas de insulina. Consulte a su médico o al fabricante del producto sanitario antes de usar el Producto. Apague las funcionalidades electrónicas del Producto si experimenta alguna interferencia con sus productos sanitarios.

Interferencias. Verifique antes de usar el Nuance Audio™ Remote Control en áreas donde los dispositivos electrónicos o inalámbricos están restringidos. Esto puede causar interferencias.

Conducción. No use el Nuance Audio™ Remote Control mientras conduce.

Agua y líquidos. No exponga ni sumerja en agua el Nuance Audio™ Remote Control. La exposición prolongada al agua puede dañarlo. El Nuance Audio™ Remote Control no está diseñado para resistir la inmersión o la exposición prolongada al agua u otros líquidos. En caso de exposición al agua, seque el Nuance Audio™ Remote Control completamente con un paño seco.

ADVERTENCIA Atmósferas potencialmente explosivas. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que el Nuance Audio™ Remote Control. Apague su Nuance Audio™ Remote Control y no retire ni instale la pila cuando se encuentre en un área con atmósferas potencialmente explosivas. No lo use si está roto o dañado. Inspeccione periódicamente el Nuance Audio™ Remote Control en busca de daños o signos de desgaste. No lo use si alguna pieza está dañada, agrietada o si algún componente interno está expuesto. No intente reparar el Nuance Audio™ Remote Control usted mismo, en su lugar contacte con el servicio de Soporte

en www.nuanceaudio.com.

Sobrecalentamiento. Mantenga el Nuance Audio™ Remote Control alejado del fuego y del calor excesivo (por ejemplo, almacenándolo a la luz solar directa, cerca de velas o en un coche caliente) para evitar quemaduras o daños en el Producto. El Nuance Audio™ Remote Control no debería sobrecalentarse durante el uso normal. Si lo hace, deje de usarlo inmediatamente y contacte con el servicio de Soporte. Mantenga el Nuance Audio™ Remote Control alejado del fuego y fuentes de calor.

Manéjelo con cuidado y evite daños. El Nuance Audio™ Remote Control es un equipo electrónico sensible, contiene un hardware electrónico sensible y debe manejarse con cuidado y responsabilidad. No lo caliente ni lo doble, ya que podría dañarse e incluso incendiarse. No lo deje caer, golpee o sacuda el Nuance Audio™ Remote Control bruscamente. No use el Nuance Audio™ Remote Control si está dañado. No intente abrir, desmontar o manipular el Nuance Audio™ Remote Control. No lo exponga al sol.

Interacciones y entornos. Preste atención. Interactuar con el Nuance Audio™ Remote Control puede distraerlo o aumentar el tiempo de reacción ante peligros. Preste siempre atención a su entorno, incluidas las señales y los obstáculos.

Vida útil. La vida útil esperada del Nuance Audio™ Remote Control es de 5 años desde la fecha de fabricación.

Limitaciones de uso. No use el Nuance Audio™ Remote Control en entornos con campos eléctricos o magnéticos fuertes. La distancia de uso efectiva del Nuance Audio™ Remote Control es inferior a 25 metros.

Vuelo. Verifique las restricciones de seguridad de aviación aplicables a los dispositivos electrónicos personales antes de volar con el Nuance Audio™ Remote Control. Use el Producto en cumplimiento con todas las leyes, normas y regulaciones locales aplicables.

Condiciones de operación. de -10 °C a +45 °C; de 101.3 kPa a 61.9 kPa; humedad entre 20 % y 60 % bajo +35 °C durante 1.000 horas; altitud máxima de 3.900 metros durante 1 hora a 0 °C y +35 °C.

Transporte y almacenamiento. -40 °C a +85 °C; humedad entre 20 % y 90 %; el Nuance Audio™ Remote Control debe permanecer funcional después de recuperarse de la exposición no operativa a altitud de 12.000 metros (18,8kPa) durante 12 horas tanto a -10 °C como a +45 °C.

Limpieza y mantenimiento. Para limpiar el Nuance Audio™ Remote Control, use un paño húmedo

y jabón neutro, evitando todo tipo de aerosoles, disolventes, productos químicos o soluciones de limpieza que contengan alcohol o amoníaco. No use paños sucios o abrasivos que puedan dañar el Nuance Audio™ Remote Control. Si el Producto se moja en exceso, existe el riesgo de dañarlo. Séquelo completamente, guárdelo en un recipiente con desecantes o en un estuche de secado.

Batería. El Nuance Audio™ Remote Control contiene incorpora una pila de botón que puede ser reemplazada por el usuario. La pila puede presentar un riesgo de incendio o quemadura química si se usa incorrectamente. No la deje en el coche bajo la luz solar directa ni la exponga a calor excesivo o incinere. Deseche la pila de acuerdo con las instrucciones y requisitos locales. Retire y recicle o deseche inmediatamente las pilas usadas según las regulaciones locales y fuera del alcance de los niños. NO deseche las pilas en la basura doméstica ni las incinere. Retire y recicle o deseche inmediatamente las pilas de equipos que no se usen durante un tiempo prolongado según las regulaciones locales.

No mezcle pilas nuevas y usadas, ni diferentes marcas o tipos de pilas, como alcalinas, de zinc-carbono o recargables. La vida útil esperada de la pila es de al menos 6 meses bajo condiciones de uso estándar desde el momento que se retira la lengüeta protectora de la pila. Para el procedimiento de reemplazo de la pila, siga las indicaciones en la Guía del usuario que acompaña al Nuance Audio™ Remote Control y use un alfiler o un palillo para abrir la tapa del Nuance Audio™ Remote Control. Tenga cuidado al reemplazar la pila para evitar dañar la estructura del Nuance Audio™ Remote Control. Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -). Asegure completamente el compartimento de la pila. Si el compartimento no se cierra de manera segura, deje de usar el Producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños. Las pilas no recargables no deben recargarse. No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento por encima de +100 °C ni la incineración. Hacerlo puede resultar en lesiones debido a ventilación, fugas o explosión que resulten en quemaduras químicas. Los peligros relacionados con la pila son incendio, explosión y quemaduras. No cortocircuite, aplaste ni incinere la pila, ni exponga su contenido al agua. Mantenga siempre sus pilas fuera del alcance de los niños para evitar su ingesta. No ingiera las pilas. Las pilas compatibles son pilas de botón de litio 3V CR2450.

Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. Llame a un centro de control de intoxicaciones local para obtener información sobre el tratamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Control de modalidad de audio	Botón en el Dispositivo
Control de volumen	Botones en el Dispositivo
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA	
Compatibilidad con Bluetooth®	Sí, BLE
Compatibilidad con llamadas telefónicas Bluetooth®	No
Frecuencia de operación	2480-2402 MHz
Potencia radiada máxima	La EIRP máxima en espacio libre es -3.22 dBm
Modulación	GFSK
Espaciado de canales	2MHz
Ancho de banda del canal	2MHz
Número de canales	40

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pila	Pila de botón de litio 3V CR2450
Vida	5 años
Vida útil	5 años

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura	De -40 °C a +85 °C
Humedad	Del 20 % a alta humedad 90 % y temperatura de +45 °C durante 288 horas
Altitud y presión atmosférica	Altitud de 12.000 metros (18,8 kPa) durante 12 horas a -10 °C y +45 °C

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura	De -10 °C a +45 °C
Humedad	Del 20 % a humedad 60 % bajo +35 °C durante 1.000 horas
Altitud y presión atmosférica	Altitud de 3.900 metros durante 1 hora a 0 °C y +35 °C; 101,3 kPa a 61,9 kPa

Nota: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el Equipo.

Ninguna parte de este trabajo puede ser reproducida, modificada, distribuida o utilizada de cualquier otra forma sin permiso previo por escrito.

Declaración de cumplimiento de la UE

Luxottica Group S.p.A declara por la presente que este Dispositivo cumple con la Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/UE y el Reglamento 2017/745 de la UE sobre Productos Sanitarios. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration

Frecuencia y potencia de radio: BLE del Producto: 2402–2480 MHz < 20 dBm;

Mantenga el Nuance Audio™ Remote Control alejado del vientre de mujeres embarazadas. Mantenga el Nuance Audio™ Remote Control alejado del abdomen inferior de adolescentes. Use el Nuance Audio™ Remote Control en buenas condiciones de recepción para reducir la cantidad de radiación electromagnética recibida.



El usuario final está obligado a informar cualquier incidente grave que ocurra en relación con el uso del Dispositivo a la autoridad competente del Estado Miembro donde ocurrió el incidente y al fabricante del Dispositivo.

Información de cómo desechar el Producto

El Nuance Audio™ Remote Control no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse en una instalación de recogida adecuada para su reciclaje. Para más información sobre la eliminación adecuada, visite www.nuanceaudio.com.

Información de cómo desechar en la UE

El símbolo del contenedor tachado que aparece a continuación significa que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, el Nuance Audio™ Remote Control y/o la pila del Nuance Audio™ Remote Control deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando el Nuance Audio™ Remote Control

llegue al final de su vida útil, llévelo junto a la pila a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Alternativamente, lleve el Producto y la pila a una tienda afiliada. El usuario final puede retirar la pila de manera segura siguiendo las indicaciones de la Guía del usuario. La recogida y reciclaje por separado del Producto y/o su pila en el momento de su desecho ayudará a conservar los recursos naturales y garantizará que se recicle de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente.



Información sobre RAEE

Luxottica está comprometida con la eliminación, reutilización, reciclaje y recuperación adecuada de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos («RAEE»). Los RAEE no deben desecharse en los contenedores de residuos domésticos normales. Para más información sobre la eliminación adecuada, visite www.nuanceaudio.com.

Certificaciones de seguridad para la pila del Nuance Audio™ Remote Control

Este apartado describe los estándares internacionales de seguridad con los que cumple la pila del Nuance Audio™ Remote Control. Todas las pilas del Nuance Audio™ Remote Control están probadas, certificadas y cumplen con estos estándares internacionales de seguridad:

- Regulaciones de Transporte de las Naciones Unidas (ONU) UN38.3: Cubre la seguridad de la pila durante el transporte aéreo.
- Reglamento (UE) 2023/1542
- Estándar UL1642 para pilas de litio

ADVERTENCIA La pila no contiene mercurio. No la perforo ni incinere, no la apriete ni sumerja en agua. Nuance Audio™ es una marca registrada de Essilor International SAS.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy



Made in China
Fabriqué en Chine



www.nuanceaudio.com



Para las últimas y más actualizadas Instrucciones de uso - Seguridad y Garantía, consulte las Instrucciones en la sección de Soporte de la Nuance Audio™ App y en la siguiente página web:
nuanceaudio.com/support/manual-guide

Nuance Audio™ Remote Control

WARNUNG

- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Münzbatterie.
- Kann bei Verschlucken zum **TOD** der zu schweren Verletzungen führen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann bereits nach 2 Stunden zu inneren Verätzungen führen.
- **Batterie ist gefährlich, HALTEN SIE neue und gebrauchte Batterien AUSSER REICHWEITE von KINDERN.**
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt wurde.** Dies kann innerhalb von zwei Stunden oder weniger zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen.



* Die Produktverfügbarkeit, die regulatorischen Anforderungen und die Garantiebedingungen können von Land zu Land unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie: Die Produktkategorie der Nuance Audio™ Glasses kann je nach Markt, in dem das Produkt verkauft wird, variieren. Einige Länder verwenden keine eigene lokale Kategorie (z. B. Großbritannien, Australien und Neuseeland). Daher kann die Terminologie, die zur Bezeichnung der Produktkategorie verwendet wird, in den verschiedenen Sprachversionen dieser Gebrauchsanweisung – Sicherheit & Garantie – variieren (z. B. „assistant d'écoute“ in Frankreich im Vergleich zu „Hörgerät“ in anderen Ländern). Da dieses Dokument nach Sprache und nicht nach Land gegliedert ist, entspricht die in einer bestimmten Sprachversion verwendete Produktbezeichnung nicht unbedingt der Kategorie, die in allen Ländern gilt, in denen diese Sprache verwendet wird. Obwohl Französisch beispielsweise eine der Amtssprachen der Schweiz ist, gilt die in der französischen Version verwendete Terminologie nicht für den Schweizer Markt; für die Schweiz lautet die korrekte Terminologie „aide auditive“..

Die Nuance Audio™ Remote Control wird in dieser Gebrauchsanweisung auch als „Produkt“, „Gerät“ oder „Ausrüstung“ bezeichnet.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG & BENUTZER

Bestimmungsgemäße Verwendung. Die Nuance Audio™ Remote Control soll die Funktionalität der Nuance Audio™ Glasses in Bezug auf die Steuerung der Einstellungen dieses Hörgeräts* unterstützen. Die Nuance Audio™ Remote Control wird dazu verwendet, Lautstärke und Modi der Nuance Audio™ Glasses drahtlos zu steuern.

Die zwei möglichen Modi für das Hörerlebnis sind:

- „Frontal“: Wenn diese Funktion ausgewählt ist, werden gezielt die Geräusche verstärkt, die aus der Richtung kommen, in die Sie schauen, während alle anderen Geräusche abgeschwächt werden. Diese Funktion wird in der Regel in einer lauten Umgebung verwendet, wenn Sie eine Person besser hören möchten, die mit Ihnen spricht.
- „360°“: Diese Funktion verstärkt unterschiedslos alle Geräusche um Sie herum. Die Nuance Audio™ Remote Control ist nur in Verbindung mit der Nuance Audio™ Glasses zu verwenden und ist nur für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Die Nuance Audio™ Remote Control funktioniert über eine Bluetooth-Verbindungen mit der Die Nuance Audio™ Glasses und enthält eine Knopfzellenbatterie. Die Knopfzellenbatterie (CR2450) kann vom Kunden ausgetauscht werden.

Die Nuance Audio™ Glasses ist ein medizinisches Gerät. Die Nuance Audio™ Remote Control ist als Zubehör der Nuance Audio™ Glasses zu verwenden.

Für Personen ab 18 Jahren. Die Nuance Audio™ Remote Control ist nur in Verbindung mit Ihrer Nuance Audio™ Glasses zu verwenden und ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet. Lassen Sie keine Minderjährigen unter 18 Jahren die Nuance Audio™ Remote Control verwenden. Kinder können an diesem Produkt ersticken oder sich daran verschlucken. Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern. Bitte konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung, um Erklärungen und Darstellungen zur Nuance Audio™ Remote Control zu erhalten.

Einschränkungen bei Kombinationen. Die Nuance Audio™ Remote Control funktioniert nur mit der Nuance Audio™ Glasses, was bedeutet, dass das Produkt nicht mit anderen Geräten funktioniert.

Lesen Sie die Anweisungen. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die der Nuance Audio™ Remote Control beiliegen, bevor Sie sie verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen.

1. Sie die Lautstärke schrittweise ein, bis Sie ein angenehmes Volumen erreicht haben.
2. Verwenden Sie die Nuance Audio™ Remote Control nicht, wenn ein Teil davon beschädigt oder überhitzt ist. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie die Verwendung der Nuance Audio™ Remote Control sofort ein und kontaktieren Sie uns über unsere Webseite www.nuanceaudio.com, um hilfreiche Unterstützung und Kontaktinformationen zu erhalten.

Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.

GESUNDHEITS- & SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG Um das Risiko von Verletzungen, Unbehagen oder Sachschäden zu verringern, lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen, bevor Sie die Nuance Audio™ Remote Control verwenden.

Interferenzen mit anderen persönlichen medizinischen Geräten. Dieses Produkt enthält magnetisches Material und Komponenten, die Funkwellen aussenden, die den Betrieb von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder anderen implantierbaren Geräten wie auch Insulinpumpen beeinträchtigen können. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, bevor Sie das Produkt verwenden. Schalten Sie die elektronischen Funktionen des Produkts aus, wenn Sie eine Beeinträchtigung anderer medizinischer Geräte bemerken.

Interferenzen. Bevor Sie die Nuance Audio™ Remote Control verwenden, prüfen Sie die Einschränkungen, die in Bereichen gelten, in denen die Benutzung von Elektronik oder kabellosen Geräten limitiert ist. Es könnten in solchen Fällen Interferenzen verursacht werden.

Fahrtüchtigkeit. Verwenden Sie die Nuance Audio™ Remote Control nicht während der Fahrt.

Wasser & Flüssigkeiten. Lassen Sie das Produkt nicht nass werden und tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Längere Einwirkung von Wasser kann die Nuance Audio™ Remote Control beschädigen. Die Nuance Audio™ Remote Control ist nicht dafür gedacht, dem Eintauchen und längerer Einwirkung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten standzuhalten. Sollte Ihre Nuance Audio™ Remote Control mit Wasser in Kontakt treten, trocknen Sie diese gründlich mit einem trockenen Tuch ab.

WARNUNG. Potenziell explosive Atmosphären. Lagern oder transportieren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosiven Materialien zusammen mit der Nuance Audio™ Remote Control oder in ihrer Nähe. Schalten Sie Ihre Nuance Audio™ Remote Control aus und entfernen oder installieren

Sie keine Batterien, wenn Sie sich in einem Umfeld mit potenziell explosiven Atmosphären befinden. Verwenden Sie die Nuance Audio™ Remote Control nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist. Überprüfen Sie die Nuance Audio™ Remote Control regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen. Verwenden Sie sie nicht, wenn ein Teil beschädigt, gebrochen ist oder wenn ein internes Bauteil freiliegt. Versuchen Sie nicht, die Nuance Audio™ Remote Control selbst zu reparieren, sondern kontaktieren Sie den Kundenservice unter www.nuanceaudio.com.

Überhitzung. Halten Sie die Nuance Audio™ Remote Control von Feuer und übermäßiger Hitze fern (z. B. durch Aufbewahrung unter direktem Einfluss von Sonnenlicht, in der Nähe von Kerzen oder in einem heißen Auto), um Verbrennungen oder Schäden an der Nuance Audio™ Remote Control zu vermeiden. Die Nuance Audio™ Remote Control sollte bei normalem Gebrauch nicht heiß werden. Wenn dies dennoch der Fall sein sollte, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundenservice. Halten Sie die Nuance Audio™ Remote Control von Feuer und Wärmequellen fern.

Vorsichtig behandeln & Schäden vermeiden. Die Nuance Audio™ Remote Control ist ein empfindliches elektronisches Gerät, sie enthält empfindliche elektronische Hardware und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Versuchen Sie nicht, sie zu erhitzen oder zu biegen, da sie beschädigt werden und sogar Feuer fangen kann. Lassen Sie die Nuance Audio™ Remote Control nicht fallen, schlagen Sie nicht drauf oder schütteln Sie sie nicht übermäßig. Verwenden Sie die Nuance Audio™ Remote Control nicht, wenn sie beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, die Nuance Audio™ Remote Control zu öffnen, zu zerlegen oder zu manipulieren. Setzen Sie sie nicht der Sonne aus.

Interaktionen & Umgebung. Achten Sie auf Ihre Umgebung. Die Interaktion mit der Nuance Audio™ Remote Control kann Sie ablenken oder die Reaktionszeit auf Gefahren verlängern. Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, einschließlich Beschilderung und Hindernisse.

Lebensdauer. Die erwartete Lebensdauer der Nuance Audio™ Remote Control beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

Nutzungseinschränkungen. Verwenden Sie die Nuance Audio™ Remote Control nicht in Umgebungen mit starken elektrischen oder magnetischen Feldern. Die effektive Nutzungsdistanz der Nuance Audio™ Remote Control beträgt weniger als 25 Meter.

Fliegen. Überprüfen Sie die geltenden Sicherheitsbeschränkungen für persönliche Elektronikgeräte, bevor Sie mit der Nuance Audio™ Remote Control fliegen. Verwenden Sie die Nuance Audio™ Remote

Control in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Gesetzen, Regeln und Vorschriften.

Betriebsbedingungen. -10°C bis +45°C; 101,3kPa bis 61,9kPa; Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 60% unter +35°C für 1.000 Stunden; maximale Höhe von 3.900m für 1 Stunde bei 0°C bis +35°C.

Transport und Aufbewahrung. -40°C bis +85°C; Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 90%; Die Nuance Audio™ Remote Control bleibt normalerweise funktionsfähig auch nach der Erholung von nicht-betriebsbedingter Höhenexposition bis zu 12.000m (18,8kPa) für 12 Stunden bei Temperaturen zwischen -10°C und +45°C.

Reinigung und Wartung. Verwenden Sie zur Reinigung der Nuance Audio™ Remote Control ein angefeuchtetes Tuch und eine neutrale Seife und vermeiden Sie alle Arten von Sprays, Lösungsmitteln, Chemikalien oder Reinigungsmitteln, die Alkohol oder Ammoniak enthalten. Verwenden Sie keine schmutzigen oder scheuernden Tücher, die die Nuance Audio™ Remote Control beschädigen könnten. Wenn das Produkt übermäßig nass wird, besteht die Gefahr einer Beschädigung. Trocknen Sie es gründlich und bewahren Sie es in einem Behälter mit Trockenmitteln oder in einem Trockenschrank auf.

Batterie. Die Nuance Audio™ Remote Control enthält eine vom Benutzer austauschbare Knopfzelle. Die Batterie kann bei unsachgemäßer Verwendung eine Brand- oder chemische Verbrennungsgefahr darstellen. Setzen Sie sie nicht im Auto der direkten Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze aus oder verbrennen Sie sie nicht. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den Anweisungen und lokalen Anforderungen. Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie gebrauchte Batterien immer umgehend gemäß den lokalen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll und versuchen Sie nicht, diese zu verbrennen. Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie immer umgehend Batterien von Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, gemäß den lokalen Vorschriften.

Benutzen Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder verschiedene Arten von Batterien, wie z. B. Alkaline-, Kohlezink- oder wiederaufladbare Batterien. Die erwartete Batterielebensdauer beträgt mindestens 6 Monate unter Standardnutzungsbedingungen ab dem Moment, in dem der Batterie-Schutzstreifen entfernt wird. Für den Batteriewechsel befolgen Sie bitte die Anweisungen der Gebrauchsanleitung, die der Nuance Audio™ Remote Control beiliegt, und verwenden Sie eine Nadel wie eine Stiftspitze oder einen Zahnstocher, um die Abdeckung der Nuance Audio™ Remote Control zu öffnen. Seien Sie vorsichtig beim Batteriewechsel, um die Struktur der Nuance Audio™

Remote Control nicht zu beschädigen. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt gemäß der Polarität (+ und -) eingefügt sind. Schließen Sie das Batteriefach immer sorgfältig. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, stellen Sie die Nutzung des Produkts ein, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie die Nuance Audio™ Remote Control fern von Kindern auf. Versuchen Sie nicht, nicht-wiederaufladbare Batterien wieder aufzuladen. Vermeiden Sie es, Batterien zum Entladen oder Aufladen zu zwingen, sie zu zerlegen, auf über 100°C zu erhitzen oder zu verbrennen. Dies kann zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckage oder Explosion führen, was chemische Verbrennungen nach sich zieht.

In Zusammenhang mit Batterien stellen Feuer, Explosion und Verbrennung eine Gefahr dar. Schließen Sie Batterien nicht kurz, zerdrücken und verbrennen Sie sie nicht und setzen Sie den Inhalt nicht der Einwirkung von Wasser aus. Halten Sie Ihre Batterien immer von Kindern fern, um ein Verschlucken zu verhindern. Verschlucken Sie keine Batterien. Kompatible Batterien sind Lithium 3V CR2450 Knopfzellenbatterien. Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Wenden Sie sich an eine lokale Giftnotrufzentrale für Informationen zur Behandlung.

TECHNISCHE HAUPTMERKMALE

Steuerung des Audio-Modus	Taste auf dem Gerät
Lautstärkeregelung	Taste auf dem Gerät
KABELLOSE VERBINDUNG	
Kompatibel mit Bluetooth®	Ja, BLE
Kompatibel mit Bluetooth®-Telefonanruf	Nein
Betriebsfrequenz	2.480-2.402MHz
Max. Strahlungsleistung	Freiraum max. EIRP beträgt -3,22 dBm
Modulation	GFSK
Kanalabstände	2MHz
Kanalbandbreite	2MHz
Anzahl der Kanäle	40

TECHNISCHE HAUPTMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Batterie	Lithium 3V CR2450 Knopfzellenbatterie
Lebensdauer	5 Jahre
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre

TRANSPORT- UND LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur	von -40°C bis +85°C
Feuchtigkeit	von 20% bis max. 90% bei +45°C für 288 Std.
Höhe & Luftdruck bis zu einer	Höhe von 12.000 m (18,8kPa) für 12 Std. sowohl bei Kälte bis zu -10°C als auch bei Hitze bis zu +45°C

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperature	von -10°C bis +45°C
Feuchtigkeit	von 20% bis max. 60% bei Temperaturen unter +35°C für 1.000 Std.
Höhe & Luftdruck bis zu einer	Höhe von 3.900 m für 1 Std. bei Temperaturen von 0°C bis +35°C; von 101,3kPa bis 61,9kPa

Hinweis: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des medizinischen Geräts verliert. Kein Teil dieses Werks darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung vervielfältigt, geändert, verbreitet oder anderweitig verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung.

Luxottica Group S.p.A erklärt hiermit, dass dieses medizinische Gerät mit der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte und RoHS II Directive 2011/65/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration
Funkfrequenz und Leistung: BLE des Produkts: 2.402–2.480 MHz < 20dBm;
Halten Sie die Nuance Audio™ Remote Control vom Bauch schwangerer Frauen fern. Halten Sie die Nuance Audio™ Remote Control vom Unterleib-Bereich Jugendlicher fern. Verwenden Sie die Nuance Audio™ Remote Control unter guten Empfangsbedingungen, um die Menge der empfangenen elektromagnetischen Strahlung zu reduzieren.



Der Endbenutzer ist verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung des medizinischen Geräts der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Vorfall aufgetreten ist, sowie dem Hersteller des Geräts zu melden.

Entsorgungsinformationen

Die Nuance Audio™ Remote Control darf nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden und sollte einer geeigneten Sammelstelle zur Wiederverwertung zugeführt werden. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung finden Sie unter www.nuanceaudio.com.

EU-Entsorgungsinformationen

Das untenstehende durchgestrichene Mülltonnensymbol bedeutet, dass die Nuance Audio™ Remote Control und/oder die Batterie der Nuance Audio™ Remote Control gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn die Nuance Audio™ Remote Control das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, bringen Sie sie und die Batterie zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle. Alternativ können Sie das Produkt und die Batterie in einem angegliederten Geschäft abgeben. Die Rückgabe des Produkts und/oder der Batterie am Ende der Lebensdauer ist kostenfrei. Die Batterie kann vom Endbenutzer gemäß den Angaben im Benutzerhandbuch sicher entfernt werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling des Produkts und/oder seiner Batterie zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.



WEEE-Informationen

Luxottica engagiert sich für die ordnungsgemäße Entsorgung, Wiederverwendung, das Recycling und die Rückgewinnung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten („WEEE“). WEEE sollte nicht in normalen Haushaltsmülltonnen entsorgt werden. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung finden Sie unter www.nuanceaudio.com.

Sicherheitszertifizierungen für die Batterie der Nuance Audio™ Remote Control

Dieser Artikel beschreibt die internationalen Sicherheitsstandards, die die Batterie der Nuance Audio™ Remote Control erfüllt. Alle Batterien der Nuance Audio™ Remote Control sind getestet, zertifiziert und entsprechen den folgenden internationalen Sicherheitsstandards:

- Vereinte Nationen (UN) Transportvorschriften UN38.3: Deckt die Batteriesicherheit während des Lufttransports ab.
- Verordnung (EU) 2023/1542
- UL1642 Standard für Lithium-Batterien

WARNUNG

Die Batterie enthält kein Quecksilber. Nicht durchstechen oder verbrennen, nicht quetschen oder in Wasser einweichen.

Nuance Audio™ ist eine eingetragene Marke von Essilor International SAS.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy



Made in China
Hergestellt in China



www.nuanceaudio.com



Für die neuesten und aktuellsten Gebrauchsanweisungen - Sicherheit und Garantie, beachten Sie bitte die Anweisungen im Kundenservice-Bereich der Nuance Audio™ App und auf der folgenden Webseite: nuanceaudio.com/support/manual-guide

Gender-Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in dieser Gebrauchsanweisung auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter

LUXOTTICA LIMITED WARRANTY

This limited consumer warranty (the "Warranty") is provided by Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italy ("Luxottica"). This Warranty covers defects and malfunctions in the Luxottica Product it accompanies. The Warranty continues for one (1) year from the date of purchase of the Product (the "Limited Warranty Period"). However, if you purchase the Product from within the EU, UK or EFTA, the Limited Warranty Period shall be two (2) years. This Warranty applies only to those countries where Nuance is officially marketed and supported, meaning countries where the product is certified and Luxottica is authorized to distribute it ("Warranty Coverage Territory"). We warrant that the Product will, under normal and intended use, function in accordance with the technical specifications or accompanying Product documentation (the "Warranted Functionality") during the Limited Warranty Period. For the avoidance of doubt, any services that are required to achieve the Warranted Functionality may be updated, modified, or limited, so long as it continues to maintain (or exceed) the Warranted Functionality. This Warranty is not available to products that were purchased from any source other than Luxottica or an authorised dealer. This Warranty is valid only with proof of purchase that clearly shows the purchase date. If you send us a Product without valid proof of purchase, then we reserve the right to return the Product to you at your cost, subject to prepayment, or, if such costs are not prepaid, we will keep the Product for thirty (30) days for your pick-up. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights under consumer protection laws or regulations in the country where the product was purchased or, if different, where you are located, provided that this product is officially marketed there at the time the warranty service is needed. Such rights vary from state to state and country to country. The benefits conferred by this Warranty are in addition to and do not affect any rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations (including, without limitation, national laws implementing Directive 1999/44/EC and Directive 2019/771). You are entitled to remedies free of charge in the event that the Product does not conform with the requirements set out under the laws in the Warranty Coverage Territory. The other remedies available to you according

to the laws in the Warranty Coverage Territory are not affected by this Warranty. For full information on your rights according to the laws in the Warranty Coverage Territory, please see below and/or contact your local consumer rights organisation/citizens advice bureau. Please visit us at www.nuanceaudio.com for information about the countries Luxottica supports and to get helpful service and contact information. The scope of technical support offered by Luxottica consists of helping to diagnose and resolve problems with defects in the Product. Please note that when contacting Luxottica via telephone, long distance charges may apply, depending on your calling area.

REGISTRATION

Product registration is not required as a condition to coverage under this Warranty, but some Luxottica products require periodic connection to an online account to ensure full functionality.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If you have a problem with your Product, unless specifically stated elsewhere in this Warranty and except as provided by applicable state law, to make a warranty claim, you need to return your Product to the authorised dealer from which the Product was purchased, together with your proof of purchase. Please visit www.nuanceaudio.com to get helpful service and contact information. If your warranty claim is deemed to be valid, and we confirm a defect or malfunction covered by this Warranty, the appropriate remedy will be determined. Depending on the circumstances, we may take one of the following actions: i) Repair the Product, only where repair is technically feasible (given the highly technological content of the Product, the only repair available is lens replacement); or (ii) Replace the Product; or (iii) Refund the purchase price paid for the Product, if neither repair nor replacement is possible or appropriate. Subject to your rights under applicable local laws of the Warranty Coverage Territory, the choice of remedy rests with the Company. Subject to your rights under any local laws, if we determine that a Product should be replaced, the replacement may be a new, refurbished, or a re-manufactured Product. The Limited Warranty Period is extended by a duration equal to the time during which we had the Product in our possession for performance of the Warranty, as described above. Save for your rights and remedies available under your local laws, the provision of a repaired or replacement Product does not restart or otherwise extend the Limited Warranty Period. We may not

return the original Product to you. If your warranty claim is not deemed to be valid, then we reserve the right to return the Product to you at your cost, subject to prepayment, or, if such costs are not prepaid, we will keep the Product for thirty (30) days for your pick-up before it is disposed of. Except to the extent that the law requires otherwise, any expenses incurred by you in returning the Product for warranty assessment will be borne by Luxottica. If you need to return your product to Luxottica, you will be provided with a prepaid label. If the warranty claim is deemed to be invalid and we do not find a defect or malfunction covered by this Warranty, we will contact you to see if you want us to conduct repairs at your cost and, in any event, you will be charged for the outbound freight to return your Product based on Luxottica's standard shipping rates.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND LUXOTTICA IS NOT RESPONSIBLE FOR: DELIVERY OR INSTALLATION, OR LABOR CHARGES FOR SETUP OF THE PRODUCT AND/OR ADJUSTMENT OF CUSTOMER CONTROLS ON THE PRODUCT. DAMAGES CAUSED BY MISUSE, ABUSE, ACCIDENTS, FIRE, THEFT, DISAPPEARANCE, MISPLACEMENT, FLUCTUATIONS AND POWER SURGES, CONNECTIONS TO IMPROPER VOLTAGE OR INCORRECT ELECTRICAL LINE VOLTAGE, VIRUSES, MALWARE, RECKLESS, WILLFUL, OR INTENTIONAL CONDUCT OR NEGLIGENCE. DAMAGES CAUSED BY SERVICING THE PRODUCT WHICH HAS NOT BEEN PRE-AUTHORISED BY LUXOTTICA. DAMAGES CAUSED BY USAGE THAT IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE PRODUCT INSTRUCTIONS/DOCUMENTATION. DAMAGES CAUSED BY FAILURE TO FOLLOW THE PRODUCT INSTRUCTIONS/DOCUMENTATION OR FAILURE TO PERFORM CLEANING OR PREVENTIVE MAINTENANCE. DAMAGES CAUSED BY THE COMBINATION OF THE PRODUCT WITH OTHER NON-LUXOTTICA BRANDED PRODUCTS, ACCESSORIES, PARTS OR COMPONENTS OR USE OF PRODUCTS, EQUIPMENT, SYSTEMS, UTILITIES, SERVICES, SOFTWARE, PARTS SUPPLIES, ACCESSORIES, APPLICATIONS, INSTALLATIONS, REPAIRS, EXTERNAL WIRING OR CONNECTORS NOT SUPPLIED OR AUTHORISED BY LUXOTTICA THAT DAMAGE THE PRODUCT. SIGNAL ISSUES, RECEPTION PROBLEMS AND DISTORTION RELATED TO NOISE, ECHO, INTERFERENCE OR OTHER SIGNAL TRANSMISSION AND DELIVERY PROBLEMS. ANY EQUIPMENT OR COMPONENTS THAT WERE NOT INCLUDED IN, OR

WITH YOUR PRODUCT AS ORIGINALLY SOLD. NORMAL WEAR AND TEAR. DAMAGE CAUSED AS A RESULT OF IMPROPER TRANSPORTATION OR PACKING/PACKAGING WHEN RETURNING THE PRODUCT TO LUXOTTICA OR A COLLECTION DEALER. DAMAGES CAUSED BY MODIFICATION OR ADAPTATION THAT MAY BE REQUIRED TO ENABLE A PRODUCT TO OPERATE IN ANY COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY FOR WHICH IT WAS DESIGNED, MANUFACTURED, APPROVED AND/OR AUTHORISED, OR REPAIR OF THE PRODUCT WHICH RESULTS IN DAMAGE AS A RESULT OF THESE MODIFICATIONS. DAMAGE TO PRODUCTS WHERE THE ANTI-COUNTERFEITING CODE (OR EQUIVALENT) HAS BEEN REMOVED, ERASED, DEFACED, ALTERED OR MADE ILLEGIBLE.

This Warranty does not include any specific guarantees that the Product will be error-free. Except in the US and to the extent prohibited by any applicable law in any other country, this Warranty is void if a Product is returned with removed, damaged or tampered labels or any alterations (including the unauthorized removal of any component or external cover).

IMPLIED WARRANTIES

EXCEPT IN THE EU, EFTA AND UK AND EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY ANY APPLICABLE LAW IN ANY OTHER COUNTRY, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT IS DISCLAIMED. FOR THE US ONLY, ANY IMPLIED WARRANTIES THAT CANNOT BE DISCLAIMED ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PERIOD AS SET OUT IN THIS WARRANTY. IF YOU ARE A CONSUMER SUBJECT TO THE QUEBEC CONSUMER PROTECTION ACT, THE WARRANTY DISCLAIMER CONTAINED IN THIS SECTION DOES NOT LIMIT YOUR RIGHTS AND REMEDIES UNDER SUCH ACT, INCLUDING THE RIGHT TO MAKE A CLAIM UNDER ANY OF THE STATUTORY WARRANTIES PROVIDED UNDER SECTIONS 34 TO 54 OF SUCH ACT.

LIMITATION OF LIABILITY

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY ANY APPLICABLE LAW, LUXOTTICA SHALL NOT, UNDER THIS WARRANTY, BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, LUXOTTICA'S MAXIMUM LIABILITY FOR ANY CLAIM ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS WARRANTY IS LIMITED

TO THE PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR THE PRODUCT PLUS ANY INTEREST ALLOWED BY LAW REGARDLESS OF THE FORM OF CLAIM. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, LUXOTTICA IS NOT LIABLE FOR EVENTS BEYOND ITS CONTROL, SUCH AS ACTS OF GOD, VIRUSES, PROPERTY DAMAGE, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF BUSINESS, LOST PROFITS, LOST DATA OR OTHER CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES, HOWSOEVER CAUSED, FOR BREACH OF THIS WARRANTY, CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE).

This Warranty does not affect your legal rights under any applicable state and national law governing the sale of consumer goods. Some countries, states, provinces, and territories (including the EU, EFTA and UK) do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, the exclusion or limitation of certain damages or types of loss or allow limitations on how long an implied warranty or condition may last, so the limitations or exclusions described in this Warranty may not apply to you.

FOR CONSUMERS IN AUSTRALIA

For purchases made from a retail store operated by Luxottica in Australia, the Supplier is Luxottica Retail Australia Pty Ltd (ABN 26 000 025 758) of level 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. For purchases made through the wholesale channel: the Supplier is Luxottica South Pacific Holdings Pty Ltd (ABN 58 104 629 772) of level 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Your rights and the benefits given to you under this Warranty are in addition to other statutory rights and remedies you have under the Australian Consumer Law and other laws.

FOR CONSUMERS IN ITALY

This Warranty is a voluntary warranty provided by Luxottica in accordance with Article 135-quinquies of Legislative Decree No. 206 of 6 September 2005 (the "Consumer Code"). In addition to this Warranty, consumers are entitled to the rights set out in Articles 128-135-septies of the Consumer Code, which apply for two (2) years from the date the Product is delivered. Accordingly, this Warranty does not affect

the consumer's statutory rights under the legal guarantee of conformity. For more information on your rights under Articles 128-135-septies of the Consumer Code, please visit www.nuanceaudio.com.

FOR CONSUMERS IN FRANCE

The consumer has a period of two years from the delivery of the goods to obtain the implementation of the legal guarantee of conformity in the event of a lack of conformity. During this period, the consumer is only required to establish the existence of the lack of conformity and not the date on which it occurred. Where the contract for the sale of goods provides for the continuous supply of digital content or a digital service for a period exceeding two years, the legal guarantee shall apply to that digital content or digital service throughout the specified supply period. During this period, the consumer is only required to establish the existence of the lack of conformity affecting the digital content or digital service, and not the date on which it occurred. The legal guarantee of conformity requires the professional, where applicable, to provide all updates necessary to maintain the conformity of the goods. The legal guarantee of conformity entitles the consumer to have the goods repaired or replaced within thirty days of their request, at no cost and without significant inconvenience to them. If the goods are repaired under the legal guarantee of conformity, the consumer benefits from a six-month extension of the initial guarantee. If the consumer requests repair of the goods, but the seller insists on replacement, the legal guarantee of conformity is renewed for a period of two years from the date of replacement of the goods.

The consumer may obtain a reduction in the purchase price by keeping the goods or terminate the contract and receive a full refund in exchange for returning the goods, if:

- 1° The professional refuses to repair or replace the goods;
- 2° The repair or replacement of the goods takes place after a period of thirty days;
- 3° The repair or replacement of the goods causes a major inconvenience to the consumer, in particular when the consumer definitively bears the costs of returning or removing the non-compliant goods, or if they bear the costs of installing the repaired or replacement goods;
- 4° The non-conformity of the goods persists despite the seller's unsuccessful attempt to ensure conformity.

The consumer is also entitled to a price reduction or termination of the contract when the lack of

conformity is so serious that it justifies an immediate price reduction or termination of the contract. In this case, the consumer is not required to request repair or replacement of the goods beforehand. The consumer is not entitled to cancel the sale if the lack of conformity is minor. Any period during which the goods are out of service for repair or replacement suspends the warranty that remained until the repaired goods were delivered. The above rights result from the application of Articles L. 217-1 to L. 217-32 of the Consumer Code. A seller who acts in bad faith to obstruct the implementation of the legal guarantee of conformity is liable to a civil fine of up to €300,000, which may be increased to 10% of average annual turnover (Article L. 241-5 of the Consumer Code). The consumer also benefits from the legal guarantee against hidden defects pursuant to Articles 1641 to 1649 of the Civil Code, for a period of two years from the discovery of the defect. This guarantee entitles the consumer to a price reduction if the goods are retained, or a full refund upon return of the goods. This commercial warranty does not grant any additional rights beyond the legal guarantee of conformity provided for in Articles L. 217-1 to L. 217-32 of the Consumer Code. This commercial warranty does not affect consumers' rights and recourse under the legal guarantee of conformity. Finally, the limitation of liability clause does not apply to French consumers in the event of a breach of any of Luxottica's obligations.

FOR CONSUMERS IN GERMANY

Your statutory rights and remedies under German law are not affected by this Warranty. You are entitled to exercise those statutory rights and remedies free of charge. This Warranty applies in addition to any applicable contractual and/or statutory warranty and liability provisions and does not restrict any of your statutory rights and remedies against Luxottica, the retailer, or any other mandatory rights and remedies under German or EU law.

FOR CONSUMERS IN THE U.S.

FOR THE US ONLY, ANY IMPLIED WARRANTIES THAT CANNOT BE DISCLAIMED ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PERIOD AS SET OUT IN THIS LIMITED CONSUMER WARRANTY (THE "WARRANTY").

FOR PRODUCTS PURCHASED IN CALIFORNIA:

This Nuance Audio™ hearing Aid and its accessories is warranted to be specifically fit for the particular

needs of you, the buyer. If the hearing aid is not initially fit for your particular needs, it may be returned to the seller within 45 days of the initial date of delivery to you. If you return the hearing aid, the seller will either adjust or replace the hearing aid or promptly refund the total amount paid. This warranty does not affect the protections and remedies you have under other laws.

RETURNS AND EXCHANGES:

If you bought Nuance Audio™ products from an EssilorLuxottica banner, you may return them within 30 days from the date of purchase, or any longer period expressly provided by applicable law or the specific EssilorLuxottica banner. Nuance Audio™ products purchased through non-EssilorLuxottica retailers must be returned to those retailers in accordance with their return policies. For further information on EssilorLuxottica returns, please visit: <http://www.nuanceaudio.com/en-us/c/support/shipping-and-returns>.

GARANZIA LIMITATA LUXOTTICA

Questa garanzia limitata per i consumatori (la "garanzia") è fornita da Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italia ("Luxottica"). Questa garanzia copre difetti e malfunzionamenti nel prodotto Luxottica che accompagna. La Garanzia continua per un (1) anno dalla data di acquisto del prodotto (il "Periodo di Garanzia Limitata"). Tuttavia, se acquisti il prodotto all'interno dell'UE, del Regno Unito o dell'EFTA, il periodo di garanzia limitata sarà di due (2) anni. Questa Garanzia si applica solo in quei paesi in cui Nuance è ufficialmente commercializzato e supportato, ovvero paesi in cui il prodotto è certificato e Luxottica è autorizzata a distribuirlo ("Territorio di copertura della garanzia"). Garantiamo che, durante il periodo di garanzia limitata, il prodotto funzionerà, secondo le condizioni di uso normale e previsto, in conformità con le specifiche tecniche o la documentazione del prodotto allegata ("funzionalità garantita"). Per evitare dubbi, qualsiasi servizio necessario per raggiungere la funzionalità garantita può essere aggiornato, modificato o limitato, purché continui a mantenere (o superare) la funzionalità garantita. Questa garanzia non è disponibile per i prodotti acquistati da fonti diverse da Luxottica o da un rivenditore autorizzato. Considera che la garanzia è valida solo se accompagnata da una prova d'acquisto che ne indichi chiaramente la data. Qualora il prodotto venga inviato senza una prova valida, ci riserviamo il diritto di restituirlo a tue spese, previo pagamento anticipato dei costi di spedizione, oppure di trattenerlo per un massimo di trenta (30) giorni, durante i quali potrai provvedere al ritiro. La presente garanzia ti conferisce diritti legali specifici. Potresti inoltre beneficiare di ulteriori diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei consumatori nel paese in cui hai acquistato il prodotto o, se differente, nel paese in cui ti trovi, a condizione che il prodotto fosse ufficialmente commercializzato in tale territorio al momento della richiesta di assistenza in garanzia. Tali diritti variano da stato a stato e da paese a paese. I benefici conferiti da questa garanzia sono aggiuntivi e non influenzano i diritti e i rimedi previsti da tali leggi e regolamenti sulla protezione dei consumatori (inclusi, senza limitazione, le leggi nazionali che attuano la Direttiva 1999/44/CE e la Direttiva 2019/771). Hai diritto a rimedi gratuiti nel caso in cui il prodotto non sia conforme ai requisiti stabiliti dalle leggi nel

territorio di copertura della garanzia. Gli altri rimedi a tua disposizione secondo le leggi nel territorio di copertura della garanzia non sono pregiudicati da questa garanzia. Per informazioni complete sui tuoi diritti secondo le leggi nel territorio di copertura della garanzia, ti preghiamo di vedere qui sotto e/o contattare la tua organizzazione locale per i diritti dei consumatori/ufficio di consulenza per i cittadini. Ti preghiamo di visitare il sito www.nuanceaudio.com per informazioni sui paesi che Luxottica supporta e per ottenere altre informazioni utili e contatti. L'area di supporto tecnico di Luxottica è dedicata ad aiutarti a diagnosticare e risolvere eventuali difetti dei prodotti. Ti ricordiamo che, in caso di contatto telefonico, potrebbero essere applicati costi per le chiamate a lunga distanza, a seconda della tua zona di chiamata. Registrazione La registrazione del Prodotto non è necessaria per usufruire della copertura prevista da questa Garanzia. Tuttavia, alcuni prodotti Luxottica richiedono una connessione periodica a un account online per garantirne il corretto funzionamento.

COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA

Se hai un problema con il tuo Prodotto, a meno che non sia specificamente indicato altrove in questa Garanzia e salvo quanto previsto dalla legge statale applicabile, per presentare un reclamo di garanzia, devi restituire il tuo Prodotto al rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato, insieme alla prova di acquisto. Si prega di visitare www.nuanceaudio.com per ottenere informazioni utili su servizi e contatti. Qualora la tua richiesta di garanzia sia ritenuta fondata e venga accertata l'esistenza di un difetto o malfunzionamento coperto dalla presente garanzia, sarà individuato e applicato il rimedio appropriato. A seconda delle circostanze, potremmo intraprendere una delle seguenti azioni: i) riparare il prodotto, solo se la riparazione è tecnicamente fattibile (data l'elevata tecnologia del prodotto, l'unica riparazione disponibile è la sostituzione delle lenti); oppure (ii) sostituire il prodotto; oppure (iii) rimborsare il prezzo di acquisto corrisposto per il prodotto, qualora né la riparazione né la sostituzione risultino possibili o adeguate. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi locali applicabili nel territorio in cui la garanzia è valida, la determinazione del rimedio spetta alla Società. Fermo restando i tuoi diritti previsti dalle leggi locali applicabili, qualora determiniamo che un prodotto debba essere sostituito, la sostituzione potrà consistere in un prodotto nuovo, ricondizionato o rimesso a nuovo. Il periodo di garanzia limitata sarà prorogato per un periodo pari al tempo in cui il prodotto è rimasto in nostro possesso per l'esecuzione degli interventi

di garanzia, come indicato sopra. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi locali in materia di diritti e rimedi del consumatore, la fornitura di un prodotto riparato o sostituito non comporta la riattivazione né un'estensione ulteriore del periodo di garanzia limitata. Potremmo non restituirti il prodotto originale. Se la tua richiesta di garanzia non viene ritenuta valida, ci riserviamo il diritto di restituirlo a tue spese, previo pagamento anticipato dei costi di spedizione, oppure di trattenerlo per un massimo di trenta (30) giorni, durante i quali potrai provvedere al ritiro Salvo quanto diversamente richiesto dalla legge, tutte le spese sostenute da te per restituire il prodotto ai fini della valutazione della garanzia saranno a carico di Luxottica. Se hai bisogno di restituire il tuo prodotto a Luxottica, ti verrà fornita un'etichetta prepagata. Qualora la richiesta di garanzia venga ritenuta non valida e non venga riscontrato alcun difetto o malfunzionamento coperto dalla presente garanzia, ti contatteremo per verificare se desideri procedere con le riparazioni a tue spese. In ogni caso, ti sarà addebitato il costo della spedizione per la restituzione del prodotto, calcolato secondo le tariffe di spedizione standard di Luxottica.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

QUESTA GARANZIA NON COPRE E LUXOTTICA NON È RESPONSABILE PER: CONSEGNA O INSTALLAZIONE, O COSTI DI MANODOPERA PER L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO E/O REGOLAZIONE DEI CONTROLLI DEL CLIENTE SUL PRODOTTO. DANNI CAUSATI DA USO IMPROPRIO, ABUSO, INCIDENTI, INCENDI, FURTI, SCOMPARSA, SMARRIMENTO, FLUTTUAZIONI E SOVRACCARICHI DI CORRENTE, COLLEGAMENTI A VOLTAGGIO IMPROPRIO O VOLTAGGIO DELLA LINEA ELETTRICA INCORRETTO, VIRUS, MALWARE, CONDOTTA SCONSIDERATA, VOLONTARIA O INTENZIONALE, O NEGLIGENZA. DANNI CAUSATI DA UN SERVIZIO DEL PRODOTTO CHE NON È STATO PRE-AUTORIZZATO DA LUXOTTICA. DANNI CAUSATI DA UN UTILIZZO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI E ALLA DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO. DANNI CAUSATI DAL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI/DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO O DALLA MANCATATA PULIZIA O MANUTENZIONE PREVENTIVA. DANNI CAUSATI DALLA COMBINAZIONE DEL PRODOTTO CON ALTRI PRODOTTI, ACCESSORI, PARTI O COMPONENTI NON A MARCHIO LUXOTTICA O DALL'USO DI PRODOTTI, ATTREZZATURE, SISTEMI, UTENZE, SERVIZI, SOFTWARE, FORNITURE DI PARTI, ACCESSORI, APPLICAZIONI, INSTALLAZIONI, RIPARAZIONI, CABLAGGI ESTERNI O CONNETTORI

NON FORNITI O AUTORIZZATI DA LUXOTTICA CHE DANNEGGIANO IL PRODOTTO, PROBLEMI DI SEGNALE, PROBLEMI DI RICEZIONE E DISTORSIONE RELATIVI A RUMORE, ECHO, INTERFERENZA O ALTRI PROBLEMI DI TRASMISSIONE E CONSEGNA DEL SEGNALE. QUALSIASI ATTREZZATURA O COMPONENTE NON INCLUSO NEL PRODOTTO COME ORIGINARIAMENTE VENDUTO. USURA NORMALE. DANNO CAUSATO A SEGUITO DI UN TRASPORTO O IMBALLAGGIO INADEGUATO QUANDO SI RESTITUISCE IL PRODOTTO A LUXOTTICA O A UN RIVENDITORE AUTORIZZATO. DANNI CAUSATI DA MODIFICHE O ADATTAMENTI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI PER PERMETTERE A UN PRODOTTO DI FUNZIONARE IN UN QUALSIASI PAESE DIVERSO DA QUELLO PER CUI È STATO PROGETTATO, FABBRICATO, APPROVATO E/O AUTORIZZATO, O RIPARAZIONE DEL PRODOTTO CHE RISULTA IN DANNI A SEGUITO DI QUESTE MODIFICHE. DANNO AI PRODOTTI DOVE IL CODICE ANTI-FRODE (O EQUIVALENTE) È STATO RIMOSSO, CANCELLATO, DETURPATO, MODIFICATO O RESO ILLEGIBILE.

La presente garanzia non copre alcuna dichiarazione o garanzia implicita relativa all'assenza di difetti del prodotto. Salvo quanto previsto negli Stati Uniti e nella misura in cui non sia vietato dalle leggi locali applicabili in altri paesi, la garanzia decade qualora il prodotto venga restituito con etichette rimosse, danneggiate o manomesse, oppure subisca qualsiasi alterazione (inclusa la rimozione non autorizzata di componenti o rivestimenti esterni).

GARANZIE IMPLICITE

ECCETTO NELL'UE, NELL'EFTA E NEL REGNO UNITO, E SALVO NELLA MISURA IN CUI SIA VIETATO DA QUALSIASI LEGGE APPLICABILE IN ALTRI PAESI, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO E NON VIOLAZIONE È RIFIUTATA. SOLO PER GLI STATI UNITI, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA CHE NON PUÒ ESSERE ESCLUSA È ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA LIMITATA COME STABILITO NELLA PRESENTE GARANZIA. SE SEI UN CONSUMATORE SOGGETTO ALLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE DEL QUEBEC, LA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA CONTENUTA IN QUESTA SEZIONE NON LIMITA I TUOI DIRITTI E RIMEDI AI SENSI DI TALE LEGGE, INCLUSO IL DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO AI SENSI DI QUALSIASI DELLE

GARANZIE LEGISLATIVE PREVISTE NEI SEZIONI DA 34 A 54 DI TALE LEGGE.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

SALVO QUANTO VIETATO DA QUALSIASI LEGGE APPLICABILE, LUXOTTICA NON SARÀ RESPONSABILE, AI SENSI DI QUESTA GARANZIA, DI ALCUN DANNO INCIDENTALE O CONSEGUENTE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA. SALVO QUANTO VIETATO DALLA LEGGE, LA RESPONSABILITÀ MASSIMA DI LUXOTTICA PER QUALSIASI RECLAMO DERIVANTE DA O COLLEGATO A QUESTA GARANZIA È LIMITATA AL PREZZO DI ACQUISTO DA TE PAGATO PER IL PRODOTTO, PIÙ EVENTUALI INTERESSI CONSENTITI DALLA LEGGE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DEL RECLAMO. NEL LIMITE CONSENTITO DALLA LEGGE, LUXOTTICA NON È RESPONSABILE PER EVENTI AL DI FUORI DEL SUO CONTROLLO, COME FENOMENI NATURALI, VIRUS, DANNI ALLA PROPRIETÀ, PERDITA D'USO, INTERRUZIONI DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI DATI O ALTRI DANNI CONSEGUENTI, PUNITIVI O SPECIALI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA. CIÒ VALE PER VIOLAZIONI DI QUESTA GARANZIA, DEL CONTRATTO O PER FATTI ILLECITI (COMPRESA LA NEGLIGENZA).

Questa Garanzia non pregiudica i tuoi diritti legali ai sensi di qualsiasi legge statale e nazionale applicabile che regola la vendita di beni di consumo. Alcuni paesi, stati, province e territori (inclusi l'UE, l'EFTA e il Regno Unito) non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, l'esclusione o la limitazione di determinati danni o tipi di perdita, o consentono limitazioni sulla durata di una garanzia o condizione implicita, quindi le limitazioni o esclusioni descritte in questa Garanzia potrebbero non applicarsi a te.

PER I CONSUMATORI IN AUSTRALIA

Per gli acquisti effettuati in un negozio al dettaglio gestito da Luxottica in Australia, il Fornitore è Luxottica Retail Australia Pty Ltd (ABN 26 000 025 758) con sede al livello 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Per gli acquisti effettuati tramite il canale all'ingrosso, il Fornitore è Luxottica South Pacific Holdings Pty Ltd (ABN 58 104 629 772) con sede al livello 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. I nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge australiana sui consumatori. Hai diritto a una sostituzione o a un rimborso per un difetto grave e a un

indennizzo per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Hai anche il diritto di far riparare o sostituire i beni se questi non risultano di qualità accettabile e il difetto non costituisce un difetto grave. I diritti e i benefici a te concessi ai sensi della presente garanzia si aggiungono ad altri diritti e rimedi previsti dalla legge australiana sulla tutela dei consumatori e da altre leggi applicabili.

PER I CONSUMATORI IN ITALIA

Questa Garanzia è una garanzia convenzionale offerta da Luxottica ai sensi dell'Articolo 135-quinquies del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"). Indipendentemente dalla Garanzia offerta da Luxottica, il consumatore gode dei diritti previsti dagli Articoli 128-135-septies del Codice del Consumo per due (2) anni dalla consegna del Prodotto. Pertanto, questa Garanzia non pregiudica i diritti a tutela dei consumatori spettanti per legge e riguardanti la garanzia legale di conformità. Per ulteriori informazioni sui diritti che ti spettano ai sensi degli Articoli 128-135-septies del Codice del Consumo, visita www.nuanceaudio.com.

PER I CONSUMATORI IN FRANCIA

Il consumatore dispone di un termine di due anni dalla data di consegna del prodotto per far valere la garanzia legale di conformità in presenza di un difetto di conformità. Entro tale periodo, al consumatore compete esclusivamente l'onere di provare l'esistenza della suddetta mancanza di conformità, senza che sia richiesta la dimostrazione del momento esatto in cui essa si è manifestata. Qualora il contratto di vendita di beni contempli la fornitura continuativa di contenuti digitali o di un servizio digitale per un periodo superiore a due anni, la garanzia legale di conformità si estende a tali contenuti o servizi per l'intera durata della fornitura prevista contrattualmente. Nel corso di detto periodo, al consumatore deve unicamente provare l'esistenza della mancanza di conformità relativa al contenuto digitale o al servizio digitale, senza che sia richiesta la dimostrazione del momento in cui essa si è prodotta.

La garanzia legale di conformità richiede al professionista, ove applicabile, di fornire tutti gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità dei beni. La garanzia legale di conformità dà diritto al consumatore di avere i beni riparati o sostituiti entro trenta giorni dalla richiesta, senza alcun costo e senza significativi disagi per lui. Se i beni vengono riparati nell'ambito della garanzia legale di conformità, il consumatore beneficia di un'estensione di sei mesi della garanzia iniziale.

Se il consumatore richiede la riparazione dei beni, ma il venditore insiste per la sostituzione, la garanzia legale di conformità viene rinnovata per un periodo di due anni dalla data di sostituzione dei beni.

Il consumatore può ottenere una riduzione del prezzo di acquisto mantenendo i beni o risolvere il contratto e ricevere un rimborso completo in cambio della restituzione, se:

1° Il professionista rifiuta di riparare o sostituire i beni;

2° La riparazione o la sostituzione dei beni avviene dopo un periodo di trenta giorni;

3° La riparazione o la sostituzione dei beni può comportare un notevole inconveniente per il consumatore, in particolare quando questi deve sostenere i costi per la restituzione o la rimozione dei beni non conformi, oppure i costi per l'installazione dei beni riparati o sostituiti;

4° La non conformità dei beni persiste nonostante il tentativo non riuscito del venditore di garantire la conformità.

Il consumatore ha diritto anche a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto se la mancanza di conformità è così grave da giustificare una riduzione immediata del prezzo o la risoluzione del contratto. In questo caso, il consumatore non è tenuto a richiedere in anticipo la riparazione o la sostituzione dei beni. Il consumatore non può esercitare il diritto di risolvere il contratto di vendita qualora la mancanza di conformità rivesta carattere lieve. Inoltre, ogni periodo in cui i beni risultino non utilizzabili a causa di interventi di riparazione o sostituzione sospende il decorso del termine di garanzia, che riprende a decorrere dalla data di riconsegna dei beni riparati o sostituiti.

I diritti sopra menzionati derivano dall'applicazione degli articoli L. 217-1 a L. 217-32 del Codice del Consumo. Un venditore che agisce in mala fede per ostacolare l'attuazione della garanzia legale di conformità è soggetto a una sanzione civile fino a 300.000 €, che può essere aumentata fino al 10% del fatturato medio annuo (Articolo L. 241-5 del Codice del Consumo).

Il consumatore beneficia anche della garanzia legale contro i vizi occulti ai sensi degli articoli 1641-1649 del Codice Civile, per un periodo di due anni dalla scoperta del difetto. Questa garanzia dà diritto al consumatore a una riduzione del prezzo se i beni vengono trattenuti o a un rimborso completo al momento della restituzione dei beni. Questa garanzia commerciale non concede diritti aggiuntivi oltre alla garanzia legale di conformità prevista dagli articoli L. 217-1 a L. 217-32 del Codice del Consumo.

Questa garanzia commerciale non pregiudica i diritti e i rimedi dei consumatori ai sensi della garanzia legale di conformità. Infine, la clausola di limitazione della responsabilità non si applica ai consumatori francesi in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di Luxottica.

PER I CONSUMATORI IN GERMANIA

I tuoi diritti e i rimedi previsti dalla legge tedesca restano pienamente validi e non sono in alcun modo limitati da questa Garanzia. Sei libero di esercitare tali diritti e rimedi senza alcun costo aggiuntivo. La presente Garanzia si aggiunge a qualsiasi altra garanzia o disposizione di responsabilità prevista dal contratto o dalla legge applicabile e non limita in alcun modo i tuoi diritti o rimedi nei confronti di Luxottica e del rivenditore, né i diritti obbligatori riconosciuti dalla legge tedesca o dall'Unione Europea.

PER I CONSUMATORI NEGLI STATI UNITI

SOLO PER GLI STATI UNITI, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA CHE NON PUÒ ESSERE ESCLUSA È ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA LIMITATA, COSÌ COME PREVISTO NELLA GARANZIA LIMITATA PER I CONSUMATORI (LA "GARANZIA").

PER I PRODOTTI ACQUISTATI IN CALIFORNIA:

Questo apparecchio acustico Nuanco Audio e i suoi accessori sono garantiti per essere specificamente adattati alle esigenze dell'acquirente. Se il dispositivo acustico non si adatta alle tue esigenze specifiche, può essere restituito al venditore entro 45 giorni dalla data di consegna iniziale. Se restituisci il dispositivo acustico, il venditore lo regolerà o lo sostituirà oppure rimborserà prontamente l'importo totale pagato. Questa garanzia non pregiudica le tutele e i rimedi a cui hai diritto in base ad altre leggi.

RESI E CAMBI

Se hai acquistato i prodotti Nuanco Audio™ tramite un banner di EssilorLuxottica, puoi effettuare il reso entro 30 giorni dalla data di acquisto o entro qualsiasi periodo più lungo espressamente previsto dalla legge applicabile o dal banner EssilorLuxottica. Per i prodotti Nuanco Audio™ acquistati tramite altri rivenditori non EssilorLuxottica, il reso deve essere effettuato in conformità con le politiche di reso del rivenditore. Per ulteriori informazioni sui resi di EssilorLuxottica, visita:

<http://www.nuanceaudio.com/en-us/c/support/shipping-and-returns>.

GARANTIE LIMITÉE LUXOTTICA

La présente garantie limitée pour les consommateurs (la « Garantie ») est fournie par Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milan, Italie (« Luxottica »). Cette garantie couvre les défauts et les dysfonctionnements du produit Luxottica qu'elle accompagne. La garantie reste valable pendant un (1) an à compter de la date d'achat du produit (la « période de garantie limitée »). Cependant, si vous achetez le produit au sein de l'UE, du Royaume-Uni ou de l'AELE, la période de garantie limitée est de deux (2) ans. Cette garantie s'applique uniquement aux pays où Nuance est officiellement commercialisé et pris en charge, c'est-à-dire aux pays où le produit est certifié et où Luxottica est autorisé à le distribuer (« territoire couvert par la garantie »). Nous garantissons que le produit fonctionnera, dans des conditions d'utilisation normales et prévues, conformément aux spécifications techniques ou à la documentation du produit qui l'accompagne (la « fonctionnalité garantie ») pendant la période de garantie limitée. Pour éviter toute ambiguïté, tout service nécessaire pour atteindre la fonctionnalité garantie peut être mis à jour, modifié ou limité, pour autant qu'il continue de maintenir (ou de dépasser) la fonctionnalité garantie. Cette garantie n'est pas disponible pour les produits achetés auprès d'une source autre que Luxottica ou un revendeur autorisé. Cette garantie n'est valable qu'avec une preuve d'achat indiquant clairement la date d'achat. Si vous nous envoyez un produit sans preuve d'achat valide, nous nous réservons le droit de vous renvoyer le produit à vos frais, sous réserve de prépaiement, ou, si ces frais ne sont pas prépayés, nous conserverons le produit pendant trente (30) jours pour que vous puissiez le récupérer. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits en vertu des lois ou règlements de protection des consommateurs en vigueur dans le pays où le produit a été acheté ou, s'il est différent, dans le pays où vous vous trouvez, à condition que ce produit y soit officiellement commercialisé au moment où le service de garantie est nécessaire. Ces droits varient d'un État à l'autre et d'un pays à l'autre. Les avantages conférés par cette garantie s'ajoutent aux droits et recours prévus par les lois et règlements de protection des consommateurs (y compris, sans limitation, les lois nationales mettant en œuvre la directive 1999/44/CE et la directive 2019/771) et ne

les affectent pas. Vous avez droit à des recours gratuits si le produit n'est pas conforme aux exigences énoncées dans les lois du territoire couvert par la garantie. Les autres recours dont vous disposez en vertu des lois du territoire couvert par la garantie ne sont pas affectés par la présente garantie. Pour des informations complètes sur vos droits conformément à la législation en vigueur dans le territoire couvert par la garantie, veuillez voir ci-dessous et/ou contacter votre organisation locale de défense des droits des consommateurs/bureau d'aide aux citoyens. Rendez-vous sur www.nuanceaudio.com pour connaître les pays pris en charge par Luxottica et pour obtenir des informations utiles sur le service et les contacts. Le support technique offert par Luxottica consiste à aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes liés aux défauts du produit. Veuillez noter que lorsque vous contactez Luxottica par téléphone, des frais d'appel longue distance peuvent s'appliquer, en fonction de votre zone d'appel.

ENREGISTREMENT

L'enregistrement du produit n'est pas une condition requise pour bénéficier de la présente garantie, mais certains produits Luxottica nécessitent une connexion périodique à un compte en ligne pour assurer leur pleine fonctionnalité.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si vous avez un problème avec votre produit, sauf indication contraire dans la présente garantie et sauf disposition contraire de la législation applicable dans l'État, pour faire une réclamation au titre de la garantie, vous devez retourner votre produit au revendeur autorisé auprès duquel le produit a été acheté, accompagné de votre preuve d'achat. Rendez-vous sur www.nuanceaudio.com pour obtenir des informations utiles sur le service et les contacts. Si votre réclamation au titre de la garantie est jugée valide et que nous confirmons l'existence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement couvert par la présente garantie, le recours approprié sera déterminé. Selon les circonstances, nous pouvons prendre l'une des mesures suivantes : i) réparer le produit, uniquement lorsque la réparation est techniquement réalisable (étant donné le contenu hautement technologique du produit, la seule réparation possible est le remplacement de verre) ; ii) remplacer le produit ; ou (iii) rembourser le prix d'achat payé pour le produit, si ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles ou appropriés. Sous réserve de vos droits en vertu des lois locales applicables du territoire couvert par la garantie, le choix du recours

incombe à l'entreprise. Sous réserve de vos droits en vertu des lois locales, si nous déterminons qu'un produit doit être remplacé, le remplacement peut être un produit neuf, remis à neuf ou reconditionné. La période de garantie limitée est prolongée d'une durée égale à la période pendant laquelle nous avons eu le produit en notre possession pour l'exécution de la garantie, comme décrit ci-dessus. Sous réserve de vos droits et recours disponibles en vertu de la législation locale, la fourniture d'un produit réparé ou de remplacement ne redémarre pas et n'étend pas la période de garantie limitée. Nous ne pouvons pas vous retourner le produit original. Si votre réclamation au titre de la garantie n'est pas jugée valide, nous nous réservons le droit de vous retourner le produit à vos frais, sous réserve de prépaiement, ou, si ces frais ne sont pas prépayés, nous conserverons le produit pendant trente (30) jours pour que vous puissiez le récupérer avant qu'il ne soit éliminé. Sauf dans la mesure où la loi exige le contraire, tous les frais que vous aurez engagés pour le retour du produit en vue d'une évaluation de la garantie seront pris en charge par Luxottica. Si vous devez retourner votre produit à Luxottica, vous recevrez une étiquette prépayée. Si la réclamation au titre de la garantie est jugée non valide et que nous ne trouvons pas de défaut ou dysfonctionnement couvert par cette garantie, nous vous contacterons pour savoir si vous souhaitez que nous effectuions des réparations à vos frais et, dans tous les cas, vous devrez payer les frais d'expédition pour le retour votre produit selon les tarifs standard de Luxottica.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET LUXOTTICA N'EST PAS RESPONSABLE DE : LA LIVRAISON OU L'INSTALLATION, OU LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR LA CONFIGURATION DU PRODUIT ET/OU LE RÉGLAGE DES COMMANDES DU CLIENT SUR LE PRODUIT. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE, UN ABUS, DES ACCIDENTS, UN INCENDIE, UN VOL, UNE DISPARITION, UNE PERTE, DES FLUCTUATIONS OU SURTENSIONS ÉLECTRIQUES, DES BRANCHEMENTS À UNE TENSION INADÉQUATE OU À UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INCORRECTE, DES VIRUS, DES MALWARES, UN COMPORTEMENT IRRÉFLÉCHI, VOLONTAIRE OU INTENTIONNEL, OU UNE NÉGLIGENCE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN ENTRETIEN DU PRODUIT QUI N'A PAS ÉTÉ AUTORISÉ AU PRÉALABLE PAR LUXOTTICA. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS OU À LA DOCUMENTATION DU PRODUIT. LES DOMMAGES

CAUSÉS PAR LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS OU DE LA DOCUMENTATION DU PRODUIT OU PAR LE DÉFAUT DE NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA COMBINAISON DU PRODUIT AVEC D'AUTRES PRODUITS, ACCESSOIRES, PIÈCES OU COMPOSANTS NE PORTANT PAS LA MARQUE LUXOTTICA OU PAR L'UTILISATION DE PRODUITS, ÉQUIPEMENTS, SYSTÈMES, SERVICES, LOGICIELS, PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES, APPLICATIONS, INSTALLATIONS, RÉPARATIONS, CÂBLAGES EXTERNES OU CONNECTEURS NON FOURNIS OU AUTORISÉS PAR LUXOTTICA QUI ENDOMMAGENT LE PRODUIT. LES PROBLÈMES DE SIGNAL, DE RÉCEPTION ET DE DISTORSION LIÉS AU BRUIT, À L'ÉCHO, AUX INTERFÉRENCES OU À D'AUTRES PROBLÈMES DE TRANSMISSION ET DE LIVRAISON DU SIGNAL. TOUT ÉQUIPEMENT OU COMPOSANT QUI N'ÉTAIT PAS INCLUS DANS OU AVEC VOTRE PRODUIT TEL QU'IL A ÉTÉ VENDU À L'ORIGINE. L'USURE NORMALE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN TRANSPORT OU UN EMBALLAGE INADÉQUAT LORS DU RENVOI DU PRODUIT À LUXOTTICA OU À UN REVENDEUR CHARGÉ DE LA COLLECTE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES MODIFICATIONS OU ADAPTATIONS QUI PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR PERMETTRE À UN PRODUIT DE FONCTIONNER DANS UN PAYS AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU, FABRIQUÉ, APPROUVÉ ET/OU AUTORISÉ, OU LA RÉPARATION DU PRODUIT QUI ENTRAÎNE DES DOMMAGES À LA SUITE DE CES MODIFICATIONS. LES DOMMAGES CAUSÉS AUX PRODUITS DONT LE CODE ANTI-CONTREFAÇON (OU ÉQUIVALENT) A ÉTÉ RETIRÉ, EFFACÉ, ALTÉRÉ, DÉTÉRIORÉ OU RENDU ILLISIBLE.

Cette garantie n'inclut aucune garantie spécifique que le produit sera exempt d'erreurs. Sauf aux États-Unis et dans la mesure où la loi applicable dans tout autre pays l'interdit, cette garantie est nulle si un produit est retourné avec des étiquettes enlevées, endommagées, altérées ou comportant des modifications (y compris le retrait non autorisé d'un composant ou d'un couvercle externe).

GARANTIES IMPLICITES

SAUF DANS L'UE, L'AELE ET LE ROYAUME-UNI ET SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE DANS TOUT AUTRE PAYS, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DES DROITS EST EXCLUE. POUR LES ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI NE PEUT ÊTRE EXCLUE

EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR SOUMIS À LA LOI QUÉBÉCOISE SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, L'EXCLUSION DE GARANTIE CONTENUE DANS LA PRÉSENTE SECTION NE LIMITE PAS VOS DROITS ET RECOURS EN VERTU DE CETTE LOI, Y COMPRIS LE DROIT DE FAIRE UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE L'UNE DES GARANTIES LÉGALES PRÉVUES AUX ARTICLES 34 À 54 DE CETTE LOI.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR TOUTE LOI APPLICABLE, EN VERTU DE CETTE GARANTIE, LUXOTTICA NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE LUXOTTICA POUR TOUTE RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU LIÉE À CETTE GARANTIE EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT PLUS TOUT INTÉRÊT AUTORISÉ PAR LA LOI, QUEL QUE SOIT LA FORME DE LA RÉCLAMATION. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LUXOTTICA N'EST PAS RESPONSABLE DES ÉVÉNEMENTS INDÉPENDANTS DE SA VOLONTÉ, TELS QUE LES CAS DE FORCE MAJEURE, LES VIRUS, LES DOMMAGES MATÉRIELS, LA PERTE D'USAGE, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, LE MANQUE À GAGNER, LA PERTE DE DONNÉES OU D'AUTRES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU SPÉCIAUX, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE, D'UN CONTRAT OU DE DÉLIT (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE).

Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en vertu de toute loi nationale ou d'État applicable régissant la vente de biens de consommation.

Certains pays, États, provinces et territoires (y compris l'UE, l'AELE et le Royaume-Uni) n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, l'exclusion ou la limitation de certains dommages ou types de pertes, ou la limitation de la durée d'une garantie ou d'une condition implicite, de sorte que les limitations ou exclusions décrites dans la présente garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous.

POUR LES CONSOMMATEURS EN AUSTRALIE

Pour les achats effectués dans un magasin de détail exploité par Luxottica en Australie, le fournisseur est Luxottica Retail Australia Pty Ltd (ABN 26 000 025 758) situé au niveau 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Pour les achats effectués par le biais du canal de vente en gros : le fournisseur est Luxottica South Pacific Holdings Pty Ltd (ABN 58 104 629 772) situé au niveau 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Nos produits sont accompagnés de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les marchandises si elles ne sont pas d'une qualité acceptable et que cette défaillance n'est pas majeure. Vos droits et les avantages qui vous sont accordés en vertu de la présente garantie s'ajoutent aux autres droits et recours statutaires dont vous disposez en vertu de la loi australienne sur la consommation et d'autres lois.

POUR LES CONSOMMATEURS EN ITALIE

La présente garantie est une garantie volontaire fournie par Luxottica en application de l'article 135-quinquies du décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005 (le « Code de la consommation »). En plus de cette garantie, les consommateurs bénéficient des droits énoncés dans les articles 128 à 135-septies du Code de la consommation, qui s'appliquent pendant deux (2) ans à compter de la date de livraison du produit. En conséquence, la présente garantie n'affecte pas les droits statutaires du consommateur en vertu de la garantie légale de conformité. Pour plus de détails sur vos droits en vertu des articles 128 à 135-septies du Code de la consommation, rendez-vous sur www.nuanceaudio.com.

POUR LES CONSOMMATEURS EN FRANCE

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la livraison des marchandises pour faire valoir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas de défaut de conformité. Pendant cette période, le consommateur est uniquement tenu d'établir l'existence du défaut de conformité et non la date à laquelle il est survenu.

Lorsque le contrat de vente de marchandises prévoit la fourniture continue de contenu numérique ou d'un service numérique pour une période supérieure à deux ans, la garantie légale s'applique à ce contenu numérique ou à ce service numérique pendant toute la période de fourniture spécifiée. Pendant cette

période, le consommateur est uniquement tenu d'établir l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique, et non la date à laquelle il est survenu.

La garantie légale de conformité impose au professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des marchandises.

La garantie légale de conformité permet au consommateur d'obtenir la réparation ou le remplacement des marchandises dans les trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui. Si les marchandises sont réparées dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation des marchandises mais que le vendeur insiste pour les remplacer, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement des marchandises.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant les marchandises ou résilier le contrat et recevoir un remboursement complet en échange du retour des marchandises, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer les marchandises ;

- 2° La réparation ou le remplacement des marchandises a lieu après un délai de trente jours ;

- 3° La réparation ou le remplacement des marchandises cause un inconvénient majeur au consommateur, en particulier lorsque celui-ci supporte définitivement les frais de retour ou d'enlèvement des marchandises non conformes, ou s'il supporte les frais d'installation des marchandises réparées ou remplacées ;

- 4° La non-conformité des marchandises persiste malgré la tentative infructueuse du vendeur d'assurer la conformité.

Le consommateur a également droit à une réduction de prix ou à la résiliation du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction de prix immédiate ou la résiliation du contrat. Dans ce cas, le consommateur n'est pas tenu de demander au préalable la réparation ou le remplacement des marchandises.

Le consommateur n'a pas le droit d'annuler la vente si le défaut de conformité est mineur. Toute période pendant laquelle les marchandises sont hors service pour réparation ou remplacement suspend la

garantie qui restait jusqu'à la livraison des marchandises réparées.

Les droits ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du Code de la consommation. Un vendeur qui agit de mauvaise foi pour entraver la mise en œuvre de la garantie légale de conformité est passible d'une amende civile pouvant atteindre 300 000 €, qui peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen (Article L. 241-5 du Code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale contre les vices cachés en vertu des articles 1641 à 1649 du Code civil, pour une durée de deux ans à compter de la découverte du vice. Cette garantie donne droit au consommateur à une réduction de prix si les marchandises sont conservées, ou à un remboursement intégral en cas de retour des marchandises.

Cette garantie commerciale ne confère aucun droit supplémentaire au-delà de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-1 à L. 217-32 du Code de la consommation. Cette garantie commerciale n'affecte pas les droits et recours des consommateurs en vertu de la garantie légale de conformité. Enfin, la clause de limitation de responsabilité ne s'applique pas aux consommateurs français en cas de manquement à l'une des obligations de Luxottica.

POUR LES CONSOMMATEURS EN ALLEMAGNE

La présente garantie n'affecte pas vos droits statutaires et vos recours en vertu de la loi allemande. Vous avez le droit d'exercer ces droits statutaires et recours sans frais. La présente garantie s'applique en complément de toute garantie contractuelle et/ou statutaire applicable et ne limite aucun de vos droits statutaires et recours contre Luxottica, le revendeur, ou tout autre droit obligatoire et recours en vertu du droit allemand ou de l'UE.

POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS

POUR LES ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI NE PEUT ÊTRE EXCLUE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE POUR LES CONSOMMATEURS (LA « GARANTIE »).

POUR LES PRODUITS ACHETÉS EN CALIFORNIE :

Cette aide auditive Nuance Audio™ et ses accessoires sont garantis pour être spécifiquement adaptés à vos besoins particuliers en tant qu'acheteur. Si l'aide auditive n'est pas initialement adaptée à vos

besoins particuliers, elle peut être retournée au vendeur dans les 45 jours suivant la date de livraison initiale. Si vous retournez l'aide auditive, le vendeur l'ajustera, la remplacera ou remboursera rapidement le montant total payé. Cette garantie n'affecte pas les protections et recours dont vous disposez en vertu d'autres lois.

RETOURS ET ÉCHANGES :

Si vous avez acheté des produits Nuance Audio™ depuis une bannière EssilorLuxottica, vous pouvez les retourner dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat, ou dans un délai plus long expressément prévu par la loi en vigueur ou par la bannière EssilorLuxottica. Les produits Nuance Audio™ achetés auprès d'autres revendeurs doivent être retournés à ces revendeurs conformément à leurs politiques de retour. Pour plus d'informations sur les retours d'EssilorLuxottica, rendez-vous sur : <http://www.nuanceaudio.com/en-us/c/support/shipping-and-returns>.

GARANTÍA LIMITADA DE LUXOTTICA

Esta garantía limitada al consumidor (la «Garantía») la proporciona Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milán, Italia («Luxottica»). Esta Garantía cubre los defectos y fallos de funcionamiento del Producto Luxottica al que acompaña. La Garantía tiene una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto (el «Periodo de garantía limitada»). Sin embargo, si el Producto se adquiere dentro de la UE, el Reino Unido o la AELC, el Periodo de garantía limitada será de dos (2) años. Esta Garantía solo se aplica a aquellos países en los que Nuance se comercializa y cuenta con asistencia técnica oficial, es decir, países en los que el producto está certificado y Luxottica está autorizada para distribuirlo («Territorio cubierto por la garantía»). Garantizamos que el Producto, en condiciones normales y de uso previsto, funcionará de acuerdo con las especificaciones técnicas o la documentación que lo acompaña (la «Funcionalidad garantizada») durante el Periodo de garantía limitada. Para evitar dudas, cualquier servicio que sea necesario para lograr la Funcionalidad garantizada podrá actualizarse, modificarse o limitarse, siempre y cuando siga manteniendo (o superando) la Funcionalidad garantizada. Esta Garantía no es válida para productos que hayan sido adquiridos en cualquier otro lugar que no sea Luxottica o un distribuidor autorizado. Esta Garantía solo es válida con un justificante de compra que muestre claramente la fecha de compra. Si nos envía un Producto sin un justificante de compra válido, nos reservamos el derecho de devolverle el Producto a su cargo, sujeto a prepago, o, si dichos gastos no se pagan por adelantado, conservaremos el Producto durante treinta (30) días para que lo recoja. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros derechos en virtud de las leyes o normativas de protección al consumidor del país en el que adquirió el producto o, si es diferente, del país en el que se encuentra, siempre que este producto se comercialice oficialmente allí en el momento en que se necesite el servicio de garantía. Tales derechos varían de un estado a otro y de un país a otro. Los beneficios que confiere esta Garantía son adicionales y no afectan a los derechos y recursos que otorgan las leyes y normativas de protección al consumidor (incluidas, entre otras, las leyes nacionales que implementan la Directiva 1999/44/CE y la Directiva 2019/771).

Tiene derecho a obtener soluciones sin coste alguno en caso de que el Producto no cumpla con los requisitos establecidos en la legislación del Territorio cubierto por la garantía. Las demás soluciones disponibles según la legislación del Territorio cubierto por la garantía no se ven afectadas por esta Garantía. Para obtener información completa sobre sus derechos según la legislación del Territorio cubierto por la garantía, consulte a continuación y/o póngase en contacto con su organización local de derechos del consumidor/oficina de atención al ciudadano. Acceda a www.nuanceaudio.com para obtener información sobre los países en los que Luxottica ofrece soporte y para conocer información útil sobre el servicio y los datos de contacto. El servicio de asistencia técnica ofrecido por Luxottica consiste en ayudar a diagnosticar y resolver problemas relacionados con defectos del Producto. Tenga en cuenta que, al ponerse en contacto con Luxottica por teléfono, es posible que se apliquen tarifas de larga distancia, dependiendo de la zona desde la que llame.

REGISTRO

No es necesario registrar el producto para que se aplique la cobertura de esta Garantía, pero algunos productos Luxottica requieren una conexión periódica a una cuenta en línea para garantizar su pleno funcionamiento.

CÓMO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Si tiene algún problema con su Producto, salvo que se indique lo contrario en otra parte de esta Garantía y salvo lo dispuesto por la legislación estatal aplicable, para realizar una reclamación de garantía, debe devolver su Producto al distribuidor autorizado al que se lo compró, junto con el justificante de compra. Visite www.nuanceaudio.com para obtener información útil sobre el servicio y los datos de contacto. Si su reclamación de garantía se considera válida y confirmamos que existe un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta Garantía, se determinará la solución adecuada. Dependiendo de las circunstancias, podremos tomar una de las siguientes medidas: i) reparar el Producto, solo cuando la reparación sea técnicamente viable (dado el alto contenido tecnológico del Producto, la única reparación disponible es la sustitución de la lente); (ii) sustituir el Producto; o (iii) reembolsar el precio de compra pagado por el Producto, si no es posible o apropiada ni la reparación ni la sustitución. Sin perjuicio de sus derechos en virtud de las leyes locales aplicables del Territorio de cobertura de la

garantía, la elección de la solución corresponde a la Empresa. Sin perjuicio de sus derechos en virtud de cualquier legislación local, si determinamos que un Producto debe ser sustituido, la sustitución podrá ser por un Producto nuevo, reacondicionado o remanufacturado. El Periodo de garantía limitada se amplía por un tiempo equivalente al tiempo durante el cual hemos tenido el Producto en nuestro poder para cumplir con la garantía, tal y como se ha descrito anteriormente. Salvo los derechos y recursos que le correspondan en virtud de las leyes locales, el suministro de un Producto reparado o sustituido no reinicia ni amplía de ningún modo el Periodo de garantía limitada. Es posible que no le devolvamos el Producto original. Si su reclamación de garantía no se considera válida, nos reservamos el derecho de devolverle el Producto a su cargo, sujeto a prepago, o, si dichos gastos no se pagan por adelantado, conservaremos el Producto durante treinta (30) días para que lo recoja antes de proceder a su eliminación. Salvo en la medida en que la ley exija lo contrario, cualquier gasto en que incurra al devolver el Producto para su evaluación en garantía correrá a cargo de Luxottica. Si necesita devolver su producto a Luxottica, se le proporcionará una etiqueta prepagada. Si la reclamación de garantía se considera inválida y no encontramos ningún defecto o fallo de funcionamiento cubierto por esta Garantía, nos pondremos en contacto con usted para ver si desea que realicemos las reparaciones a su cargo y, en cualquier caso, se le cobrará el transporte de salida para la devolución de su Producto según las tarifas de envío estándar de Luxottica.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y LUXOTTICA NO SE HACE RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE: LA ENTREGA O INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, LOS GASTOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO Y/O EL AJUSTE DE LOS CONTROLES DEL CLIENTE EN EL PRODUCTO. DAÑOS CAUSADOS POR USO INDEBIDO, MAL USO, ACCIDENTES, INCENDIOS, ROBOS, DESAPARICIONES, EXTRAVÍOS, FLUCTUACIONES, SOBRETENSIONES, CONEXIONES A VOLTAJE INADECUADO O VOLTAJE ELÉCTRICO INCORRECTO, VIRUS, MALWARE, CONDUCTA IMPUDENTE, DOLOSA O INTENCIONADA, O NEGLIGENCIA. DAÑOS CAUSADOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE **AUTORIZADO POR LUXOTTICA.**

DAÑOS CAUSADOS POR UN USO NO CONFORME CON LAS INSTRUCCIONES/DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO. DAÑOS CAUSADOS POR NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES/DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO O POR NO REALIZAR LA LIMPIEZA O EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. DAÑOS CAUSADOS POR LA COMBINACIÓN DEL PRODUCTO CON OTROS PRODUCTOS, ACCESORIOS, PIEZAS O COMPONENTES QUE NO SEAN DE LA MARCA LUXOTTICA, O POR EL USO DE PRODUCTOS, EQUIPOS, SISTEMAS, UTILIDADES, SERVICIOS, SOFTWARE, SUMINISTROS DE PIEZAS, ACCESORIOS, APLICACIONES, INSTALACIONES, REPARACIONES, CABLEADO EXTERNO O CONECTORES NO SUMINISTRADOS O AUTORIZADOS POR LUXOTTICA QUE DAÑEN EL PRODUCTO. PROBLEMAS DE SEÑAL, PROBLEMAS DE RECEPCIÓN Y DISTORSIÓN RELACIONADOS CON RUIDO, ECO, INTERFERENCIAS U OTROS PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN Y ENTREGA DE SEÑAL. CUALQUIER EQUIPO O COMPONENTE QUE NO ESTUVIERA INCLUIDO EN SU PRODUCTO O CON ÉL TAL Y COMO SE VENDIÓ ORIGINALMENTE. DESGASTE NORMAL. DAÑOS CAUSADOS COMO RESULTADO DE UN TRANSPORTE O EMBALAJE INADECUADOS AL DEVOLVER EL PRODUCTO A LUXOTTICA O A UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. DAÑOS CAUSADOS POR MODIFICACIONES O ADAPTACIONES QUE PUEDAN SER NECESARIAS PARA QUE UN PRODUCTO FUNCIONE EN CUALQUIER PAÍS DISTINTO DE AQUEL PARA EL QUE HA SIDO DISEÑADO, FABRICADO, APROBADO Y/O AUTORIZADO, O LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO QUE RESULTE EN DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE DICHAS MODIFICACIONES. DAÑOS A LOS PRODUCTOS EN LOS QUE SE HAYA ELIMINADO, BORRADO, DESFIGURADO, ALTERADO O HECHO ILEGIBLE EL CÓDIGO ANTIFALSIFICACIÓN (O EQUIVALENTE). Esta Garantía no incluye ninguna garantía específica de que el Producto esté libre de errores. Excepto en Estados Unidos y en la medida en que lo prohíba cualquier ley aplicable en cualquier otro país, esta Garantía quedará anulada si se devuelve un Producto con etiquetas retiradas, dañadas o manipuladas, o con cualquier alteración (incluida la retirada no autorizada de cualquier componente o cubierta externa).

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

EXCEPTO EN LA UE, LA AELC Y EL REINO UNIDO, Y SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA CUALQUIER LEY APLICABLE EN CUALQUIER OTRO PAÍS, SE RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN.

SOLO PARA ESTADOS UNIDOS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE NO PUEDA SER RECHAZADA QUEDA EXPRESAMENTE LIMITADA A LA DURACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA. SI USTED ES UN CONSUMIDOR SUJETO A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE QUEBEC, LA RENUNCIA DE GARANTÍA CONTENIDA EN ESTA SECCIÓN NO LIMITA SUS DERECHOS Y RECURSOS EN VIRTUD DE DICHA LEY, INCLUIDO EL DERECHO A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN VIRTUD DE CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS LEGALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 34 A 54 DE DICHA LEY.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA CUALQUIER LEY APLICABLE, LUXOTTICA NO SERÁ RESPONSABLE, EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA, DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEY, LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LUXOTTICA POR CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE SURJA DE ESTA GARANTÍA O ESTÉ RELACIONADA CON LA MISMA SE LIMITA AL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR USTED POR EL PRODUCTO, MÁS LOS INTERESES PERMITIDOS POR LA LEY, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA RECLAMACIÓN. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LUXOTTICA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE ESCAPEN A SU CONTROL, COMO CASOS DE FUERZA MAYOR, VIRUS, DAÑOS MATERIALES, PÉRDIDA DE USO, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS U OTROS DAÑOS CONSECUENCIALES, PUNITIVOS O ESPECIALES, CUALQUIERA QUE SEA SU CAUSA, POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, CONTRATO O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA).

Esta Garantía no afecta a sus derechos legales en virtud de cualquier ley estatal y nacional aplicable que regule la venta de productos de consumo. Algunos países, estados, provincias y territorios (incluidos la UE, la AELC y el Reino Unido) no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, la exclusión o limitación de determinados daños o tipos de pérdidas, ni permiten limitaciones en la duración de una garantía o condición implícita, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones descritas en esta Garantía no se apliquen en su caso.

PARA CONSUMIDORES EN AUSTRALIA

Para las compras realizadas en una tienda minorista operada por Luxottica en Australia, el proveedor es Luxottica Retail Australia Pty Ltd (ABN 26 000 025 758), con domicilio social en level 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Para las compras realizadas a través del canal mayorista, el proveedor es Luxottica South Pacific Holdings Pty Ltd (ABN 58 104 629 772), con domicilio social en level 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Nuestros productos cuentan con garantías que no pueden excluirse en virtud de la Ley del Consumidor de Australia. Tiene derecho a una sustitución o reembolso por un fallo grave y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se reparen o sustituyan los productos si estos no son de una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo grave. Sus derechos y los beneficios que le otorga esta garantía se suman a otros derechos y recursos legales que le asisten en virtud de la Ley del Consumidor de Australia y otras leyes.

PARA CONSUMIDORES EN ITALIA

Esta Garantía es una garantía voluntaria ofrecida por Luxottica de conformidad con el artículo 135-quinquies del Decreto Legislativo n.º 206, de 6 de septiembre de 2005 (el «Código del Consumidor»). Además de esta Garantía, los consumidores tienen los derechos establecidos en los artículos 128-135-septies del Código del Consumidor, que se aplican durante dos (2) años a partir de la fecha de entrega del Producto. Por consiguiente, esta Garantía no afecta a los derechos legales de los consumidores en virtud de la garantía legal de conformidad. Para obtener más información sobre sus derechos en virtud de los artículos 128 a 135-septies del Código del Consumidor, visite www.nuanceaudio.com.

PARA CONSUMIDORES EN FRANCIA

El consumidor dispone de un plazo de dos años a partir de la entrega del producto para obtener la aplicación de la garantía legal de conformidad en caso de falta de conformidad. Durante este plazo, el consumidor solo tiene que demostrar la existencia de la falta de conformidad y no la fecha en que se produjo. Cuando el contrato de venta de productos prevea el suministro continuo de contenidos digitales o de un servicio digital durante un periodo superior a dos años, la garantía legal se aplicará

a dichos contenidos o servicios digitales durante todo el periodo de suministro especificado. Durante este periodo, el consumidor solo tendrá que demostrar la existencia de la falta de conformidad que afecta a los contenidos o servicios digitales, y no la fecha en que se produjo.

La garantía legal de conformidad exige al profesional, cuando proceda, proporcionar todas las actualizaciones necesarias para mantener la conformidad de los productos.

La garantía legal de conformidad da derecho al consumidor a que se repare o sustituya el producto en un plazo de treinta días a partir de su solicitud, sin coste alguno y sin inconvenientes significativos para él. Si el producto se repara en virtud de la garantía legal de conformidad, el consumidor se beneficia de una prórroga de seis meses de la garantía inicial.

Si el consumidor solicita la reparación de los productos, pero el vendedor insiste en su sustitución, la garantía legal de conformidad se renueva por un periodo de dos años a partir de la fecha de sustitución de los productos.

El consumidor podrá obtener una reducción del precio de compra y conservar los productos o bien rescindir el contrato y recibir un reembolso completo a cambio de la devolución de los productos, si:

1.º El profesional se niega a reparar o sustituir los productos;

2.º La reparación o sustitución de los productos se produce después de un plazo de treinta días;

3.º La reparación o sustitución de los productos causa un inconveniente importante al consumidor, en particular cuando el consumidor asume definitivamente los gastos de devolución o retirada de los productos no conformes, o si asume los gastos de instalación de los productos reparados o sustituidos;

4.º La falta de conformidad de los productos persiste a pesar del intento infructuoso del vendedor de garantizar la conformidad.

Asimismo, el consumidor tendrá derecho a una reducción del precio o a la resolución del contrato cuando la falta de conformidad sea tan grave que justifique una reducción inmediata del precio o la resolución del contrato. En este caso, no será necesario que el consumidor solicite previamente la reparación o la sustitución de los productos.

El consumidor no tiene derecho a cancelar la venta si la falta de conformidad es menor. Cualquier periodo durante el cual los productos estén fuera de servicio para su reparación o sustitución suspende

la garantía que quedaba hasta la entrega de los productos reparados. Los derechos anteriores se derivan de la aplicación de los artículos L. 217-1 a L. 217-32 del Código del Consumidor. Un vendedor que actúe de mala fe para obstaculizar la aplicación de la garantía legal de conformidad podrá ser sancionado con una multa civil de hasta 300 000 €, que podrá incrementarse hasta el 10% del volumen de negocios medio anual (artículo L. 241-5 del Código del Consumidor). El consumidor también se beneficia de la garantía legal contra vicios ocultos, de conformidad con los artículos 1641 a 1649 del Código Civil, durante un periodo de dos años a partir del descubrimiento del defecto. Esta garantía da derecho al consumidor a una reducción del precio si conserva los productos o a un reembolso completo tras la devolución de los mismos. Esta garantía comercial no otorga ningún derecho adicional más allá de la garantía legal de conformidad prevista en los artículos L. 217-1 a L. 217-32 del Código del Consumidor. Esta garantía comercial no afecta a los derechos y recursos de los consumidores en virtud de la garantía legal de conformidad. Por último, la cláusula de limitación de responsabilidad no se aplica a los consumidores franceses en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de Luxottica.

PARA CONSUMIDORES EN ALEMANIA

Esta Garantía no afecta a los derechos y recursos legales que le asisten en virtud de la legislación alemana. Tiene derecho a ejercer esos derechos y recursos legales de forma gratuita. Esta Garantía se aplica además de cualquier disposición contractual y/o legal aplicable en materia de garantía y responsabilidad, y no limita ninguno de sus derechos y recursos legales frente a Luxottica, el minorista o cualquier otro derecho y recurso obligatorio en virtud de la legislación alemana o de la UE.

PARA CONSUMIDORES EN EE. UU.

SOLO PARA ESTADOS UNIDOS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE NO PUEDA SER RECHAZADA QUEDA EXPRESAMENTE LIMITADA A LA DURACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR (LA «GARANTÍA»).

PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN CALIFORNIA:

Este audífono Nuance Audio™ y sus accesorios cuentan con una garantía de adecuación específica a las necesidades particulares del comprador. Si el audífono no se ajusta en un primer momento a sus necesidades particulares, puede devolverlo al vendedor en un plazo de 45 días a partir de la fecha

de entrega inicial. Si devuelve el audífono, el vendedor lo ajustará o lo sustituirá, o le reembolsará sin demora el importe total pagado. Esta garantía no afecta a las protecciones y recursos que le asisten en virtud de otras leyes.

DEVOLUCIONES Y CAMBIOS:

Si ha comprado productos Nuance Audio™ en una tienda de EssilorLuxottica, puede devolverlos en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra, o en cualquier otro plazo más largo que establezca expresamente la legislación aplicable o la tienda específica de EssilorLuxottica. Los productos Nuance Audio™ comprados a través de minoristas que no pertenezcan a EssilorLuxottica deben devolverse a dichos minoristas de acuerdo con sus políticas de devolución. Para obtener más información sobre las devoluciones de EssilorLuxottica, visite:

<http://www.nuanceaudio.com/en-us/c/support/shipping-and-returns>.

LUXOTTICA GARANTIEBEGRENZUNG

Diese beschränkte Verbrauchergarantie (die „Garantie“) wird von der Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Mailand, Italien („Luxottica“) bereitgestellt. Diese Garantie deckt Mängel und Fehlfunktionen des zugehörigen Luxottica-Produkts ab. Die Garantie gilt für ein (1) Jahr ab Kaufdatum des Produkts (der „begrenzte Garantiezeitraum“). Wenn Sie das Produkt jedoch innerhalb der EU, dem UK oder der EFTA kaufen, beträgt die begrenzte Garantiezeit zwei (2) Jahre.

Diese Garantie gilt nur für Länder, in denen Nuance offiziell vertrieben und unterstützt wird, d. h. Länder, in denen das Produkt zertifiziert ist und Luxottica zum Vertrieb berechtigt ist („Garantieabdeckungsgebiet“). Wir garantieren, dass das Produkt bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung während des begrenzten Garantiezeitraums gemäß den technischen Spezifikationen oder der beiliegenden Produktdokumentation (die „garantierte Funktionalität“) funktioniert. Um Zweifel auszuschließen, können alle Dienstleistungen, die zur Erreichung der garantierten Funktionalität erforderlich sind, aktualisiert, geändert oder eingeschränkt werden können, solange sie die garantierte Funktionalität weiterhin aufrechterhalten (oder übertreffen). Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht bei Luxottica oder einem autorisierten Händler erworben wurden. Diese Garantie ist nur mit einem Kaufbeleg gültig, der das Kaufdatum eindeutig angibt. Wenn Sie uns ein Produkt ohne gültigen Kaufbeleg zusenden, behalten wir uns das Recht vor, das Produkt auf Ihre Kosten und gegen Vorauszahlung an Sie zurückzusenden. Werden diese Kosten nicht im Voraus bezahlt, bewahren wir das Produkt dreißig (30) Tage lang zur Abholung durch Sie auf. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise stehen Ihnen auch andere Rechte gemäß den Verbraucherschutzgesetzen oder -vorschriften des Landes zu, in dem das Produkt gekauft wurde, oder, falls abweichend, Ihres Wohnsitzlandes, vorausgesetzt, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Garantieservices dort offiziell vertrieben wird. Diese Rechte variieren von Staat zu Staat und von Land zu Land. Die durch diese Garantie gewährten Vorteile gelten zusätzlich zu den Rechten und Rechtsmitteln, die durch solche Verbraucherschutzgesetze und -vorschriften gewährt werden (einschließlich, aber

nicht beschränkt auf nationale Gesetze zur Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG und der Richtlinie 2019/771), und haben keinen Einfluss auf diese. Sie haben Anspruch auf kostenlose Abhilfe, wenn das Produkt nicht den Anforderungen entspricht, die in den Gesetzen des Garantieabdeckungsgebiets festgelegt sind. Die anderen Rechtsmittel, die Ihnen gemäß den Gesetzen im Garantieabdeckungsgebiet zur Verfügung stehen, sind von dieser Garantie nicht betroffen. Ausführliche Informationen zu Ihren Rechten gemäß den Gesetzen im Garantieabdeckungsgebiet finden Sie unten und/oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Verbraucherrechtsorganisation/Bürgerberatungsstelle. Bitte besuchen Sie uns unter www.nuanceaudio.com für Informationen über die Länder, die Luxottica unterstützt, und um hilfreiche Service- und Kontaktdaten zu erhalten. Der Umfang des von Luxottica angebotenen technischen Supports umfasst die Unterstützung bei der Diagnose und Behebung von Problemen mit Produktfehlern. Bitte beachten Sie, dass bei einer telefonischen Kontaktaufnahme mit Luxottica je nach Ihrem Anrufgebiet Ferngesprächsgebühren anfallen können.

REGISTRIERUNG

Die Produktregistrierung ist keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Garantie, jedoch erfordern einige Luxottica-Produkte eine regelmäßige Verbindung zu einem Online-Konto, um die volle Funktionalität zu gewährleisten.

WIE MAN EINEN GARANTIEANTRAG STELLT

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, müssen Sie, sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich anders angegeben und vorbehaltlich der Bestimmungen des geltenden Landesrechts, Ihr Produkt zusammen mit Ihrem Kaufbeleg an den autorisierten Händler zurückgeben, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um einen Garantieanspruch geltend zu machen. Bitte besuchen Sie www.nuanceaudio.com, um hilfreiche Service- und Kontaktdaten zu erhalten.

Wenn Ihr Garantieanspruch als berechtigt angesehen wird und wir einen von dieser Garantie abgedeckten Defekt oder eine Fehlfunktion bestätigen, wird die geeignete Abhilfe festgelegt. Je nach den Umständen können wir eine der folgenden Maßnahmen ergreifen: i) Reparatur des Produkts, sofern eine Reparatur technisch möglich ist (angesichts des hohen technologischen Gehalts des Produkts ist die einzige verfügbare Reparatur der Austausch der Linse); oder (ii) Ersatz des Produkts;

oder (iii) Rückerstattung des für das Produkt gezahlten Kaufpreises, wenn weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich oder angemessen ist. Vorbehaltlich Ihrer Rechte gemäß den geltenden lokalen Gesetzen des Garantieabdeckungsgebiets liegt die Wahl der Abhilfemaßnahme beim Unternehmen. Vorbehaltlich Ihrer Rechte gemäß den lokalen Gesetzen kann der Ersatz, wenn wir feststellen, dass ein Produkt ersetzt werden muss, ein neues, generalüberholtes oder wiederaufbereitetes Produkt sein. Die begrenzte Garantiefrist verlängert sich um den Zeitraum, in dem wir das Produkt zur Erfüllung der Garantie, wie oben beschrieben, in unserem Besitz hatten. Vorbehaltlich Ihrer Rechte und Rechtsmittel, die Ihnen nach den geltenden lokalen Gesetzen zustehen, führt die Bereitstellung eines reparierten oder ersetzten Produkts nicht zu einem Neustart oder einer Verlängerung des beschränkten Garantiezeit. Wir können das ursprüngliche Produkt nicht an Sie zurückgeben. Wenn Ihr Garantieanspruch als ungültig erachtet wird, behalten wir uns das Recht vor, das Produkt auf Ihre Kosten und gegen Vorauszahlung an Sie zurückzusenden. Wenn diese Kosten nicht im Voraus bezahlt werden, bewahren wir das Produkt dreißig (30) Tage lang zur Abholung durch Sie auf, bevor es entsorgt wird. Sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, werden alle Kosten, die Ihnen durch die Rücksendung des Produkts zur Garantieprüfung entstehen, von Luxottica übernommen. Wenn Sie Ihr Produkt an Luxottica zurücksenden müssen, erhalten Sie ein vorfrankiertes Etikett. Wenn der Garantieanspruch als ungültig erachtet wird und wir keinen Mangel oder keine Fehlfunktion feststellen, die unter diese Garantie fallen, werden wir Sie kontaktieren, um zu erfahren, ob Sie möchten, dass wir Reparaturen auf Ihre Kosten durchführen. In jedem Fall werden Ihnen die Versandkosten für die Rücksendung Ihres Produkts gemäß den Standardversandtarifen von Luxottica in Rechnung gestellt.

EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE

DIESE GARANTIE GILT NICHT FÜR FOLGENDES, UND LUXOTTICA ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG DAFÜR: LIEFERUNG ODER INSTALLATION ODER ARBEITSKOSTEN FÜR DIE EINRICHTUNG DES PRODUKTS UND/ODER DIE ANPASSUNG DER KUNDENSTEUERUNGEN AM PRODUKT. SCHÄDEN DURCH MISSBRAUCH, UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG, UNFÄLLE, BRAND, DIEBSTAHL, VERLUST, VERLEGEN, SCHWANKUNGEN UND STROMÜBERLASTUNG, FALSCHES SPANNUNGSANSCHLÜSSE ODER FALSCHES STROMSPANNUNG, VIREN,

MALWARE, RÜCKSICHTSLOSES, VORSÄTZLICHES ODER ABSICHTLICHES VERHALTEN ODER FAHRLÄSSIGKEIT. SCHÄDEN, DIE DURCH DIE WARTUNG DES PRODUKTS ENTSTANDEN SIND, DAS NICHT VON LUXOTTICA VORAB GENEHMIGT WURDE. SCHÄDEN, DIE DURCH EINE NICHT DEN PRODUKTANWEISUNGEN/DOKUMENTATIONEN ENTSPRECHENDE VERWENDUNG ENTSTEHEN. SCHÄDEN, DIE DURCH DIE NICHTBEACHTUNG DER PRODUKTANWEISUNGEN/DOKUMENTATION ODER DURCH DIE NICHTDURCHFÜHRUNG VON REINIGUNG ODER VORBEUGENDER WARTUNG ENTSTEHEN. SCHÄDEN, DIE DURCH DIE KOMBINATION DES PRODUKTS MIT ANDEREN PRODUKTEN, ZUBEHÖRTEILEN, TEILEN ODER KOMPONENTEN, DIE NICHT VON LUXOTTICA STAMMEN, ODER DURCH DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, GERÄTEN, SYSTEMEN, DIENSTLEISTUNGEN, SOFTWARE, TEILELIEFERUNGEN, ZUBEHÖR, ANWENDUNGEN, INSTALLATIONEN, REPARATUREN, EXTERNEN VERKABELUNGEN ODER STECKERN, DIE NICHT VON LUXOTTICA DELIEFERT ODER AUTORISIERT WURDEN UND DAS PRODUKT BESCHÄDIGEN. SIGNALPROBLEME, EMPFANGSSTÖRUNGEN UND VERZERRUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT RAUSCHEN, ECHO, INTERFERENZEN ODER ANDEREN PROBLEMEN BEI DER SIGNALÜBERTRAGUNG UND -ÜBERMITTLUNG. ALLE GERÄTE ODER KOMPONENTEN, DIE NICHT IM URSPRÜNGLICH VERKAUFTEN PRODUKT ENTHALTEN WAREN. NORMALER VERSCHLEISS. SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSEN TRANSPORT ODER UNSACHGEMÄSSE VERPACKUNG BEI DER RÜCKSENDUNG DES PRODUKTS AN LUXOTTICA ODER EINEN MIT DER RÜCKNAHME BEAUFTRAGTEN HÄNDLER ENTSTANDEN SIND. SCHÄDEN, DIE DURCH ÄNDERUNGEN ODER ANPASSUNGEN ENTSTEHEN, DIE ERFORDERLICH SEIN KÖNNEN, UM EIN PRODUKT IN EINEM ANDEREN LAND ALS DEM LAND ZU BETREIBEN, FÜR DAS ES ENTWICKELT, HERGESTELLT, ZUGELASSEN UND/ODER GENEHMIGT WURDE, ODER REPARATUREN DES PRODUKTS, DIE ZU SCHÄDEN INFOLGE DIESER MODIFIKATIONEN FÜHREN. BESCHÄDIGUNG VON PRODUKTEN, BEI DENEN DER FÄLSCHUNGSSCHUTZCODE (ODER EIN ÄHNLICHER CODE) ENTFERNT, GELÖSCHT, VERUNSTALTET, VERÄNDERT ODER UNLESERLICH GEMACHT WURDE.

Diese Garantie umfasst keine spezifischen Garantien dafür, dass das Produkt fehlerfrei ist. Mit Ausnahme der Bestimmungen in den Vereinigten Staaten und soweit dies nicht durch geltende lokale Gesetze in

anderen Ländern verboten ist, erlischt die Garantie, wenn das Produkt mit entfernten, beschädigten oder manipulierten Etiketten zurückgegeben wird oder wenn es in irgendeiner Weise verändert wurde (einschließlich der unbefugten Entfernung von Komponenten oder Außenverkleidungen).

STILLSCHWEIGENDE GARANTIE

AUSGENOMMEN IN DER EU, DER EFTA UND DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH UND SOWEIT DIES DURCH GELTENDES RECHT IN EINEM ANDEREN LAND UNTERSAGT IST, WIRD JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER AUSGESCHLOSSEN. NUR FÜR DIE USA: JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, DIE NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KANN, IST AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DER BEGRENZTEN GARANTIEFRIST BESCHRÄNKT, WIE SIE IN DIESER GARANTIE FESTGELEGT IST. WENN SIE EIN VERBRAUCHER SIND, DER DEM VERBRAUCHERSCHUTZGESETZ VON QUEBEC UNTERLIEGT, BESCHRÄNKT DER IN DIESEM ABSCHNITT ENTHALTENE HAFTUNGSAUSSCHLUSS NICHT IHRE RECHTE UND RECHTSMITTEL GEMÄSS DIESEM GESETZ, EINSCHLIESSLICH DES RECHTS, ANSPRÜCHE GEMÄSS DEN GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN GEMÄSS DEN ABSCHNITTEN 34 BIS 54 DIESES GESETZES GELTEND ZU MACHEN.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

SOFERN DIES NICHT DURCH GELTENDES RECHT UNTERSAGT IST, HAFTET LUXOTTICA IM RAHMEN DIESER GARANTIE NICHT FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DER VERLETZUNG EINER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ENTSTEHEN. SOFERN DIES NICHT GESETZLICH UNTERSAGT IST, IST DIE HÖCHSTHAFTUNG VON LUXOTTICA FÜR ANSPRÜCHE, DIE SICH AUS DIESER GARANTIE ERGEBEN ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHEN, AUF DEN VON IHNEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN KAUFFPREIS ZUZÜGLICH DER GESETZLICH ZULÄSSIGEN ZINSEN BESCHRÄNKT, UNABHÄNGIG VON DER FORM DES ANSPRUCHS. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, HAFTET LUXOTTICA NICHT FÜR EREIGNISSE, DIE AUSSERHALB SEINER KONTROLLE LIEGEN, WIE Z. B. HÖHERE GEWALT, VIREN, SACHSCHÄDEN, NUTZUNGS-AUSFALL, UNTERBRECHUNGEN DER AKTIVITÄT, ENTGANGENE GEWINNE,

DATENVERLUSTE ODER ANDERE FOLGESCHÄDEN, STRAFSCHADENSERSATZ ODER BESONDERE SCHÄDEN, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE, DIE AUF EINE VERLETZUNG DIESER GARANTIE, EINES VERTRAGS ODER EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte gemäß den geltenden staatlichen und nationalen Gesetzen zum Verkauf von Konsumgütern.

In einigen Ländern, Bundesstaaten, Provinzen und Territorien (einschließlich der EU, der EFTA und des Vereinigten Königreichs) ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden, der Ausschluss oder die Beschränkung bestimmter Schäden oder Arten von Verlusten oder die Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Gewährleistung oder Bedingung nicht zulässig, sodass die in dieser Garantie beschriebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie gelten.

FÜR VERBRAUCHER IN AUSTRALIEN

Bei Käufen in einem von Luxottica in Australien betriebenen Einzelhandelsgeschäft ist der Lieferant Luxottica Retail Australia Pty Ltd (ABN 26 000 025 758) mit Sitz in Level 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Für Käufe über den Großhandelskanal: Der Lieferant ist Luxottica South Pacific Holdings Pty Ltd (ABN 58 104 629 772) mit Sitz in Level 34, 1 Denison Street, North Sydney, NSW, 2060. Unsere Waren werden mit Garantien geliefert, die gemäß dem australischen Verbraucherschutzgesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Mangel und auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben außerdem Anspruch auf Reparatur oder Austausch der Ware, wenn diese nicht von akzeptabler Qualität ist und der Mangel keinen wesentlichen Mangel darstellt. Ihre Rechte und die Ihnen unter dieser Garantie gewährten Vorteile ergänzen die anderen gesetzlichen Rechte und Rechtsmittel, die Sie nach dem australischen Verbraucherschutzgesetz und anderen Gesetzen haben.

FÜR VERBRAUCHER IN ITALIEN

Diese Garantie ist eine freiwillige Garantie, die von Luxottica gemäß Artikel 135-quinquies des Gesetzesdekrets Nr. 206 vom 6. September 2005 (dem „Verbraucherschutzgesetz“) gewährt wird. Zusätzlich zu dieser Garantie stehen den Verbrauchern die in den Artikeln 128-135-septies des

Verbraucherschutzgesetzes aufgeführten Rechte zu, die für zwei (2) Jahre ab dem Datum der Lieferung des Produkts gelten. Dementsprechend hat diese Garantie keinen Einfluss auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers in Bezug auf die gesetzliche Konformitätsgarantie. Für weitere Informationen zu Ihren Rechten gemäß den Artikeln 128–135-septies des Verbrauchergesetzes besuchen Sie bitte www.nuanceaudio.com.

FÜR VERBRAUCHER IN FRANKREICH

Der Verbraucher hat ab dem Zeitpunkt der Lieferung des Produkts zwei Jahre Zeit, um bei Vorliegen eines Konformitätsmangels die gesetzliche Konformitätsgarantie geltend zu machen. Innerhalb dieser Frist muss der Verbraucher lediglich das Vorliegen der Vertragswidrigkeit nachweisen, nicht jedoch den Zeitpunkt, zu dem sie eingetreten ist.

Wenn der Vertrag über den Verkauf von Waren die kontinuierliche Bereitstellung digitaler Inhalte oder einer digitalen Dienstleistung für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren vorsieht, erstreckt sich die gesetzliche Konformitätsgarantie auf diese Inhalte oder Dienstleistungen für die gesamte Dauer der vertraglich vorgesehenen Bereitstellung. Während dieses Zeitraums muss der Verbraucher lediglich das Vorliegen der Vertragswidrigkeit des digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung nachweisen, nicht jedoch den Zeitpunkt, zu dem diese eingetreten ist.

Die gesetzliche Konformitätsgarantie verpflichtet den Gewerbetreibenden, gegebenenfalls alle zur Aufrechterhaltung der Konformität der Waren erforderlichen Aktualisierungen vorzunehmen.

Die gesetzliche Konformitätsgarantie berechtigt den Verbraucher, die Ware innerhalb von dreißig Tagen nach seinem Antrag kostenlos und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten reparieren oder ersetzen zu lassen. Wird die Ware im Rahmen der gesetzlichen Konformitätsgarantie repariert, profitiert der Verbraucher von einer Verlängerung der ursprünglichen Garantie um sechs Monate.

Verlangt der Verbraucher die Reparatur der Ware, besteht der Verkäufer jedoch auf Ersatz, so verlängert sich die gesetzliche Konformitätsgarantie um zwei Jahre ab dem Zeitpunkt des Ersatzes der Ware.

Der Verbraucher kann eine Minderung des Kaufpreises erhalten, indem er die Ware behält, oder den Vertrag kündigen und im Gegenzug für die Rückgabe der Ware eine vollständige Rückerstattung erhalten, wenn Folgendes eintritt:

1° Der Gewerbetreibende weigert sich, die Waren zu reparieren oder zu ersetzen;

2° Die Reparatur oder der Ersatz der Waren erfolgt nach Ablauf einer Frist von dreißig Tagen.

3° Die Reparatur oder der Ersatz der Waren verursacht dem Verbraucher erhebliche Unannehmlichkeiten, insbesondere wenn er die Kosten für die Rücksendung oder die Abholung der nicht vertragsgemäßen Waren endgültig zu tragen hat oder wenn er die Kosten für den Einbau der reparierten oder ersetzten Waren zu tragen hat.

4° Die Nichtkonformität der Waren besteht trotz des erfolglosen Versuchs des Verkäufers, die Konformität sicherzustellen, weiterhin.

Der Verbraucher hat auch Anspruch auf eine Preisminderung oder Vertragsauflösung, wenn der Mangel so schwerwiegend ist, dass er eine sofortige Preisminderung oder Vertragsauflösung rechtfertigt. In diesem Fall ist der Verbraucher nicht verpflichtet, die Reparatur oder den Ersatz der Waren im Voraus anzufordern.

Der Verbraucher ist nicht berechtigt, den Verkauf zu stornieren, wenn der Mangel geringfügig ist. Jede Zeitspanne, in der die Waren zur Reparatur oder zum Austausch außer Betrieb sind, setzt die Garantie aus, die bis zur Lieferung der reparierten Waren noch bestand.

Die oben genannten Rechte ergeben sich aus der Anwendung der Artikel L. 217-1 bis L. 217-32 des Verbraucherschutzgesetzes.

Ein Verkäufer, der in böser Absicht handelt, um die Umsetzung der gesetzlichen Garantie für die Konformität zu behindern, kann mit einer zivilrechtlichen Geldbuße von bis zu 300.000 € belegt werden, die auf bis zu 10 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes erhöht werden kann (Artikel L. 241-5 des Verbrauchergesetzbuchs).

Der Verbraucher profitiert auch von der gesetzlichen Garantie gegen versteckte Mängel gemäß den Artikeln 1641 bis 1649 des Bürgerlichen Gesetzbuches, für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Feststellung des Mangels. Diese Garantie berechtigt den Verbraucher zu einem Preisnachlass, wenn die Waren behalten werden, oder zu einer vollständigen Rückerstattung bei Rückgabe der Ware.

Diese kommerzielle Garantie gewährt keine zusätzlichen Rechte über die gesetzliche Konformitätsgarantie hinaus, die in den Artikeln L. 217-1 bis L. 217-32 des Verbraucherschutzgesetzes vorgesehen ist. Diese

kommerzielle Garantie berührt nicht die Rechte und Rechtsmittel der Verbraucher im Rahmen der gesetzlichen Konformitätsgarantie. Schließlich gilt die Haftungsbeschränkungsklausel nicht für französische Verbraucher im Falle eines Verstoßes gegen eine der Verpflichtungen von Luxottica.

FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Ihre gesetzlichen Rechte und Ansprüche nach deutschem Recht bleiben von dieser Garantie unberührt. Sie haben das Recht, diese gesetzlichen Rechte und Rechtsmittel kostenlos auszuüben. Diese Garantie gilt zusätzlich zu allen geltenden vertraglichen und/oder gesetzlichen Gewährleistungs- und Haftungsbestimmungen und schränkt weder Ihre gesetzlichen Rechte und Rechtsmittel gegenüber Luxottica, dem Händler noch sonstige zwingende Rechte und Rechtsmittel nach deutschem oder EU-Recht ein.

FÜR VERBRAUCHER IN DEN USA

NUR FÜR DIE USA: JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, DIE NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KANN, IST AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DER BEGRENZTEN GARANTIEFRIST BESCHRÄNKT, WIE SIE IN DIESER BESCHRÄNKTEN VERBRAUCHERGARANTIE (DIE „GARANTIE“) FESTGELEGT IST.

Für in Kalifornien gekaufte Produkte:

Dieses Nuance Audio™-Hörgerät und sein Zubehör sind speziell auf die besonderen Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten. Wenn das Hörgerät zunächst nicht für Ihre speziellen Bedürfnisse geeignet ist, kann es innerhalb von 45 Tagen nach dem ursprünglichen Lieferdatum an den Verkäufer zurückgegeben werden. Wenn Sie das Hörgerät zurückgeben, wird der Verkäufer das Hörgerät entweder anpassen oder ersetzen oder Ihnen umgehend den gesamten Kaufpreis zurückerstatten. Diese Garantie beeinträchtigt nicht die Schutzmaßnahmen und Rechtsmittel, die Ihnen gemäß anderen Gesetzen zustehen.

Rückgaben und Umtausch:

Wenn Sie Nuance Audio™-Produkte über ein EssilorLuxottica-Banner gekauft haben, können Sie sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum oder innerhalb eines längeren Zeitraums, der durch geltendes Recht oder durch das EssilorLuxottica-Banner ausdrücklich vorgesehen ist, zurückgeben. Die über andere Einzelhändler gekauften Nuance Audio™-Produkte müssen an diese gemäß deren

Rückgaberrichtlinien zurückgegeben werden. Für weitere Informationen zu Retouren von EssilorLuxottica besuchen Sie bitte: <https://www.nuanceaudio.com/de-de/c/hilfe/versand-und-rückgabe>