



Primi passi: creazione dell'account, abbinamento, calibrazione



Contenuto della confezione

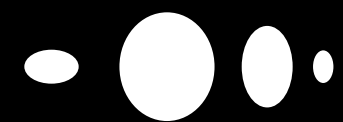

Contenuto della confezione

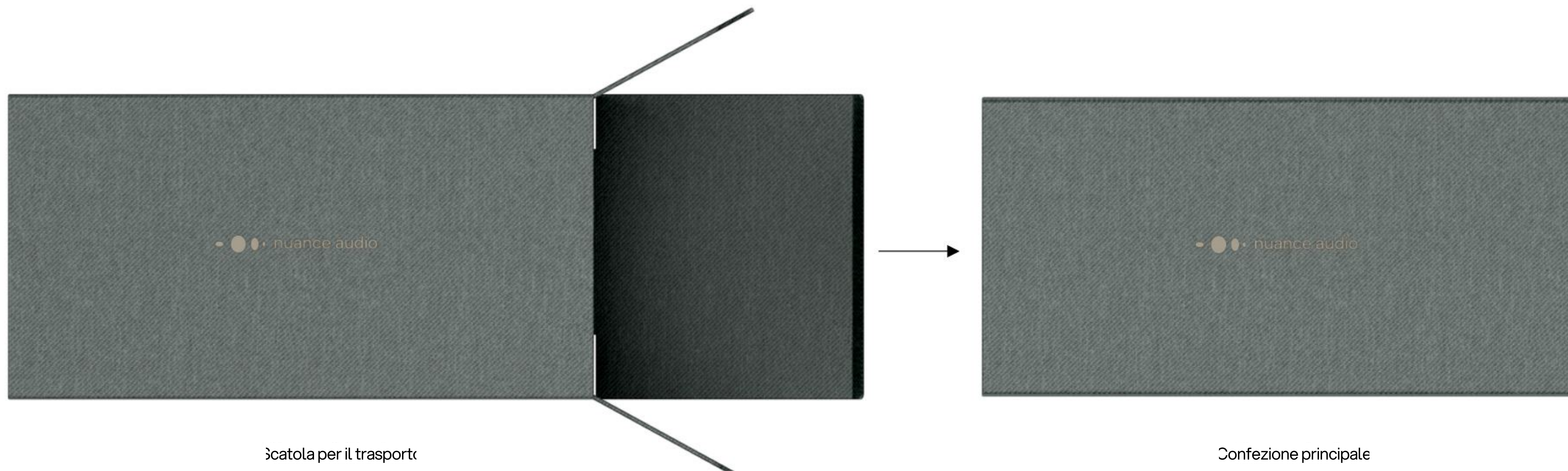




Contenuto della confezione



Package



Charging Pad e cassetto per la documentazione

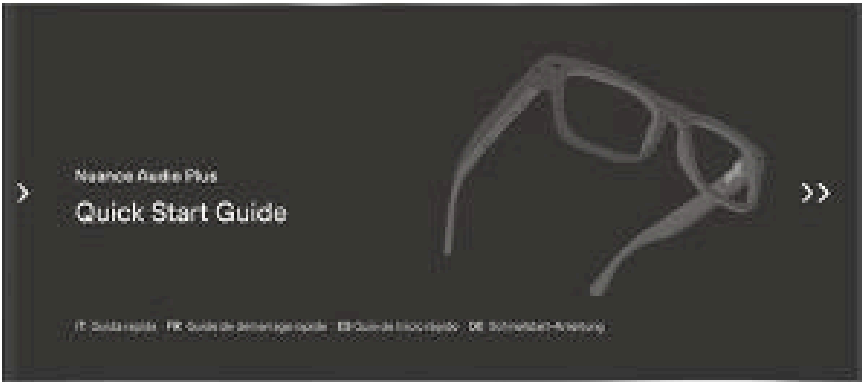

QSG




IFU



Custodia pieghevole




Charging Pad

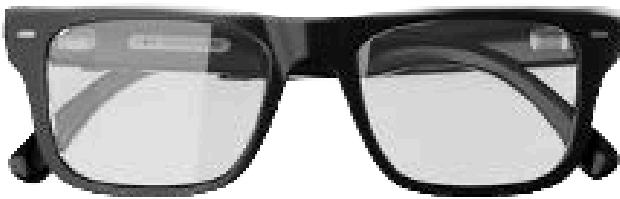

Nuance Audio Plus



Panno per la pulizia

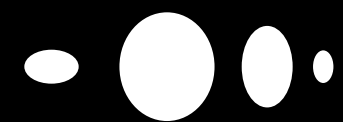


Attiva e configura i tuoi Nuance Audio Plus




Trova la Nuance Audio App

Rendi i tuoi Nuance Audio Plus ancora più facili da usare con la nostra app intuitiva: cambia profilo, regola il volume e riduci il rumore di fondo direttamente dal tuo smartphone.

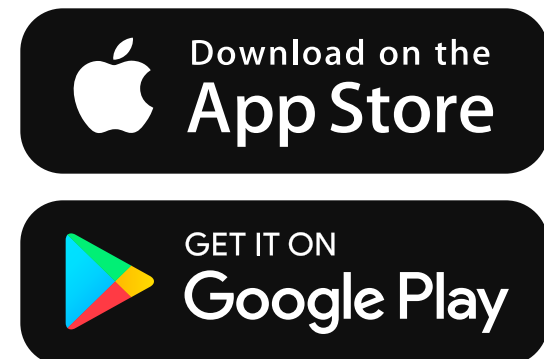


Opzione A.

Inquadra il QR code con il tuo telefono ed **Effettua il download**

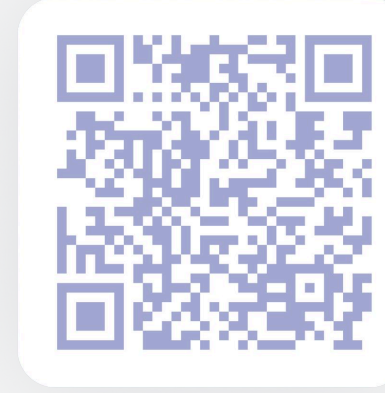


Note

Puoi trovare il QR code anche nella confezione principale.

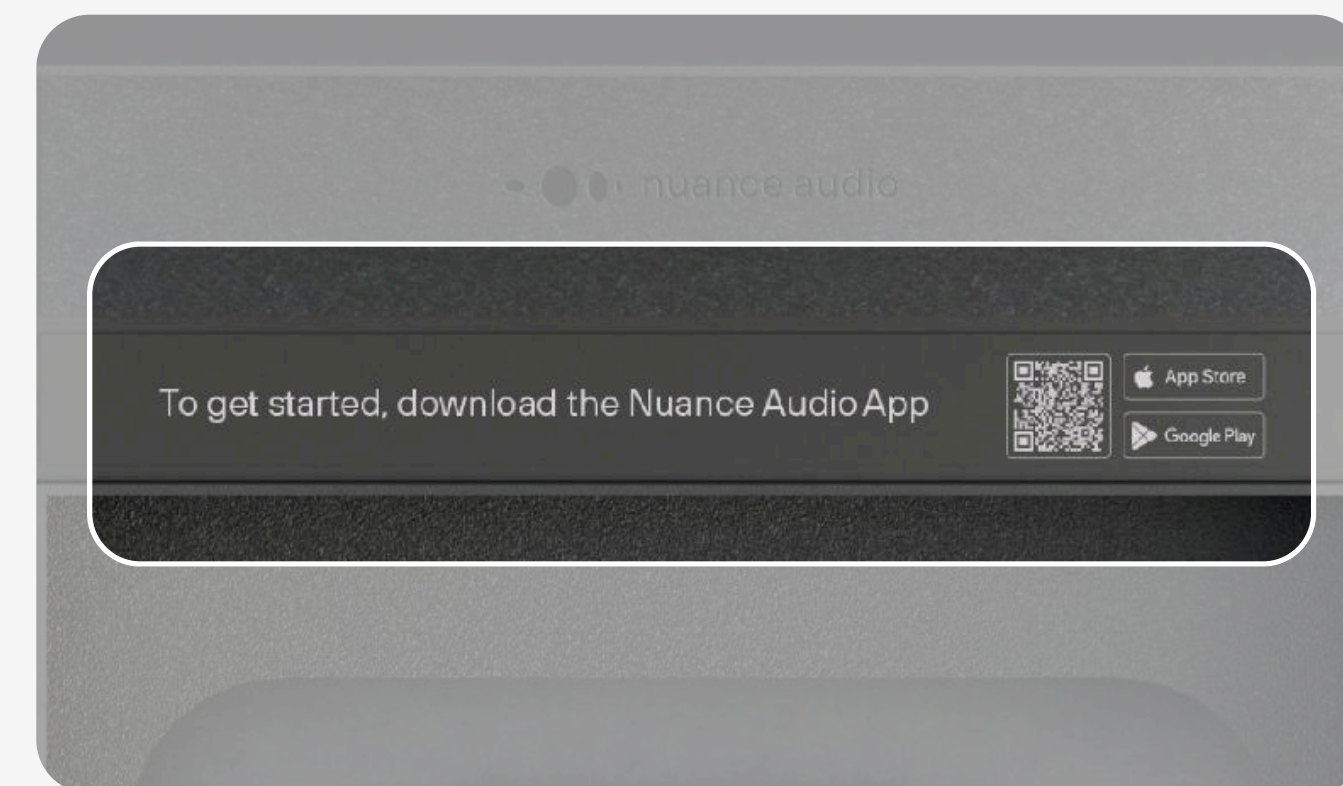

Opzione B.


Cerca "Nuance Audio" nell'App Store o nel Google Play Store ed **effettua il download**

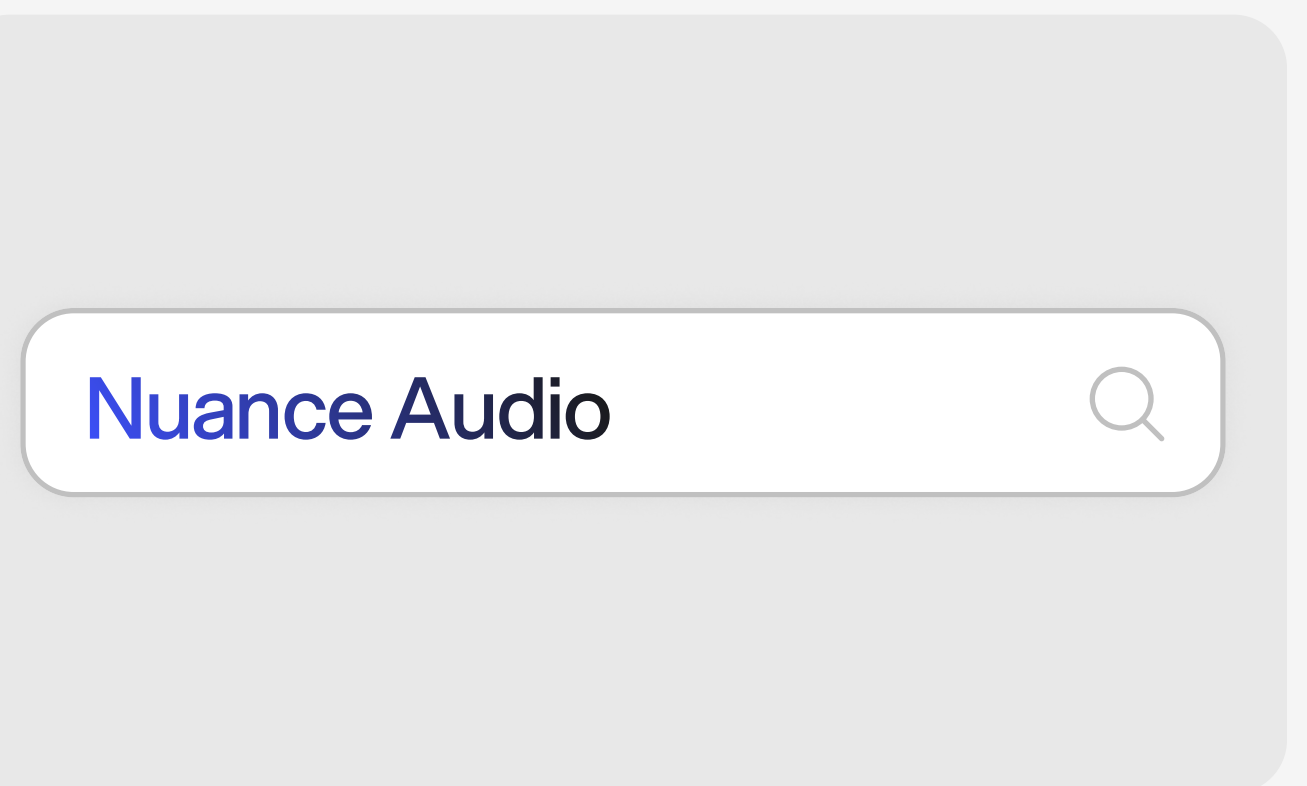




Scaricala dall'app store del tuo dispositivo

Per attivare e personalizzare i tuoi Nuance Audio Plus, **scarica la Nuance Audio App** dall'App Store iOS o da Google Play Store.

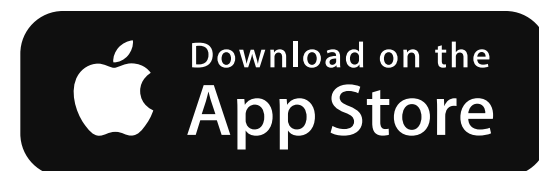


Apple App Store

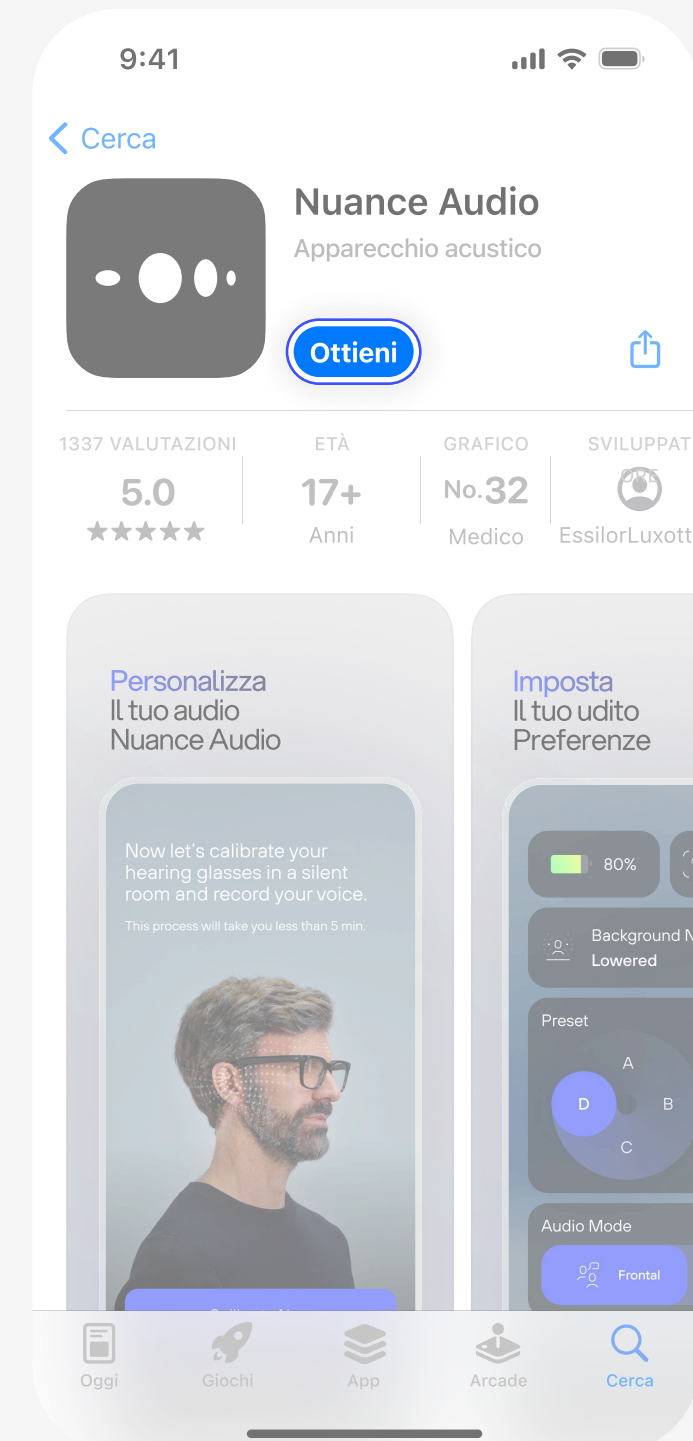

Cerca "Nuance Audio" nell'App Store iOS e tocca **Ottieni**

il pulsante Ottieni cambierà in Apri. Puoi avviare l'app dall'App Store o trovarla sulla schermata principale.

Google Play Store

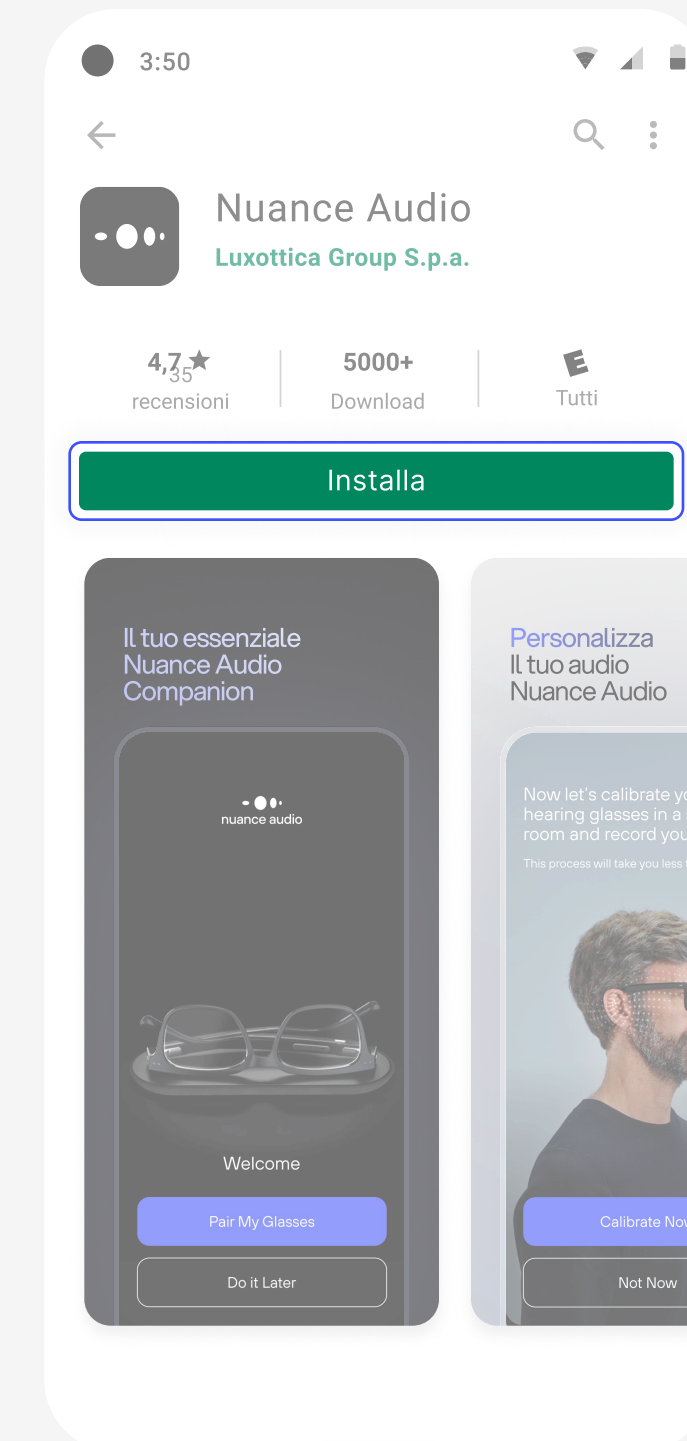

Cerca "Nuance Audio" nel Google Play Store e tocca **Installa**

Il pulsante Ottieni cambierà in Apri. Puoi avviare l'app da Play Store o trovarla sulla schermata principale.



Iscriviti

Dopo aver scaricato l'app, puoi procedere con l'iscrizione.

nuance audio

Accedi al tuo account

E-mail

Password

Hai dimenticato la password?

Accedi

Non hai ancora un account? [Iscriviti](#)

< Crea il tuo account

Nome*

Cognome*

E-mail

Conferma Email*

Password

Data di nascita

Genere

Data di nascita e genere vengono utilizzati

Nuance Audio

34 minuti fa

Usa il codice 123456 per accedere alla tua Nuance Audio App.

Verifica OTP

Inserisci il codice di verifica OTP dalla tua e-mail

1

1

1

1

1

1

Verifica

[Reinvia codice](#)

nuance audio

Accedi al tuo account

E-mail

johnsmith78@gmail.com

Password

Hai dimenticato la password?

Accedi

Non hai un account? [Iscriviti](#)



Iscriviti con il numero di telefono utilizzando l'OTP

Se scegli di registrarti con il tuo numero di telefono, riceverai un OTP (password monouso) via SMS.

The image displays four sequential screens of the Nuance Audio app's registration process:


- Screen 1:** The login screen titled "nuance audio" with the subtitle "Accedi al tuo account". It features two tabs: "E-mail" and "Numero di telefono" (selected). Below the tabs is a country code selector showing "+1" and a "Numero di telefono" input field. A large "Accedi" button is present, along with a "Ricordami" checkbox. At the bottom, there are "Apple" and "Google" login options and a link "Non hai ancora un account? [Iscriviti](#)".
- Screen 2:** The "Crea il tuo account" screen. It includes input fields for "Nome*", "Cognome*", "E-mail", "Data di nascita", "Genere" (with a dropdown arrow), and "Paese" (with a dropdown arrow). The "Numero di telefono*" field is pre-filled with "1234567890". A note at the bottom states: "Fornire la tua data di nascita e il tuo genere ci aiuta a perfezionare la tua esperienza".
- Screen 3:** The "Verifica OTP" screen. It shows a notification banner from "Nuance Audio" with the text "Usa il codice 123456 per accedere alla tua Nuance Audio App." and the time "9:41 AM". Below, it says "Inserisci il codice di verifica inviato via SMS a +1 1234567890". There are six input boxes, each containing the digit "1". A "Verifica" button and a "[Reinvia codice](#)" link are at the bottom.
- Screen 4:** The login screen again, but now the "Numero di telefono" tab is selected and the phone number field is pre-filled with "463754829200". The "Accedi" button is highlighted.



Abbinamento telefono: primo dispositivo



Attiva la modalità abbinamento attivando il pulsante **"Slide On"**. Vedrai lampeggiare un LED blu.

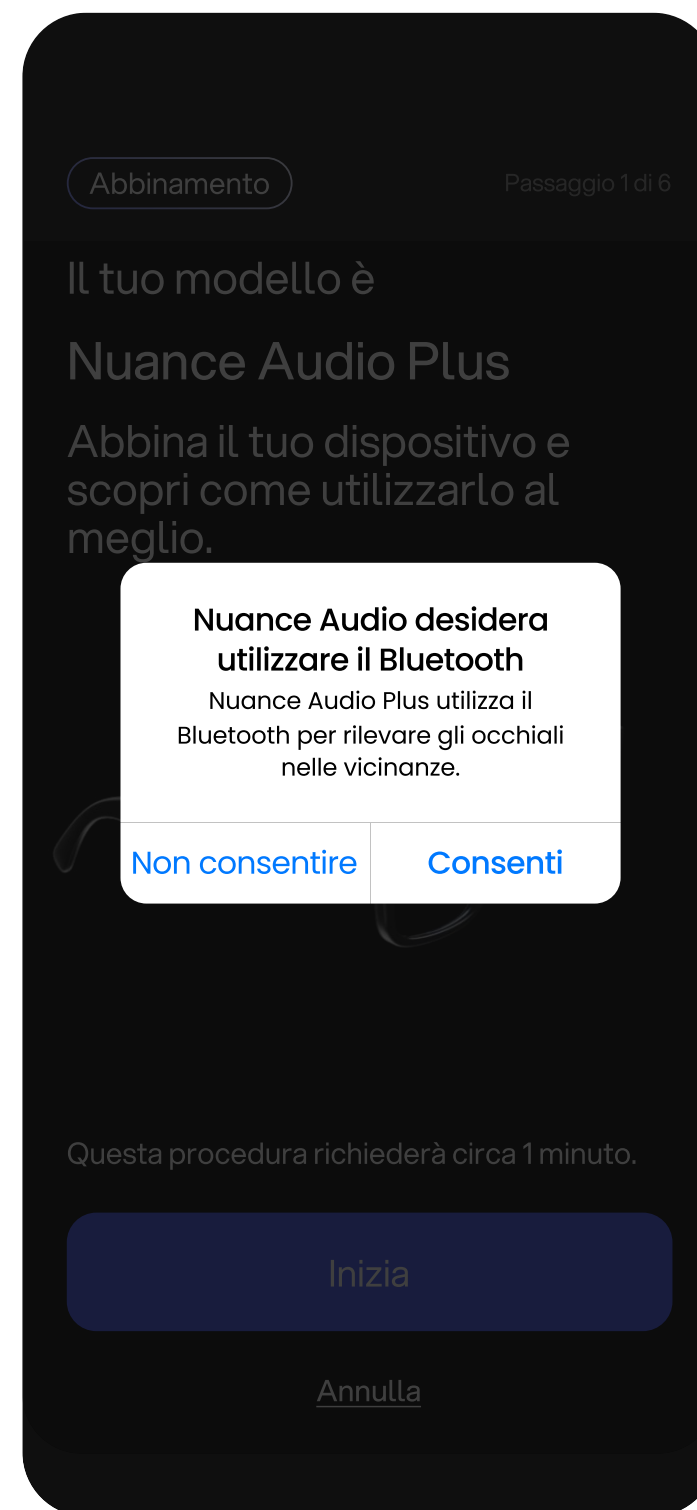


Abilita l'autorizzazione Bluetooth.
Premi Consenti.




Avvia l'abbinamento.
Premi Avvia.




Abbinamento telefono: primo dispositivo

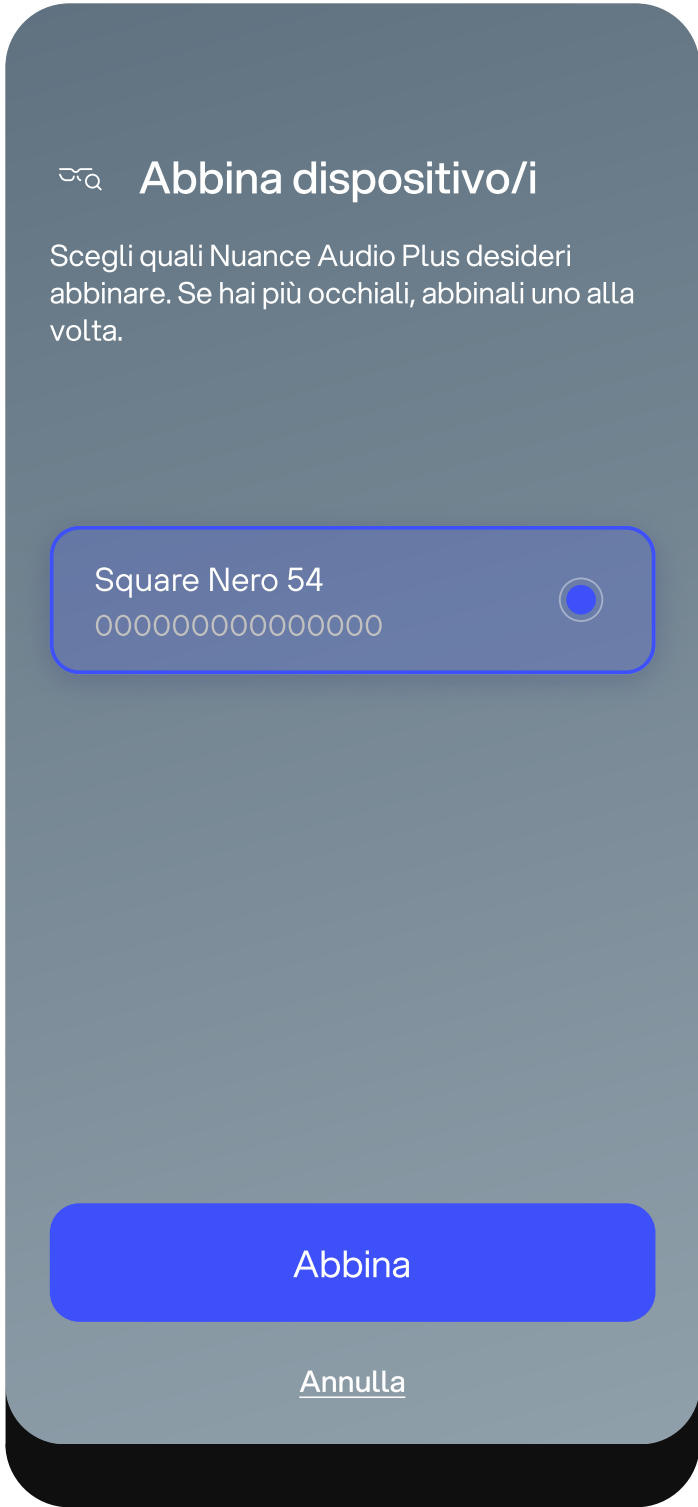

Seleziona Nuance Audio Plus. Seleziona **Abbina**.

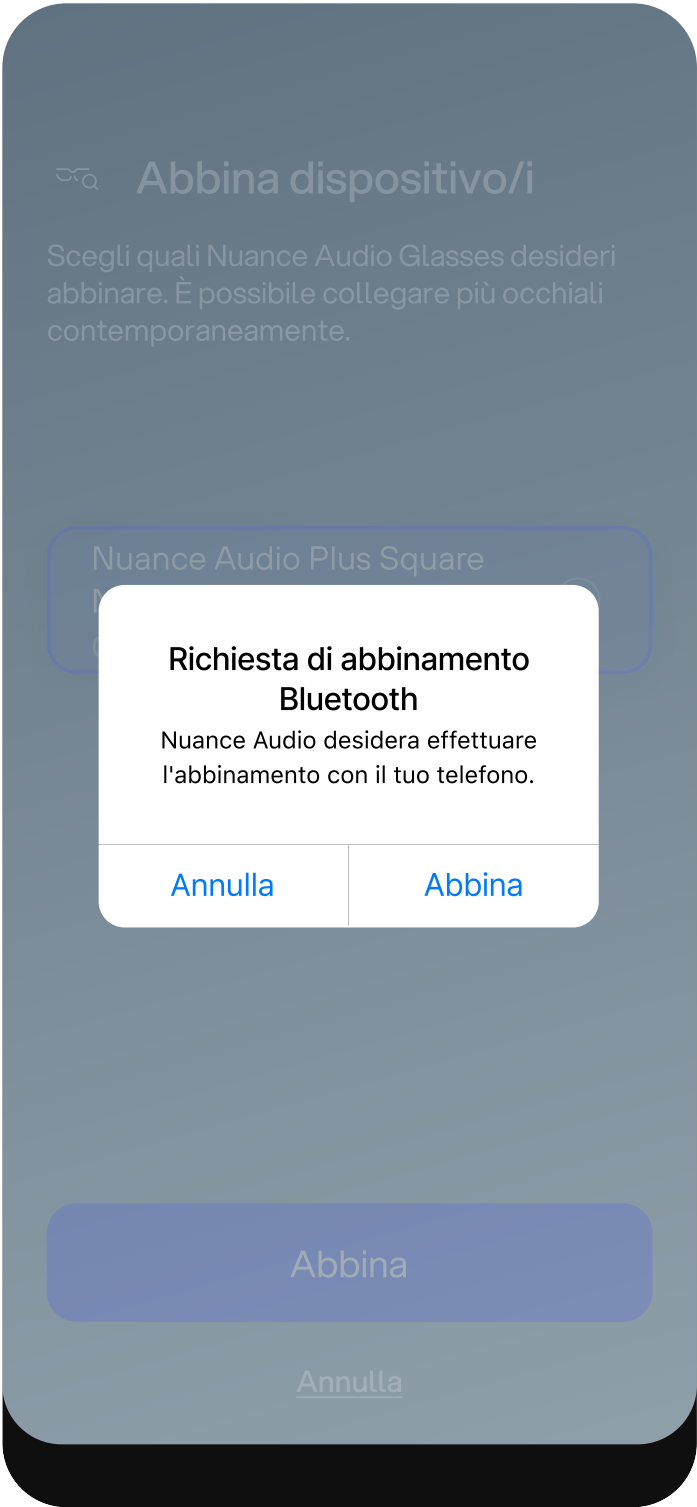


Consenti richiesta di abbinamento Bluetooth. Seleziona **Abbina**

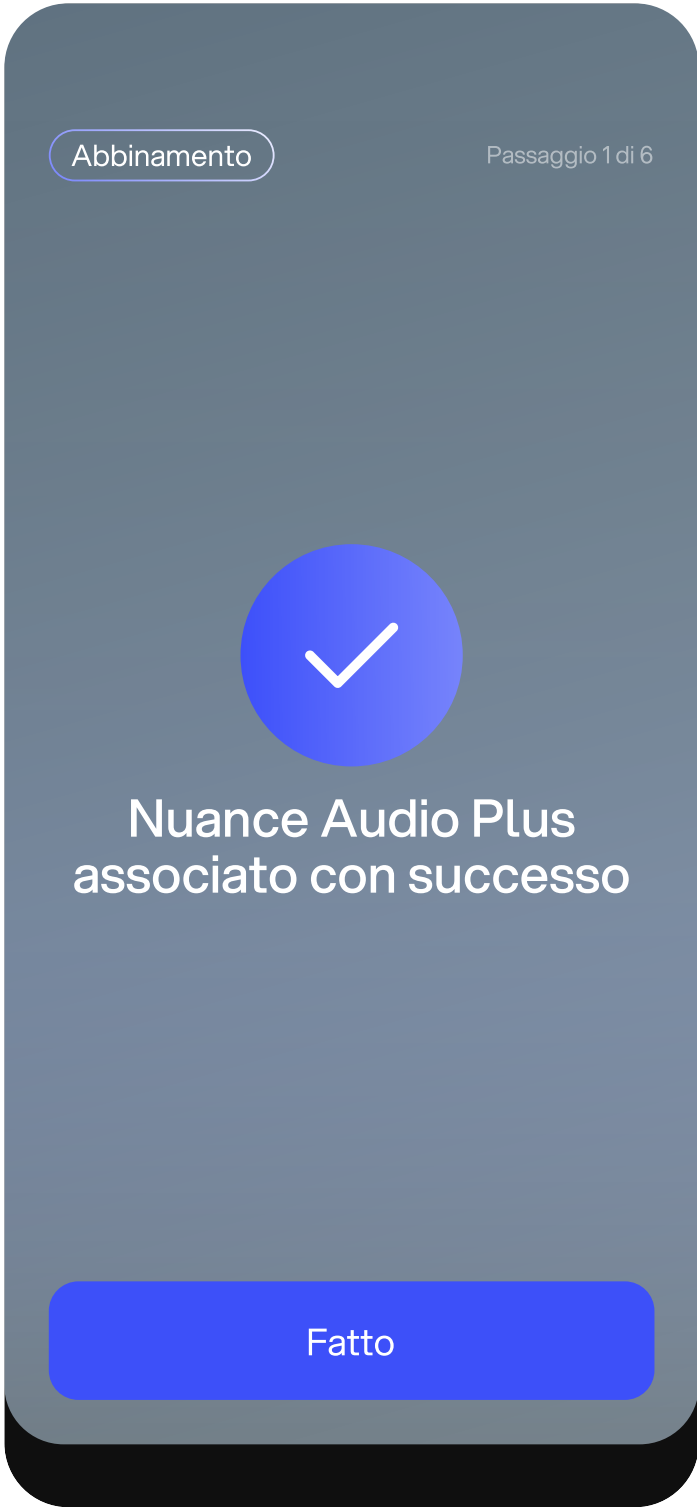

Abbinamento completato.



Abbinare un secondo dispositivo allo stesso account

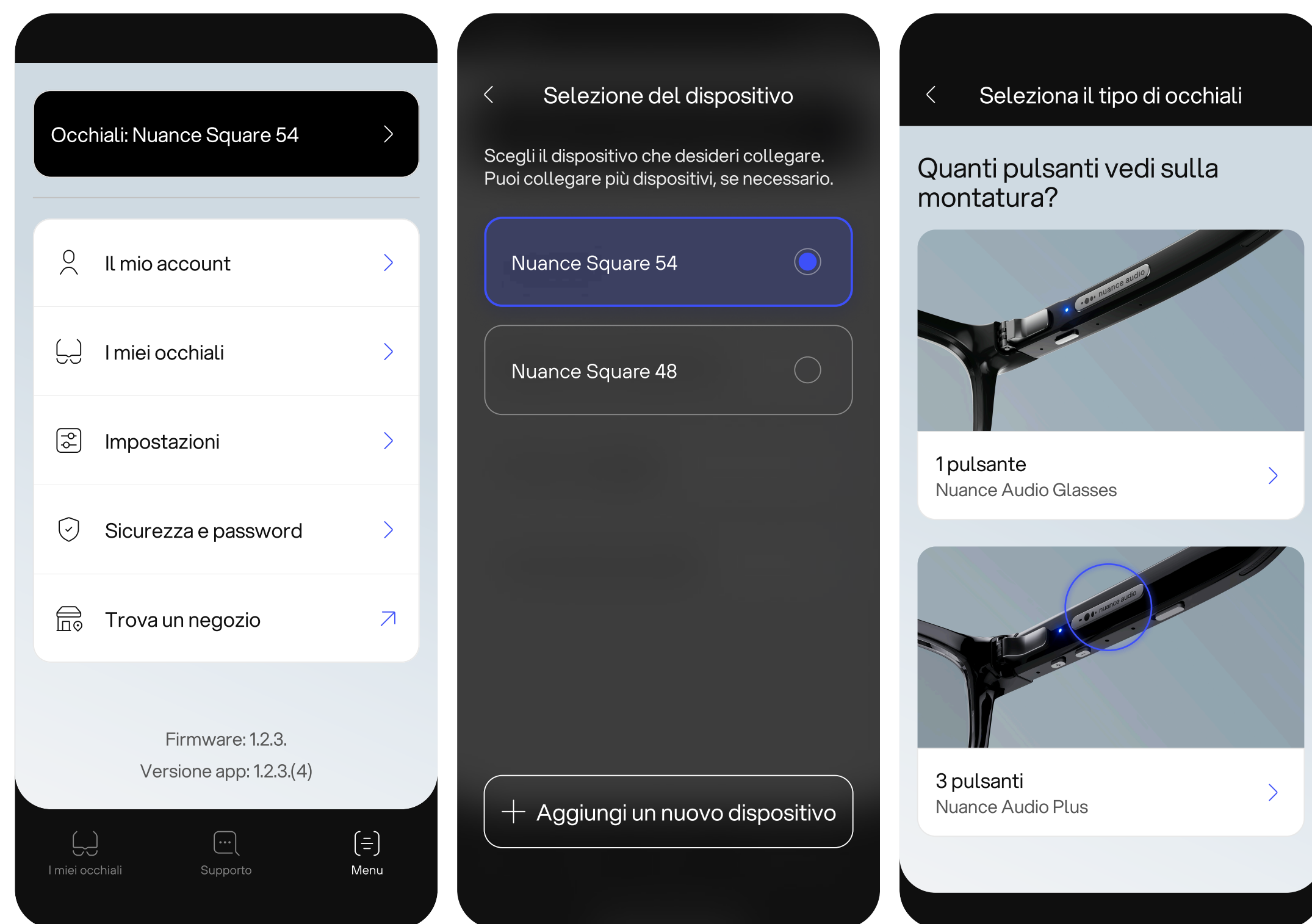


Passaggio 0.1
Vai su **Menu**. Tocca l'icona "Occhiali" nel banner in alto per aggiungere un nuovo paio.

Passaggio 0.2
Seleziona gli occhiali a cui vuoi collegarti.
Premi "Aggiungi nuovo dispositivo."

Passaggio 0.3
Scegli il modello dei tuoi occhiali.

Passaggio 0.4
Per avviare la procedura di abbinamento, attiva il pulsante, premi **"+" o "-"** e **tieni premuto per 8 secondi** finché il LED blu non lampeggia.

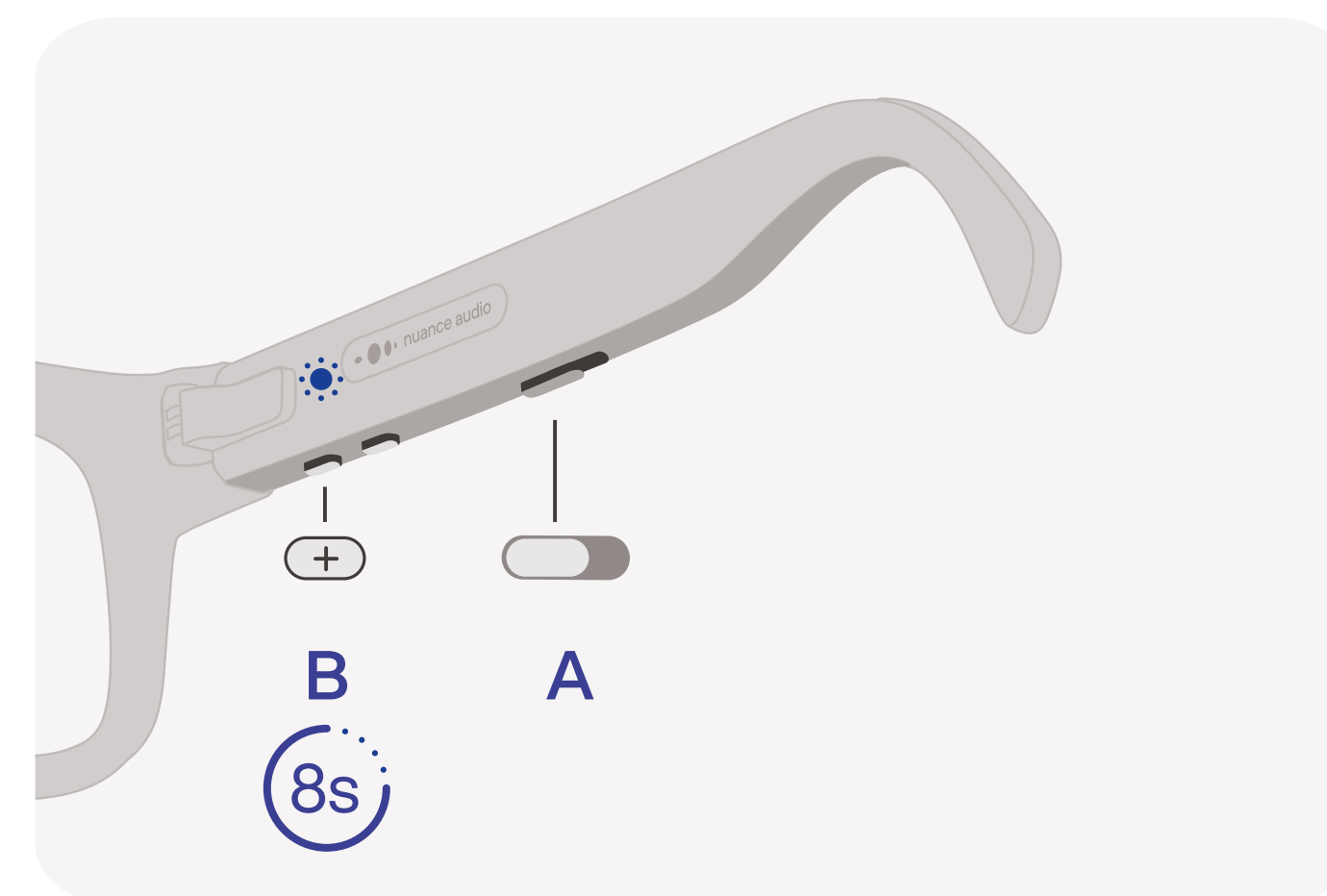





Abbinare un secondo dispositivo allo stesso account



Seleziona Nuance Audio Plus dall'elenco. Seleziona **Abbina**.

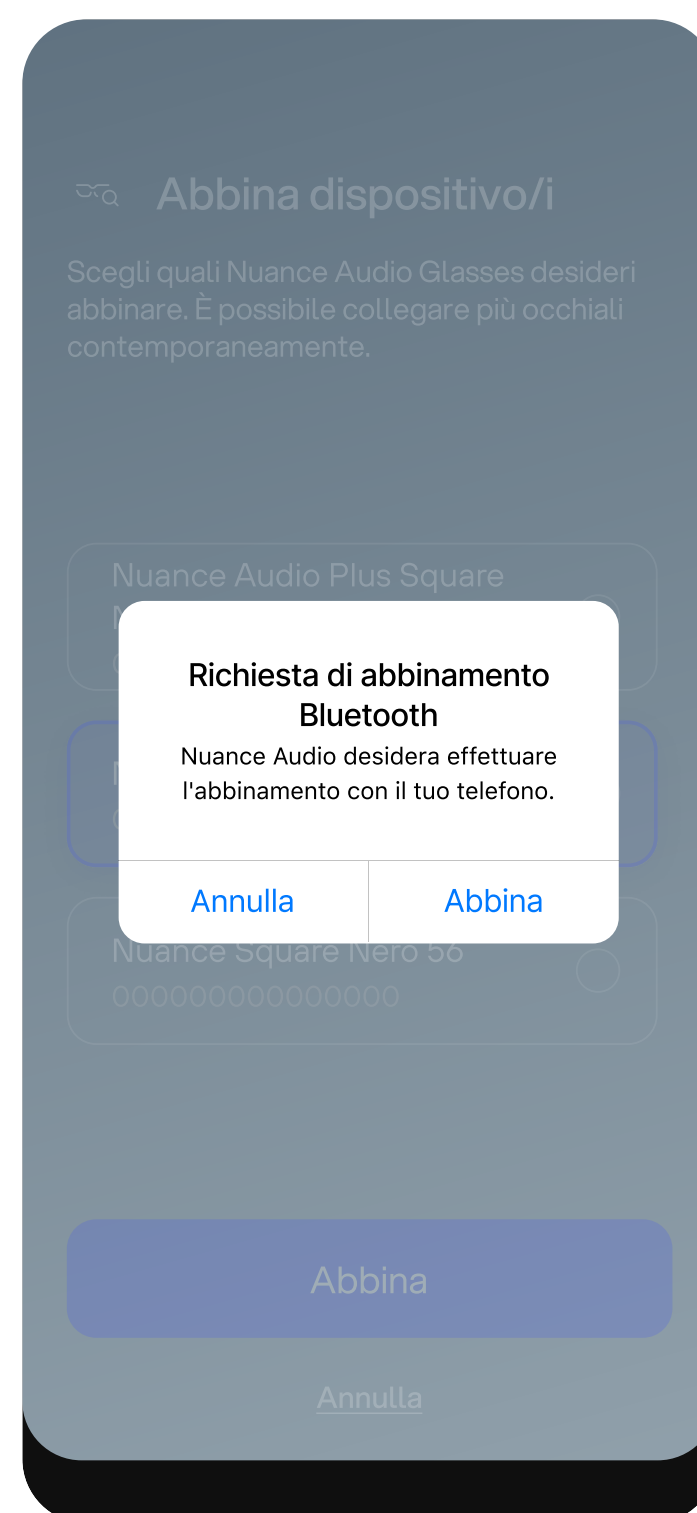

Consenti richiesta di abbinamento Bluetooth. Seleziona **Abbina**

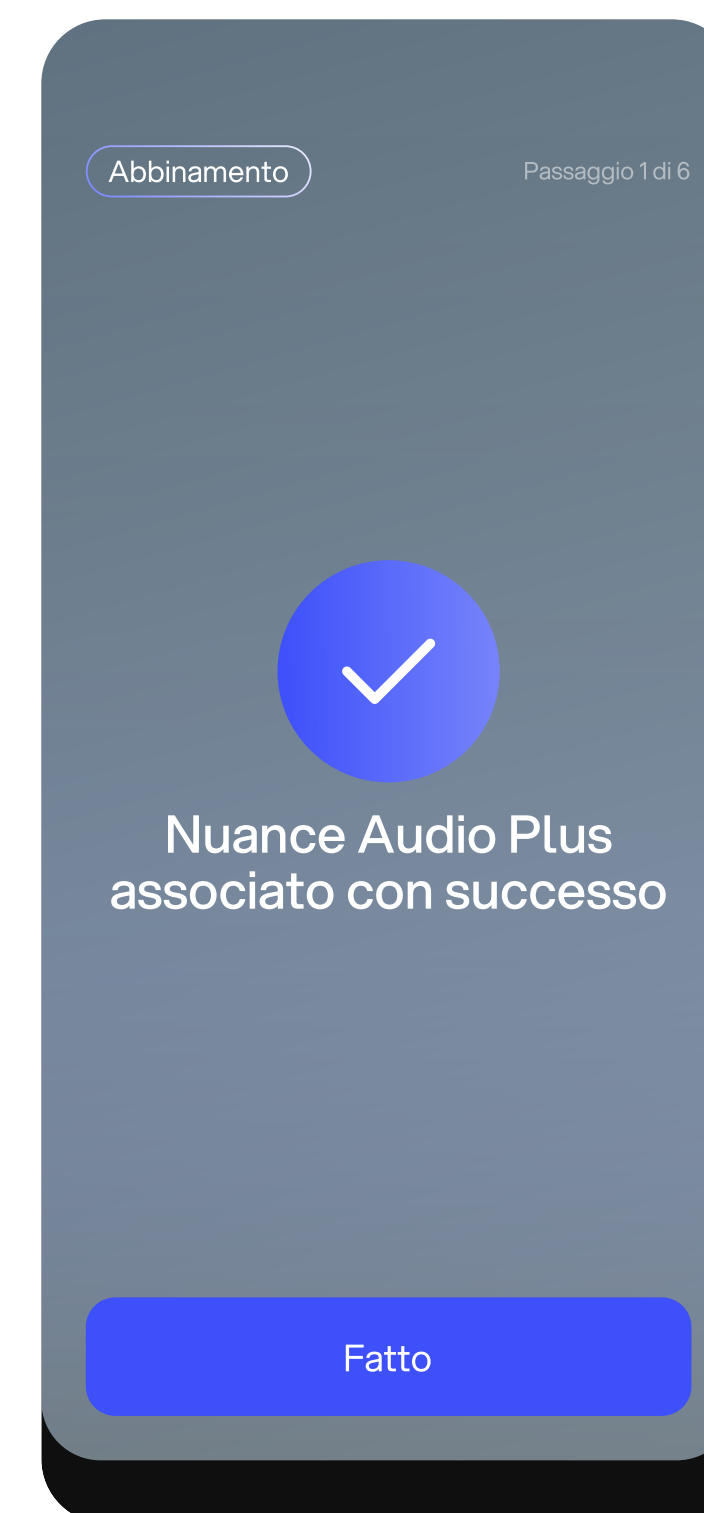

Abbinamento completato.



Cos'è la calibrazione personalizzata?

Calibra i tuoi Nuance Audio Plus in modo che siano personalizzati e adattati alle tue esigenze.

La calibrazione personalizzata ottimizza il suono in base alla forma della tua testa e alla tua voce.

Ecco due aree su cui si concentra:

- **Suono più chiaro:** adatta i suoni per ridurre il feedback e il rumore, così senti più chiaramente.
- **Feedback vocale naturale:** registra la tua voce per rendere le conversazioni più naturali.





Come ottenere il massimo dalla tua calibrazione?

La procedura di calibrazione richiede solo un minuto, ma è essenziale per aiutarti a utilizzare al meglio i tuoi Nuance Audio Plus.

Se possiedi più paia di occhiali, dovrai calibrarli tutti singolarmente.


Ecco alcuni consigli per ottimizzare la calibrazione personalizzata

- Trova un posto tranquillo in casa, evitando spazi ampi o aperti.
- Stai lontano da zone con finestre ampie o numerose.
- Evita stanze con soffitti alti dove il rumore di fondo può essere imprevedibile.
- Stai lontano dagli angoli ed evita di posizionarti di fronte a specchi.
- Cerca di rimanere al centro della stanza per una qualità audio ottimale.
- Suggerimento: la camera da letto è spesso l'opzione migliore.

Ecco alcuni consigli per ottimizzare la calibrazione della voce

- Parla ad alta voce ma senza urlare.
- Proietta la tua voce come se stessi parlando a qualcuno dall'altra parte della stanza.
- Riduci le pause il più possibile.
- Se possiedi più paia di occhiali, dovrai calibrarli tutti singolarmente.


Come calibrare i tuoi occhiali?

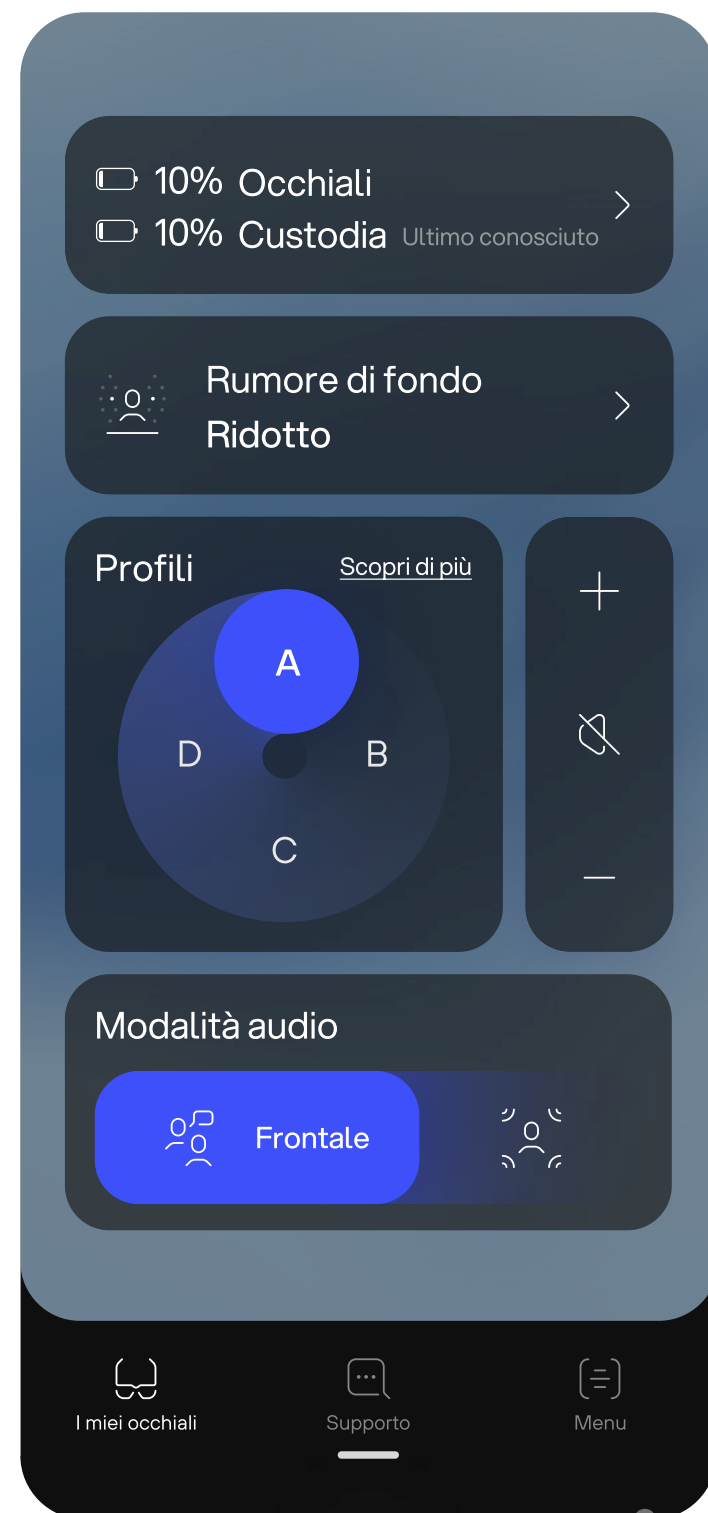

All'interno della dashboard della Nuance APP, tocca (angolo in basso a destra della barra di navigazione).

Note


Un indicatore blu ti avviserà e ti guiderà alla schermata di calibrazione

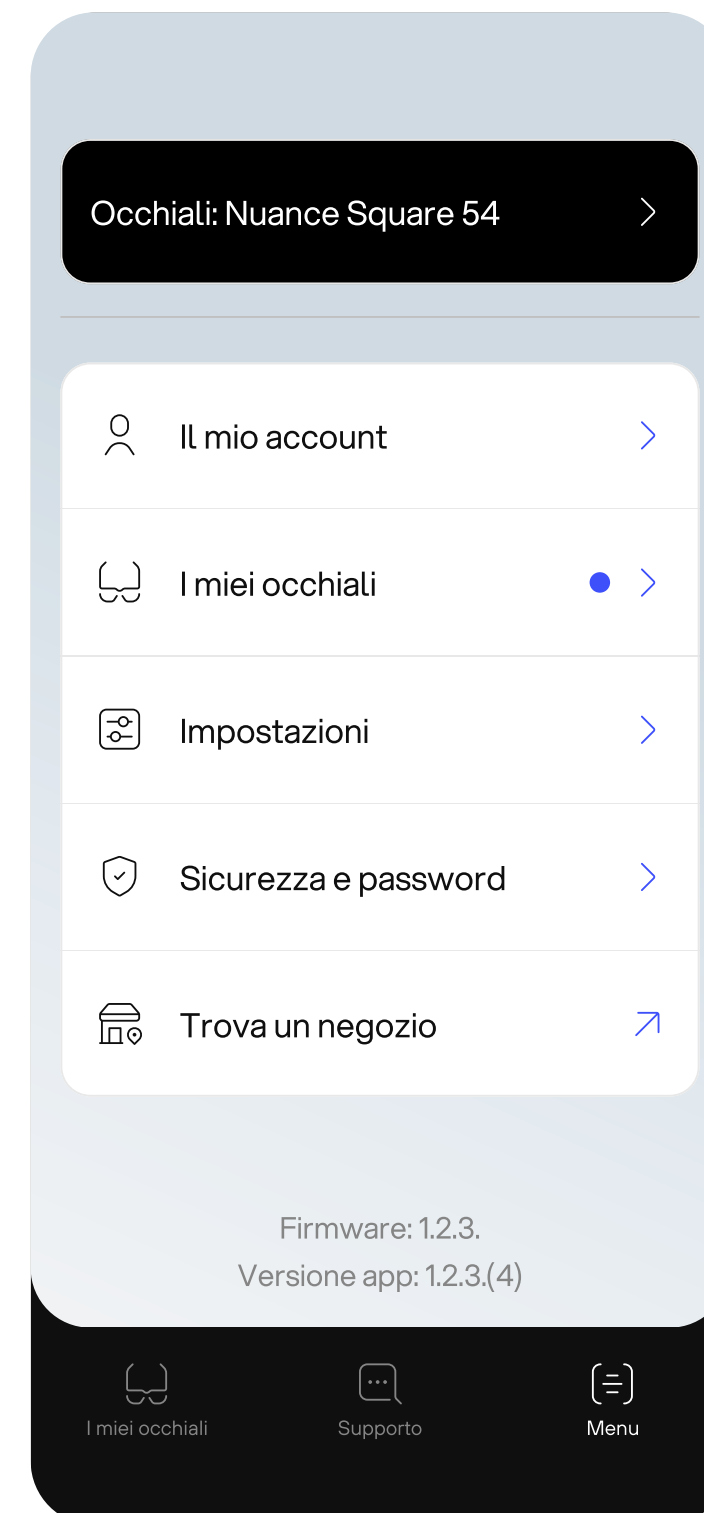

Tocca **Impostazioni**.

Note

Un indicatore blu ti avviserà e ti guiderà alla schermata di calibrazione

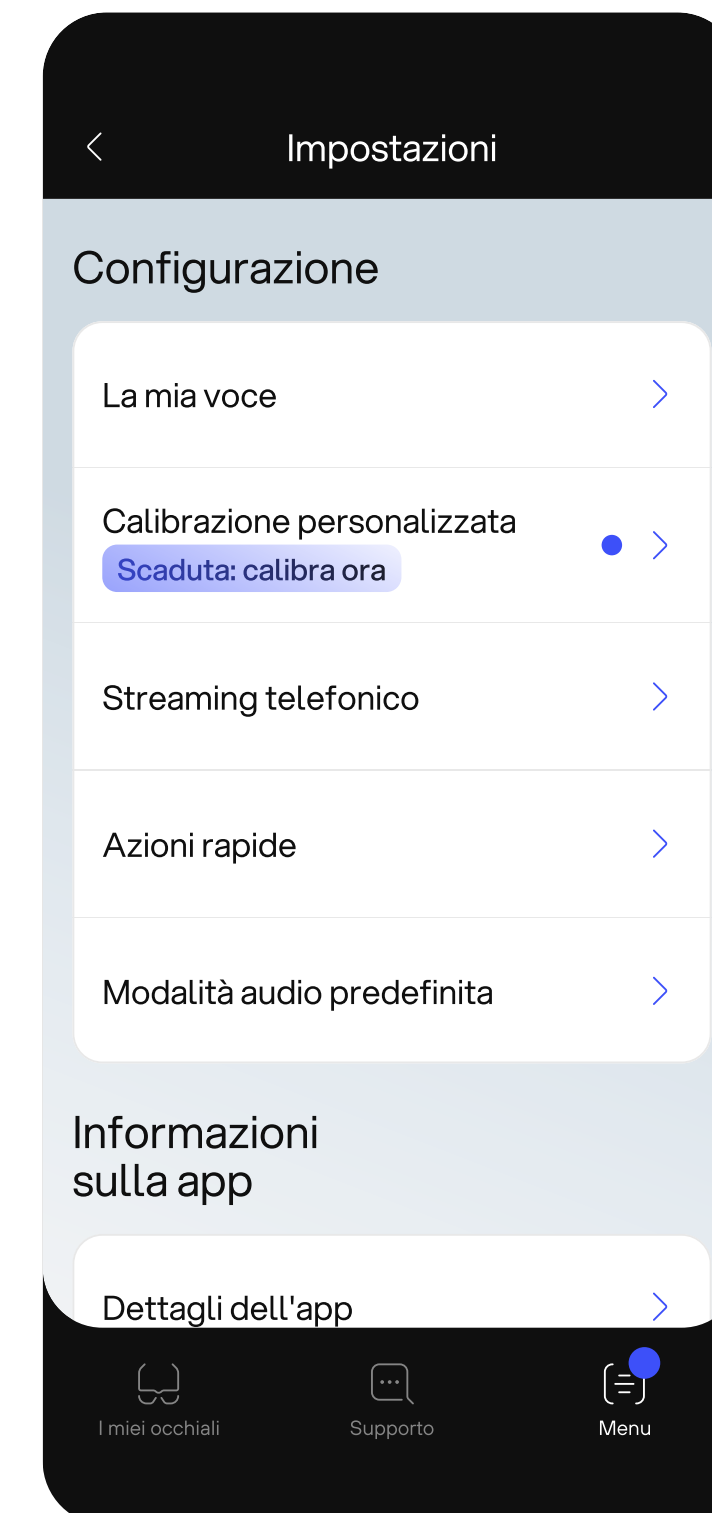

Per avviare la calibrazione, tocca **Calibrazione personalizzata**.

Note


Un indicatore blu e un'etichetta dedicata ti segnaleranno quando è necessario eseguire una nuova calibrazione per aggiornare le preferenze audio.




Come calibrare i tuoi occhiali?



Per iniziare la calibrazione, trova una stanza silenziosa e poi seleziona **Avvia la calibrazione.**

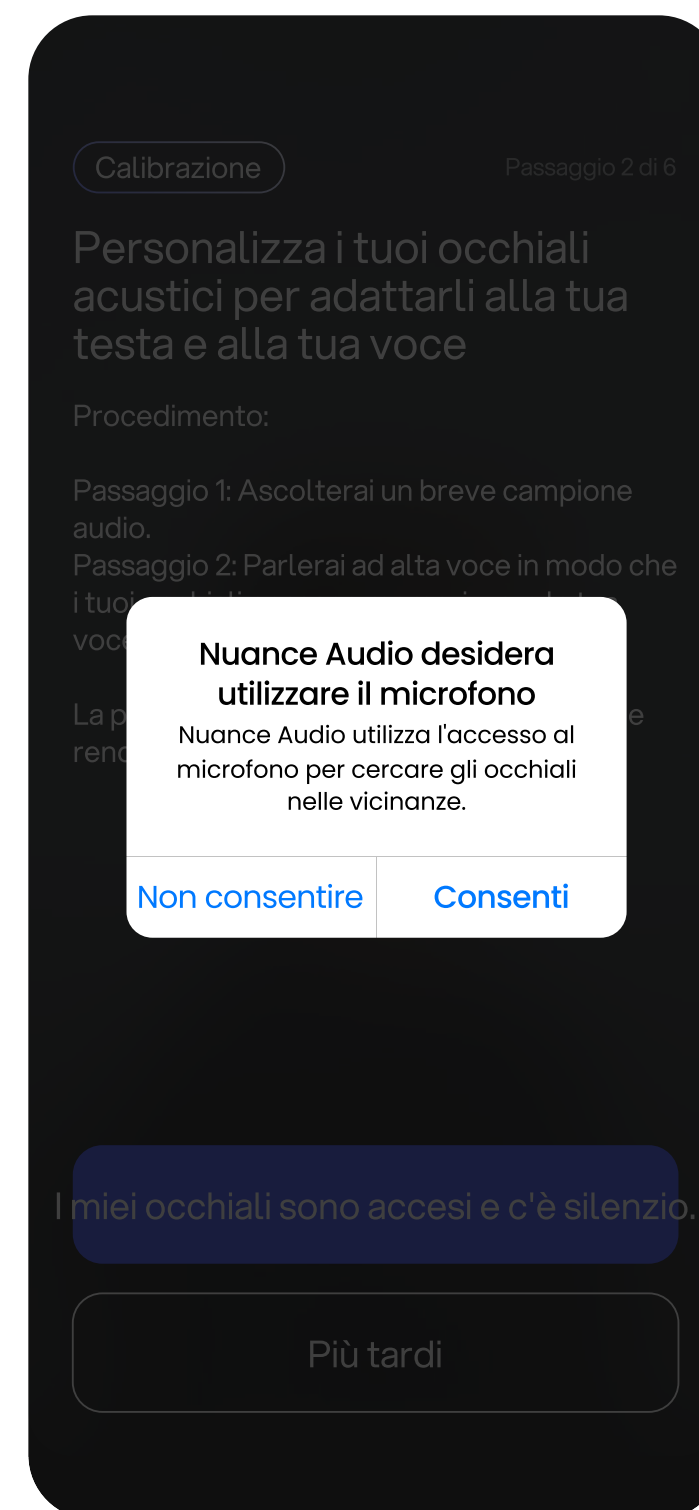

Dovrai consentire al microfono del tuo telefono di misurare e analizzare i suoni.
Premi Consenti.

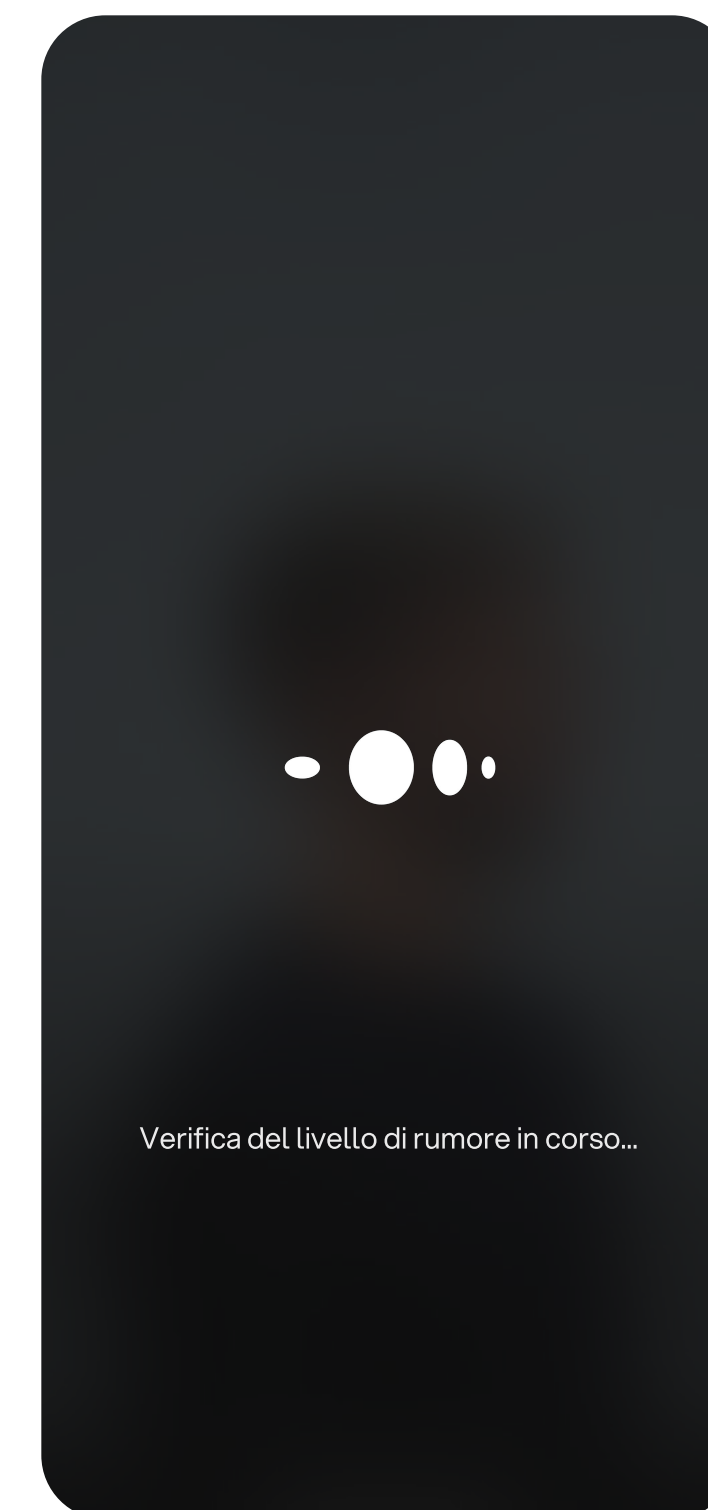

Abbinamento completato. Una notifica pop-up ti ricorderà di mantenere accesi i Nuance Audio Plus per tutta la procedura.







Come calibrare i tuoi occhiali?



Passaggio 1.1
Misurazione del rumore ambientale.
Tieni gli occhiali accessi e tocca **Riproduci audio**.

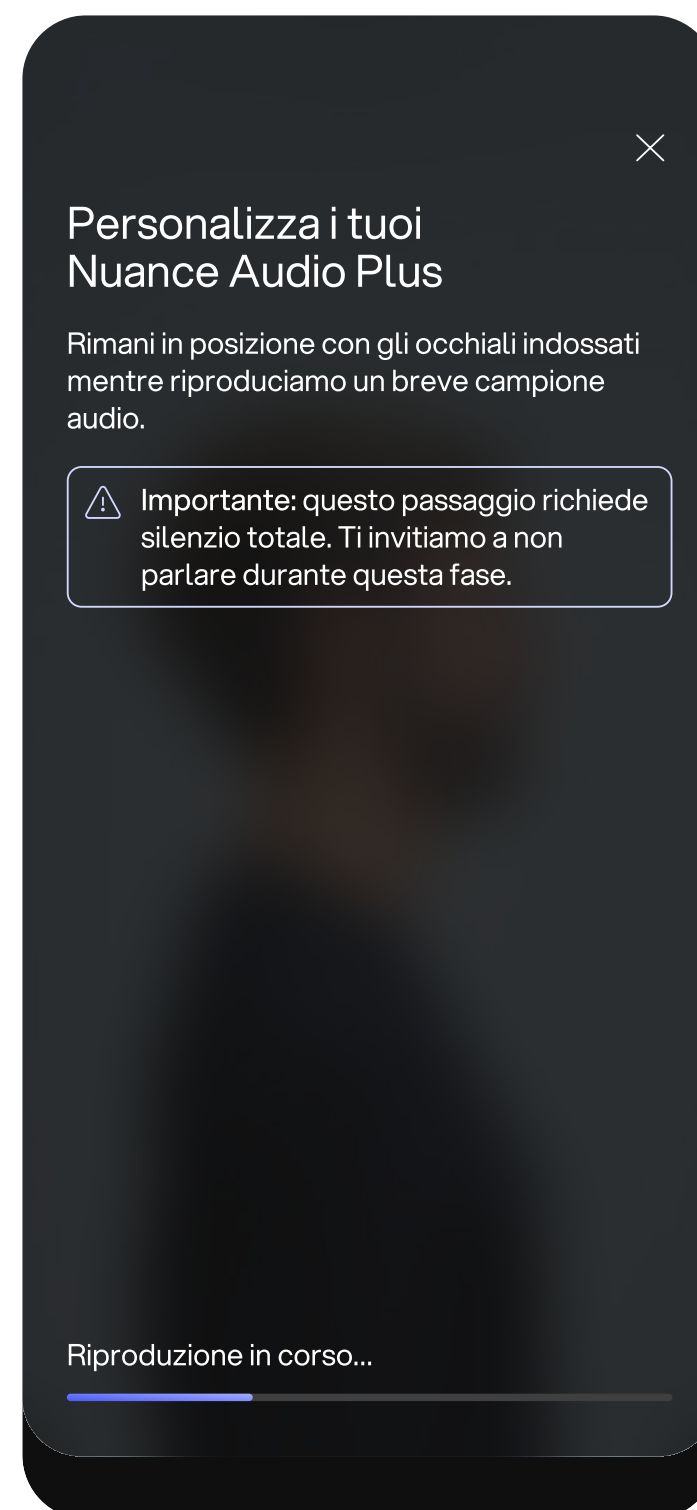


Passaggio 1.2
Non muoverti e non togliere gli occhiali, **aspetta fino alla fine del campione audio**.

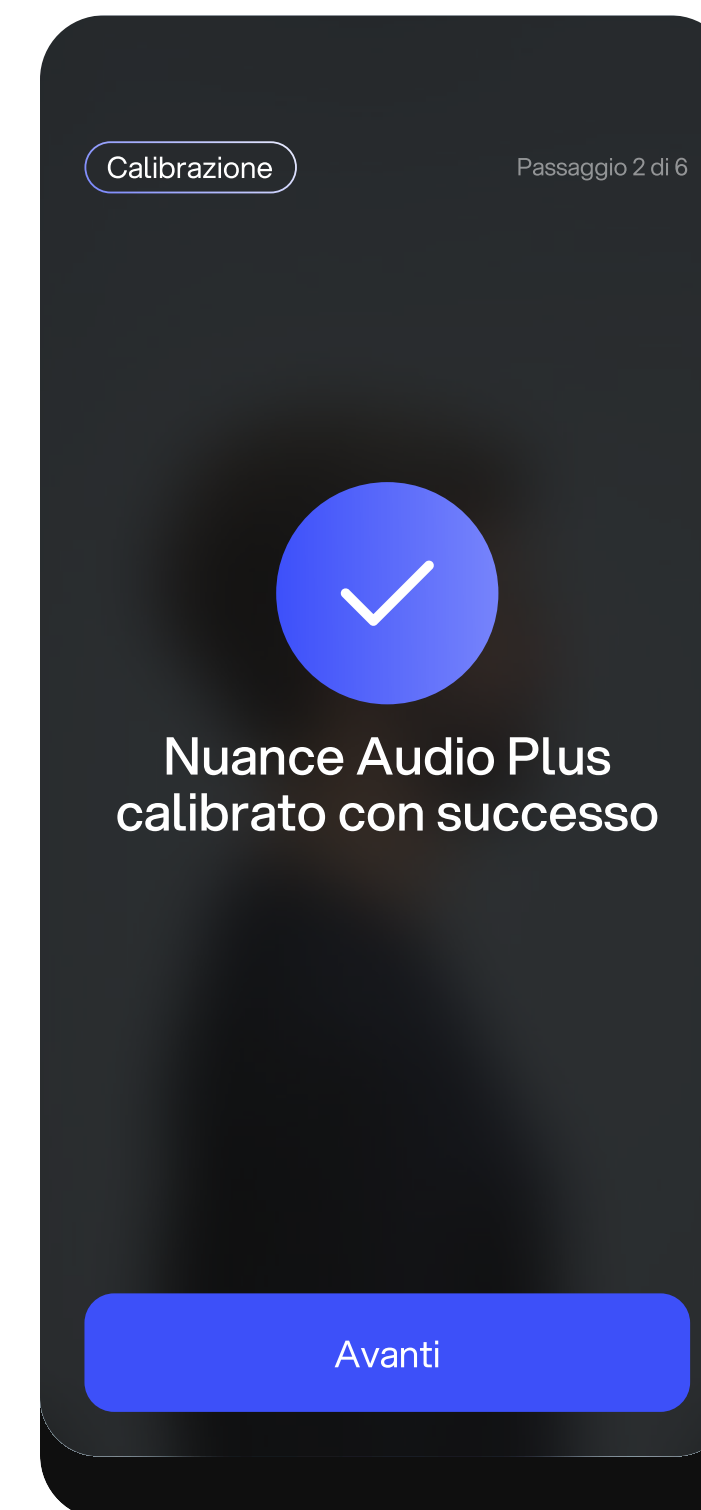

Passaggio 1.3
Misurazione del rumore ambientale completata.




Come calibrare i tuoi occhiali?

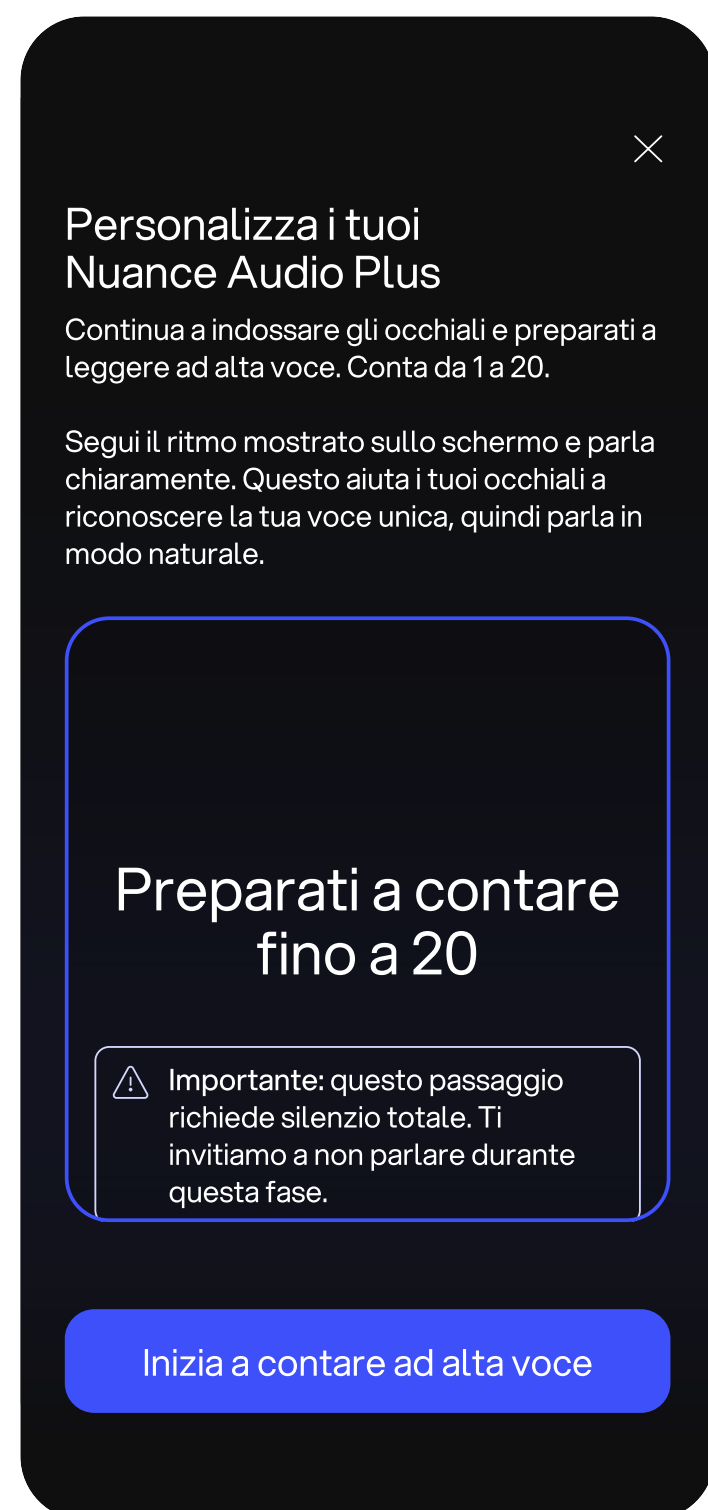

Passaggio 2.1
Calibrazione della voce.
Non muoverti e non togliere gli occhiali.
Premi [Avvia la registrazione](#).



Passaggio 2.2
Conta ad alta voce fino a quando la barra di avanzamento non raggiunge la fine.

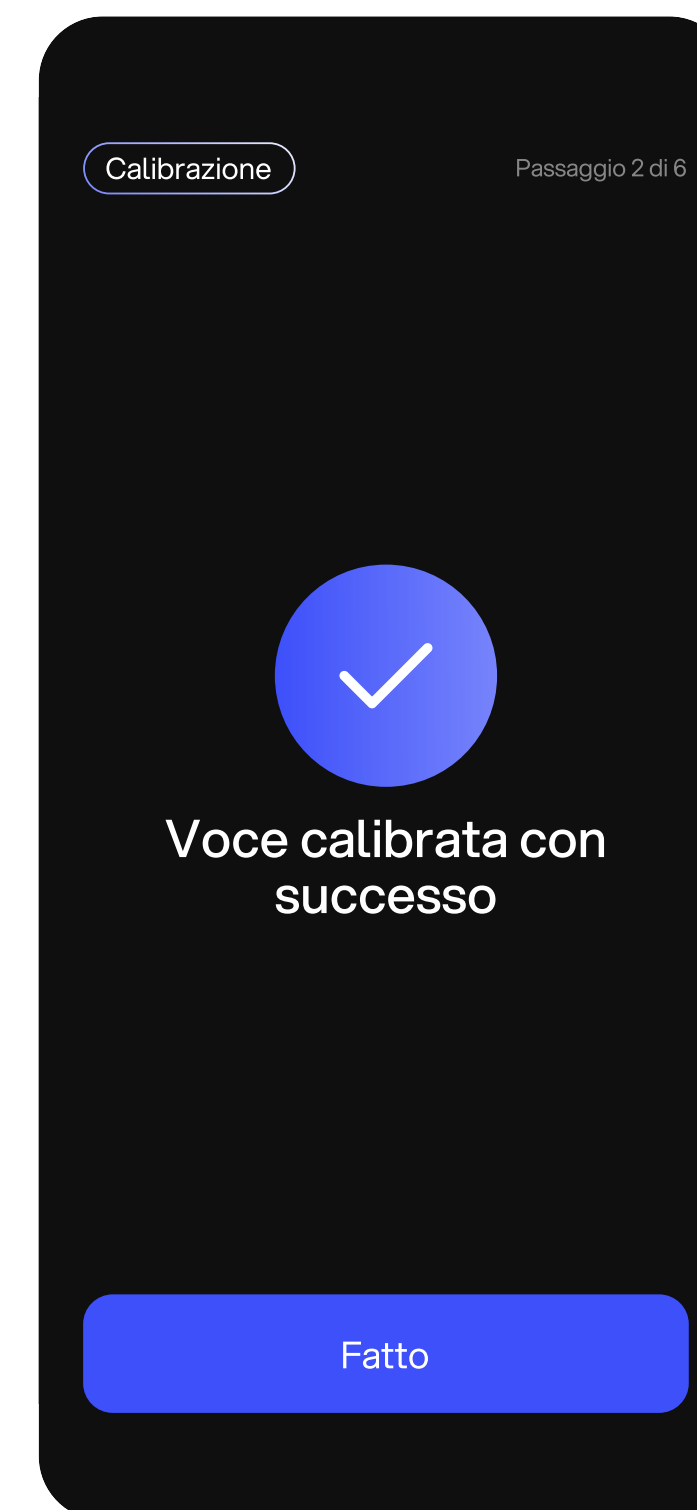

Passaggio 2.3
Calibrazione personale completata correttamente.



Per le istruzioni per l'uso aggiornate,
segui questo link

[↗ Visualizza istruzioni per l'uso](#)