



Erste Schritte: Kontoeinrichtung, Koppelung, Kalibrierung



Auspacken

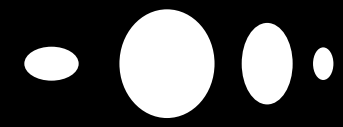

Auspacken

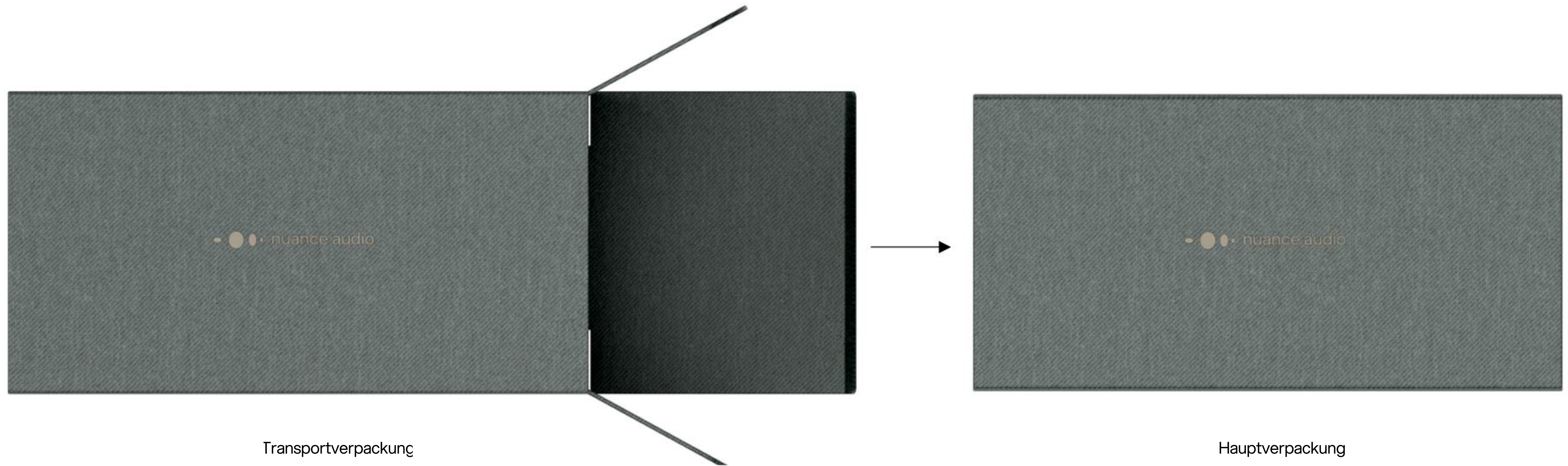




Auspacken



Package




Charging Pad & Drawer für Dokumentation

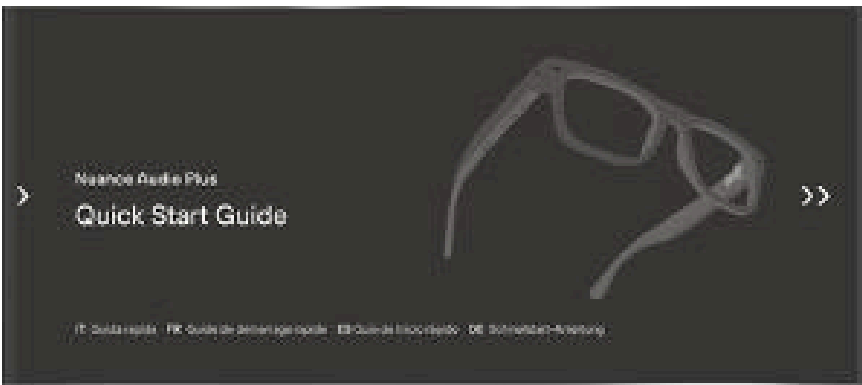


QSG




IFU

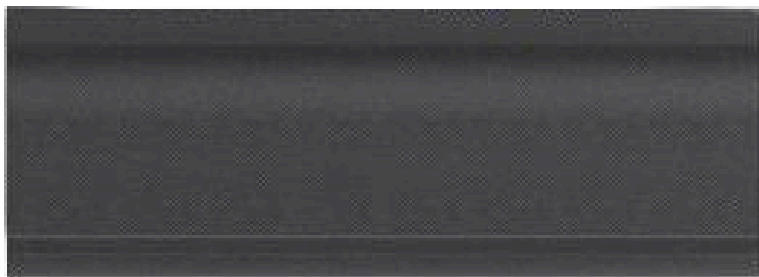

Falttui

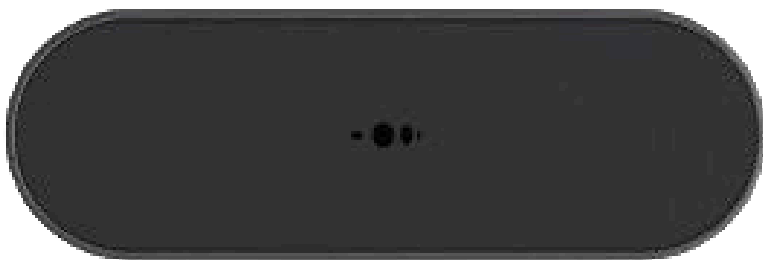


Charging Pad

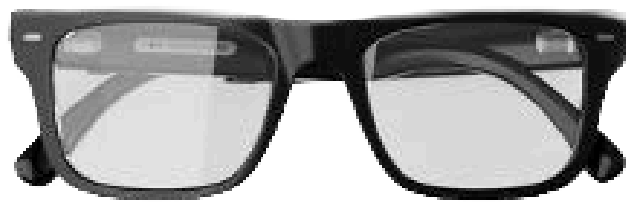

Nuance Audio Plus



Reinigungstuch

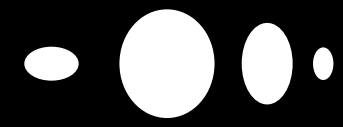

Aktivieren und konfigurieren Sie Ihre Nuance Audio Plus




Finden Sie die Nuance Audio™ App

Mit unserer intuitiven App können Sie Ihre Nuance Audio Plus noch einfacher bedienen: Ändern Sie Voreinstellungen, steuern Sie die Lautstärke und reduzieren Sie Hintergrundgeräusche direkt über Ihr Telefon.




Option A.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon ein und machen Sie den **Download**

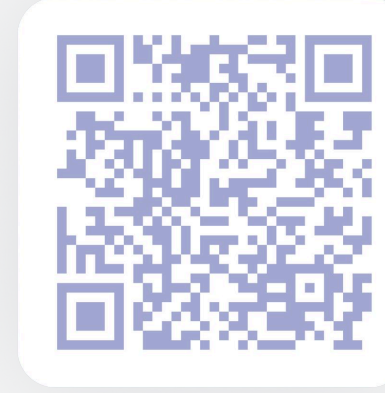

Hinweise

Sie finden den QR-Code auch auf der Hauptverpackung

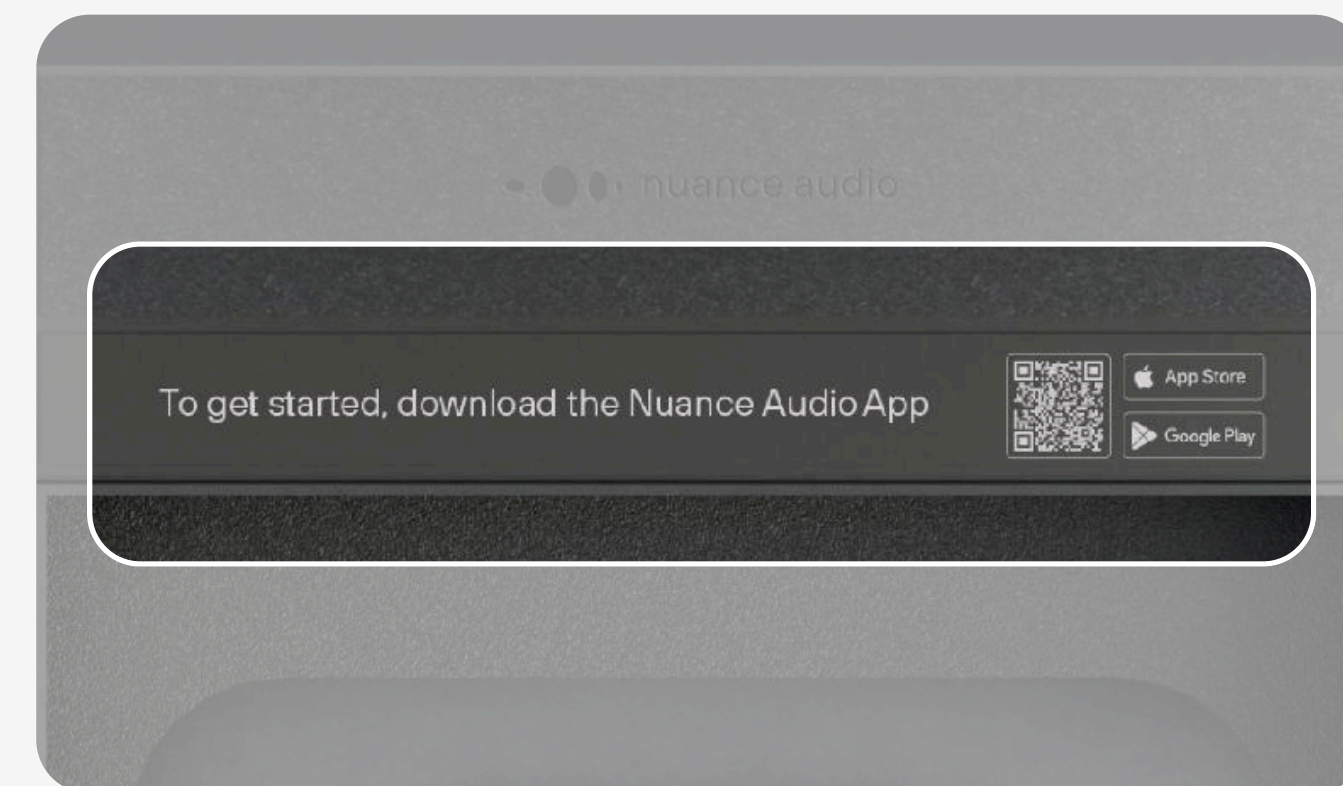

Option B.

Suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach „Nuance Audio“ und **downloaden Sie**




Nuance Audio






Laden Sie sie aus dem App Store Ihres Geräts herunter

Um Ihre Nuance Audio Plus zu aktivieren und zu personalisieren, **laden Sie die Nuance Audio App** aus dem iOS App Store oder Google Play Store herunter.

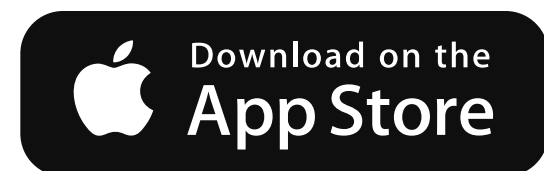


Apple App Store

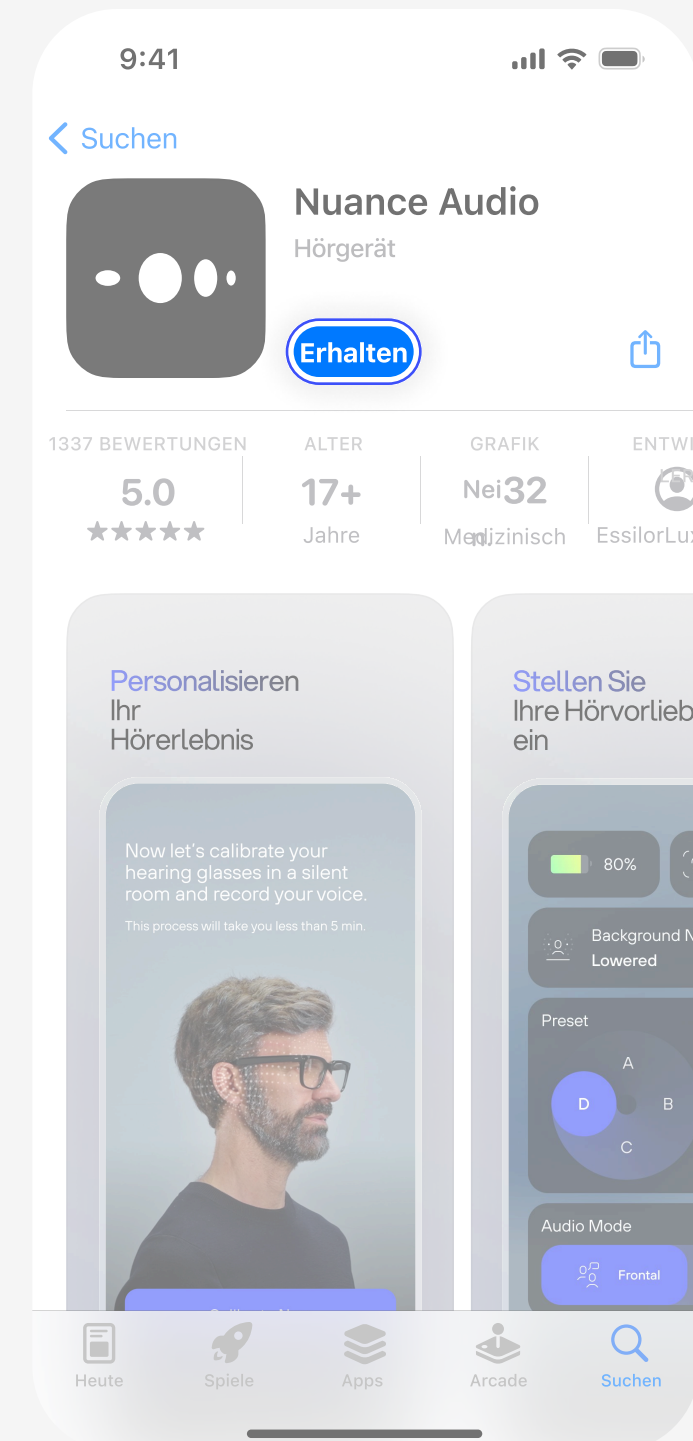

Suchen Sie im iOS App Store nach „Nuance Audio“ und tippen Sie auf **Erhalten**

Die Schaltfläche Erhalten wechselt zu Öffnen. Sie können die App über den App Store starten oder sie auf Ihrem Startbildschirm finden.

Google Play Store

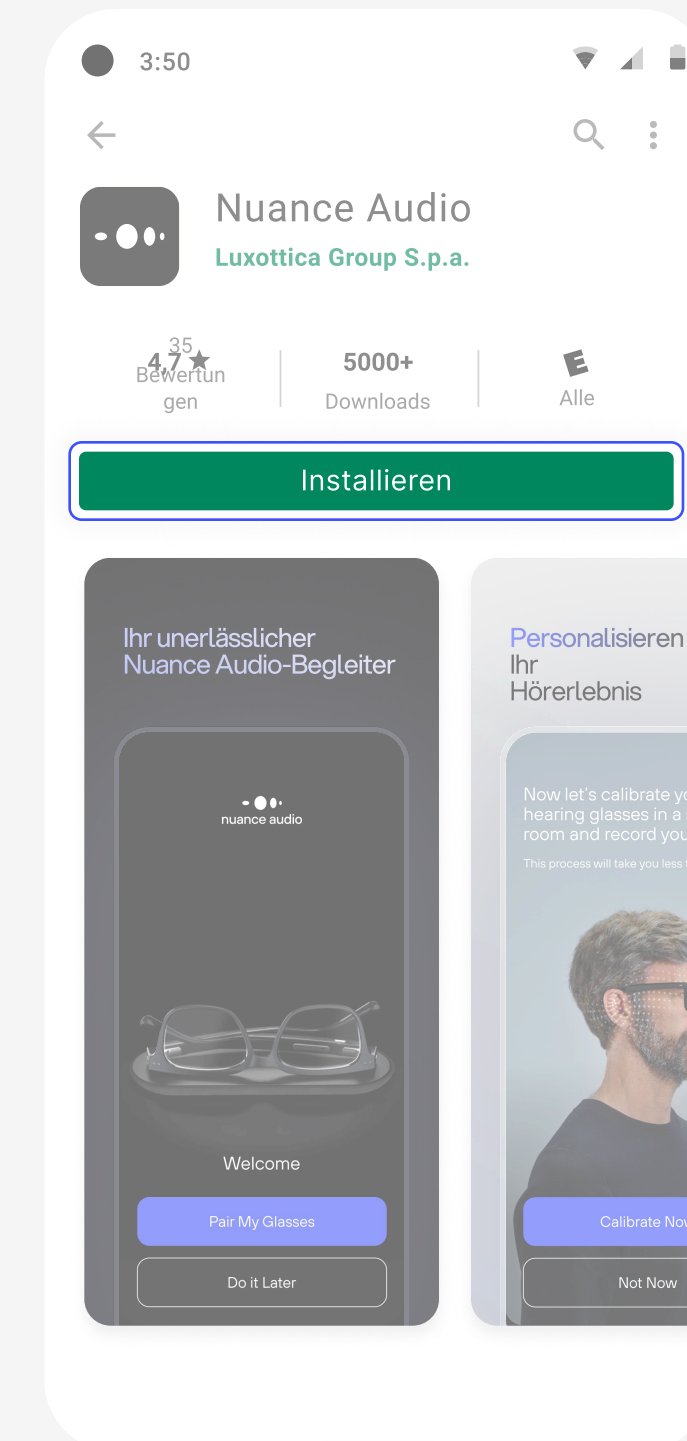

Suchen Sie im Google Play Store nach „Nuance Audio“ und tippen Sie auf **Installieren**

Die Schaltfläche Erhalten wechselt zu Öffnen. Sie können die App über den App Store starten oder sie auf Ihrem Startbildschirm finden.



Registrieren

Nachdem Sie die App heruntergeladen haben, können Sie mit der Registrierung fortfahren.

The image displays four sequential mobile app screens for the Nuance Audio registration process:

- Screen 1: Login/Registration**
 - Header: nuance audio
 - Text: Melden Sie sich bei Ihrem Konto an
 - Form fields: E-Mail, Passwort (with eye icon for toggle)
 - Link: [Passwort vergessen?](#)
 - Button: Anmelden
 - Text: Noch kein Konto? [Registrieren](#)
- Screen 2: Create New Account**
 - Header: Neues Konto erstellen
 - Form fields: Vorname*, Nachname*, E-Mail, E-Mail bestätigen*, Passwort (with eye icon), Geburtsdatum, Geschlecht (dropdown)
 - Text: Geburtsdatum und Geschlecht werden
- Screen 3: OTP Verification**
 - Header: OTP-Verifizierung
 - Text: Geben Sie den OTP-Verifizierungscode aus Ihrer E-Mail ein
 - Notification: Nuance Audio vor 34 Minuten. Verwenden Sie den Code 123456, um auf Ihre Nuance Audio™ App zuzugreifen.
 - Code input: Six boxes containing the digits 1, 1, 1, 1, 1, 1
 - Button: Verifizieren
 - Link: [Code erneut senden](#)
- Screen 4: Login/Registration**
 - Header: nuance audio
 - Text: Melden Sie sich bei Ihrem Konto an
 - Form fields: E-Mail (pre-filled with johnsmith78@gmail.com), Passwort (pre-filled with asterisks, with eye icon)
 - Link: [Passwort vergessen?](#)
 - Button: Anmelden
 - Text: Sie haben noch kein Konto? [Anmelden](#)



Melden Sie sich mit Ihrer Telefonnummer und dem OTP an

Wenn Sie sich mit Ihrer Telefonnummer registrieren, erhalten Sie per SMS ein OTP (Einmalpasswort).

The screen shows the Nuance Audio logo at the top. Below it, the text "Melden Sie sich bei Ihrem Konto an" is displayed. There are two tabs: "E-Mail" and "Telefonnummer", with "Telefonnummer" being the active tab. Below the tabs, there is a dropdown menu for the country code, currently showing "+1" with a US flag. To the right of the dropdown is a text input field labeled "Telefonnummer". Below this is a large black button labeled "Anmelden". Underneath the button is a checkbox labeled "Anmeldedaten speichern". At the bottom, there is a section titled "oder anmelden mit" with two buttons for "Apple" and "Google". At the very bottom, there is a link "Noch kein Konto? Registrieren".

The screen shows the Nuance Audio logo at the top. Below it, the text "Neues Konto erstellen" is displayed. There are four input fields: "Vorname*", "Nachname*", "E-Mail", and "Geburtsdatum". Below these is a dropdown menu for "Geschlecht". At the bottom, there is a dropdown menu for "Land". A note at the bottom states: "Die Angabe Ihres Geburtsdatums und Geschlechts hilft uns dabei, Ihr Brillenerlebnis zu optimieren".

The screen shows the Nuance Audio logo at the top. Below it, the text "Geben Sie den Bestätigungscode ein, gesendet per SMS an +1 1234567890" is displayed. There are six input fields for the OTP code, each containing the digit "1". Below the input fields is a large black button labeled "Verifizieren". Underneath the button is a link "Code erneut senden".


The screen shows the Nuance Audio logo at the top. Below it, the text "Melden Sie sich bei Ihrem Konto an" is displayed. There are two tabs: "E-Mail" and "Telefonnummer", with "Telefonnummer" being the active tab. Below the tabs, there is a dropdown menu for the country code, currently showing "+84" with a US flag. To the right of the dropdown is a text input field labeled "Telefonnummer" containing the number "463754829200". Below this is a large black button labeled "Anmelden". Underneath the button is a checkbox labeled "Anmeldedaten speichern". At the bottom, there is a section titled "oder anmelden mit" with two buttons for "Apple" and "Google". At the very bottom, there is a link "Noch kein Konto? Registrieren".



Telefonkopplung: erstes Gerät



Aktivieren Sie den Kopplungsmodus, indem Sie den „Slide On“-Schalter nach vorne schieben, bis die blaue LED blinkt.

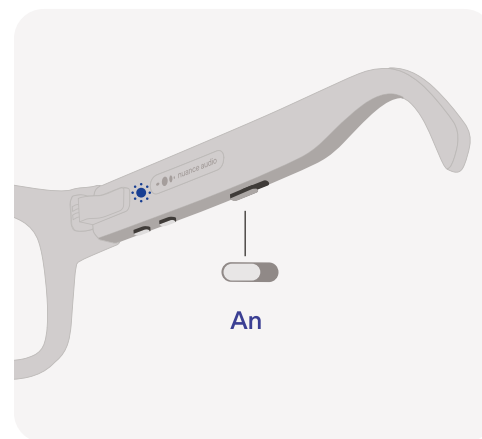


Erteilen Sie die Bluetooth-Berechtigung. Drücken Sie **Zulassen**




Starten Sie die Kopplung. Drücken Sie **Start**



Telefonkopplung: erstes Gerät

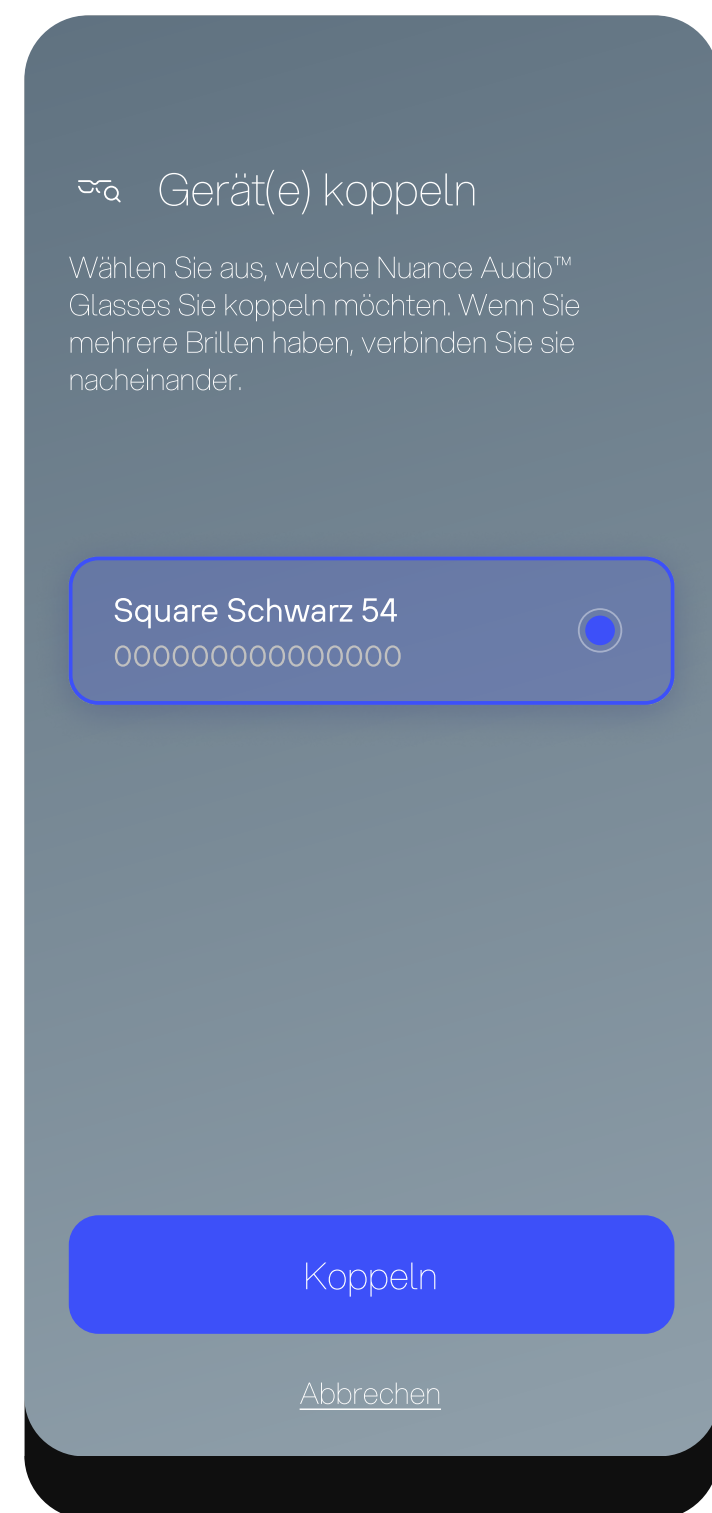

Nuance Audio Plus auswählen.
Drücken Sie **Koppeln**

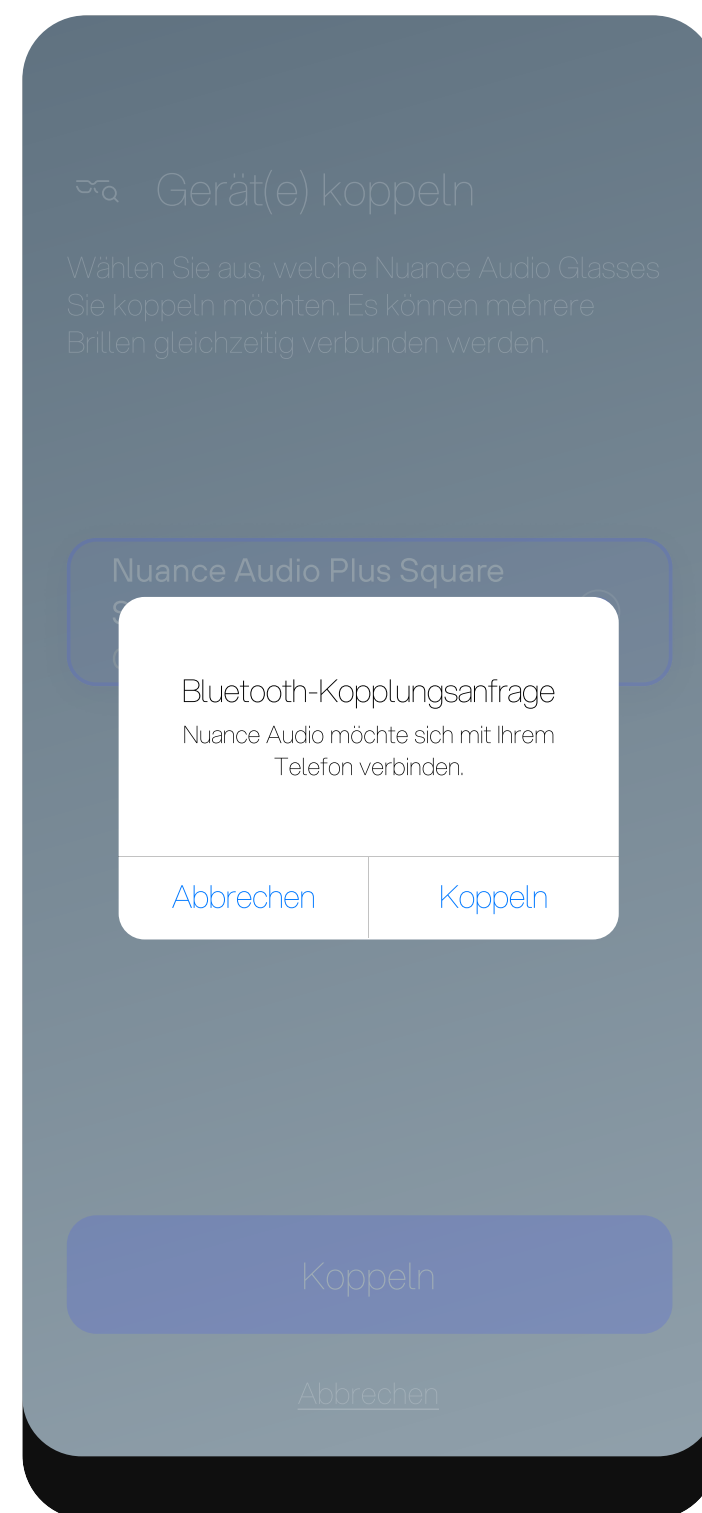


Bluetooth-Kopplungsanfrage zulassen.
Drücken Sie **Koppeln**



Kopplung abgeschlossen.

Kopplung eines zweiten Geräts mit demselben Konto

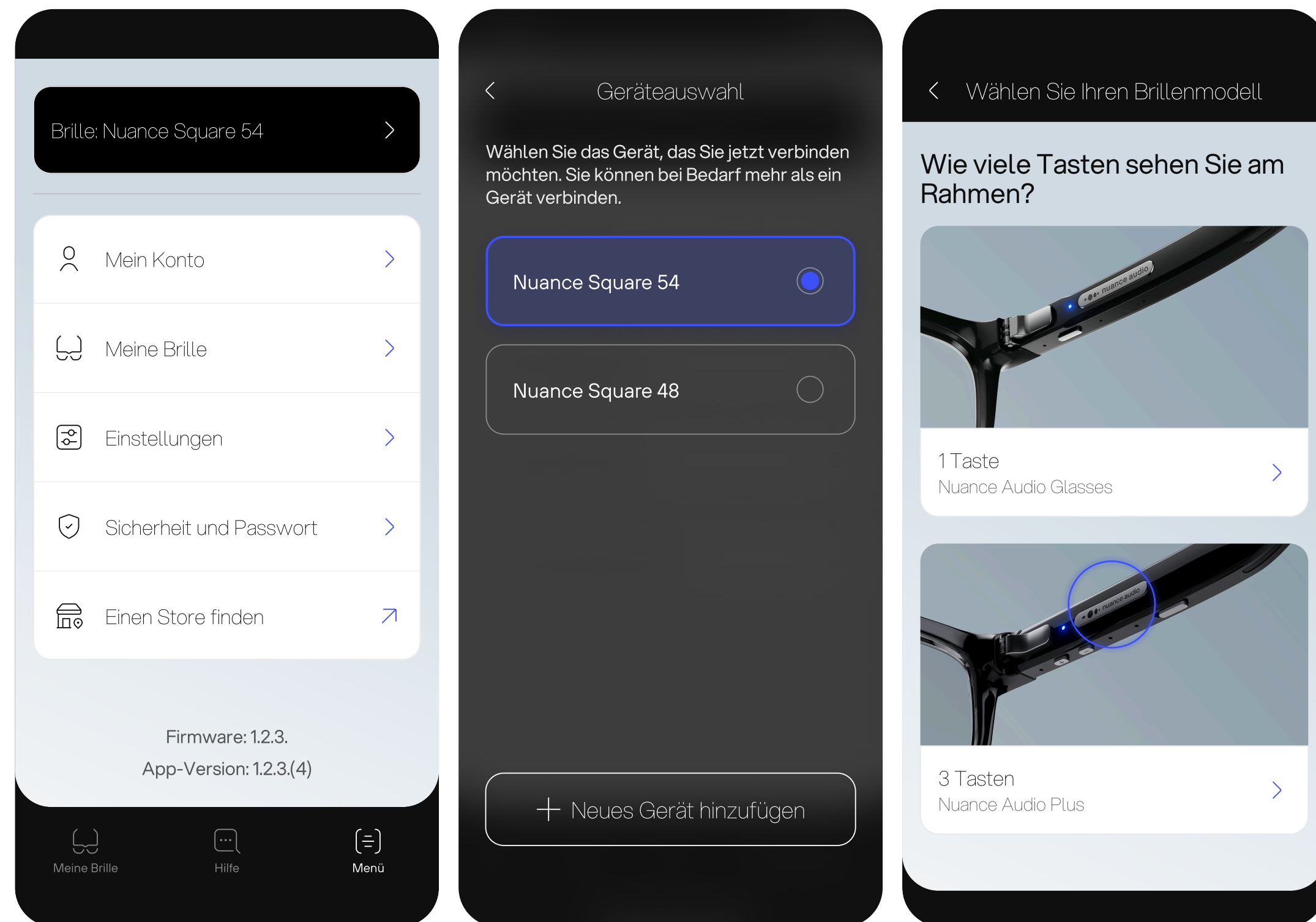


Schritt 0.1
Gehen Sie zu **Menü**.
Tippen Sie auf das „Brillen“-Symbol im oberen Banner, um eine neue Brille hinzuzufügen.

Schritt 0.2
Wählen Sie die Brille aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Drücken Sie auf "Neues Gerät hinzufügen."


Schritt 0.3
Wählen Sie Ihr Brillenmodell

Schritt 0.4
Um das Koppeln zu starten, schieben Sie den Schieberegler, drücken Sie „+“ oder „-“ und **halten Sie 8 Sekunden lang gedrückt**, bis die blaue LED blinkt.

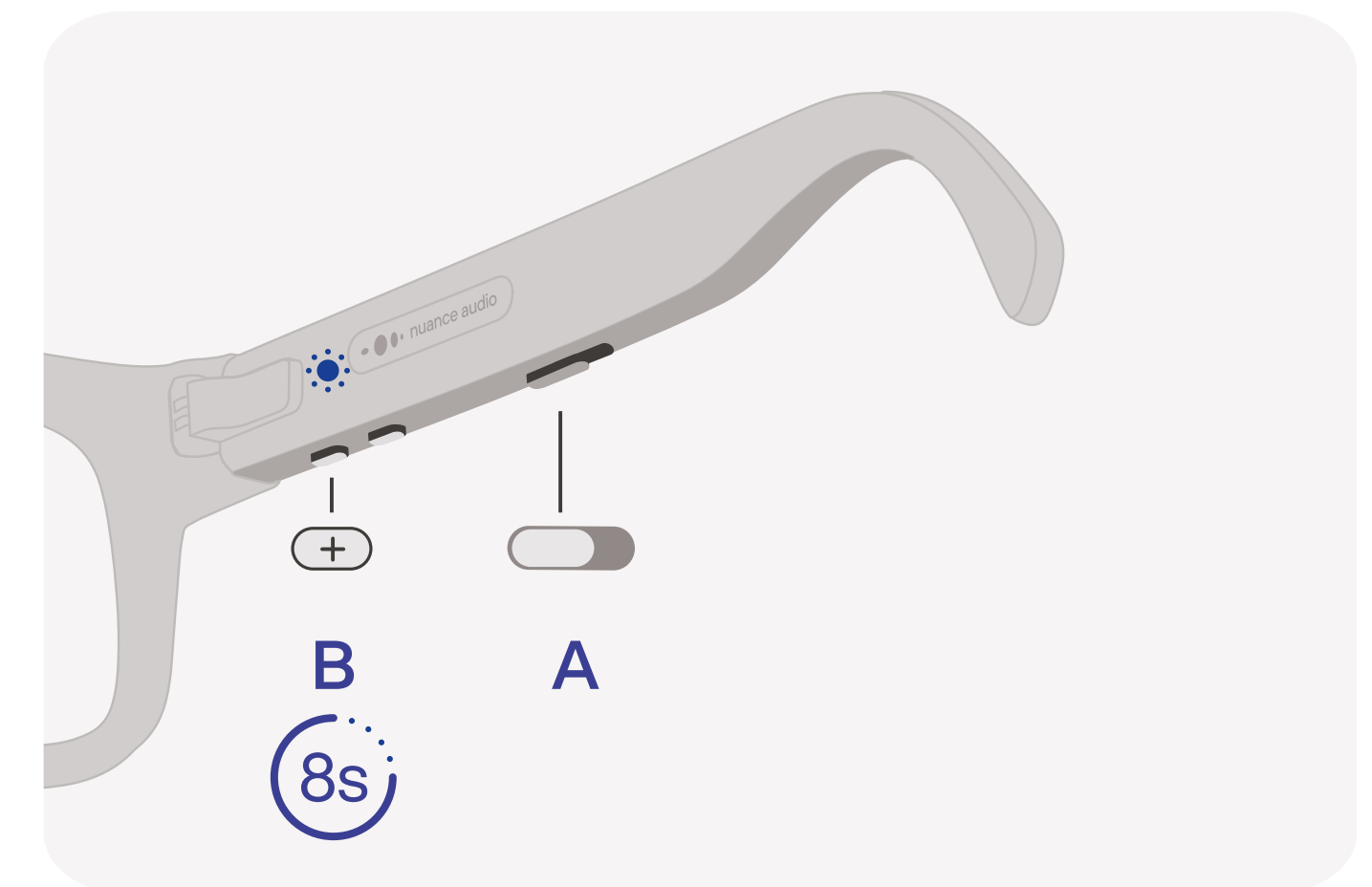




Kopplung eines zweiten Geräts mit demselben Konto

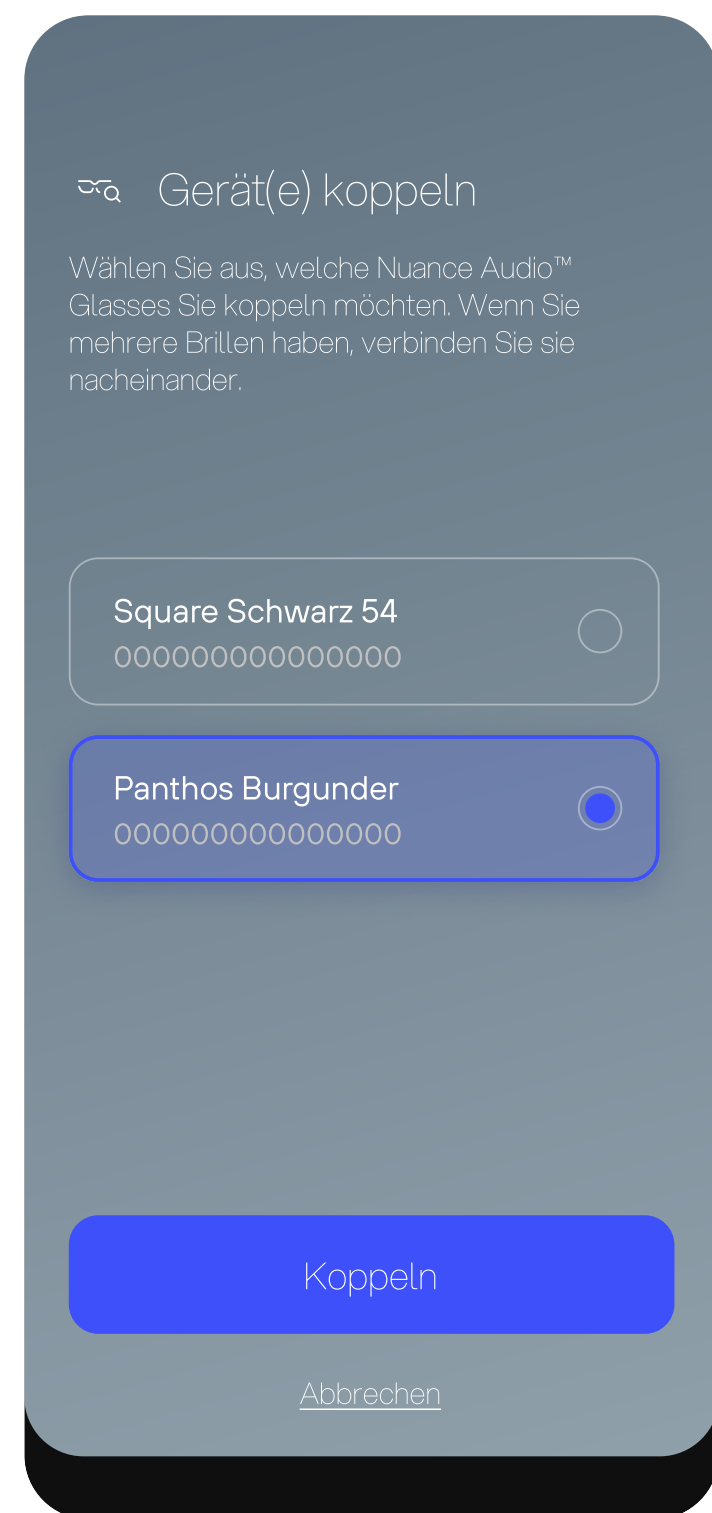

Wählen Sie die Nuance Audio Plus aus der Liste aus.
Drücken Sie **Koppeln**

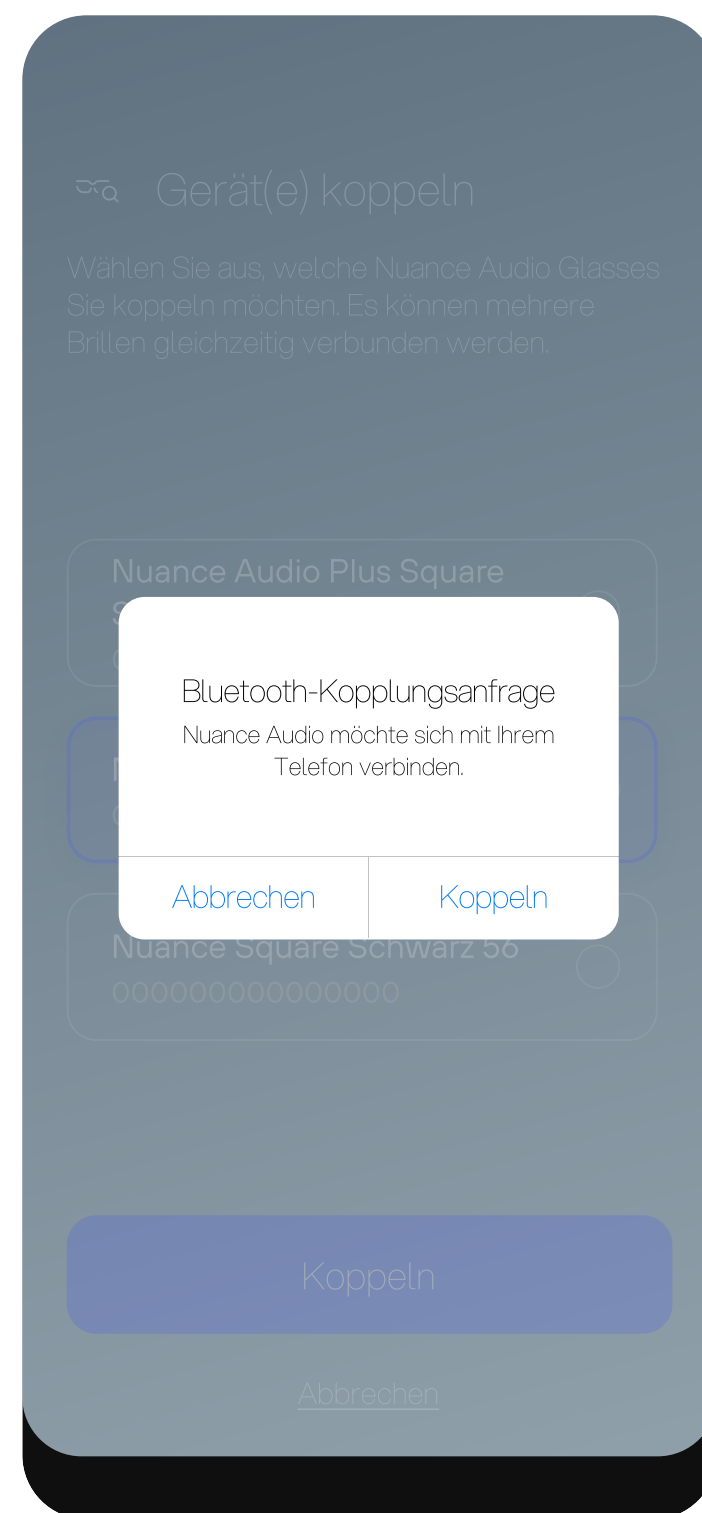

Bluetooth-Kopplungsanfrage zulassen.
Drücken Sie **Koppeln**



Kopplung abgeschlossen.



Was ist eine personalisierte Kalibrierung?

Kalibrieren Sie Ihre Nuance Audio Plus so, dass sie individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Die personalisierte Kalibrierung optimiert den Klang basierend auf Ihrer Kopfform und Stimme.

Hier sind zwei Bereiche, auf die sie sich konzentriert:

- **Klarerer Klang:** Passt die Töne an, um Rückkopplungen und Störgeräusche zu reduzieren, sodass Sie klarer hören können.
- **Natürliches Sprach-Rückkopplung:** Zeichnet Ihre Stimme auf, damit Ihre Gespräche natürlicher klingen.





Wie holen Sie das Beste aus Ihrer Kalibrierung heraus?

Der Kalibrierungsvorgang dauert nur eine Minute, ist aber unerlässlich, damit Sie Ihr Nuance Audio Plus optimal nutzen können.

Wenn Sie mehrere Brillen besitzen, kalibrieren Sie jede einzeln.

Einige Tipps zur Optimierung Personalisierte Kalibrierung:

- Finden Sie einen ruhigen Ort in Ihrem Zuhause und vermeiden Sie große oder offene Räume.
- Halten Sie sich von Bereichen mit vielen oder großen Fenstern fern.
- Vermeiden Sie Räume mit hohen Decken, in denen Hintergrundgeräusche unvorhersehbar sein können.
- Halten Sie sich von Ecken fern und vermeiden Sie es, Spiegeln gegenüberzustehen.
- Idealerweise sollten Sie so nah wie möglich in der Mitte des Raumes stehen, um eine optimale Klangqualität zu erzielen.
- Letzter Tipp: Ihr Schlafzimmer ist oft die beste Option.

Einige Tipps zur Optimierung Sprachkalibrierung:

Sprechen Sie laut, aber ohne zu schreien.
Projizieren Sie Ihre Stimme, als würden Sie mit jemandem am anderen Ende des Raumes sprechen.
Minimieren Sie Pausen so weit wie möglich.
Wenn Sie mehrere Brillen besitzen, kalibrieren Sie jede einzeln.


Wie kalibriert man seine Brille?



Im Dashboard der Nuance-App tippen Sie auf (unten rechts in der Navigationsleiste).

Hinweise


Eine blaue Anzeige benachrichtigt Sie und führt Sie zum Kalibrierungsbildschirm

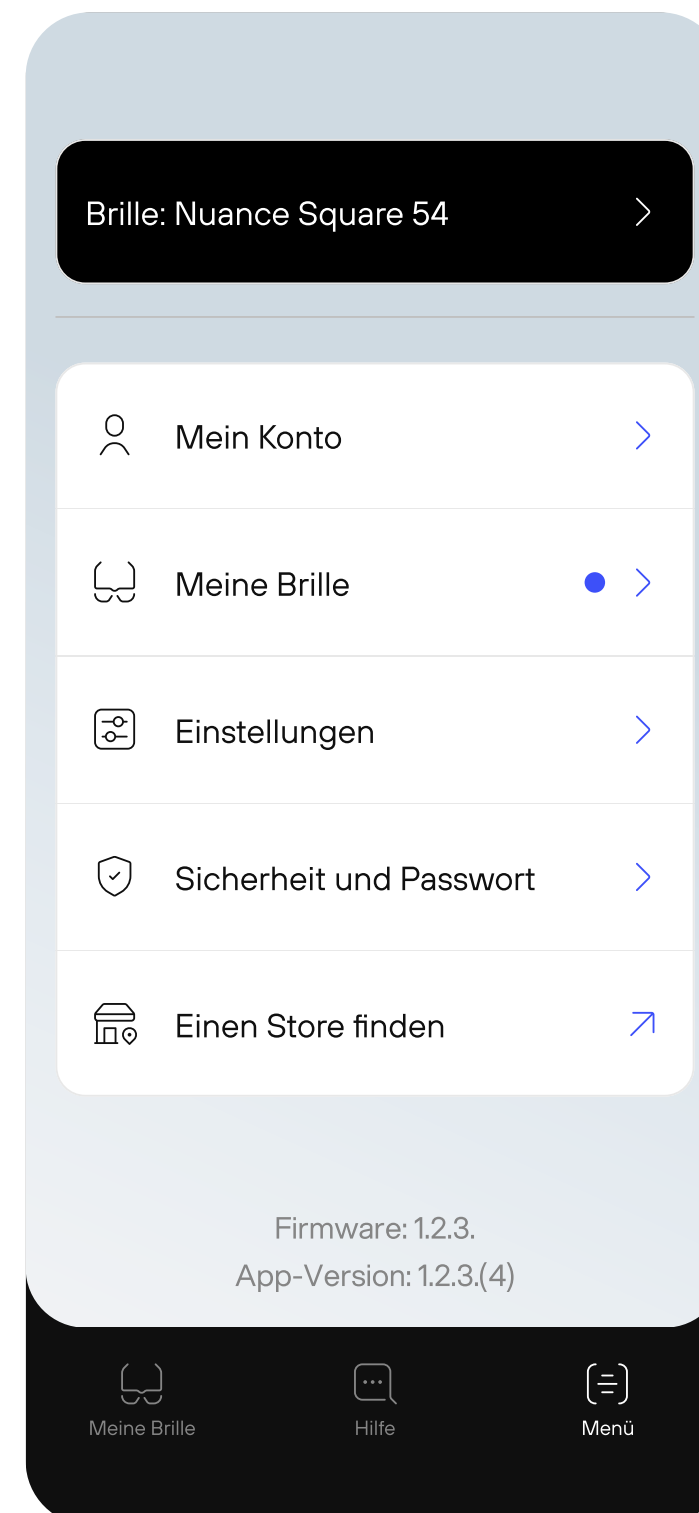

Tippen Sie auf **Einstellungen**.

Hinweise

Eine blaue Anzeige benachrichtigt Sie und führt Sie zum Kalibrierungsbildschirm

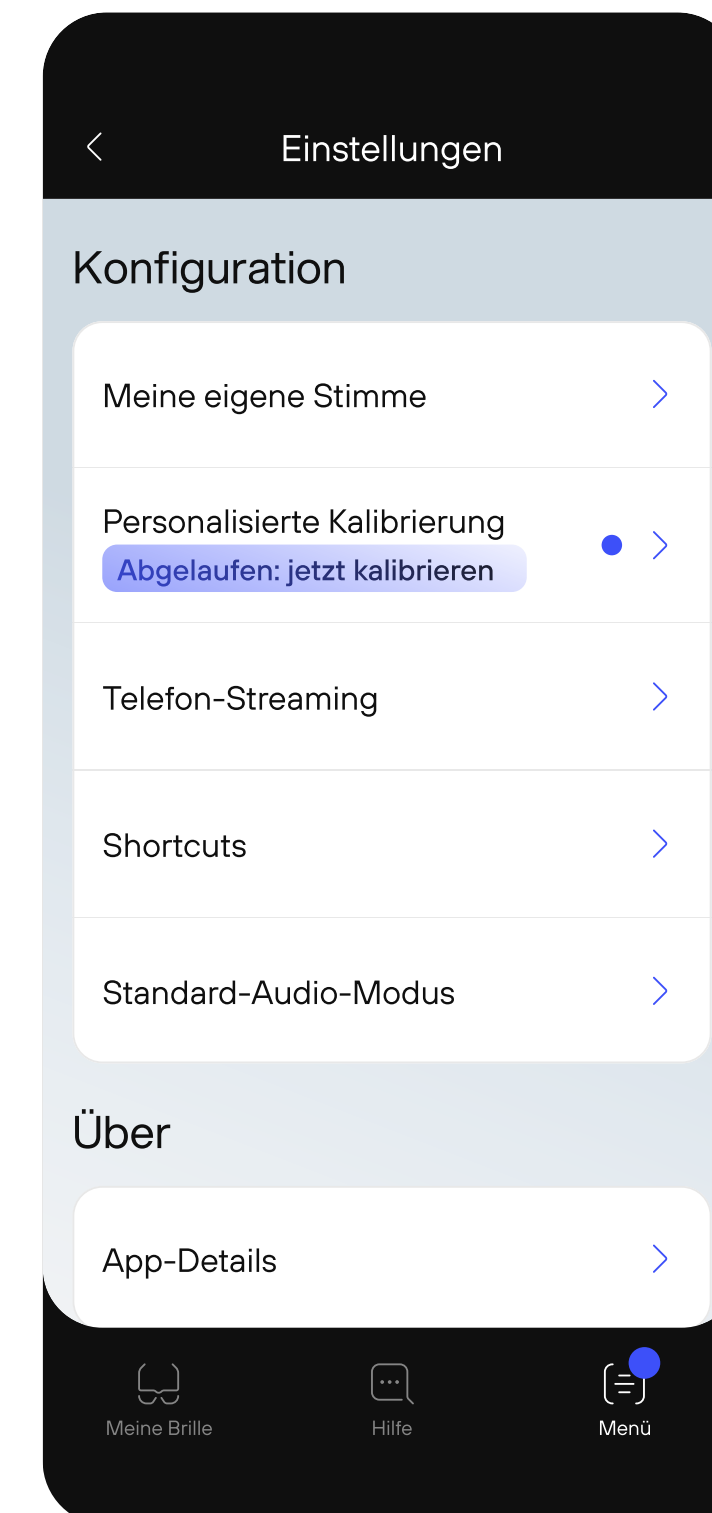

Um die Kalibrierung zu starten, tippen Sie auf **Personalisierte Kalibrierung**.

Hinweise


Eine blaue Anzeige und ein entsprechendes Label weisen Sie darauf hin, wann eine neue Kalibrierung erforderlich ist, um die Audioeinstellungen zu aktualisieren.




Wie kalibriert man seine Brille?




Um die Kalibrierung zu starten, suchen Sie sich einen ruhigen Raum und drücken Sie dann auf **Kalibrierung starten**.

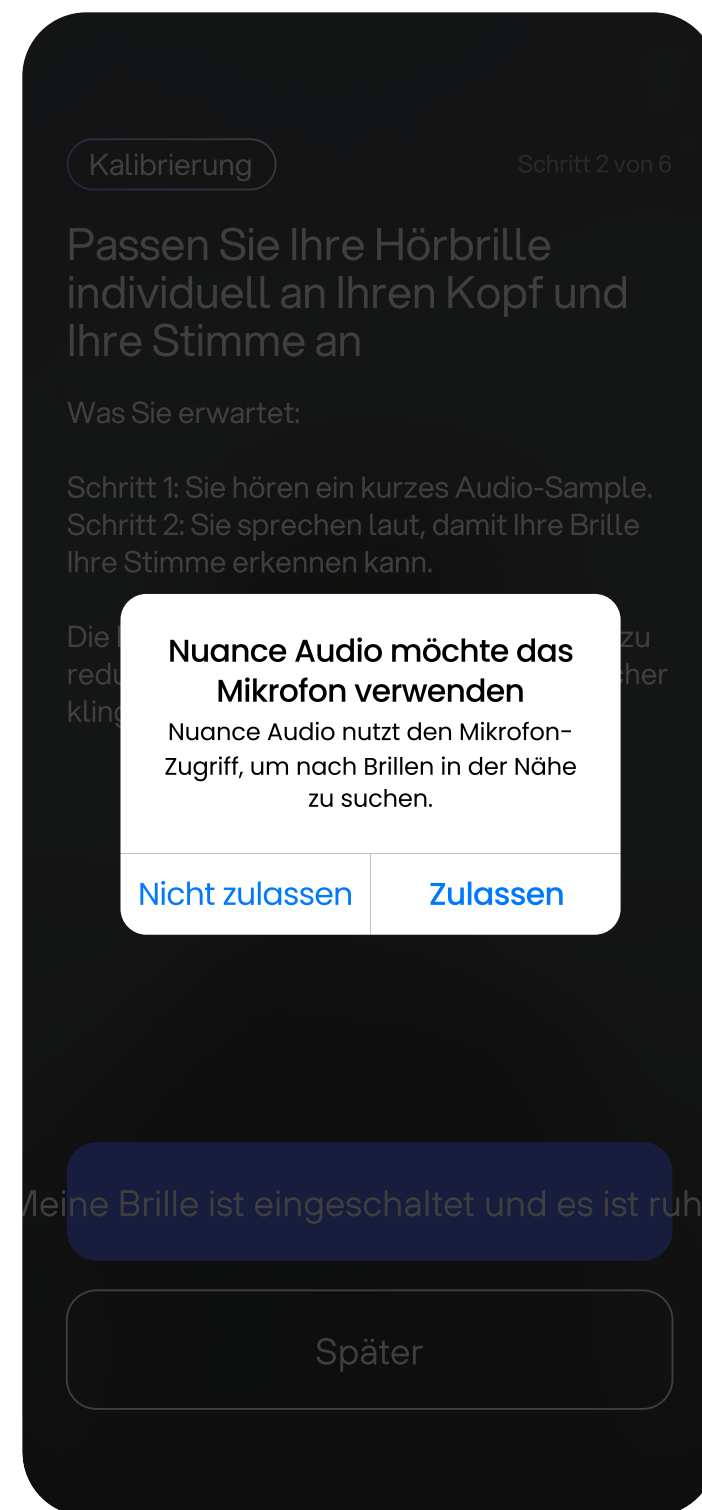

Sie müssen das Mikrofon Ihres Telefons zulassen, damit Töne gemessen und analysiert werden können. Tippen Sie auf **Zulassen**.

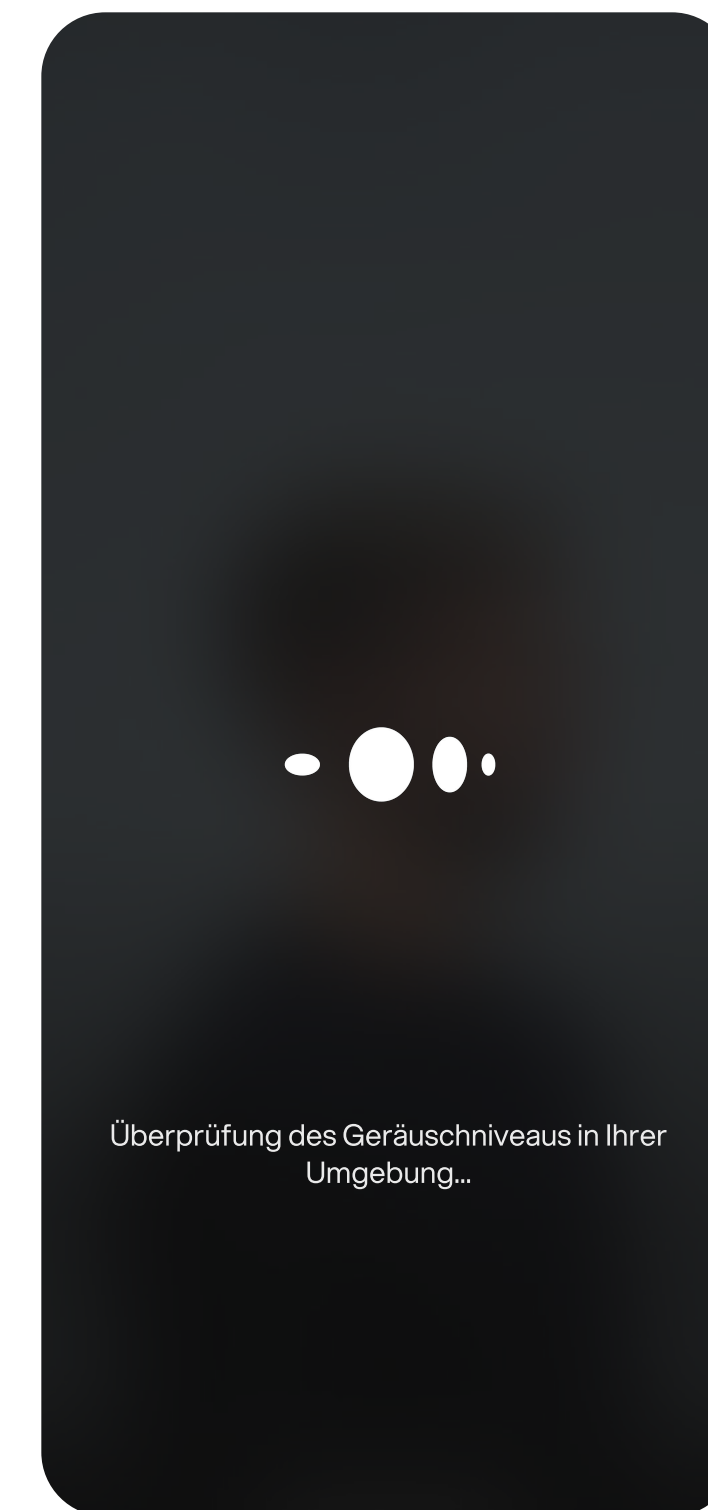

Kopplung wurde abgeschlossen. Eine Pop-up-Benachrichtigung erinnert Sie daran, Ihre Nuance Audio Plus während des gesamten Vorgangs eingeschaltet zu lassen.

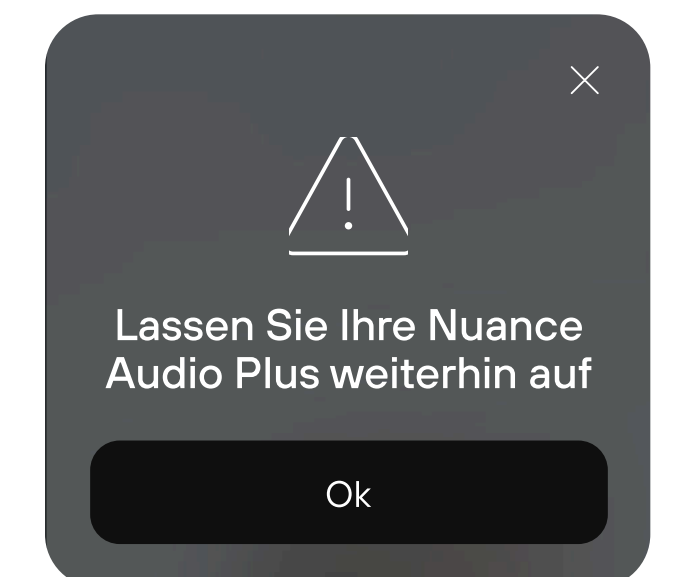





Wie kalibriert man seine Brille?



Schritt 1.1
Umgebungsgeräusche
ssung.
Lassen Sie Ihre Brille auf
und tippen Sie **Audio-
Beispiel abspielen**

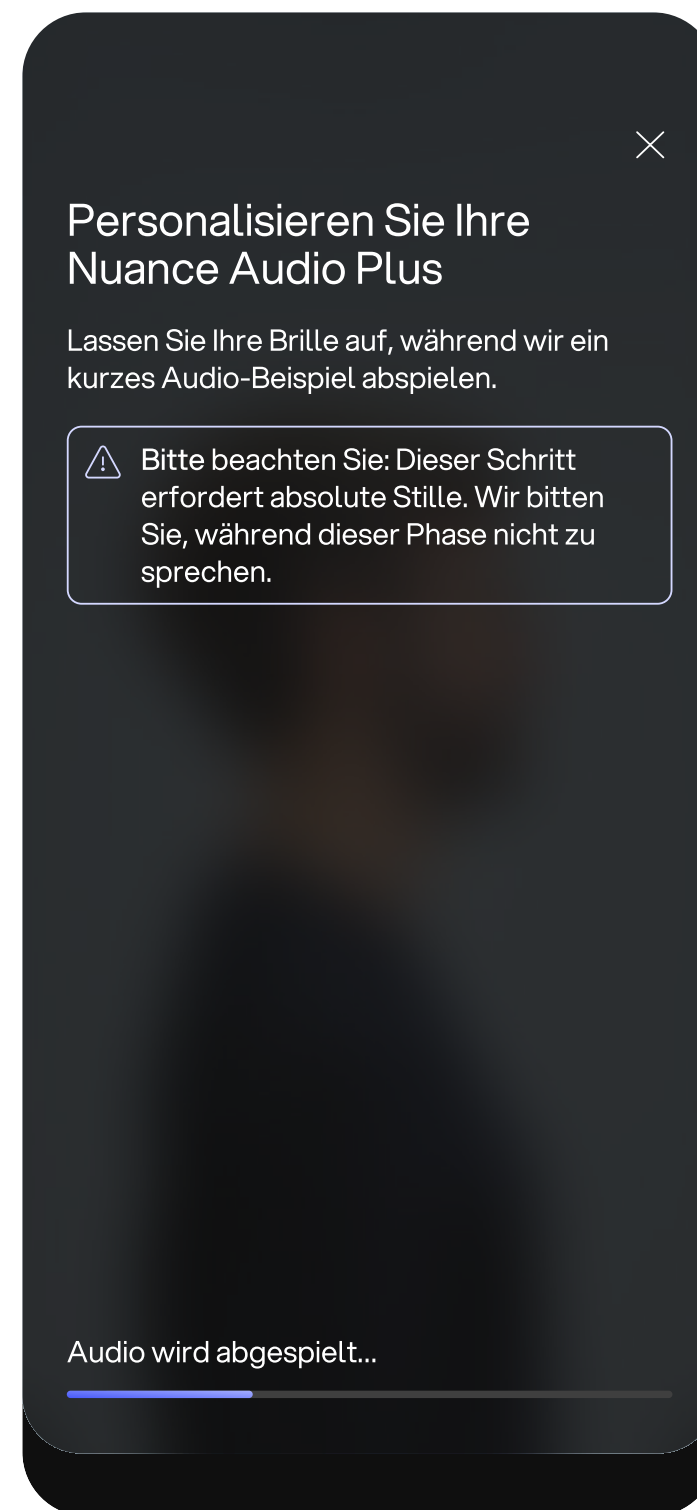

Schritt 1.2
Bewegen Sie sich nicht und
nehmen Sie die Brille nicht
ab, **warten Sie bis zum
Ende des Audio-Sampels.**

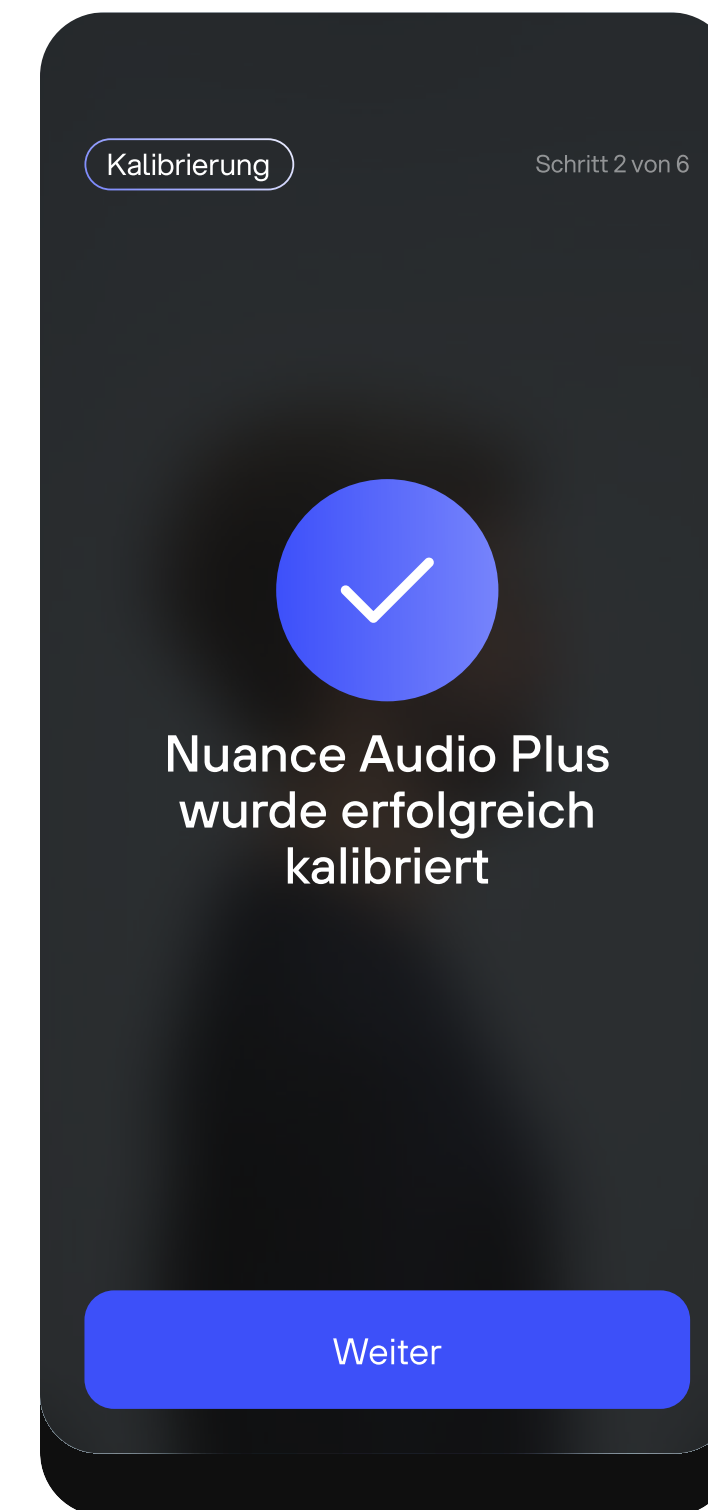


Schritt 1.3
Umgebungsgeräusche
ssung abgeschlossen.




Wie kalibriert man seine Brille?



Schritt 2.1
Kalibrierung meiner eigenen Stimmen.
Bewegen Sie sich nicht und nehmen Sie die Brille nicht ab.
Drücken Sie Aufnahme starten.

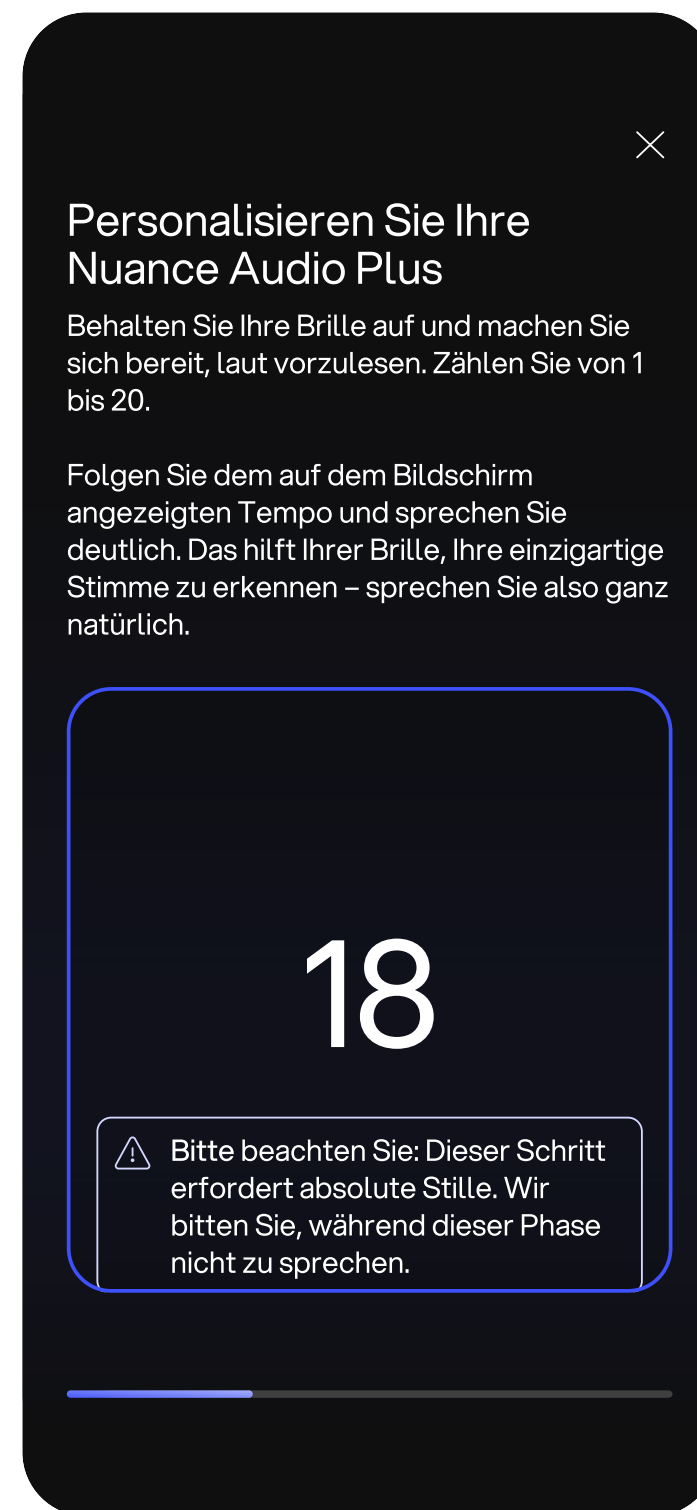

Schritt 2.2
Zählen Sie laut, bis die Fortschrittsanzeige das Ende erreicht.

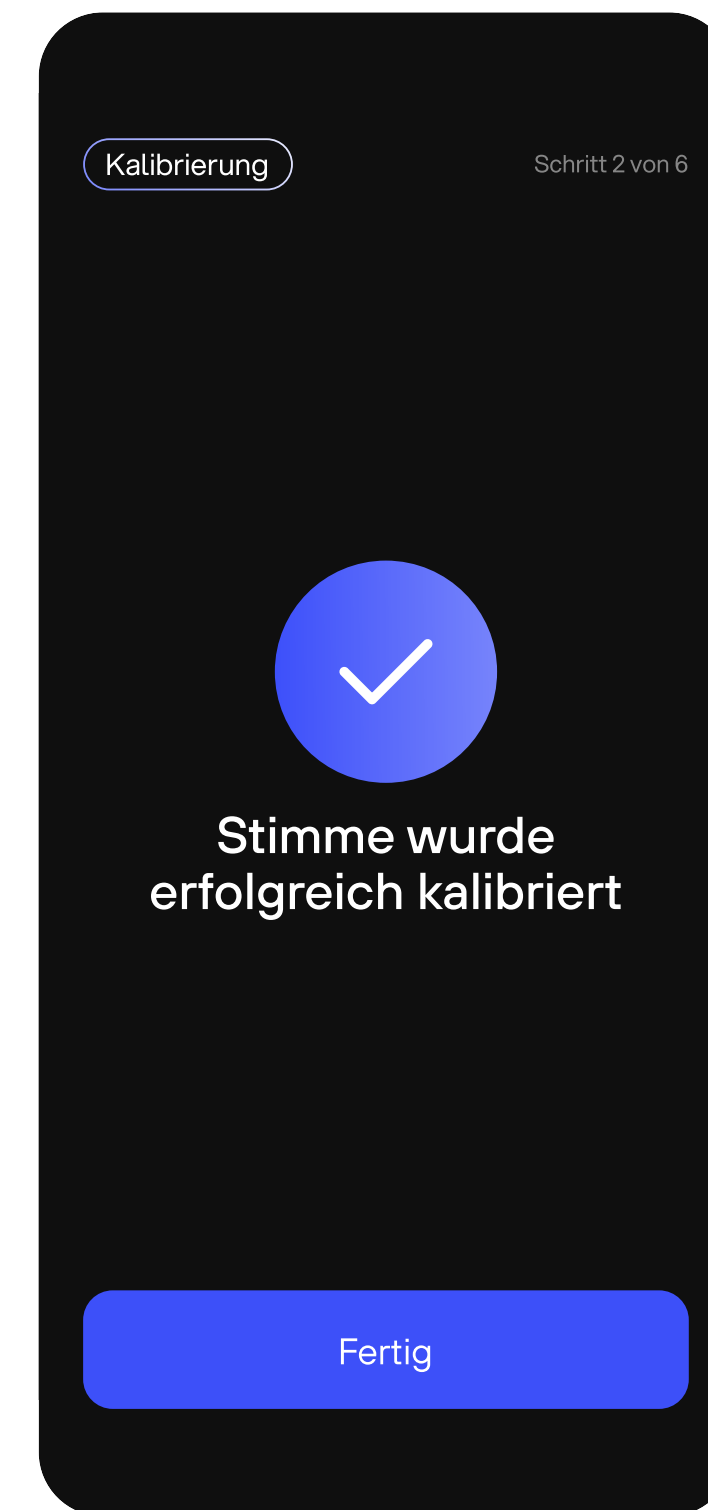

Schritt 2.3
Die personalisierte Kalibrierung wurde erfolgreich abgeschlossen.



Für die aktuellsten Gebrauchsanweisungen
folgen Sie bitte diesem Link.

[↗ Anleitung anzeigen](#)