





Empezar: creación de cuenta, emparejamiento, calibración



Desembalaje

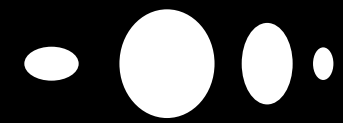

Desembalaje

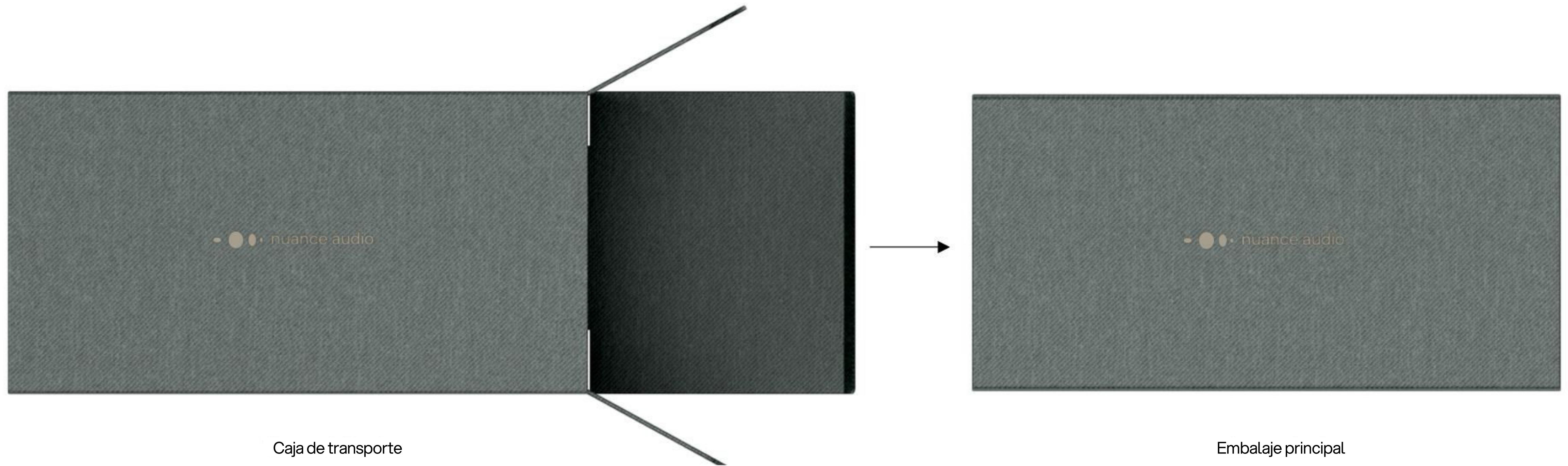




Desembalaje



Paquete



Charging Pad y cajón para documentación

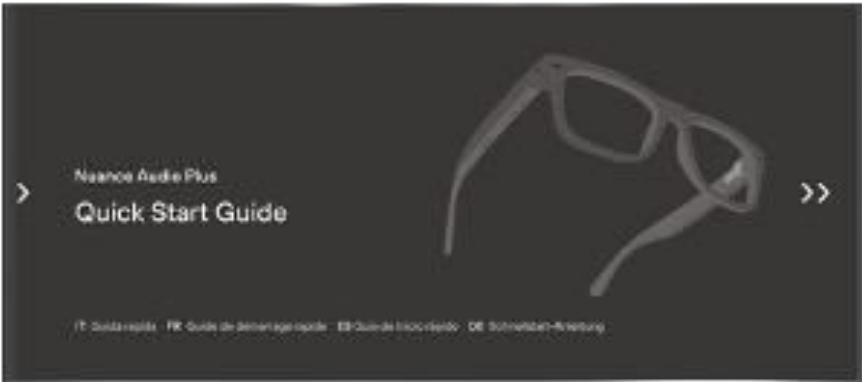

QSG



Instrucciones de uso



Estuche plegable




Charging Pad



Nuance Audio Plus



Paño de limpieza

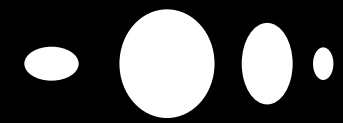


Activa y configura tu Nuance Audio Plus




Busca Nuance Audio App

Para facilitar el uso de tus Nuance Audio Plus, nuestra intuitiva aplicación móvil te permite cambiar las modalidades de audio, controlar el volumen y reducir el ruido de fondo, todo desde tu teléfono.

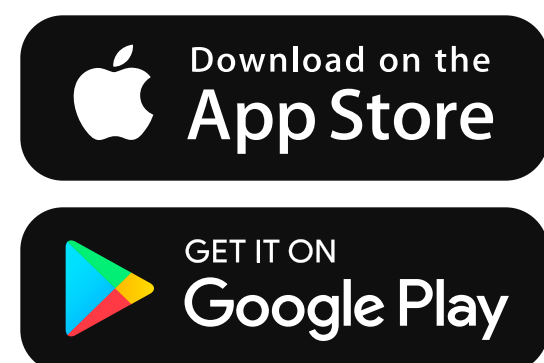


Opción A.

Escanea el código QR con tu móvil y [Descarga](#)

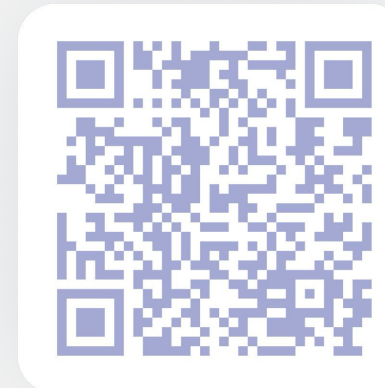



Notas

También puedes encontrar el código QR en la caja principal

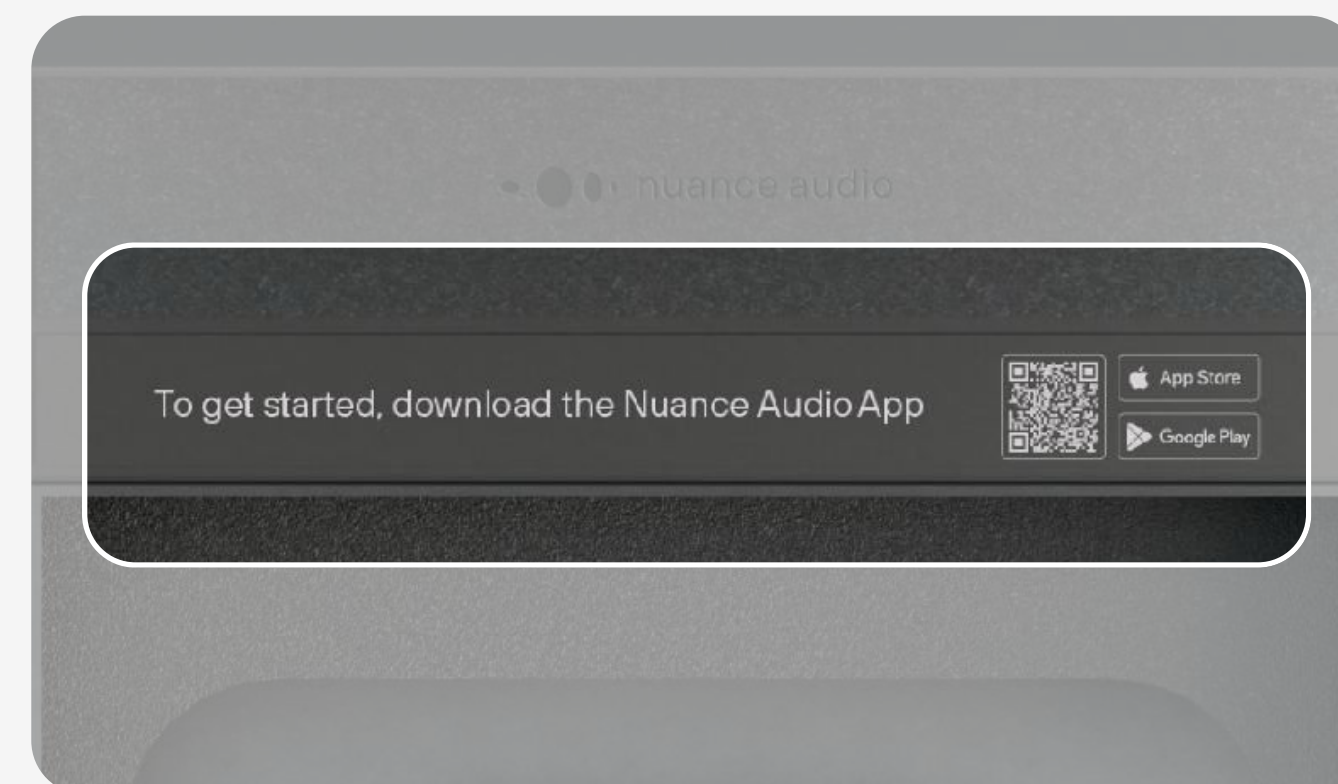

Opción B.


Busca "Nuance Audio" en la App Store o en Google Play Store y [descárgala](#)

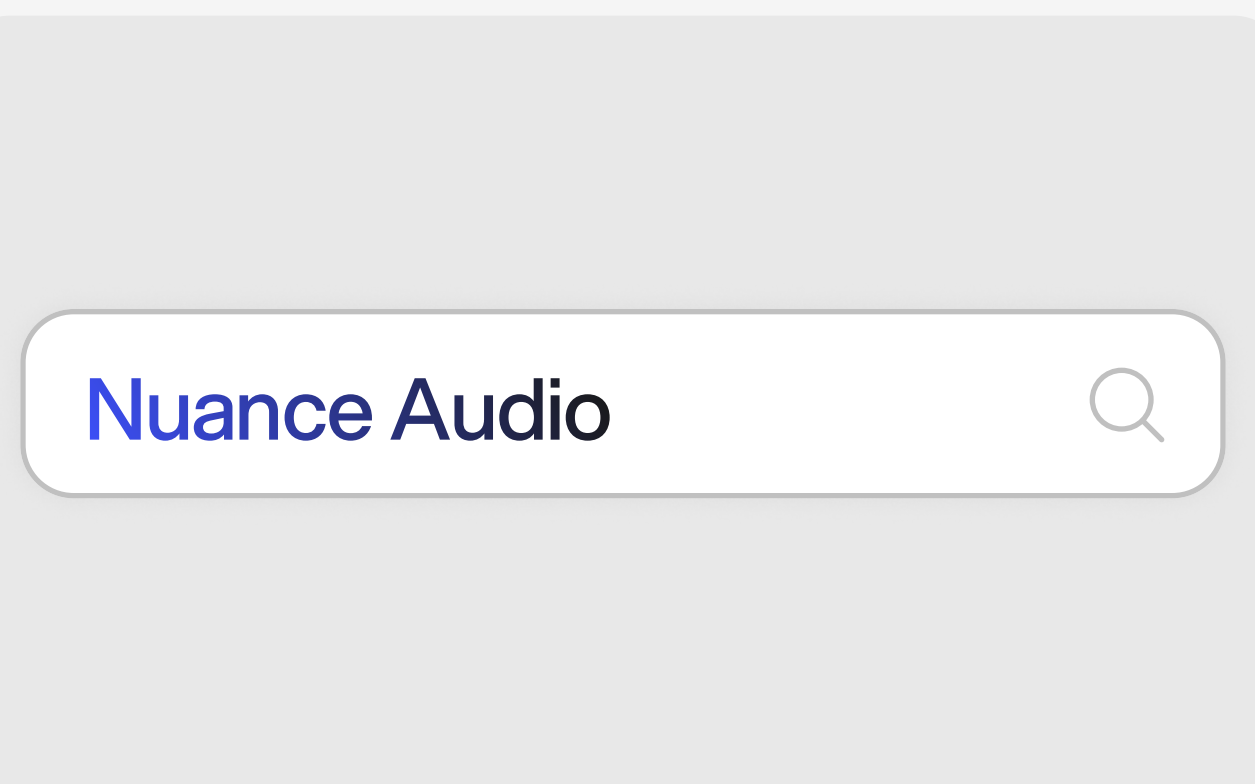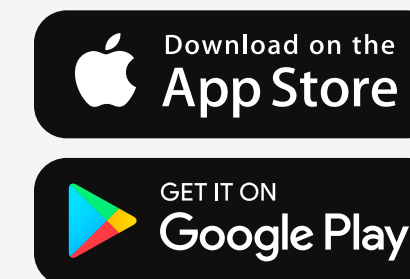




Descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo

Para activar y personalizar tus Nuance Audio Plus, **descarga Nuance Audio App** desde la App Store en iOS o Google Play Store.

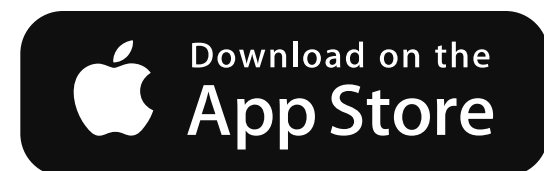


Apple App Store

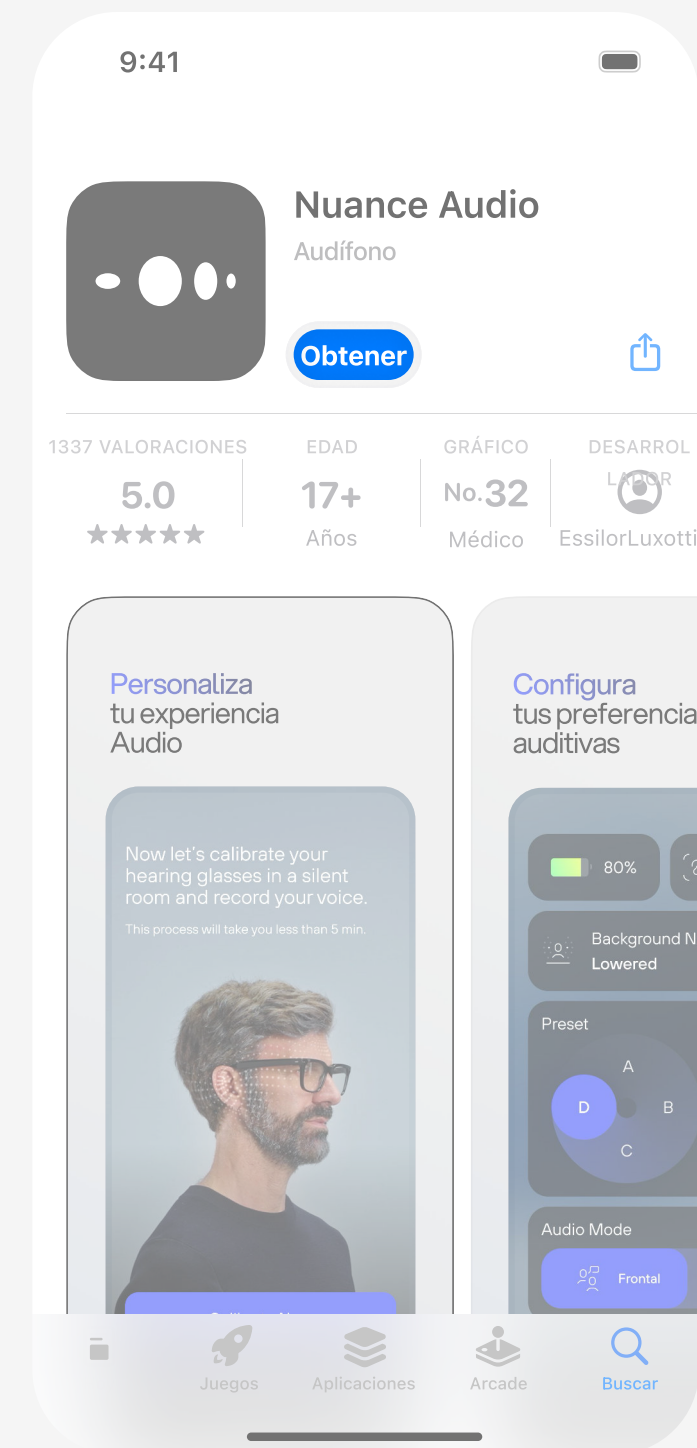

Busca "Nuance Audio" en la App Store de iOS y toca **Obtener**

El botón Obtener cambiará a Abrir. Podrás iniciar la aplicación desde la App Store o encontrarla en tu pantalla principal.

Google Play Store

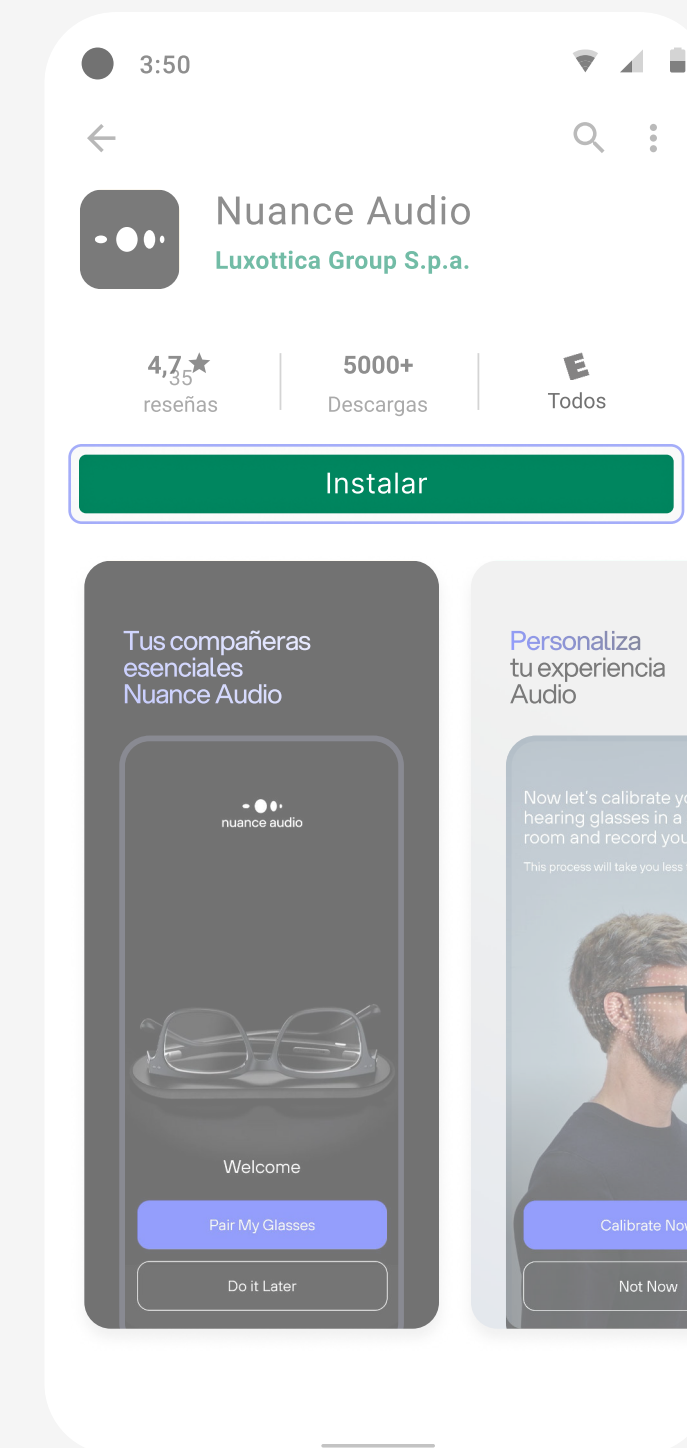

Busca "Nuance Audio" en Google Play Store y toca **Instalar**

El botón Obtener cambiará a Abrir. Podrás iniciar la aplicación desde la App Store o encontrarla en tu pantalla principal.



Regístrate

Una vez que hayas descargado la aplicación, podrás continuar con el registro.

nuance audio

Inicia sesión en tu cuenta

Correo electrónico

Contraseña

¿Has olvidado la contraseña?

Iniciar sesión

<Crea una cuenta

Nombre*

Apellidos*

Correo electrónico

Confirmar correo electrónico*

Contraseña

Fecha de nacimiento

Género

La fecha de nacimiento y el género se

Nuance Audio

Hace 34 minutos

Utiliza el código 123456 para acceder a tu Nuance Audio™ App.

Verificación OTP

Introduce el código de verificación OTP que has recibido por correo electrónico

1

1

1

1

1

1

Verificar

Reenviar el código

nuance audio

Inicia sesión en tu cuenta

Correo electrónico

johnsmith78@gmail.com

Contraseña

¿Has olvidado la contraseña?

Iniciar sesión

¿No tienes una cuenta? Registrarse



Regístrate con tu número de teléfono usando OTP

Si eliges registrarte con tu número de teléfono, recibirás un OTP (contraseña de un solo uso) por SMS.

Mobile app login screen for Nuance Audio. The header shows the Nuance Audio logo. Below it, the text "Inicia sesión en tu cuenta" is displayed. There are two input fields: "Correo electrónico" and "Número de teléfono". The "Número de teléfono" field is highlighted with a black background. Below the input fields, there is a dropdown menu for the country code, currently showing "+1" with a US flag. A large black button labeled "Iniciar sesión" is positioned below the input fields. Below the button, there is a "Recuérdame" checkbox. At the bottom, there is a section for social login with "o Inicia sesión con" followed by "Apple" and "Google" buttons. At the very bottom, there is a link "¿No tienes una cuenta? Registrarse".

Mobile app registration screen for Nuance Audio. The header shows a back arrow and the text "Crea una cuenta". Below it, there are several input fields: "Nombre*", "Apellidos*", "Número de teléfono*" (with a dropdown for country code showing "+1" and a US flag), "Correo electrónico", "Fecha de nacimiento", "Género" (with a dropdown arrow), and "País" (with a dropdown arrow). A note at the bottom states: "Si nos indicas tu fecha de nacimiento y sexo, podremos perfeccionar tu experiencia con las gafas."

Mobile app OTP verification screen for Nuance Audio. The header shows a back arrow and the text "Verificación OTP". Below it, there is a message: "Introduce el código de verificación enviado por SMS a +11234567890". There are six input fields for the OTP code, each containing the digit "1". A large black button labeled "Verificar" is positioned below the input fields. Below the button, there is a link "Reenviar el código".



Mobile app login screen for Nuance Audio. The header shows the Nuance Audio logo. Below it, the text "Inicia sesión en tu cuenta" is displayed. There are two input fields: "Correo electrónico" and "Número de teléfono". The "Número de teléfono" field is highlighted with a black background and contains the pre-filled number "463754829200". Below the input fields, there is a dropdown menu for the country code, currently showing "+84" with a US flag. A large black button labeled "Iniciar sesión" is positioned below the input fields. Below the button, there is a "Recuérdame" checkbox. At the bottom, there is a section for social login with "o Inicia sesión con" followed by "Apple" and "Google" buttons. At the very bottom, there is a link "¿No tienes una cuenta? Registrarse".



Emparejamiento de teléfono: primer dispositivo



Entra en modo de emparejamiento moviendo el botón de **Encendido** **deslizante hacia adelante** hasta que el led azul

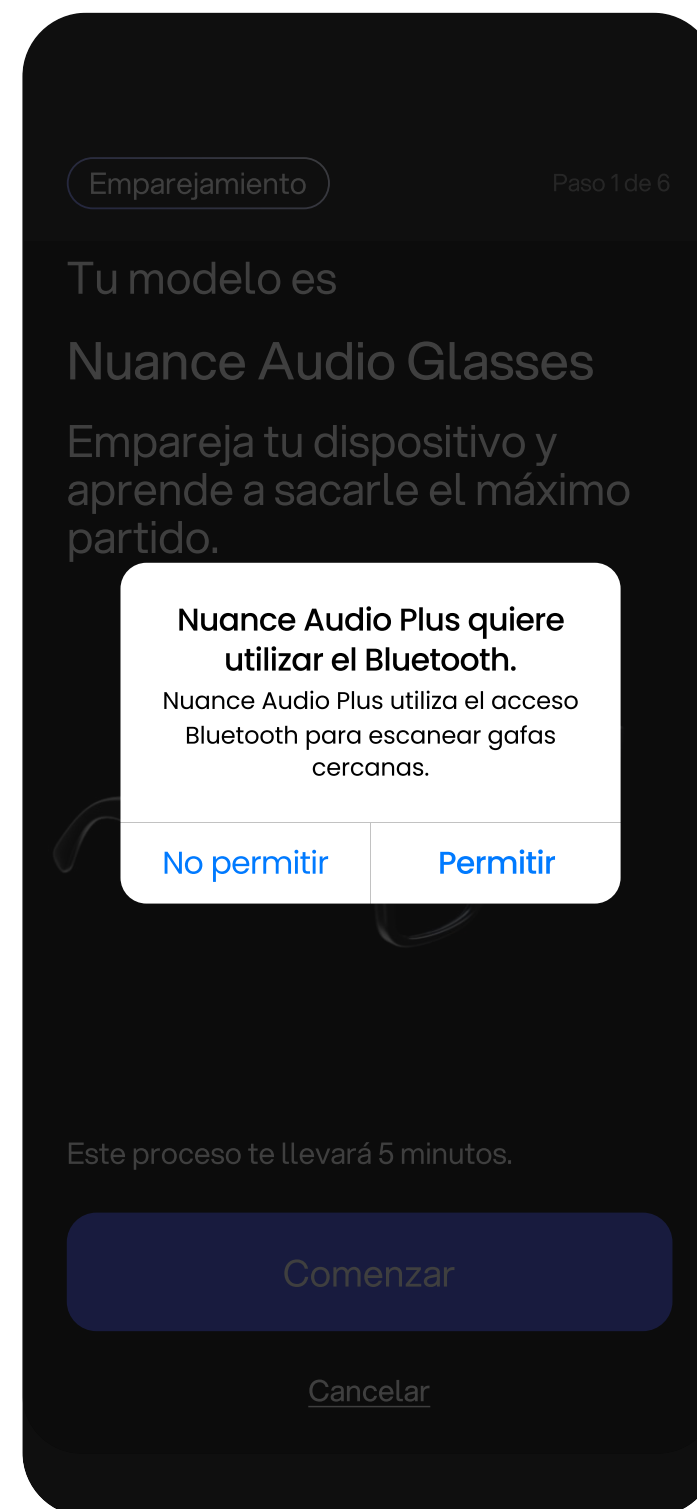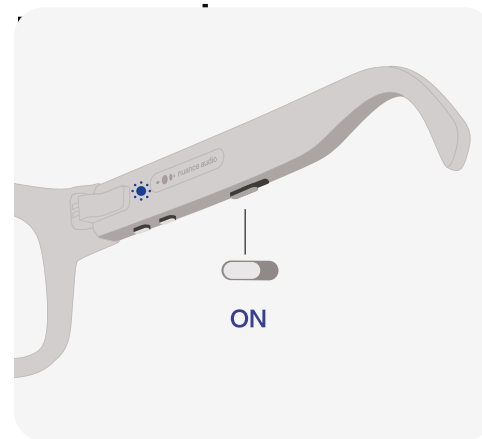


Habilita los permisos de Bluetooth.
Presiona Permitir




Inicia el emparejamiento.
Presiona Iniciar




Emparejamiento de teléfono: primer dispositivo

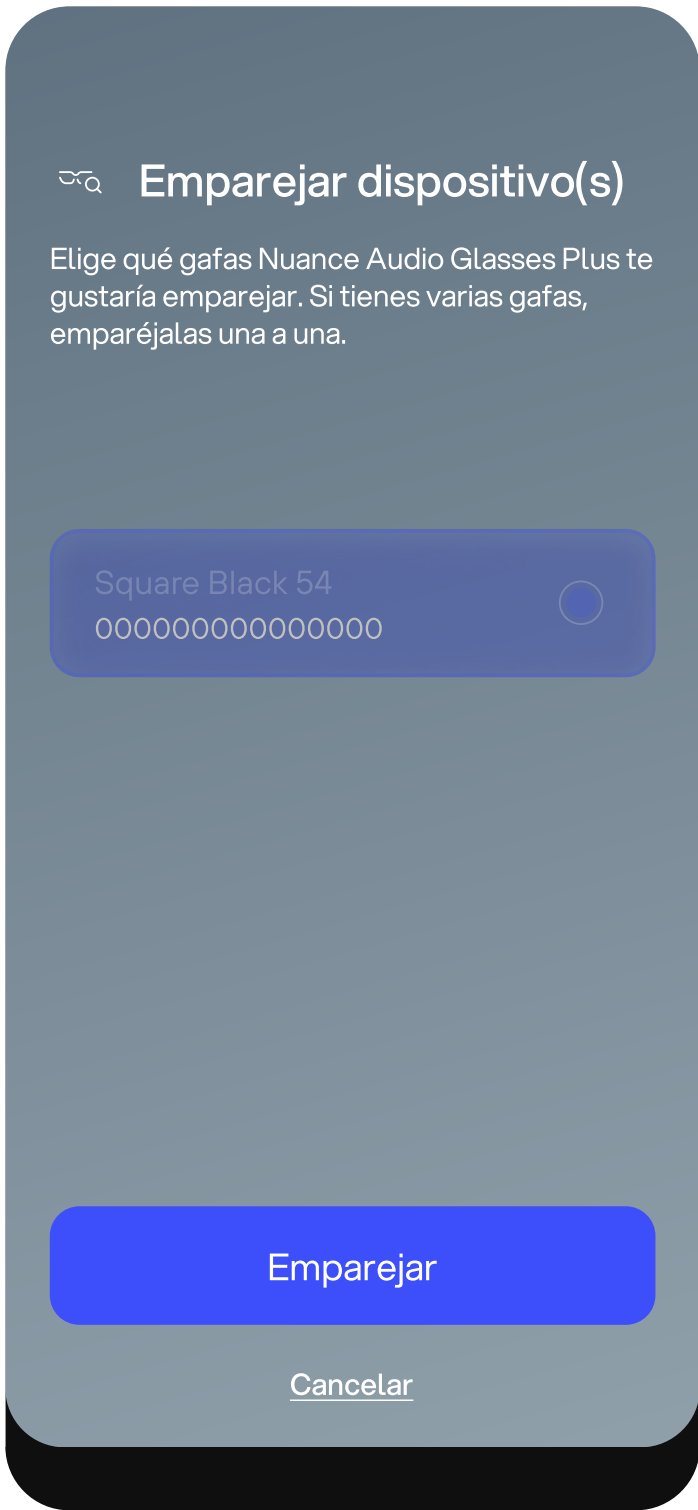

Selecciona Nuance Audio Plus.
Presiona **Emparejar**

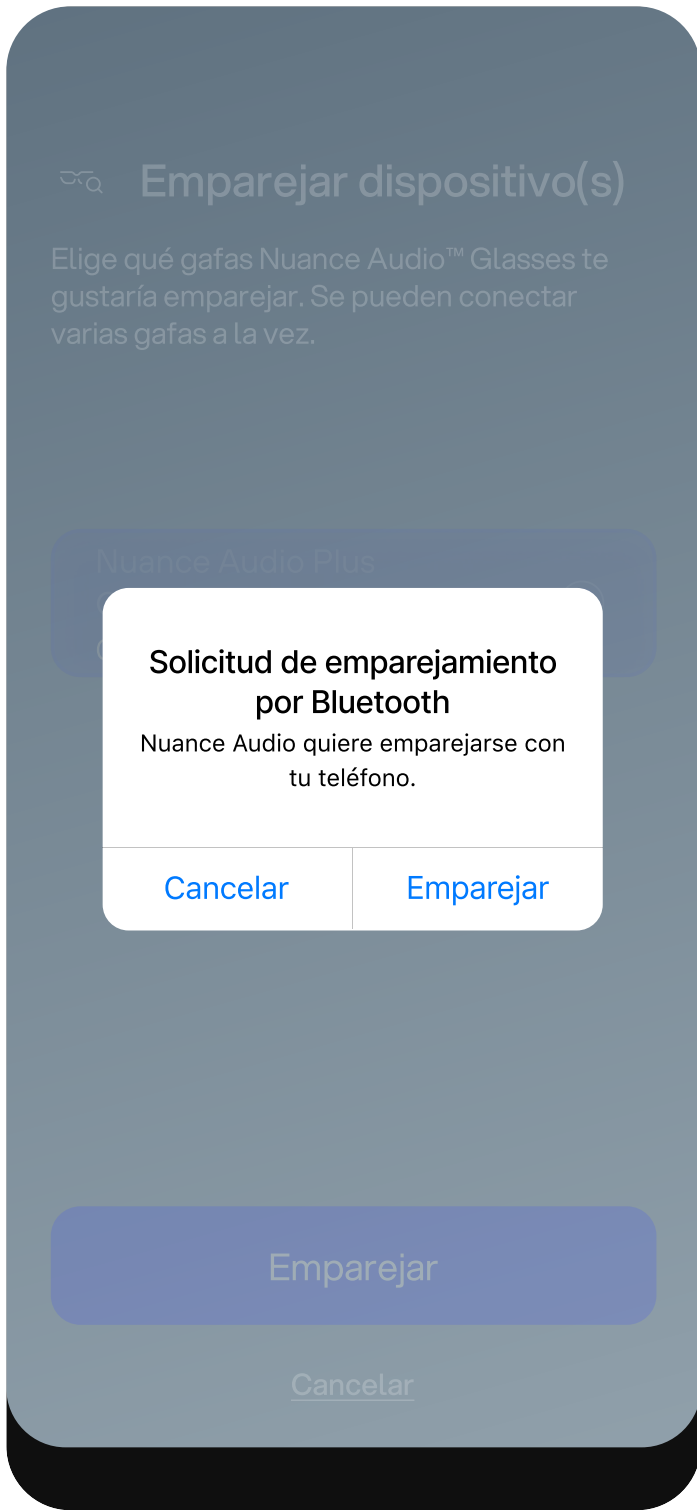


Permitir solicitud de emparejamiento por Bluetooth.
Presiona **Emparejar**

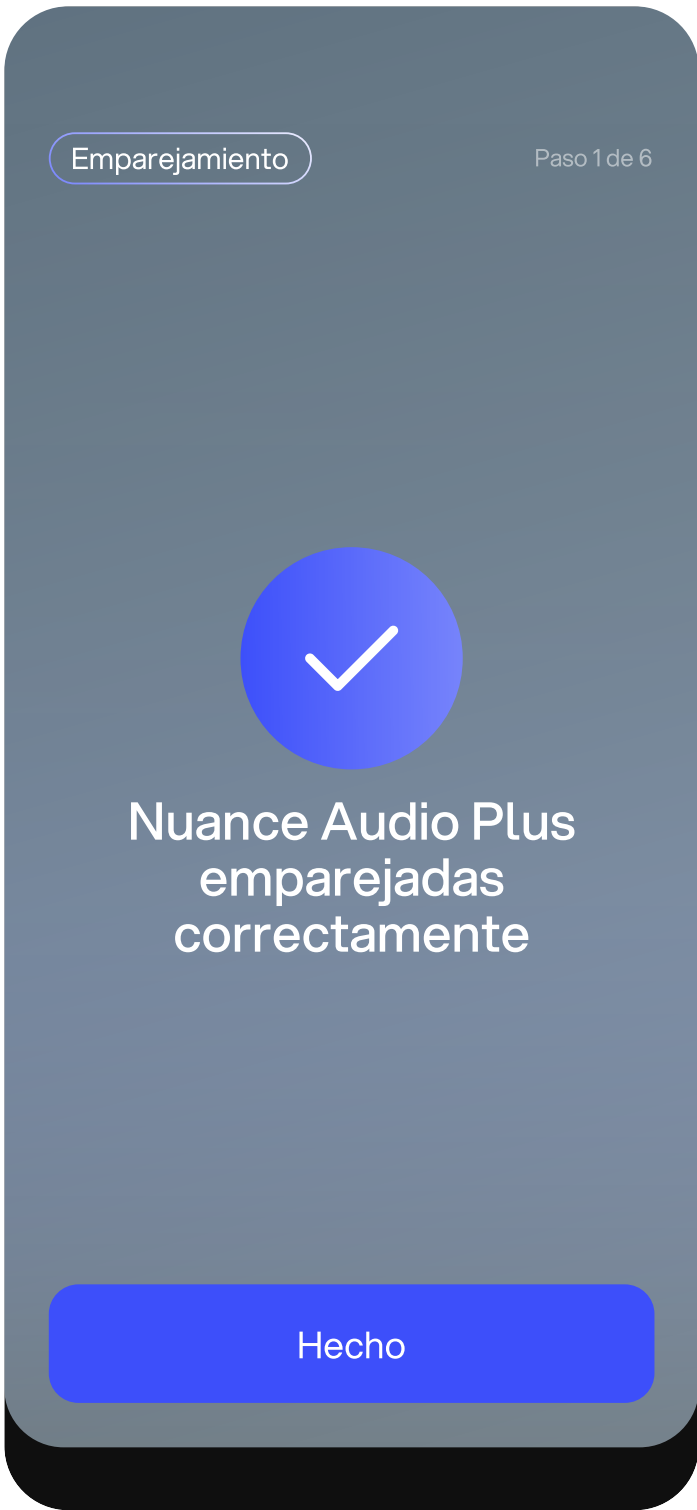

Emparejamiento completado.



Emparejamiento de un segundo dispositivo en la misma cuenta

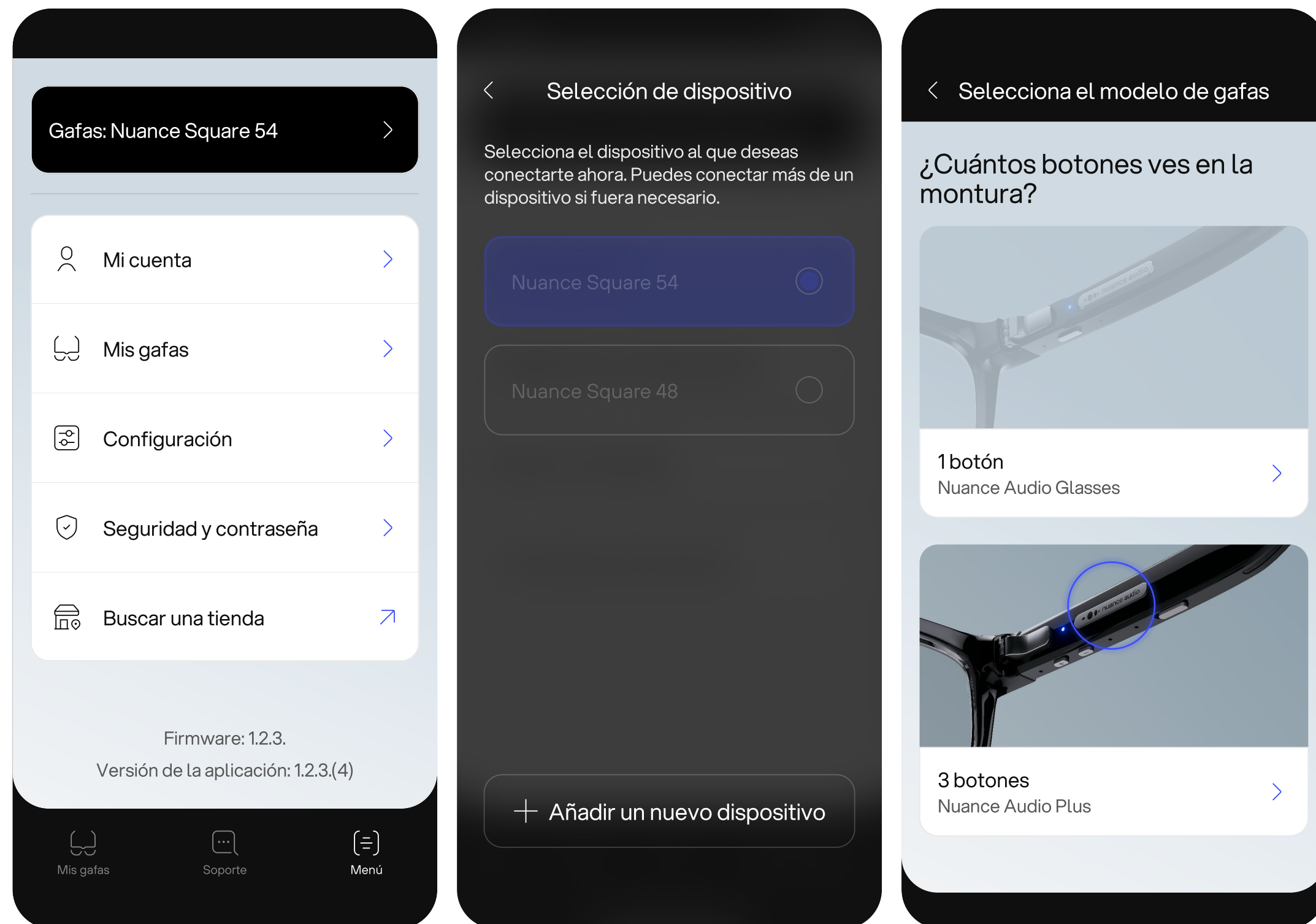


Paso 0.1
Ve a **Menú**. Pulsa el icono de "Gafas" en la parte superior para añadir un nuevo par.

Paso 0.2
Selecciona las gafas a las que quieres conectarte. **Pulsa "Añadir nuevo dispositivo."**


Paso 0.3
Elige el modelo de tus gafas.

Paso 0.4
Para comenzar el emparejamiento, desliza el botón deslizante, pulsa **"+" o "-"** y **mantén pulsado durante 8 segundos** hasta que el LED azul parpadee.

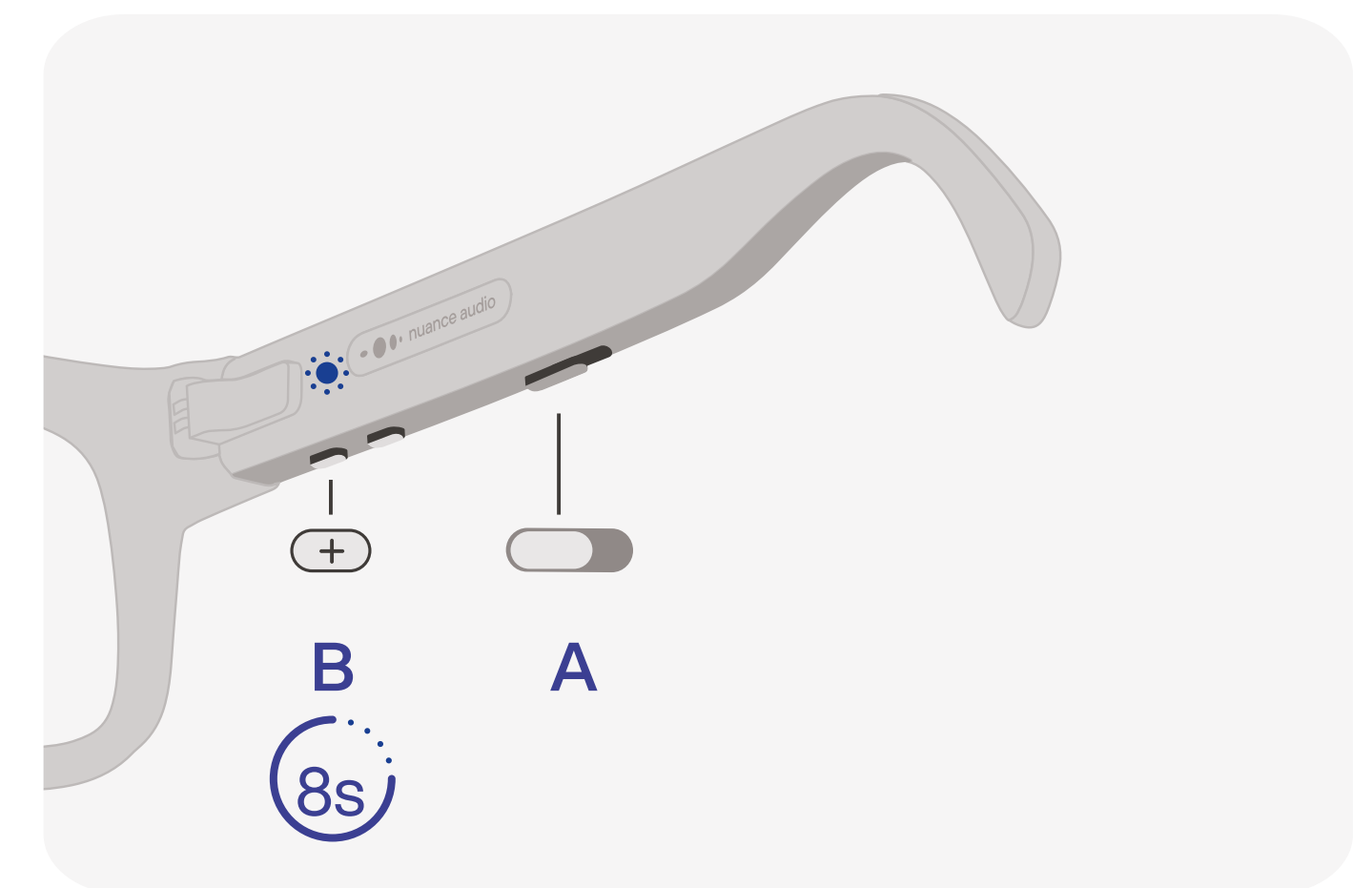





Emparejamiento de un segundo dispositivo en la misma cuenta

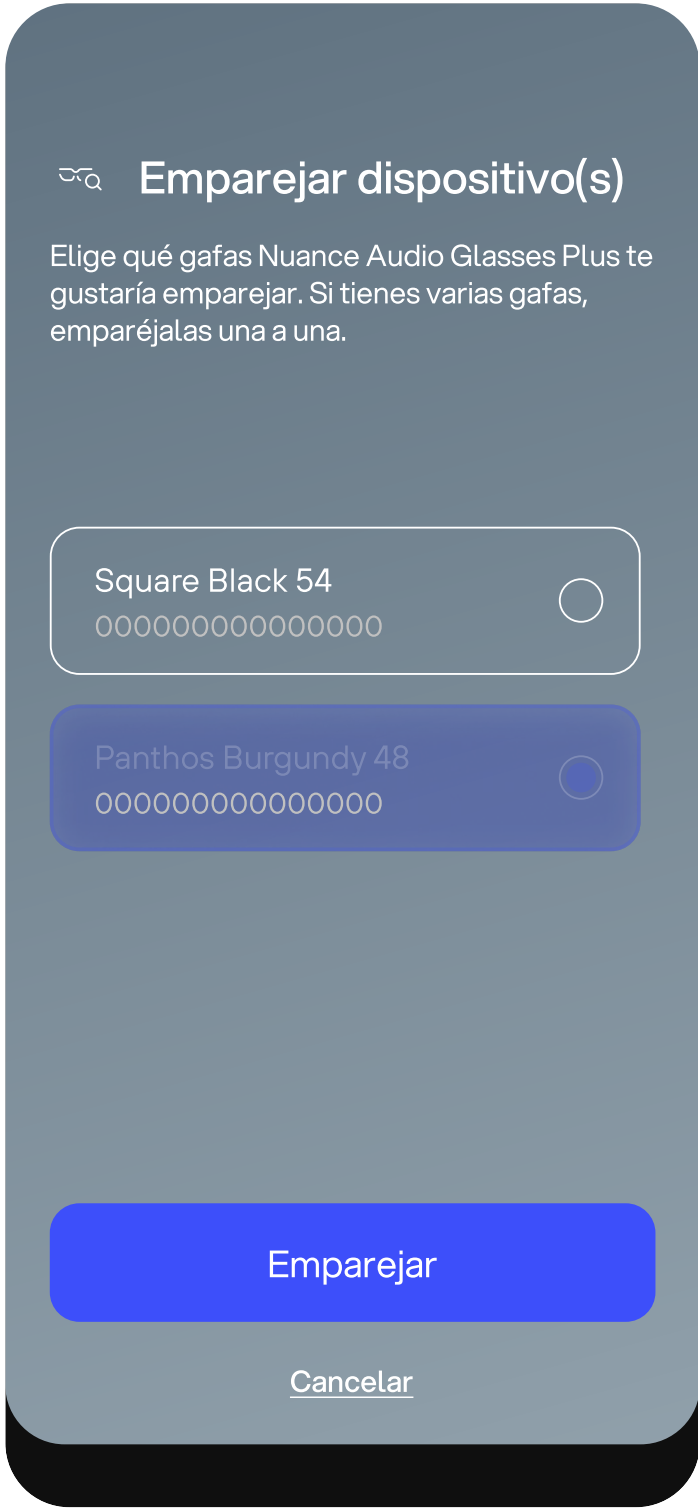

Selecciona las Nuance Audio Plus de la lista. Presiona **Emparejar**

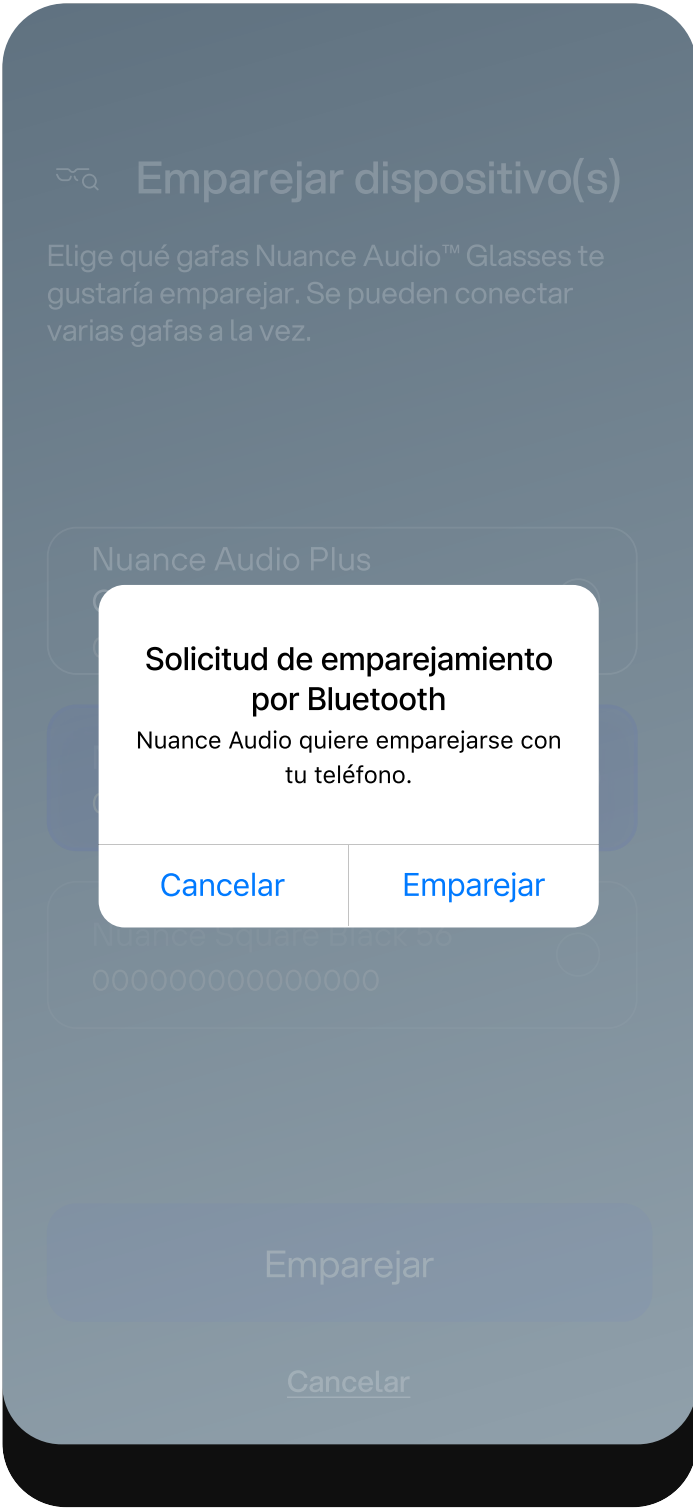

Permitir solicitud de emparejamiento por Bluetooth. Presiona **Emparejar**

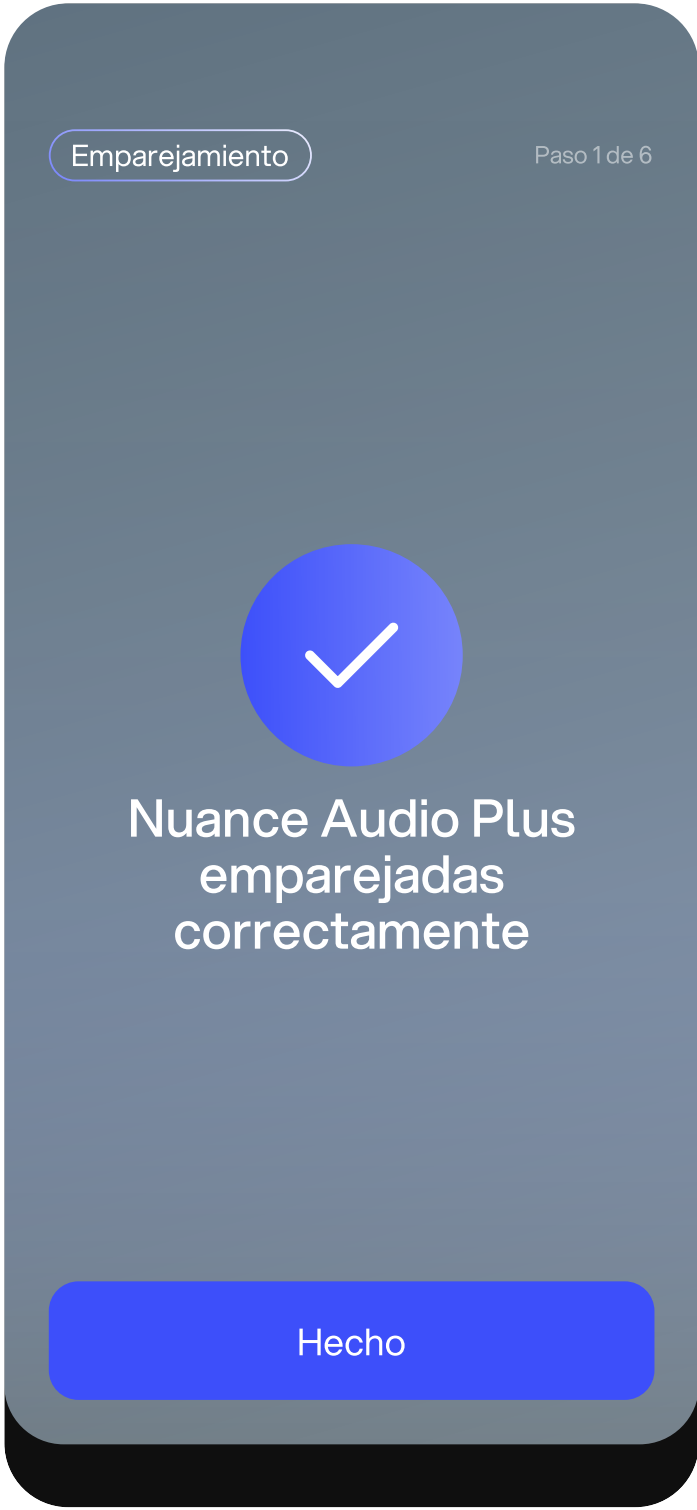

Emparejamiento completado.



¿Qué es la calibración personalizada?

Calibra tus Nuance Audio Plus para que estén personalizadas y se adapten a tus necesidades.

La calibración personalizada optimiza el sonido según la forma única de tu cabeza y tu voz.

Estas son las dos áreas en las que se centra:

- **Sonido más claro:** adapta los sonidos para reducir la retroalimentación y el ruido, para que escuches con mayor claridad.
- **Comentarios de voz naturales:** registra tu voz para que las conversaciones suenen más naturales.





¿Cómo sacar el máximo partido a la calibración ?

La calibración solo tarda un minuto, pero te ayuda a sacarles el máximo partido a tus Nuance Audio Plus.

Si tienes varias gafas, calibra cada una de ellas de forma individual.

Consejos para optimizar Calibración personal:


- Busca un lugar tranquilo en tu casa y evita espacios grandes o abiertos.
- Mantente lejos de áreas con muchas o grandes ventanas.
- Evita las habitaciones con techos altos donde el ruido de fondo puede ser impredecible.
- Colócate lejos de las esquinas y evita mirar de frente a los espejos.
- Lo ideal es que te quedes lo más cerca posible del centro de la habitación para obtener una calidad de sonido óptima.
- Consejo final: Tu dormitorio es a menudo la mejor opción.

Consejos para optimizar Calibración de la voz:

- Habla en voz alta, pero sin gritar.
- Proyecta tu voz como si estuvieras hablando con alguien al otro lado de la habitación.
- Minimiza las pausas tanto como sea posible.
- Si tienes varias gafas, calibra cada una de ellas de forma individual.




¿Cómo calibrar tus gafas?

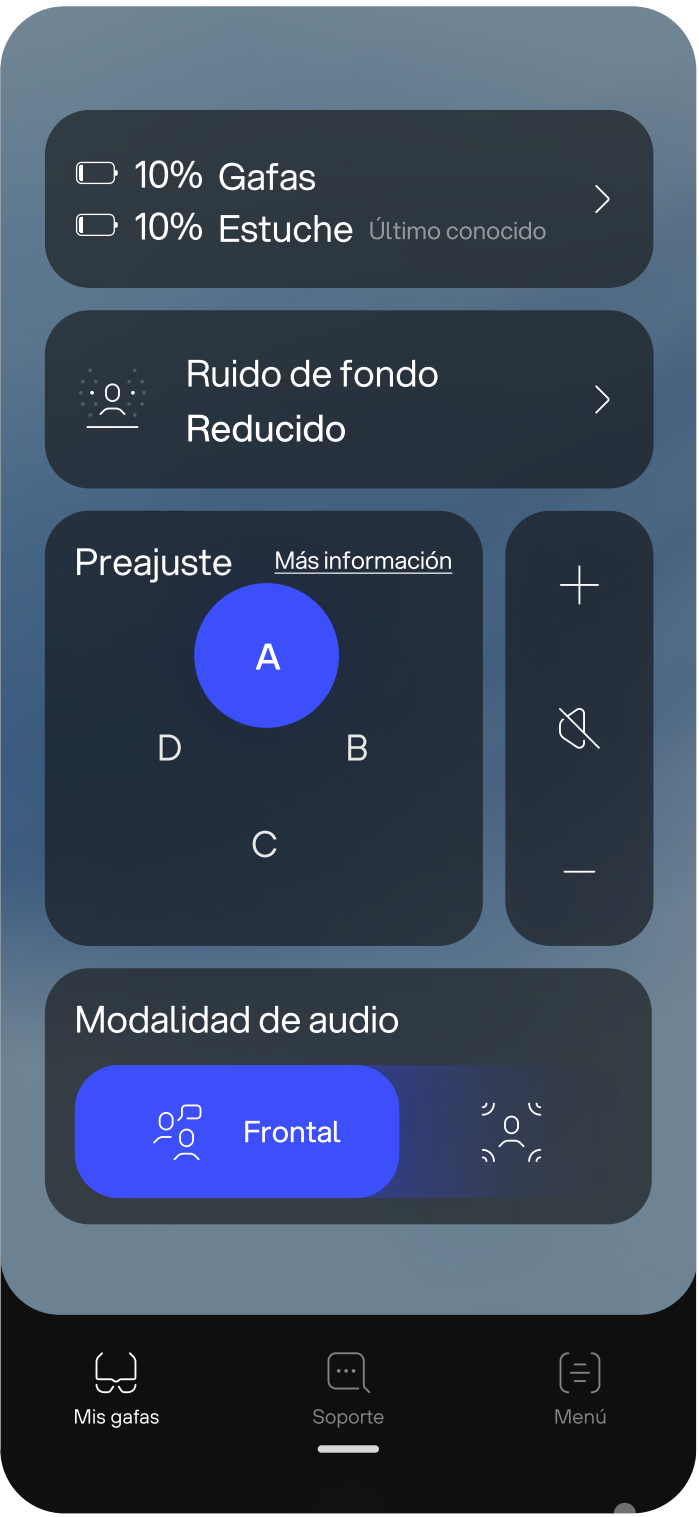


Dentro del panel de control de la aplicación Nuance, toca en (esquina inferior derecha en la barra de navegación).

Notas
Un indicador azul te notificará y te guiará a la pantalla de calibración.

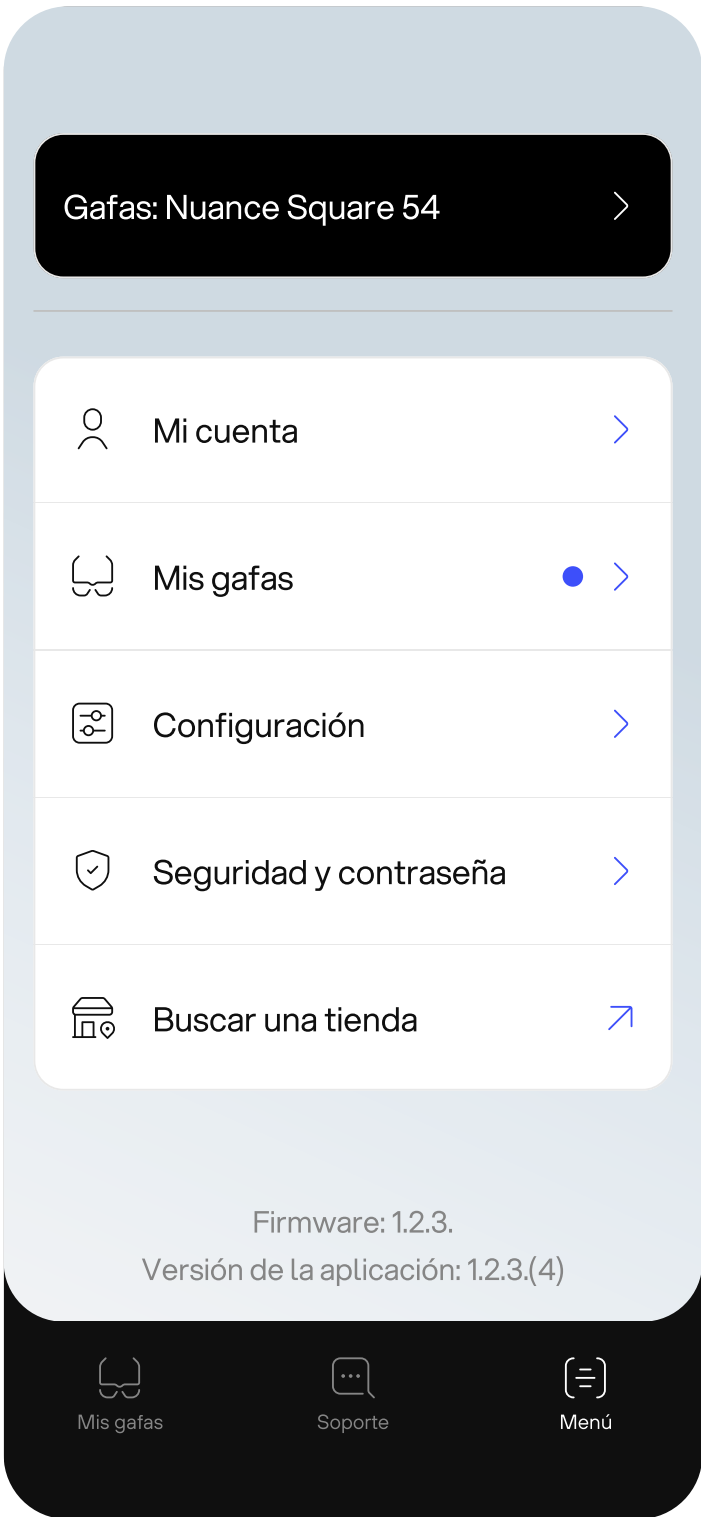

Toca en **Ajustes**.

Notas
Un indicador azul te notificará y te guiará a la pantalla de calibración.

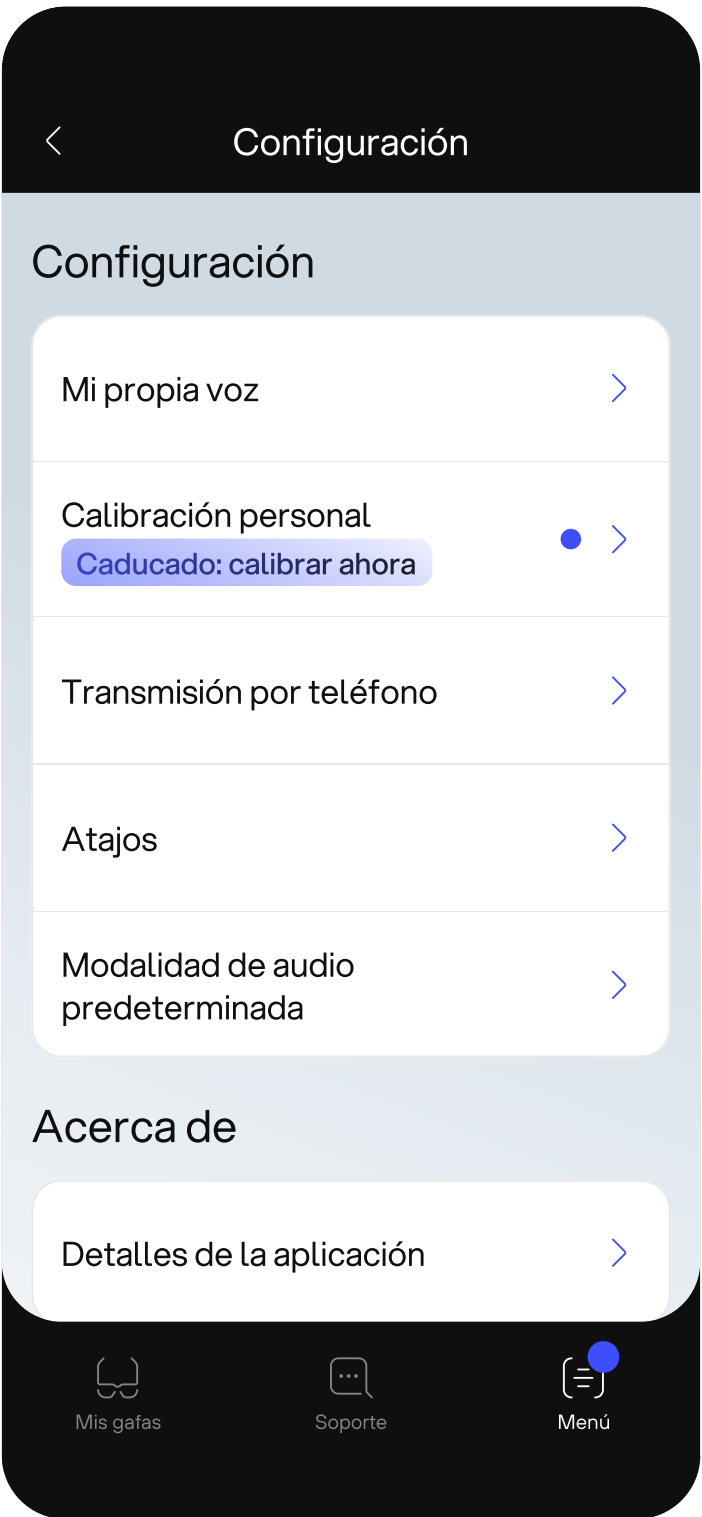

Para iniciar la calibración, pulsa en **Calibración personal**.

Notas
Un indicador azul y una etiqueta dedicada te avisarán para que calibres y actualices tus preferencias de audio.



¿Cómo calibrar tus gafas?

Ha llegado el momento de calibrar tus gafas auditivas en una sala silenciosa y grabar tu voz.


Este proceso te llevará tan solo 1 minuto.




Calibrar ahora

Ahora no

Para iniciar la calibración, busca un lugar tranquilo y luego presiona **Iniciar calibración**.

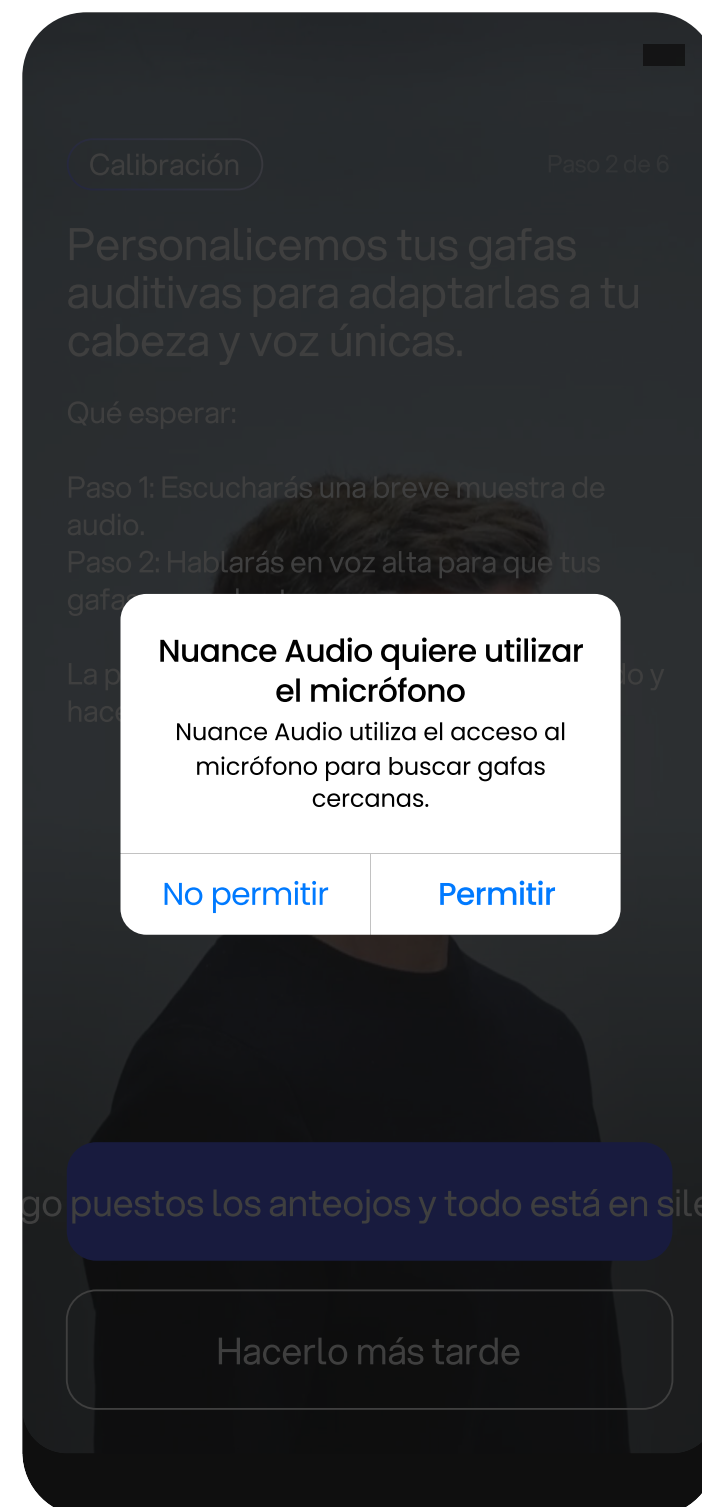

Tienes que permitir que el micrófono de tu teléfono mida y analice sonidos. Presiona **Permitir**.

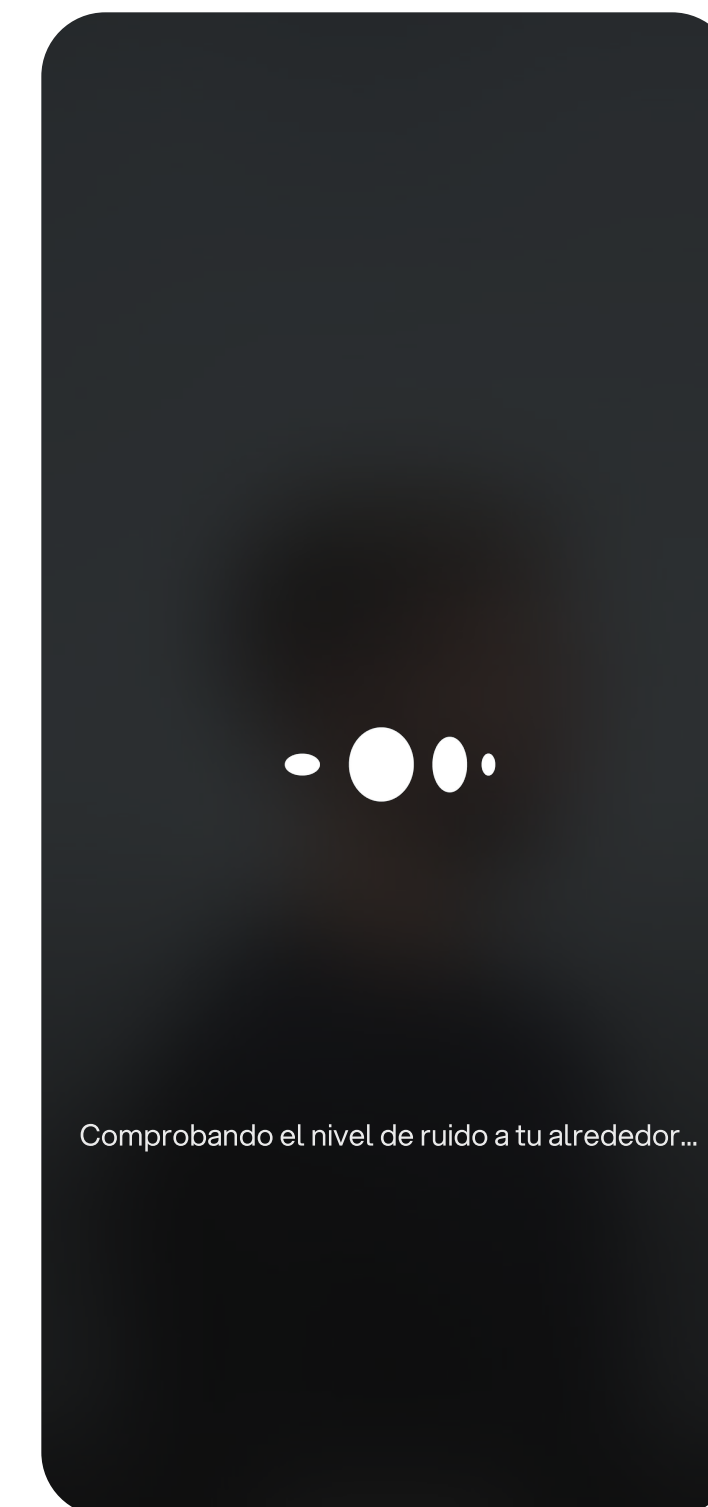

Emparejamiento completado. Un aviso emergente te recordará que debes llevar puestas tus Nuance Audio Plus durante todo el proceso.







¿Cómo calibrar tus gafas?



Paso 1.1
Medición del ruido ambiental.
Mantén tus gafas puestas y toca **Reproducir audio**

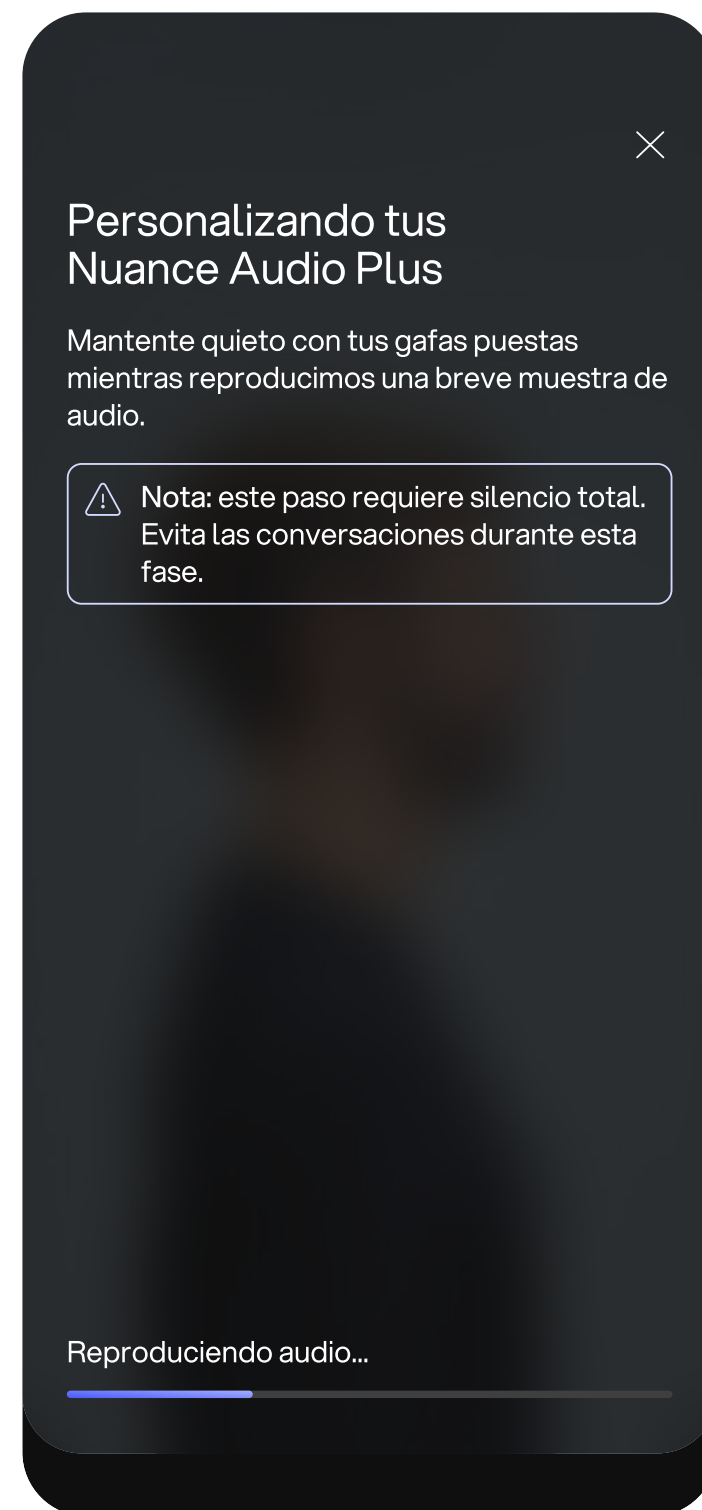

Paso 1.2
No te muevas ni te quites las gafas, **espera hasta el final del audio de muestra.**

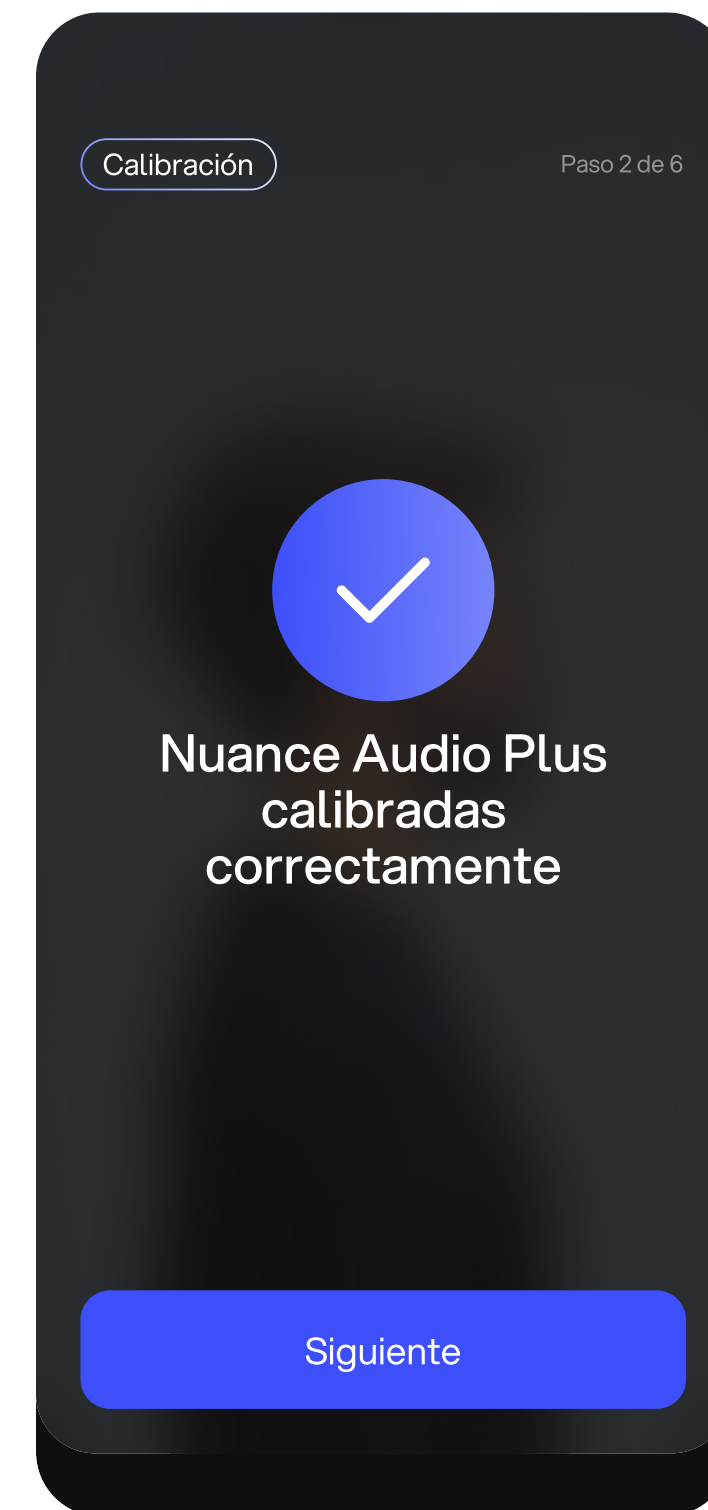


Paso 1.3
Medición del ruido ambiental completada.




¿Cómo calibrar tus gafas?



Paso 2.1
Calibración de mi propia voz.
No te muevas y no te quites las gafas.
Presiona Iniciar grabación.

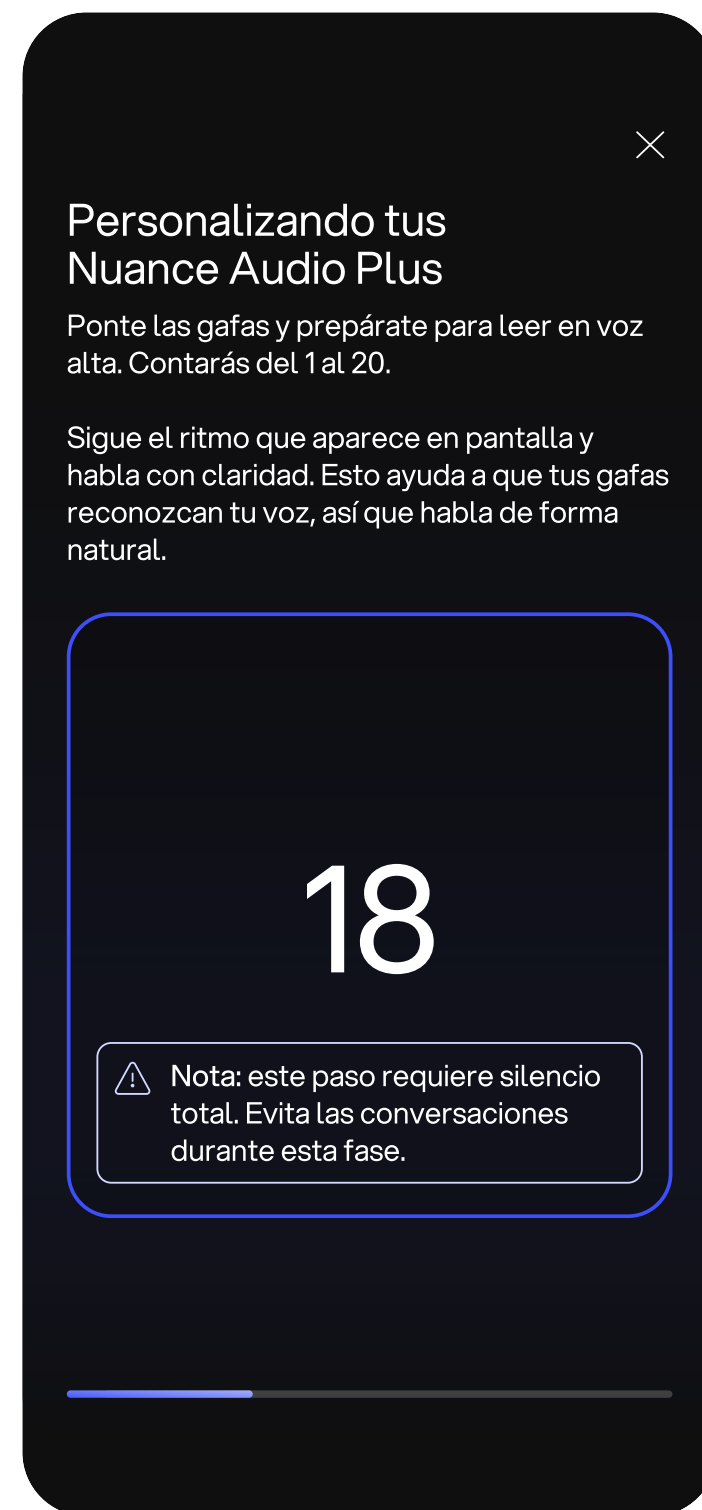

Paso 2.2
Cuenta en voz alta hasta que la barra de progreso llegue al final.

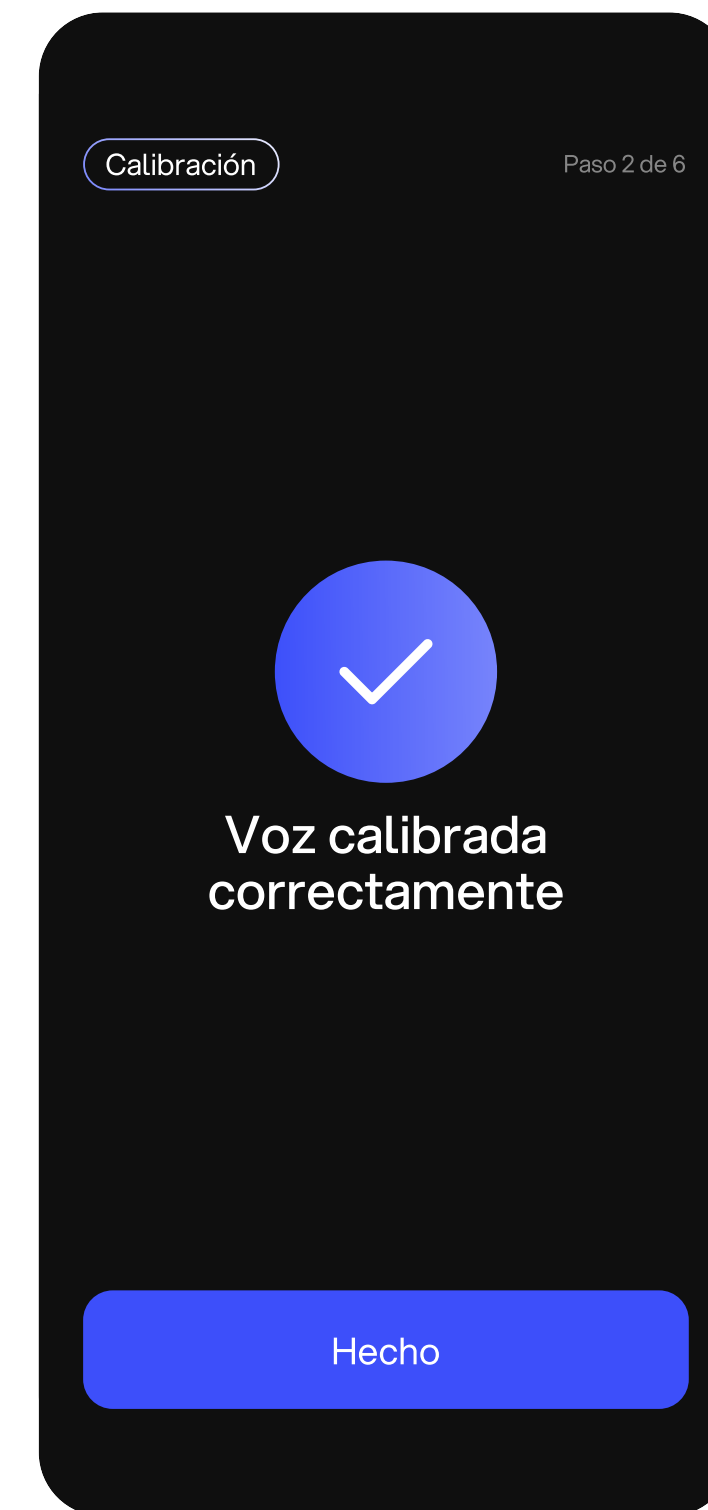

Paso 2.3
Calibración personal completada correctamente.



Sigue este enlace para obtener las instrucciones de uso más actualizadas.

[↗ Ver instrucciones de uso](#)