



Nuance Audio™ Remote Control

**Brugsanvisning
sikkerhed og garanti**

1. parring

1 Tryk og hold

2 Træk i flappen



- Blinkende blå LED – parring i gang
- Fast blå LED – parring fuldført

Yderligere parring

1 A. Fold brillerne
B. Tryk og hold knappen nede

2 Tryk og hold på sideknappen



- Slip når den blå LED blinker

LED-indikatorer



Genopretter
forbindelsen



Lavt
batteri



Briller ikke
fundet

Lydtilstande Tryk




Lydstyrke Tryk +/-



Batteri CR2450

1

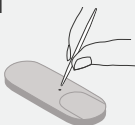

2



3



FOR DANMARK

Nuance Audio™ Remote Control

*Produktets tilgængelighed, lovgivningsmæssige krav og garantibetingelser kan variere fra land til land. Bemærk venligst, at den lokale markedsproduktkategori for Nuance Audio™ Glasses kan variere afhængigt af det marked, hvor produktet sælges, og nogle lande har ikke en dedikeret lokal kategori (såsom Storbritannien, Australien og New Zealand). Som et resultat kan terminologien, der bruges til at betegne produktets kategori, variere mellem sprogversionerne af disse Brugsanvisninger – Sikkerhed og garanti (f.eks. "assistant d'écoute" i Frankrig vs. "høreapparat" andre steder). Da dette dokument er organiseret efter sprog snarere end efter land, afspejler terminologien, der anvendes til at omtale produktet i en given sprogversion, ikke nødvendigvis den kategori, der gælder i alle lande, hvor det pågældende sprog anvendes. For eksempel, selvom fransk er et af de officielle sprog i Schweiz, gælder terminologien i den franske version ikke for det schweiziske marked; for Schweiz er den korrekte terminologi "aide auditive".

I denne brugsanvisning omtales Nuance Audio™ Remote Control også som "Produkt", "Enhed" eller "Udstyr".

TILSIGTET ANVENDELSE OG BRUGERE

Tiltænkt brug. Nuance Audio™ Remote Control er beregnet til at assistere Nuance Audio™ Glasses funktionalitet med hensyn til at kontrollere indstillingerne på audio brillen*. Nuance Audio™ Remote Control bruges til trådløst at kontrollere lydstyrke og tilstande for Nuance Audio™ Glasses.

De to mulige lydtilstande er:

- Frontal: Når denne funktion er valgt, er de forstærkede lyde dem, der kommer fra den retning, du kigger på, og alle andre lyde dæmpes. Generelt bruges denne funktion i støjende omgivelser, når du gerne vil høre den person, der taler til dig, bedre.
- All-around: Denne funktion forstærker alle lyde omkring dig.

Nuance Audio™ Remote Control er kun beregnet til brug sammen med Nuance Audio™ Glasses og er kun beregnet til brug af personer på 18 år og derover.

Nuance Audio™ Remote Control fungerer, når den parres med brillerne via Bluetooth, og den leveres med et knapcellebatteri. Knapcellebatteriet (CR2450) kan udskiftes af kunden.

Nuance Audio™ Glasses er et medicinsk udstyr. Nuance Audio™ Remote Control skal bruges som et tilbehør til Nuance Audio™ Glasses.

For personer på 18 år og derover. Nuance Audio™ Remote Control er kun beregnet til brug sammen med Nuance Audio™ Glasses og er kun beregnet til brug af personer på 18 år og derover. Tillad ikke personer under 18 år at bruge Nuance Audio™ Remote Control. Børn kan blive kvalt i tilfælde af at de sluger dette produkt. Hold dette produkt væk fra børn.

Se brugervejledningen for billeder og brugsforklaringer af Nuance Audio™ Remote Control.

Begrænsninger for kombinationer. Nuance Audio™ Remote Control fungerer kun med Nuance Audio™ Glasses, hvilket betyder, at produktet ikke kan fungere med andre enheder.

Læs instruktionerne. Læs og følg alle instruktioner, der følger med Nuance Audio™ Remote Control, før du bruger den.

Forsigtighedsregler.

1. Når du justerer lydstyrken, skal du gradvist skru op for den, indtil du når et behageligt lytteniveau.
2. Brug ikke Nuance Audio™ Remote Control, hvis nogen del af den er beskadiget eller overophedet. Hvis dette sker, skal du omgående stoppe med at bruge Nuance Audio™ Remote Control, og derefter gå til www.nuanceaudio.com for at få nyttig service og kontaktinformation.

Foretag ikke uautoriserede ændringer på dette produkt.

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATION

ADVARSEL For at reducere risikoen for personskader, ubehag eller skader på ejendom bedes du læse og følge oplysningerne om sundhed og sikkerhed nedenfor, før du bruger Nuance Audio™ Remote Control.

Interferens med personligt medicinsk udstyr. Dette produkt indeholder magnetisk materiale og komponenter, der udsender radiobølger, som kan påvirke funktionen af medicinsk udstyr, såsom, men ikke begrænset til, pacemakere eller andre bærbare og implanterbare enheder, f.eks. insulinpumper. Kontakt din læge eller producenten af det medicinske udstyr, før du bruger produktet. Sluk produktets elektroniske funktioner, hvis du bemærker interferens med dit medicinske udstyr.

Interferens. Kontroller, før du bruger Nuance Audio™ Remote Control i områder, hvor elektronik eller trådløse enheder er underlagt begrænsninger. Dette kan forårsage interferens.

Kørsel. Brug ikke Nuance Audio™ Remote Control, mens du kører.

Vand og væsker. Må ikke udsættes for vand eller nedsænkes i vand. Længerevarende udsættelse for vand kan beskadige Nuance Audio™ Remote Control. Nuance Audio™ Remote Control er ikke designet til at modstå nedsænkning i eller længerevarende eksponering for vand eller andre væsker. Hvis Nuance Audio™ Remote Control kommer i kontakt med vand, skal den tørres grundigt med en tør klud.

ADVARSEL Potentielt eksplosiv atmosfære. Opbevar eller transporter ikke brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rum som Nuance Audio™ Remote Control. Sluk din Nuance Audio™ Remote Control, og fjern eller isæt ikke batterier, når du befinder dig i et område med potentielt eksplosiv atmosfære.

Må ikke anvendes, hvis den er ødelagt eller beskadiget.

Undersøg regelmæssigt Nuance Audio™ Remote Control for skader eller tegn på slid. Brug den ikke, hvis nogen del er beskadiget, revnet, eller hvis en intern komponent er blottet. Forsøg ikke at reparere Nuance Audio™ Remote Control selv. Kontakt i stedet support på www.nuanceaudio.com.

Overophedning. Hold Nuance Audio™ Remote Control væk fra ild og overdreven varme (f.eks. fra opbevaring i direkte sollys, nær stearinlys eller i en varm bil) for at undgå forbrændinger eller skader på Nuance Audio™ Remote Control. Nuance Audio™ Remote Control bør ikke overophede under normal brug. Hvis den gør, skal du omgående stoppe med at bruge den og kontakte support. Hold Nuance Audio™ Remote Control væk fra ild og varmekilder.

Håndter forsigtigt og undgå skader. Nuance Audio™ Remote Control er følsomt elektronisk udstyr, der indeholder følsom elektronisk hardware og skal håndteres med forsigtighed. Må ikke opvarmes eller bøjes, da den kan blive beskadiget og endda antændes. Tab, slå eller ryst ikke Nuance Audio™ Remote Control for meget. Brug ikke Nuance Audio™ Remote Control, hvis den er beskadiget. Forsøg ikke at åbne, adskille eller manipulere med Nuance Audio™ Remote Control. Må ikke udsættes for sollys.

Interaktioner og miljøer. Vær opmærksom. Interaktion med Nuance Audio™ Remote Control kan distrahere dig eller øge den tid, det tager at reagere på farer. Vær altid opmærksom på dine omgivelser, herunder skiltning og forhindringer.

Levetid. Den forventede levetid for Nuance Audio™ Remote Control er 5 år fra produktionsdatoen.

Brugsbegrænsninger. Brug ikke Nuance Audio™ Remote Control i miljøer med stærke elektriske eller magnetiske felter. Den effektive brugsafstand for Nuance Audio™ Remote Control er mindre end 25 meter.

Flyvning. Tjek gældende sikkerhedsrestriktioner for personlig elektronik inden flyvning med Nuance Audio™ Remote Control. Brug Nuance Audio™ Remote Control i overensstemmelse med alle gældende lokale love, regler og bestemmelser.

Driftsforhold. -10 °C til 45 °C; 101,3 kPa til 61,9 kPa; luftfugtighed mellem 20 % og 60 % under 35 °C i 1000 timer; maksimal højde på 13.000 fod i 1 time ved 0 °C og 35 °C.

Transport og opbevaring. -40 °C til 85 °C; luftfugtighed mellem 20 % og 90 %. Fjernbetjeningen skal forblive funktionel efter genopretning fra ikke-driftsmæssig eksponering for en højde på 40.000 fod (18,8 kPa) i 12 timer ved både -10 °C til 45 °C.

Rengøring og vedligeholdelse. Brug en fugtig klud og neutral sæbe til at rengøre Nuance Audio™ Remote Control. Undgå alle typer spray, opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller ammoniak. Brug ikke snavsede eller slibende klude, da de kan beskadige Nuance Audio™ Remote Control. Hvis produktet bliver for vådt, er der risiko for at det beskadiges. Tør det grundigt, og opbevar det i en beholder med tørremidler eller i en tørreboks.

Batteri. Nuance Audio™ Remote Control indeholder et knapcellebatteri, som kan udskiftes af brugeren. Batteriet kan udgøre en brand- eller kemisk forbrændingsfare, hvis det misbruges. Lad det ikke ligge i bilen under direkte sollys eller udsætte det for overdreven varme eller forbrænde det. Bortskaffelse af batteriet skal ske i overensstemmelse med instruktioner og lokale krav. Fjern og genbrug eller bortskaf omgående brugte batterier i henhold til lokale regler og hold dem væk fra børn. Bortskaffelse af batterier i husholdningsaffald eller forbrænding er IKKE tilladt. Fjern og genbrug eller bortskaf batterier fra udstyr, der ikke er blevet brugt i en længere periode, i henhold til lokale regler. Bland ikke gamle og nye batterier, forskellige mærker eller typer af batterier, såsom alkaliske, kul-zink eller genopladelige batterier. Den forventede batterilevetid er mindst 6 måneder under standardbrugsforhold fra det øjeblik, batteriets beskyttelsestap trækkes ud. For proceduren til batteriudskiftning, følg anvisningerne i brugervejledningen, der følger med Nuance Audio™ Remote Control, og brug en nål eller tandstik til at åbne fjernbetjeningens låg. Vær forsigtig, når du udskifter batteriet for at undgå at beskadige strukturen af Nuance Audio™ Remote Control. Sørg for, at batterierne er installeret korrekt i henhold til polaritet (+ og -). Sørg altid for, at batterirummet er helt sikkert. Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet, fjern batterierne og hold dem utilgængeligt for børn. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Undgå at tvinge afladning, genoplade, skille ad, opvarme til over 100 °C eller brænde. Dette kan resultere i personskeade på grund af udslip, lækage eller eksplosion, der kan resultere i kemiske forbrændinger. Batterirelaterede farer er brand, eksplosion og forbrændinger. Batteriet må ikke kortsluttes, knuses, brændes eller udsættes for vand. Hold altid batterierne væk fra børn for at forhindre, at de sluges. Batteriet må ikke indtages. Kompatible batterier er lithium 3V CR2450 knapcellebatterier. Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskeade eller død. Kontakt Giftlinjen (det nationale giftinformationscenter) for information om behandling.

NØGLEFUNKTIONER	
Lydtilstandskontrol	Knappen på enheden
Lydstyrkekontrol	Knapper på enheden
TRÅDLØS FORBINDELSE	
Bluetooth® kompatibel	Ja, BLE
Bluetooth® kompatibel med telefonopkald	Nej
Driftsfrekvens	2402-2480 MHz
Maksimal udstrålet effekt	Maks. EIRP for fri plads er -3,22 dBm
Modulation	GFSK
Kanalafstand	2 MHz
Kanalbåndbredde	2 MHz
Antal kanaler	40
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Batteri	Lithium 3V CR2450 knapcellebatteri
Livstid	5 år
Holdbarhed	5 år
TRANSPORT OG OPBEVARINGSFORHOLD	
Temperatur	Fra -40 °C til 85 °C
Fugtighed	Fra 20 % til høj luftfugtighed på 90 % og temperatur på 45 °C i 288 timer
Højde og atmosfærisk tryk	Højde på 40.000 ft (18,8 kPa) i 12 timer ved både -10 °C og 45 °C
DRIFTSFORHOLD	
Temperatur	Fra -10 °C til 45 °C
Fugtighed	Fra 20 % til 60 % luftfugtighed under 35 °C i 1000 timer
Højde og atmosfærisk tryk	Højde på 13.000 ft i 1 time ved 0 °C og 35 °C; 101,3 kPa til 61,9 kPa

Bemærk: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af reglerne, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Ingen del af dette værk må reproducere, ændres, distribueres eller på anden måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse.

EU-overholdelseserklæring

Luxottica Group S.p.A erklærer hermed, at denne enhed overholder direktivet om radioudstyr 2014/53/EU, EU's forordning om medicinsk udstyr 2017/745 om medicinsk udstyr og RoHS II-direktivet 2011/65/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration

Radiofrekvens og effekt: Produktets BLE: 2402-2480 MHz < 20 dBm;

Hold Nuance Audio™ Remote Control væk fra gravide kvinders livrmoder. Hold Nuance Audio™ Remote

CE 0123 Control væk fra underlivet på unge. Brug Nuance Audio™ Remote Control under gode modtageforhold for at reducere mængden af elektromagnetisk stråling.

Slutbrugerer er forpligtet til at rapportere enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med brugen af enheden, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hændelsen fandt sted, og til producenten af enheden.

Bortskaffelsesoplysninger

Nuance Audio™ Remote Control må ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal afleveres på en passende genbrugsstation. Du kan finde flere oplysninger om korrekt bortskaffelse på www.nuanceaudio.com.

Symbolerne med den overstregede skraldespand nedenfor betyder, at batteriet i Nuance Audio™ Remote Control og/eller Nuance Audio™ Remote Control skal bortskaffes i henhold til lokale love og regler separat fra husholdningsaffald.

Når Nuance Audio™ Remote Control når slutningen af sin levetid, skal du aflevere den og batteriet til et indsamlingssted udpeget af de lokale myndigheder. Alternativt kan du tage produktet og batteriet med til virksomheden, hvor produktet er købt. Batteriet kan sikkert fjernes af slutbrugeren i henhold til anvisningerne i brugervejledningen. Separat indsamling og genbrug af produktet og/eller dets batteri ved bortskaffelse vil bidrage til at bevare naturressourcerne og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet.



WEEE-oplysninger

Luxottica er forpligtet til korrekt bortskaffelse, genbrug og genvinding af elektronisk og elektronisk affald ("WEEE"). WEEE bør ikke bortskaffes i almindelige husholdningsaffaldsbeholdere. Bortskaf batterier på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med føderale og statslige krav. For mere information om korrekt bortskaffelse, gå til www.nuanceaudio.com.

Sikkerhedscertificeringer for fjernbetjeningens batteri

Denne artikel beskriver de internationale sikkerhedsstandarder, som fjernbetjeningens batteri opfylder. Alle batterier i fjernbetjeningerne er testet, certificeret og overholder disse internationale sikkerhedsstandarder:

- De Forenede Nationers (FN) transportregler UN38.3: Dækker batterisikkerhed under lufttransport.
- Forordning (EU) 2023/1542
- UL1642-standard for litumbatterier

ADVARSEL Batteriet indeholder ikke kvik sølv. Må ikke punkteres eller brændes, må ikke klemmes eller gennemblødes i vand.

Nuance Audio™ er et registreret varemærke tilhørende Essilor International SAS.

LUXOTTICA BEGRÆNSET GARANTI

Denne begrænsede forbrugergaranti ("Garantien") gives af Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italien ("Luxottica"). Denne garanti dækker defekter og funktionsfejl i det Luxottica-produkt, den følger med. Garantien fortsætter i et (1) år fra købsdatoen for produktet (den "Begrænsede Garantiperiode"). Hvis du derimod køber produktet inden for EU, Storbritannien eller EFTA, vil den begrænsede garantiperiode være to (2) år. Denne garanti gælder kun for de lande, hvor Nuance officielt markedsføres og understøttes, hvilket betyder lande, hvor produktet er certificeret, og Luxottica er autoriseret til at distribuere det ("Garantiens dækningsområde"). Vi garanterer, at produktet under normal og tilsigtet brug vil fungere i overensstemmelse med de tekniske specifikationer eller den ledsagende produktokumentation ("garanteret funktionalitet") i den begrænsede garantiperiode. For at undgå tvivl kan enhver service, der er nødvendig for at opnå den garanterede funktionalitet, opdateres, ændres eller begrænses, så længe den garanterede funktionalitet fortsat opretholdes (eller overgår). Denne garanti gælder ikke for produkter, der er købt fra andre kilder end Luxottica eller en autoriseret forhandler. Denne garanti er kun gyldig med et købsbevis, der tydeligt viser købsdatoen. Hvis du sender os et produkt uden et gyldigt købsbevis, forbeholder vi os retten til at returnere produktet til dig for din regning og mod forudbetaling, eller, hvis sådanne omkostninger ikke er forudbetalt, opbevarer vi produktet i tredive (30) dage til din afhentning. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder i henhold til forbrugerbeskyttelseslove eller -regler i det land, hvor produktet blev købt, eller, hvis det er anderledes, hvor du befinder dig, forudsat at dette produkt officielt markedsføres idet pågældende land, når en garantiservice er nødvendig. Sådanne rettigheder varierer fra stat til stat og fra land til land. De fordele, der gives af denne garanti, er ekstra og påvirker ikke nogen rettigheder og retsmidler, der gives af sådanne forbrugerbeskyttelseslove og -regler (herunder, men ikke begrænset til, nationale love, der anvender direktiv 1999/44/EF og direktiv 2019/771). Du har ret til gratis retsmidler, hvis produktet ikke overholder de krav, der er fastsat i lovgivningen i garantiområdet. De andre retsmidler,

der er tilgængelige for dig i henhold til lovene i garantiområdet, påvirkes ikke af denne garanti. Se nedenfor og/eller kontakt din lokale forbrugerrettighedsorganisation/borgerrådgivningsbureau for fuldstændige oplysninger om dine rettigheder i henhold til lovene i garantiområdet.

Gå til www.nuanceaudio.com for information om de lande Luxottica understøtter og for at få nyttig service og kontaktinformation. Omfanget af teknisk support, der tilbydes af Luxottica, består i at hjælpe med at diagnosticere og løse problemer med defekter i produktet. Bemærk venligst, at der kan påløbe gebyrer, når du kontakter Luxottica via telefon, afhængigt af dit opkaldsområde.

REGISTRERING

Produktregistrering er ikke påkrævet som en betingelse for dækning under denne garanti, men nogle Luxottica-produkter kræver periodisk forbindelse til en onlinekonto for at sikre fuld funktionalitet.

SÅDAN INDSENDER DU ET GARANTIKRAV

Hvis du har et problem med dit produkt, og medmindre andet specifikt er angivet i denne garanti, og undtagen som angivet i gældende statslovgivning, skal du for at fremsætte et garantikrav returnere dit produkt til den autoriserede forhandler, hvor produktet blev købt, sammen med dit købsbevis. Gå til www.nuanceaudio.com for at få nyttig service og kontaktinformation.

Hvis dit garantikrav anses for at være gyldigt, og vi bekræfter en defekt eller funktionsfejl, der er dækket af denne garanti, vil en passende løsning blive fastlagt. Afhængigt af omstændighederne kan vi tage en af følgende handlinger: i) Reparere produktet, kun hvor reparation er teknisk muligt (givet det højteknologiske indhold af produktet, er den eneste tilgængelige reparation udskiftning af linsen); eller (ii) Udskifte produktet; eller (iii) Refundere købsprisen betalt for produktet, hvis hverken reparation eller udskiftning er mulig eller passende. I henhold til dine rettigheder og gældende lokale love i garantiområdet, ligger valget af løsning hos virksomheden.

Med forbehold af dine rettigheder i henhold til lokale love, og hvis vi fastslår, at et produkt skal udskiftes, kan det være et nyt, renoveret eller et genfremstillet produkt. Den begrænsede garantiperiode forlænges med en varighed svarende til den tid, vi havde produktet i vores besiddelse i forbindelse med garantiens udførelse, som beskrevet ovenfor. Med undtagelse af dine rettigheder og retsmidler i henhold til din lokale lovgivning, genoptager eller forlænger levering af et repareret eller erstatningsprodukt ikke den begrænsede garantiperiode. Vi returnerer muligvis ikke det originale produkt til dig. Hvis dit garantikrav ikke anses for at være gyldigt, forbeholder vi os retten til at returnere produktet til dig for din regning, mod forudbetaling, eller, hvis sådanne omkostninger ikke er forudbetalt, opbevarer vi produktet i tredive (30) dage til din afhentning, før det bortskaffes. Med undtagelse af hvor loven kræver andet, vil eventuelle udgifter, du pådrager dig ved at returnere produktet til garantivurdering, blive dækket af Luxottica. Hvis du skal returnere dit produkt til Luxottica, vil du få en forudbetalt label. Hvis garantikravet vurderes at være ugyldigt, og vi ikke finder en defekt eller funktionsfejl, der er dækket af denne garanti, vil vi kontakte dig for at se, om du ønsker, at vi udfører reparationer for din regning, og under alle omstændigheder vil du blive opkrævet for udgående fragt for at returnere dit produkt baseret på Luxotticas standardfragtpriser.

BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE, OG LUXOTTICA ER IKKE ANSVARLIG FOR: LEVERING ELLER INSTALLATION, ELLER ARBEJDSOMKOSTNINGER FOR OPSÆTNING AF PRODUKTET OG/ELLER JUSTERING AF KUNDEKONTROLLER PÅ PRODUKTET. SKADER FORÅRSAGET AF FORKERT BRUG, MISBRUG, ULYKKER, BRAND, TYVERI, FORSVINDELSE, FORVIGELSE, UDSVING OG STRØMSPÆNDINGER, TILSLUTNING TIL FORKERT SPÆNDING ELLER FORKERT ELEKTRISK SPÆNDING, VIRUS, MALWARE, HENSYNSLØS, BEVIDST ELLER FORSÆTLIG ADFÆRD ELLER FORSØMMELSE. SKADER FORÅRSAGET AF SERVICE PÅ PRODUKTET, DER IKKE ER

FORHÅNDSGODKENDT AF LUXOTTICA.

SKADER FORÅRSAGET AF BRUG, DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED PRODUKTETS INSTRUKTIONER/DOKUMENTATION. SKADER FORÅRSAGET AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF PRODUKTINSTRUKTIONER/DOKUMENTATION ELLER MANGLENDE UDFØRELSE AF RENGØRING ELLER FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE. SKADER FORÅRSAGET AF KOMBINATIONEN AF PRODUKTET MED ANDRE PRODUKTER, TILBEHØR, DELE ELLER KOMPONENTER, DER IKKE ER LUXOTTICA-MÆRKER, ELLER BRUG AF PRODUKTER, Udstyr, systemer, hjælpefunktioner, tjenester, software, dele leveret, tilbehør, applikationer, installationer, reparationer, eksterne ledninger eller stik, der ikke er leveret eller er autoriseret af Luxottica, som beskadiger produktet. signalproblemer, modtagelsesproblemer og forvrængning i forbindelse med støj, ekko, interferens eller andre problemer med signaltransmission og -levering. ethvert udstyr eller komponenter, der ikke var inkluderet i eller med dit produkt som originalt solgt. normal slidtage. SKADER FORÅRSAGET SOM FØLGE AF FORKERT TRANSPORT ELLER EMBALLAGE VED RETURNERING AF PRODUKTET TIL LUXOTTICA ELLER EN

AFHENTNINGSFORHANDLERE. SKADER FORÅRSAGT AF MODIFIKATION ELLER TILPASNING, DER MÅTTE VÆRE NØDVENDIG FOR AT MULIGGØRE, AT ET PRODUKT KAN FUNKTIONERE I ET ANDET LAND END DET LAND, DET VAR DESIGNET, FREMSTILLET, GODKENDT OG/ELLER AUTORISERET TIL, ELLER REPARATION AF PRODUKTET, SOM RESULTERER I SKADE SOM FØLGE AF DISSE MODIFIKATIONER. SKADE PÅ PRODUKTER, HVOR DEN SIKRE FORFALSKNINGSKODE (ELLER TILVÆRENDE) ER BLEVET FJERNET, SLETTET, ØDELAGT, ÆNDRET ELLER GJORT ULÆSELIG. Denne garanti indeholder ingen specifikke garantier for, at produktet vil være fejlfrit. Undtagen i USA og i det omfang det er forbudt ved gældende lov i andre lande, er denne garanti ugyldig, hvis et produkt returneres med fjernede, beskadigede eller manipulerede etiketter eller ændringer (herunder uautoriseret fjernelse af komponenter eller udvendigt dæksel).

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

UNDTAGEN I EU, EFTA OG STORBRIANNIEN OG UNDTAGEN I DET OMFANG DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV I ANDRE LANDE, FRASKRIVES ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. KUN FOR USA, EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, DER IKKE KAN FRASKRIVES, ER UDTRYKKELT BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN BEGRÆNSENDE GARANTIPERIODE SOM ANGIVET I DENNE GARANTI.

HVIS DU ER EN FORBRUGER UNDERLAGT FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNINGEN I QUEBEC, BEGRÆNSENDE GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE I DETTE AFSNIT IKKE DINE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER I HENHOLD TIL SÅDAN LOV, HERUNDER RETTEN TIL AT FREMSÆTTE ET KRAV I HENHOLD TIL ENHVER AF DE LOVPLIGTIGE GARANTIER, DER ER GIVET I HENHOLD TIL AFSNIT 34 TIL 54 I SÅDAN LOV.

ANSVARSBEGRÆNSNING

MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG, DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER LUXOTTICA IKKE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER FOR BRUD AF EN UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI I HENHOLD TIL DENNE GARANTI. UNDTAGEN I DET OMFANG, SOM ER FORBUDT VED LOV, ER LUXOTTICAS MAKSIMALE ANSVAR FOR ENHVER KRAV, DER OPSTÅR UD AF ELLER RELATERER SIG TIL DENNE GARANTI, BEGRÆNSET TIL KØBSPRISEN BETALT AF DIG FOR PRODUKTET PLUS EVENTUEL RENTE TILLADT VED LOV UANSET FORMEN FOR KRAV. I DET OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, ER LUXOTTICA IKKE ANSVARLIG FOR BEGIVENHEDER, DER ER UDEN FOR DERES KONTROL, SÅSOM NATURKATASTROFER, VIRUS, EJENDOMSSKADER, TAB AF BRUG, FORRETNINGSTAB, TABT FORTJENESTE, TABTE DATA ELLER ANDRE FØLGEERSTATNINGER, STRAFFENDE ELLER SÆRLIGE ERSTATNINGER, UANSET HVORDAN DE ER OPSTÅET, FOR MISBRUG AF DENNE GARANTI, KONTRAKT ELLER ERSTATNINGSANSVAR (HERUNDER UAGTSOMHED).

Denne garanti påvirker ikke dine juridiske rettigheder i henhold til gældende statslig eller national lovgivning vedrørende salg af forbrugsvarer.

Nogle lande, stater, provinser og territorier (herunder EU, EFTA og Storbritannien) tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, udelukkelse eller begrænsning af visse skader eller typer af tab eller tillader begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti eller betingelse kan vare, så de begrænsninger eller udelukkelser, der er beskrevet i denne garanti, gælder muligvis ikke for dig.

RETURNERINGER OG OMBYTNINGER:

Hvis du har købt Nuance Audio™-produkter fra et EssilorLuxottica-banner, kan du returnere dem inden for 30 dage fra købsdatoen, eller inden for en længere periode, der udtrykkeligt er angivet af gældende lovgivning eller det specifikke EssilorLuxottica-banner. Nuance Audio™-produkter købt gennem forhandlere som ikke er EssilorLuxottica-forhandlere skal returneres til disse forhandlere i overensstemmelse med deres returneringspolitikker. For yderligere information om EssilorLuxottica returneringer, gå til: <http://www.nuanceaudio.com/en-us/c/support/shipping-and-returns>.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milano, Italien



Fremstillet i Kina



www.nuanceaudio.com



For de nyeste og opdaterede brugsanvisninger – sikkerhed og garanti, henvises der til instruktionerne i supportafsnittet i Nuance Audio™-appen og til følgende hjemmeside: nuanceaudio.com/support/manual-guide



Hjælp: nuanceaudio.com/contact-us

Denne hurtige startguide gælder for AAW0002EL & REB0080AO
Nuance Audio™ Remote Control.



**Raccolta carta
Papel y cartón**

