




Nuance Audio™ Charging Pad

**Brugsanvisning
sikkerhed og garanti**

Opladning

1

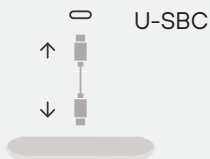

2



3



LED-indikatorer



 20-100%

 0-20%

FOR DANMARK

Nuance Audio™ Charging Pad

*Produktets tilgængelighed, lovgivningsmæssige krav og garantibetingelser kan variere fra land til land. Bemærk venligst, at den lokale markedsproduktkategori for Nuance Audio™ Glasses kan variere afhængigt af det marked, hvor produktet sælges, og nogle lande har ikke en dedikeret lokal kategori (såsom Storbritannien, Australien og New Zealand). Som et resultat kan terminologien, der bruges til at betegne produktets kategori, variere mellem sprogversionerne af disse Brugsanvisninger – Sikkerhed og garanti (f.eks. "assistant d'écoute" i Frankrig vs. "høreapparat" andre steder). Da dette dokument er organiseret efter sprog snarere end efter land, afspejler terminologien, der anvendes til at omtale produktet i en given sprogversion, ikke nødvendigvis den kategori, der gælder i alle lande, hvor det pågældende sprog anvendes. For eksempel, selvom fransk er et af de officielle sprog i Schweiz, gælder terminologien i den franske version ikke for det schweiziske marked; for Schweiz er den korrekte terminologi "aide auditive".

"Nuance Audio™ Charging Pad omtales i denne brugsanvisning også som "Produkt", "Enhed" eller "Udstyr".

TILSIGTET ANVENDELSE OG BRUGERE

Tilsigtet anvendelse. Nuance Audio™ Charging Pad er beregnet til at aktivere funktionaliteten af Nuance Audio™ Glasses med hensyn til opladning af audio brille*. Nuance Audio™ Charging Pad må kun bruges sammen med Nuance Audio™ Glasses og er kun beregnet til brug for personer på 18 år og derover. Nuance Audio™ Charging Pad bruges til at oplade Nuance Audio™ Glasses trådløst. Den har en LED-indikator set ovenfra, der giver brugeren information om opladningsstatussen af Nuance Audio™ Glasses. Den er batteriløs og fungerer takket være et USB-C-kabel.

For personer på 18 år og derover. Nuance Audio™ Charging Pad må kun bruges sammen med Nuance Audio™ Glasses og er kun beregnet til personer på 18 år og derover.

Tillad ikke personer under 18 år at bruge Nuance Audio™ Charging Pad. Børn kan blive kvælt, hvis de sluger Nuance Audio™ Charging Pad. Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra børn.

Der henvises til hurtigvejledningen for billeder og brugervejledning af Nuance Audio™ Charging Pad.

Begrænsninger for kombinationer. Nuance Audio™ Charging Pad må kun bruges sammen med Nuance Audio™ Glasses. For at oplade Nuance Audio™ Glasses, bruges det medfølgende USB-C-opladningskabel eller et andet USB-C-kabel, med en USB-vægadapter (ikke inkluderet). Det frarådes kraftigt at tilslutte Nuance Audio™ Charging Pad til et vægstik/en adapter, der ikke er certificeret til det marked, hvor Nuance Audio™ Charging Pad markedsføres, og som ikke er testet og godkendt i henhold til nationale og lokale standarder. Vægstikket/adapteren skal have et minimumsudgangsniveau på DC5V/1A.

Læs instruktionerne. Læs og følg alle instruktioner, der følger med Nuance Audio™ Charging Pad, før du bruger den.

Forsigtighedsregler

1. Brug ikke Nuance Audio™ Charging Pad, må ikke anvendes, hvis en del er beskadiget eller overophedet, hvis den udsender en høj, usædvanlig lyd. Hvis dette sker, skal du omgående tage Nuance Audio™ Charging Pad ud af strømkilden og derefter gå til www.nuanceaudio.com for at få nyttige service- og kontaktoplysninger.
2. Foretag ikke uautoriserede ændringer på Nuance Audio™ Charging Pad.

VIGTIGT! Hvis batteriet i Nuance Audio™ Glasses ikke oplades helt hver 6. måned efter sidste brug, kan det føre til permanent skade på batteriet, hvilket kan gøre Nuance Audio™ Glasses ubrugelige.

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER

ADVARSEL For at reducere risikoen for personskader, ubehag eller skader på ejendom, bedes du læse og følge oplysningerne om sundhed og sikkerhed nedenfor, før du bruger Nuance Audio™ Charging Pad.

Forstyrrelse af personlige medicinske apparater. Nuance Audio™ Charging Pad indeholder magnetisk materiale og komponenter, der udsender radiobølger, hvilket kan påvirke driften af medicinske apparater såsom, men ikke begrænset til, pacemakere, insulinpumper og andre bærbare eller implanterbare elektriske enheder. Kontakt din læge eller producenten af det medicinske apparat, før du bruger Nuance Audio™ Charging Pad. Afbryd Nuance Audio™ Charging Pad fra strømmen og flyt den væk fra dit andet medicinske apparat, hvis du bemærker nogen forstyrrelse med dit medicinske apparat.

Interferens. Tjek før du bruger Nuance Audio™ Charging Pad i områder, hvor elektronik eller trådløse enheder er begrænset. Dette kan forårsage interferens.

Vand og væsker. Må ikke nedsænkes i vand, og skal holdes væk fra væsker. Udsættelse for vand eller andre væsker kan beskadige Nuance Audio™ Charging Pad og føre til personskaade. Den er ikke vandafvisende og er ikke designet til at modstå nedsækning i eller eksponering for andre væsker. I tilfælde af vandeksponering skal Nuance Audio™ Charging Pad tørres grundigt. Må ikke lægges i blød i vand eller opbevares i et fugtigt miljø i længere tid.

ADVARSEL Potentielt eksplosive atmosfærer

Opbevar eller transporter ikke brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rum som Nuance Audio™ Charging Pad. Brug ikke Nuance Audio™ Charging Pad, når du befinder dig i et område med potentielt eksplosive atmosfærer.

Må ikke anvendes, hvis den er ødelagt eller beskadiget.

Overophedning. Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra ild og overdreven varme (f.eks. fra opbevaring i direkte sollys, nær stearinlys eller i en varm bil) for at undgå forbrændinger eller skader på Nuance Audio™ Charging Pad. Nuance Audio™ Charging Pad bør ikke overophede under normal brug. Hvis den gør, skal du omgående stoppe med at bruge den og kontakte support. Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra ild og varmekilder.

Håndter forsigtigt, og undgå skader. Nuance Audio™ Charging Pad er følsomt elektronisk udstyr og skal håndteres forsigtigt. Nuance Audio™ Charging Pad må ikke opvarmes eller bøjes, da den kan blive beskadiget og endda antændes. Nuance Audio™ Charging Pad må ikke tabes, slås eller rystes for meget. Brug ikke Nuance Audio™ Charging Pad, hvis den er beskadiget. Forsøg ikke at åbne, adskille eller manipulere med Nuance Audio™ Charging Pad. Må ikke udsættes for direkte sollys. Placer den ikke i nærheden af elektriske produkter med høj effekt. Må ikke være i et stærkt magnetisk miljø. Hvis produktet holder op med at virke, kan dets normale funktion genoprettes ved at flytte det væk fra magnetfeltet.

Interaktioner og miljøer

Begrænsninger for brug og funktionalitet

1: Placer Nuance Audio™ Charging Pad fladt på skrivebordet for at sikre, at den ikke vipper.

2: Placer Nuance Audio™ Glasses foldet og med linsen nedad på Nuance Audio™ Charging Pad. Se hurtigstartvejledningen for billeder.

3: Sørg for, at Nuance Audio™ Glasses er justeret med de magnetiske komponenter på Nuance Audio™ Charging Pad. Nuance Audio™ Charging Pads LED-lampe lyser orange eller grønt, når den er korrekt justeret. Hvis justeringen ikke er nøjagtig, kan du prøve at justere vinklen eller positionen på Nuance Audio™ Glasses.

4: Under opladningsprocessen må du ikke bevæge eller vibrere Nuance Audio™ Glasses betydeligt for at undgå at påvirke opladningseffekten.

5: Hvis Nuance Audio™ Charging Pad ikke kan oplades korrekt, eller hvis den ikke fungerer korrekt, skal du omgående stoppe med at bruge den.

Detaljerede systemkrav og servicevilkår er tilgængelige på www.nuanceaudio.com.

Flyvning. Tjek gældende sikkerhedsrestriktioner for personlig elektronik inden flyvning med Nuance Audio™ Charging Pad. Brug Nuance Audio™ Charging Pad i overensstemmelse med alle gældende lokale love, regler og bestemmelser. Brug sund fornuft og respekter tredjearters rettigheder, privatliv og fortrolighed.

Driftsforhold. -10 °C til 45 °C; 101,3 kPa til 61,9 kPa; luftfugtighed mellem 20 % og 60 % under 35 °C i 1000 timer; maksimal højde på 13.000 fod i 1 time ved 0 °C og 35 °C.

Transport og opbevaring. Nuance Audio™ Charging Pad skal forblive funktional efter genopretning fra opbevaringstemperaturer på minimum -30 °C eller maksimum 75 °C; høj luftfugtighed på 90 % og temperatur på 45 °C i 288 timer; eksponering for en højde på 40.000 fod (12.192 m) (18,8 kPa) i 12 timer ved både -10 °C og 45 °C.

Rengøring og vedligeholdelse. Brug en fugtig klud og neutral sæbe til at rengøre Nuance Audio™ Charging Pad. Undgå alle typer af spray, opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsopløsninger, der indeholder alkohol eller ammoniak. Brug ikke snavsede eller slibende klude, da de kan beskadige Nuance Audio™ Charging Pad. Hold Nuance Audio™ Charging Pad tør. Hvis produktet bliver for vådt, er der risiko for at beskadige opladningsfunktionen. Tør det grundigt, og opbevar det i en beholder med tørremidler eller i et tørreutui.

Opladning, el og varme

Opladning. Brug kun Nuance Audio™ Charging Pad til at oplade Nuance Audio™ Glasses. Brug det medfølgende USB-C-opladningskabel eller andre kabler af typen USB-C, C til C, med et USB-vægstik/adapter (medfølger ikke). Det frarådes kraftigt at tilslutte Nuance Audio™ Charging

Pad til et vægstik/en adapter, der ikke er certificeret til det marked, hvor Nuance Audio™ Charging Pad markedsføres, og som ikke er testet og godkendt i henhold til nationale og lokale standarder. Vægstikket/adapteren skal have et minimumsudgangsniveau på DC5V/1A.

Rengør ikke Nuance Audio™ Charging Pad, mens du oplader den. Oplad ikke Nuance Audio™ Glasses på metaloverflader eller i miljøer med stærke elektriske eller magnetiske felter. Undersøg regelmæssigt Nuance Audio™ Charging Pad og USB-C-opladningskablet for skader eller tegn på slid. Må ikke anvendes, hvis en del er beskadiget, revnet eller hvis en indvendig komponent er blotlagt. Forsøg ikke selv at reparere Nuance Audio™ Charging Pad eller udskifte dele. Kontakt i stedet support på www.nuanceaudio.com.

Tilbehør. Brug kun med de kompatible USB-C-kabler og vægstik/adaptre, der er angivet ovenfor. Brug af tilbehør der ikke er godkendt kan permanent beskadige Nuance Audio™ Charging Pad eller Nuance Audio™ Glasses, ugyldiggøre Luxotticas begrænsede garanti og øge risikoen for personskaade eller beskadigelse af anden ejendom.

NØGLEFUNKTIONER	
TRÅDLØS OPLADNING	
Sendefrekvens	13,56 MHz
Modtagelsesfrekvens	13,56 MHz
Maks./effektiv udstrålet effekt	1,8 W
Modulationstype, der transmitteres	ASK 100% modificeret Miller
Modtagelse af moduleringsstype	Belastningsmodulationsbærer fc(848) 16 kbit/s) OOK Manchester
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Batteri	Uden batteri
Livstid	3 år
Holdbarhed	5 år
TRANSPORT OG OPBEVARINGSFORHOLD	
Temperatur	Fra -30 °C til 75 °C
Fugtighed	Fra 20 % til høj luftfugtighed på 90 % og temperatur på 45 °C i 288 timer
Højde og atmosfærisk tryk	Højde på 40.000 ft (12.192 m) (18,8 kPa) i 12 timer ved både -10 °C og 45 °C
DRIFTSFORHOLD	
Temperatur	Fra -10 °C til 45 °C
Fugtighed	Fra 20 % til 60 % luftfugtighed under 35 °C i 1000 timer
Højde og atmosfærisk tryk	Højde på 13.000 ft i 1 time ved 0 °C og 35 °C; 101,3 kPa til 61,9 kPa

Bemærk: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse af reglerne, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Ingen del af dette værk må reproducere, ændres, distribueres eller på anden måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse.

EU-overholdelseserklæring

Luxottica Group S.p.A erklærer hermed, at denne enhed overholder direktivet om radioudstyr 2014/53/EU, EU's forordning om medicinsk udstyr 2017/745 om medicinsk udstyr og RoHS II-direktivet 2011/65/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.essilorluxottica.com/da/brands/conformity-declaration.

Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra gravide kvinders livmoder. Hold Nuance Audio™ Charging Pad væk fra den nederste del af maven hos unge.

Brug Nuance Audio™ Charging Pad under gode modtagelsesforhold for at reducere mængden af elektromagnetisk stråling, der modtages.



Slutbrugeren er forpligtet til at rapportere enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med brugen af enheden, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hændelsen fandt sted, og til producenten af enheden.

Bortskaffelsesoplysninger

Nuance Audio™ Charging Pad og USB-C-opladningskablet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald og skal afleveres på en passende genbrugsstation. Du kan finde flere oplysninger om korrekt bortskaffelse på www.nuanceaudio.com.

Symbolerne for den overstregede skraldespand nedenfor betyder, at Nuance Audio™ Charging Pad og USB-C-opladningskablet i henhold til lokale love og regler skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Når Nuance Audio™ Charging Pad og/eller opladningskablet når slutningen af deres levetid, skal det afleveres til et indsamlingssted udpeget af de lokale myndigheder. Alternativt kan du tage Nuance Audio™ Charging Pad og USB-C-opladningskabel til en tilknyttet butik. Den separate indsamling og genanvendelse af Nuance Audio™ Charging Pad og opladningskablet på tidspunktet for bortskaffelse vil hjælpe med at bevare naturressourcerne og sikre, at det genanvendes på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet.



WEEE-oplysninger

Luxottica er forpligtet til korrekt bortskaffelse, genbrug og genanvendelse af elektronisk og elektronisk affald ("WEEE"). WEEE bør ikke bortskaffes i almindelige husholdningsaffaldsbeholdere. For mere information om korrekt bortskaffelse, gå til www.nuanceaudio.com.

Nuance Audio™ er et registreret varemærke tilhørende Essilor International SAS.

LUXOTTICA BEGRÆNSET GARANTI

Denne begrænsede forbrugergaranti ("Garantien") gives af Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italien ("Luxottica"). Denne garanti dækker defekter og funktionsfejl i det Luxottica-produkt, den følger med. Garantien fortsætter i et (1) år fra købsdatoen for produktet (den "Begrænsede Garantiperiode"). Hvis du derimod køber produktet inden for EU, Storbritannien eller EFTA, vil den begrænsede garantiperiode være to (2) år.

Denne garanti gælder kun for de lande, hvor Nuance officielt markedsføres og understøttes, hvilket betyder lande, hvor produktet er certificeret, og Luxottica er autoriseret til at distribuere det ("Garantiens dækningsområde").

Vi garanterer, at produktet under normal og tilsigtet brug vil fungere i overensstemmelse med de tekniske specifikationer eller den ledsagende produktokumentation ("garanteret funktionalitet") i den begrænsede garantiperiode. For at undgå tvivl kan enhver service, der er nødvendig for at opnå den garanterede funktionalitet, opdateres, ændres eller begrænses, så længe den garanterede funktionalitet fortsat opretholdes (eller overgår). Denne garanti gælder ikke for produkter, der er købt fra andre kilder end Luxottica eller en autoriseret forhandler. Denne garanti er kun gyldig med et købsbevis, der tydeligt viser købsdatoen. Hvis du sender os et produkt uden et gyldigt købsbevis, forbeholder vi os retten til at returnere produktet til dig for din regning og mod forudbetaling, eller, hvis sådanne omkostninger ikke er forudbetalt, opbevarer vi produktet i trediv (30) dage til din afhentning. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder i henhold til forbrugerbeskyttelseslove eller -regler i det land, hvor produktet blev købt, eller, hvis det er anderledes, hvor du befinder dig, forudsat at dette produkt officielt markedsføres idet pågældende land, når en garantiservice er nødvendig. Sådanne rettigheder varierer fra stat til stat og fra land til land. De fordele, der gives af denne garanti, er ekstra og påvirker ikke nogen rettigheder og retsmidler, der gives af sådanne forbrugerbeskyttelseslove og -regler (herunder, men ikke begrænset til, nationale love, der anvender direktiv 1999/44/EF og direktiv 2019/771). Du har ret til gratis retsmidler, hvis produktet ikke overholder de krav, der er fastsat i lovgivningen i garantiområdet. De andre retsmidler, der er tilgængelige for dig i henhold til lovene i garantiområdet, påvirkes ikke af denne garanti. Se nedenfor og/eller kontakt din lokale forbrugerrettighedsorganisation/borgerrådgivningsbureau for fuldstændige oplysninger om dine rettigheder i henhold til lovene i garantiområdet.

Gå til www.nuanceaudio.com for information om de lande Luxottica understøtter og for at få nyttig service og kontakthinformation. Omfanget af teknisk support, der tilbydes af Luxottica, består i at hjælpe med at diagnosticere og løse problemer med defekter i produktet. Bemærk venligst, at der kan påløbe gebyrer, når du kontakter Luxottica via telefon, afhængigt af dit opkaldsområde.

REGISTRERING

Produktregistrering er ikke påkrævet som en betingelse for dækning under denne garanti, men nogle Luxottica-produkter kræver periodisk forbindelse til en onlinekonto for at sikre fuld funktionalitet.

SÅDAN INDSENDER DU ET GARANTIKRAV

Hvis du har et problem med dit produkt, og medmindre andet specifikt er angivet i denne garanti, og undtagen som angivet i gældende statslovgivning, skal du for at fremsætte et garantikrav returnere dit produkt til den autoriserede forhandler, hvor produktet blev købt, sammen med dit købsbevis. Gå til www.nuanceaudio.com for at få nyttig service og kontaktinformation.

Hvis dit garantikrav anses for at være gyldigt, og vi bekræfter en defekt eller funktionsfejl, der er dækket af denne garanti, vil en passende løsning blive fastlagt. Afhængigt af omstændighederne kan vi tage en af følgende handlinger: i) Reparere produktet, kun hvor reparation er teknisk muligt (givet det højteknologiske indhold af produktet, er den eneste tilgængelige reparation udskiftning af linsen); eller (ii) Udskifte produktet; eller (iii) Refundere købsprisen betalt for produktet, hvis hverken reparation eller udskiftning er mulig eller passende. I henhold til dine rettigheder og gældende lokale love i garantiområdet, ligger valget af løsning hos virksomheden.

Med forbehold af dine rettigheder i henhold til lokale love, og hvis vi fastslår, at et produkt skal udskiftes, kan det være et nyt, renoveret eller et genfremstillet produkt. Den begrænsede garantiperiode forlænges med en varighed svarende til den tid, vi havde produktet i vores besiddelse i forbindelse med garantiens udførelse, som beskrevet ovenfor. Med undtagelse af dine rettigheder og retsmidler i henhold til din lokale lovgivning, genoptager eller forlænger levering af et repareret eller erstatningsprodukt ikke den begrænsede garantiperiode. Vi returnerer muligvis ikke det originale produkt til dig. Hvis dit garantikrav ikke anses for at være gyldigt, forbeholder vi os retten til at returnere produktet til dig for din regning, mod forudbetaling, eller, hvis sådanne omkostninger ikke er forudbetalt, opbevarer vi produktet i tredive (30) dage til din afhentning, før det bortskaffes. Med undtagelse af hvor loven kræver andet, vil eventuelle udgifter, du pådrager dig ved at returnere produktet til garantivurdering, blive dækket af Luxottica. Hvis du skal returnere dit produkt til Luxottica, vil du få en forudbetalt label. Hvis garantikravet vurderes at være ugyldigt, og vi ikke finder en defekt eller funktionsfejl, der er dækket af denne garanti, vil vi kontakte dig for at se, om du ønsker, at vi udfører reparationer for din regning, og under alle omstændigheder vil du blive opkrævet for udgående fragt for at returnere dit produkt baseret på Luxotticas standardfragtpriser.

BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE, OG LUXOTTICA ER IKKE ANSVARLIG FOR: LEVERING ELLER INSTALLATION, ELLER ARBEJDSOMKOSTNINGER FOR OPSÆTNING AF PRODUKTET OG/ELLER JUSTERING AF KUNDEKONTROLLER PÅ PRODUKTET. SKADER FORÅRSAGET AF FORKERT BRUG, MISBRUG, ULYKKER, BRAND, TYVERI, FORSVINDELSE, FORVIGELSE, UDSVING OG STRØMSPÆNDINGER, TILSLUTNING TIL FORKERT SPÆNDING ELLER FORKERT ELEKTRISK SPÆNDING, VIRUS, MALWARE, HENSYNSLØS, BEVIDST ELLER FORSÆTLIG ADFÆRD ELLER FORSØMMELSE. SKADER FORÅRSAGET AF SERVICE PÅ PRODUKTET, DER IKKE ER FORHÅNDSGODKENDT AF LUXOTTICA.

SKADER FORÅRSAGET AF BRUG, DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED PRODUKTETS INSTRUKTIONER/DOKUMENTATION. SKADER FORÅRSAGET AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF PRODUKTINSTRUKTIONER/DOKUMENTATION ELLER MANGLENDE UDFØRELSE AF RENGØRING ELLER FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE. SKADER FORÅRSAGET AF KOMBINATIONEN AF PRODUKTET MED ANDRE PRODUKTER, TILBEHØR, DELE ELLER KOMPONENTER, DER IKKE ER LUXOTTICA-MÆRKER, ELLER BRUG AF PRODUKTER, Udstyr, systemer, hjælpefunktioner, tjenester, software, dele leveret, tilbehør, applikationer, installationer, reparationer, eksterne ledninger eller stik, der ikke er leveret eller er autoriseret af Luxottica, som beskadiger produktet. SIGNALPROBLEMER, MODTAGELSESPROBLEMER OG FORVRÆNGNING I FORBINDELSE MED STØJ, EKKO, INTERFERENS ELLER ANDRE PROBLEMER MED SIGNALTRANSMISSION OG -LEVERING. ETHVERT Udstyr eller komponenter, der ikke var inkluderet i eller med dit produkt som originalt solgt. NORMAL SLIDTAGE. SKADER FORÅRSAGET SOM FØLGE AF FORKERT TRANSPORT ELLER EMBALLAGE VED RETURNERING AF PRODUKTET TIL LUXOTTICA ELLER EN AFHENTNINGSFORHANDLERE. SKADER FORÅRSAGT AF MODIFIKATION ELLER TILPASNING, DER MÅTTE VÆRE NØDVENDIG FOR AT MULIGGØRE, AT ET PRODUKT KAN FUNKTIONERE I ET ANDET LAND END DET LAND, DET VAR DESIGNET, FREMSTILLET, GODKENDT OG/ELLER AUTORISERET TIL, ELLER REPARATION AF PRODUKTET, SOM RESULTERER I SKADE SOM FØLGE AF DISSE MODIFIKATIONER. SKADE PÅ PRODUKTER, HVOR DEN SIKRE FORFALSKNINGSKODE (ELLER TILVÆRENDE) ER BLEVET FJERNET, SLETTET, ØDELAGT, ÆNDRET ELLER GJORT ULÆSELIG.

Denne garanti indeholder ingen specifikke garantier for, at produktet vil være fejlfrit. Undtagen i USA og i det omfang det er forbudt ved gældende lov i andre lande, er denne garanti ugyldig, hvis et produkt returneres med fjernede, beskadigede eller manipulerede etiketter eller ændringer (herunder uautoriseret fjernelse af komponenter eller udvendigt dæksel).

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

UNDTAGEN I EU, EFTA OG STORBRITANNIEN OG UNDTAGEN I DET OMFANG DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV I ANDRE LANDE, FRASKRIVES ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. KUN FOR USA, EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, DER IKKE KAN FRASKRIVES, ER UDTRYKKELT BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE SOM ANGIVET I DENNE GARANTI.

HVIS DU ER EN FORBRUGER UNDERLAGT FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNINGEN I QUEBEC, BEGRÆNSENDE GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE I DETTE AFSNIT IKKE DINE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER I HENHOLD TIL SÅDAN LOV, HERUNDER RETTEN TIL AT FREMSÆTTE ET KRAV I HENHOLD TIL ENHVER AF DE LOVPLIGTIGE GARANTIER, DER ER GIVET I HENHOLD TIL AFSNIT 34 TIL 54 I SÅDAN LOV.

ANSVARSBEGRÆNSNING

MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG, DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER LUXOTTICA IKKE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER FOR BRUD AF EN UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI I HENHOLD TIL DENNE GARANTI. UNDTAGEN I DET OMFANG, SOM ER FORBUDT VED LOV, ER LUXOTTICAS MAKSIMALE ANSVAR FOR ENHVER KRAV, DER OPSTÅR UD AF ELLER RELATERER SIG TIL DENNE GARANTI, BEGRÆNSET TIL KØBSPRISEN BETALT AF DIG FOR PRODUKTET PLUS EVENTUEL RENTE TILLADT VED LOV UANSET FORMEN FOR KRAV. I DET OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, ER LUXOTTICA IKKE ANSVARLIG FOR BEGIVENHEDER, DER ER UDEN FOR DERES KONTROL. SÅSOM NATURKATASTROFER, VIRUS, EJENDOMSSKADER, TAB AF BRUG, FORRETNINGSTAB, TABT FORTJENESTE, TABTE DATA ELLER ANDRE FØLGEERSTATNINGER, STRAFFENDE ELLER SÆRLIGE ERSTATNINGER, UANSET HVORDAN DE ER OPSTÅET, FOR MISBRUG AF DENNE GARANTI, KONTRAKT ELLER ERSTATNINGSANSVAR (HERUNDER UAGTSOMHED).

Denne garanti påvirker ikke dine juridiske rettigheder i henhold til gældende statslig eller national lovgivning vedrørende salg af forbrugsvarer.

Nogle lande, stater, provinser og territorier (herunder EU, EFTA og Storbritannien) tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, udelukkelse eller begrænsning af visse skader eller typer af tab eller tillader begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti eller betingelse kan vare, så de begrænsninger eller udelukkelse, der er beskrevet i denne garanti, gælder muligvis ikke for dig.

RETURNERINGER OG OMBYTNINGER:

Hvis du har købt Nuance Audio™-produkter fra et EssilorLuxottica-banner, kan du returnere dem inden for 30 dage fra købsdatoen, eller inden for en længere periode, der udtrykkeligt er angivet af gældende lovgivning eller det specifikke EssilorLuxottica-banner. Nuance Audio™-produkter købt gennem forhandlere som ikke er EssilorLuxottica-forhandlere skal returneres til disse forhandlere i overensstemmelse med deres returneringspolitikker. For yderligere information om EssilorLuxottica returneringer, gå til:

<http://www.nuanceaudio.com/en-us/c/support/shipping-and-returns>.



Luxottica Group S.p.A.

Piazzale Cadorna 3,
20123 Milano, Italien



Fremstillet i Kina



www.nuanceaudio.com



For de nyeste og opdaterede brugsanvisninger – sikkerhed og garanti, henvises der til instruktionerne i supportafsnittet i Nuance Audio™-appen og til følgende hjemmeside: nuanceaudio.com/support/manual-guide



Hjælp: nuanceaudio.com/contact-us

Denne hurtige startguide gælder for AAW0001EL & REL0063A0
Nuance Audio™ Charging Pad.



Raccolta carta
Papel y cartón

