




Nuance Audio laadpad

**Gebruiksaanwijzing
Veiligheid & Garantie**

Opladen

1

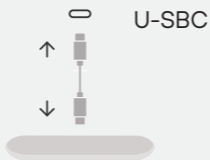


2



3



LED-indicatoren

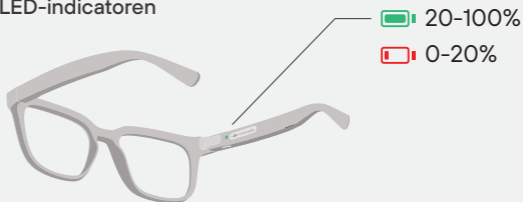

VOOR NEDERLAND

Nuance Audio™ laadpad

* De beschikbaarheid van producten, wettelijke voorschriften en garantievoorwaarden kunnen per land verschillen. Houd er rekening mee dat de productcategorie van de Nuance Audio™ bril per land kan verschillen, afhankelijk van de markt waar het product wordt verkocht. Sommige landen hanteren geen eigen lokale categorie (zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland). Hierdoor kan de terminologie die gebruikt wordt om de productcategorie aan te duiden, variëren in de verschillende taalversies van deze gebruiksaanwijzing – veiligheid & garantie (bijvoorbeeld "assistant d'écoute" in Frankrijk versus "hearing aid" in andere talen). Omdat dit document per taal in plaats van per land georganiseerd is, weerspiegelt de terminologie die in een bepaalde taalversie voor het product wordt gebruikt, niet noodzakelijkerwijs de categorie die van toepassing is in alle landen waar die taal wordt gesproken. Hoewel Frans bijvoorbeeld een van de officiële talen van Zwitserland is, is de terminologie in de Franse versie niet van toepassing op de Zwitserse markt; in Zwitserland is de correcte terminologie "hoortoestel".

"In deze gebruiksaanwijzing wordt de Nuance Audio™ laadpad ook wel aangeduid als "Product", "Hulpmiddel" of "Uitrusting".

BEDOELDE TOEPASSINGEN & GEBRUIKERS

Beoogd gebruik. De Nuance Audio™ laadpad-accessoire is bedoeld om de functionaliteit van de Nuance Audio™ bril mogelijk te maken, om het opladen van het hoortoestel op te laden*. De Nuance Audio™ laadpad is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met de Nuance Audio™ bril en allen door personen 18 jaar en ouder. De Nuance Audio™ laadpad wordt gebruikt om de Nuance Audio™ bril draadloos op te laden. Het heeft een LED aan de bovenkant om de gebruiker informatie te geven over de laadstatus van de Nuance Audio™ bril en is batterijloos; het werkt dankzij een USB-C-kabel.

Voor personen van 18 jaar en ouder. De Nuance Audio™ laadpad is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met de Nuance Audio™ bril en alleen door personen van 18 jaar en ouder. Laat niemand onder de 18 jaar de Nuance Audio™ laadpad gebruiken. Kinderen kunnen stikken of verstikken als ze de Nuance Audio™ laadpad inslikken. Houd de Nuance Audio™ laadpad buiten het bereik van kinderen.

Raadpleeg de Snelstartgids voor afbeeldingen en een gebruiksaanwijzing van de Nuance Audio™ laadpad.

Beperkingen bij combinaties. De Nuance Audio™ laadpad is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met de Nuance Audio™ bril. Om de Nuance Audio™ bril op te laden, gebruikt u de meegeleverde USB-C laadkabel of een andere USB-C-kabel met een USB-wandstekker/adapter (niet meegeleverd). Het wordt ten zeerste afgeraden om de Nuance Audio™ laadpad aan te sluiten op een wandstekker/adapter die niet gecertificeerd is voor de markt waarin de Nuance Audio™ laadpad wordt verkocht, en die niet is getest en goedgekeurd volgens nationale en lokale normen. De wandstekker/adapter moet een minimaal uitgangsvermogen van 5V/1A hebben.

Lees de instructies. Lees en volg alle instructies die bij de Nuance Audio™ laadpad zijn inbegrepen voordat u deze gebruikt.

Waarschuwingen.

1. Gebruik de Nuance Audio™ laadpad niet als een onderdeel ervan beschadigd is of oververhit raakt, of als er een luid, ongewoon geluid uit komt. Als dit gebeurt, haal dan de Nuance Audio™ laadpad direct uit het stopcontact en ga vervolgens naar www.nuanceaudio.com voor nuttige service- en contactinformatie.
2. Breng geen ongeautoriseerde wijzigingen aan de Nuance Audio™ laadpad aan.

BELANGRIJK! Als de batterij van Nuance Audio™ bril niet elke 6 maanden na het laatste gebruik volledig wordt opgeladen, kan dit permanente schade aan de batterij veroorzaken, waardoor Nuance Audio™ bril mogelijk niet meer werkt.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING Om het risico op persoonlijk letsel, ongemak of materiële schade te verminderen, dient u de onderstaande gezondheids- en veiligheidsinformatie te lezen en op te volgen voordat u de Nuance Audio™ laadpad gebruikt.

Interferentie met persoonlijke medische hulpmiddelen. De Nuance Audio™ laadpad bevat magnetisch materiaal en componenten die radiogolven uitzenden. Deze golven kunnen de werking van medische hulpmiddelen zoals, maar niet beperkt tot, pacemakers of andere implanteerbare apparaten, of insulinepompen beïnvloeden. Raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat voordat u de Nuance Audio™ laadpad gebruikt. Koppel de Nuance Audio™ laadpad los van de stroom en verplaats deze weg van uw andere medisch hulpmiddel als u enige storing bij uw medisch hulpmiddel opmerkt.

Storing. Controleer dit voordat u de Nuance Audio™ laadpad gebruikt in ruimtes waar elektronische apparaten of draadloze apparaten niet zijn toegestaan. Dit kan storingen veroorzaken.

Water en vloeistoffen. Niet onderdompelen in water en uit de buurt van vloeistoffen houden. Blootstelling aan water of andere vloeistoffen kan de Nuance Audio™ laadpad beschadigen en letsel veroorzaken. Deze is niet waterbestendig en is niet ontworpen om onderdompeling of blootstelling aan andere vloeistoffen te weerstaan. Droog de Nuance Audio™ laadpad grondig af als deze in contact komt met water. Niet onderdompelen in water en niet langdurig in een vochtige omgeving bewaren.

WAARSCHUWING: Mogelijk explosieve atmosferen

Bewaar of vervoer geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in hetzelfde compartiment als de Nuance Audio™ laadpad. Gebruik de Nuance Audio™ laadpad niet in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer.

Niet gebruiken als ze kapot of beschadigd is.

Oververhitting. Houd de Nuance Audio™ laadpad uit de buurt van vuur en extreme hitte (bijvoorbeeld door deze niet in direct zonlicht te bewaren, in de buurt van kaarsen of in een hete auto) om brandwonden of schade aan de Nuance Audio™ laadpad te voorkomen. De Nuance Audio™ laadpad mag bij normaal gebruik niet oververhitten. Als dit het geval is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. Houd de Nuance Audio™ laadpad uit de buurt van vuur en warmtebronnen.

Voorzichtig behandelen en schade voorkomen. De Nuance Audio™ laadpad is een gevoelig elektronisch apparaat en dient met zorg te worden behandeld. Verwarm of buig de Nuance Audio™ laadpad niet, aangezien deze beschadigd kan raken en zelfs vlam kan vatten. Laat de Nuance Audio™ laadpad niet vallen, sla er niet op en schud deze niet overmatig. Gebruik de Nuance Audio™ laadpad niet als deze beschadigd is. Probeer de Nuance Audio™ laadpad niet te openen, uit elkaar te halen of te manipuleren. Niet blootstellen aan de zon. Plaats het hulpmiddel niet in de buurt van krachtige elektrische apparaten. Vermijd een omgeving met sterke magnetische velden. Als het product niet meer werkt, kan de normale werking worden hersteld door het uit het magnetische veld te verwijderen.

Interacties en omgevingen, beperkingen in gebruik en functionaliteit

1: Plaats de Nuance Audio™ laadpad plat op een stabiele ondergrond om wiebelen te voorkomen.

2: Plaats de Nuance Audio™ bril dichtgevouwen en ondersteboven op de Nuance Audio™ laadpad. Raadpleeg de Snelstartgids voor afbeeldingen.

3: Zorg ervoor dat de Nuance Audio™ bril uitgelijnd is met de magnetische componenten op de Nuance Audio™ laadpad. De LED op de Nuance Audio™ laadpad licht oranje of groen op wanneer de bril correct uitgelijnd is. Als de uitlijning niet correct is, kunt u proberen de hoek of positie van de Nuance Audio™ bril aan te passen.

4: Tijdens het opladen mag u de Nuance Audio™ bril niet verplaatsen en niet blootstellen aan sterke trillingen, om te voorkomen dat het laadproces wordt verstoord.

5: Als de Nuance Audio™ laadpad niet goed oplaadt of storingen vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

Gedetailleerde systeemvereisten en servicevoorwaarden zijn beschikbaar op www.nuanceaudio.com.

Vliegen. Controleer de geldende veiligheidsvoorschriften voor persoonlijke elektronische apparaten in de luchtvaart voordat u met de Nuance Audio™ laadpad gaat vliegen. Gebruik de Nuance Audio™ laadpad in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten, regels en voorschriften. Gebruik gezond verstand en respecteer de rechten, privacy en vertrouwelijkheid van derden.

Bedrijfsomstandigheden. -10°C tot 45°C; 101,3 kPa tot 61,9 kPa; luchtvochtigheid tussen 20% en 60% bij 35°C gedurende 1000 uur; maximale hoogte van 13.000 voet (3.962,4 m) gedurende 1 uur bij 0°C en 35°C.

Transport en opslag. Nuance Audio™ laadpad blijft functioneel na herstel na opslag bij minimaal -30°C of maximaal 75°C; hoge luchtvochtigheid van 90% en temperatuur van 45°C gedurende 288 uur; blootstelling aan een hoogte van 40.000 voet (12.192 m) (18,8 kPa) gedurende 12 uur bij zowel -10°C als 45°C.

Schoonmaak en onderhoud. Om de Nuance Audio™ laadpad schoon te maken, gebruikt u een vochtige doek en neutrale zeep. Vermijd alle soorten sprays, oplosmiddelen, chemische stoffen of reinigingsmiddelen die alcohol of ammoniak bevatten. Gebruik geen vuile of schurende doeken die de Nuance Audio™ laadpad kunnen beschadigen. Houd de Nuance Audio™ laadpad droog. Als het product te nat wordt, bestaat het risico dat de oplaadfunctie beschadigd raakt. Droog het grondig, bewaar het in een bakje met wateronttrekkend middelen of in een drooghoes.

Elektrisch opladen & opwarming. Gebruik uitsluitend de Nuance Audio™ laadpad om de Nuance Audio™ bril op te laden. Gebruik de meegeleverde USB-C laadkabel of andere USB-C-kabels (C naar C) met een USB-wandstekker/adapter (niet meegeleverd). Het wordt ten zeerste afgeraden om de Nuance Audio™ laadpad aan te sluiten op een wandstekker/adapter die niet gecertificeerd is voor de markt waarin de Nuance Audio™ laadpad wordt verkocht, en die niet is getest en goedgekeurd volgens nationale en lokale normen. De wandstekker/adapter moet een minimaal uitgangsvermogen van 5V/1A hebben.

Reinig de Nuance Audio™ laadpad niet terwijl deze aan het opladen is. Laad de Nuance Audio™ bril niet op metalen oppervlakken of in omgevingen met een sterk elektrisch of magnetisch veld op. Controleer de Nuance Audio™ laadpad en de USB-C -laadkabel regelmatig op beschadigingen of slijtage. Niet gebruiken als een onderdeel beschadigd of gearsten is, of als een intern onderdeel blootligt. Probeer de Nuance Audio™ laadpad niet zelf te repareren of onderdelen te vervangen. Neem in plaats daarvan contact op met de klantenservice via www.nuanceaudio.com.

Accessoires. Gebruik dit hulpmiddel uitsluitend met de hierboven aangegeven compatibele USB-C-kabels en wandstekkers/adapters. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de Nuance Audio™ laadpad of de Nuance Audio™ bril permanent beschadigen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
DRAADLOOS OPLADEN	
Zendfrequentie	13,56 MHz (RF)
Ontvangstfrequentie	13,56 MHz
Maximaal/Effectief uitgestraald vermogen	1.8 W
Modulatietype zenden	ASK %100 aangepaste Miller
Modulatietype ontvangen	Belastingmodulatie subdraaggolf fc/16 848) kbit/s) OOK Manchester
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Batterij	Batterijloos
Levensduur	3 jaar
Houdbaarheid	5 jaar
TRANSPORT- EN OPSLAGVOORWAARDEN	
Temperatuur	Van -30°C tot 75°C
Vochtigheid	Van 20% tot hoge luchtvochtigheid van 90% en een temperatuur van 45°C gedurende 288 uur
Hoogte en atmosferische druk	Een hoogte van 40.000 voet (12.192 m) (18,8 kPa) gedurende 12 uur bij beide. -10°C en 45°C
WERKINGSOMSTANDIGHEDEN	
Temperatuur	Van -10°C tot 45°C
Vochtigheid	Van 20% tot 60% luchtvochtigheid bij 35°C gedurende 1000 uur
Hoogte en atmosferische druk	Een hoogte van 13.000 voet (3.962,4 m) gedurende 1 uur bij 0°C en 35°C; 101,3 kPa tot 61,9 kPa

Opmerking: wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het hulpmiddel te bedienen ongeldig maken.

Geen enkel deel van dit werk mag worden gereproduceerd, gewijzigd, verspreid of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

EU-conformiteitsverklaring

Luxtottica Group S.p.A. verklaart hierbij dat dit hulpmiddel voldoet aan de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU, de EU-verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en RoHS II-richtlijn 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.essilorluxottica.com/nl/merken/conformiteit-verklaring. Houd de Nuance Audio™ laadpad uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen. Houd de Nuance Audio™ laadpad uit de buurt van de onderbuik van adolescenten.

Gebruik de Nuance Audio™ laadpad in bij goede ontvangst om de hoeveelheid ontvangen elektromagnetische straling te verminderen.



De eindgebruiker is verplicht om elk ernstig incident dat zich voordoet bij het gebruik van het hulpmiddel te melden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden en aan de fabrikant van het hulpmiddel.

Informatie over weggoien

De Nuance Audio™ laadpad en de USB-C laadkabel mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid en moeten worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling.

Voor meer informatie over hoe dit correct weg te gooien, ga naar www.nuanceaudio.com.

Het symbool van de doorgestreepte afvalbak hieronder betekent dat de Nuance Audio™ laadpad en de USB-C Laadkabel, volgens de plaatselijke wet- en regelgeving, apart van het huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Wanneer de Nuance Audio™ laadpad en/of de laadkabel het einde van hun levensduur bereiken, kunt u deze inleveren bij een door de plaatselijke autoriteiten aangeduid inzamelpunt. Als alternatief kunt u de Nuance Audio™ laadpad en de USB-C-Laadkabel naar een aangesloten winkel brengen. Het apart inzamelen en recyclen van de Nuance Audio™ laadpad en laadkabel wanneer deze worden weggegooid draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het product op een manier wordt gerecycled die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.



Informatie over AEEA

Luxtottica zet zich in voor het correct weggoien, hergebruik, de recycling en terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ("AEEA"). AEEA mag niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Voor meer informatie over correct weggoien, kunt u terecht op www.nuanceaudio.com.

Nuance Audio™ is een geregistreerd handelsmerk van Essilor International SAS.

LUXOTTICA BEPERKTE GARANTIE

Deze beperkte consumentengarantie (de "garantie") wordt verstrekt door Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milaan, Italië ("Luxottica"). Deze garantie dekt defecten en storingen in het Luxottica-product waarmee zij wordt geleverd. De garantie loopt één (1) jaar vanaf de aankoopdatum van het product (de "beperkte garantieperiode"). Als u het product echter binnen de EU of EFTA aankoopt, bedraagt de beperkte garantieperiode twee (2) jaar. Voor Nederland bedraagt de garantieperiode drie (3) jaar. Deze garantie is alleen van toepassing op die landen waar Nuance officieel op de markt wordt gebracht en ondersteund, wat betekent landen waar het product is gecertificeerd en Luxottica de bevoegdheid heeft om het te verdelen ("garantiegebied"). Wij garanderen dat het product, bij normaal en beoogd gebruik, gedurende de beperkte garantieperiode in overeenstemming met de technische specificaties of de bijbehorende productdocumentatie (de "gegarandeerde functionaliteit") zal werken. Voor alle duidelijkheid: alle diensten die nodig zijn om de gegarandeerde functionaliteit te bereiken, kunnen worden bijgewerkt, gewijzigd of beperkt, zolang de gegarandeerde functionaliteit behouden blijft (of wordt overtroffen). Deze garantie is niet van toepassing op producten die bij een andere bron dan Luxottica of een erkende dealer zijn aangekocht. Deze garantie is alleen geldig met een aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Als u ons een product stuurt zonder geldig aankoopbewijs, behouden wij ons het recht voor om het product op uw kosten aan u te retourneren, onder voorbehoud van vooruitbetaling. Indien deze kosten niet vooraf zijn betaald, bewaren wij het product dertig (30) dagen zodat u het kunt ophalen. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten, en u kunt daarnaast ook andere rechten hebben op grond van consumentenbeschermingswetten of -regelgeving in het land waar het product is gekocht of, indien anders, waar u zich bevindt, mits dit product daar op het moment dat de garantie van toepassing is officieel op de markt wordt gebracht. Dergelijke rechten verschillen van staat tot staat en van land tot land. De voordelen die deze garantie verleent, zijn aanvullend op en doen geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen die worden toegekend door dergelijke consumentenbeschermingswetten en -regelgeving (inclusief, maar niet

beperkt tot, nationale wetten ter implementatie van Richtlijn 1999/44/EG en Richtlijn 2019/771).U heeft recht op kosteloze oplossingen indien het product niet voldoet aan de vereisten zoals bepaald in de wetten van het garantiestedingsgebied. De andere rechtsmiddelen die volgens de wetgeving in het garantiegebied voor u beschikbaar zijn, worden niet beïnvloed door deze garantie. Voor volledige informatie over uw rechten volgens de wetgeving in het garantiegebied, zie hieronder en/of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie/ burgeradviesbureau. Bezoek ons op www.nuanceaudio.com voor informatie over de landen waar Luxottica ondersteuning biedt en om nuttige service - en contactinformatie te verkrijgen. De reikwijdte van de technische ondersteuning die Luxottica aanbiedt, bestaat uit het helpen bij het diagnosticeren en oplossen van problemen met defecten in het product. Houd er rekening mee dat bij telefonisch contact met Luxottica, afhankelijk van uw gebied, kosten voor interlokaal bellen in rekening kunnen worden gebracht.

REGISTRATIE

Productregistratie is geen voorwaarde voor dekking onder deze garantie, maar voor sommige Luxottica-producten is periodieke verbinding met een online account vereist om de volledige functionaliteit te garanderen.

HOE EEN GARANTIECLAIM INDIENEN

Als u een probleem heeft met uw product, tenzij elders in deze garantie specifiek anders vermeld is en behoudens de toepasselijke wetgeving, dient u om een garantieclaim in te dienen uw product samen met het aankoopbewijs terug te brengen naar de erkende dealer waar u het product heeft gekocht. Ga naar www.nuanceaudio.com voor nuttige informatie over service- en contactgegevens. Als uw garantieclaim geldig wordt bevonden en wij een defect of storing bevestigen die onder deze garantie valt, zal de juiste oplossing worden bepaald. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij een van de volgende acties ondernemen: i) Het product repareren, maar alleen wanneer reparatie technisch mogelijk is (gezien het hoogtechnologische karakter van het product is de enige mogelijke reparatie het vervangen van de lens); of (ii) Het product vervangen; of (iii) De aankoopprijs van het product terugbetalen, indien noch reparatie noch vervanging mogelijk of gepast is. Onder voorbehoud van uw rechten onder de toepasselijke lokale wetgeving van het garantiegebied, ligt de keuze van de oplossing bij het bedrijf. Onder voorbehoud van uw rechten onder de plaatselijke wetgeving, kan een product dat vervangen moet worden, indien wij daartoe besluiten, een nieuw, gereviseerd of opnieuw gefabriceerd product zijn. De beperkte garantietermijn wordt verlengd met een periode die gelijk is aan de tijd waarin wij het product in ons bezit hadden voor de uitvoering van de garantie, zoals hierboven beschreven. Voor zover uw rechten en rechtsmiddelen op grond van de lokale wetgeving onverlet blijven, leidt het verstrekken van een gerepareerd of vervangen product niet tot het opnieuw ingaan of enige verlenging van de beperkte garantieperiode. We kunnen het originele product mogelijk niet aan u retourneren. Als uw garantieclaim niet gegrond wordt bevonden, behouden wij ons het recht voor het product op uw kosten aan u te retourneren, onder voorbehoud van vooruitbetaling. Indien deze kosten niet vooraf worden betaald, bewaren wij het product gedurende dertig (30) dagen zodat u het kunt ophalen, waarna het wordt vernietigd. Behalve voor zover de wet anders vereist, worden eventuele kosten die u maakt voor het retourneren van het product voor garantiebeoordeling door Luxottica gedragen. Als u uw product naar Luxottica moet retourneren, ontvangt u een vooraf betaald verzendlabel. Als de garantieclaim ongeldig wordt bevonden en wij geen defect of storing vaststellen die onder deze garantie valt, nemen wij contact met u op om te vragen of u wilt dat wij de reparatie op uw kosten uitvoeren. In elk geval worden de verzendkosten voor het terugsturen van uw product in rekening gebracht volgens de standaardtarieven van Luxottica.

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

DEZE GARANTIE DEKT NIET, EN LUXOTTICA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR: LEVERING OF INSTALLATIE, OF ARBEIDSKOSTEN VOOR HET INSTELLEN VAN HET PRODUCT EN/OF HET AANPASSEN VAN KLANTINSTELLINGEN OP HET PRODUCT. SCHADE VEROORZAAKT DOOR MISBRUIK, ONEIGENLIJK GEBRUIK, ONGELUKKEN, BRAND, DIEFSTAL, VERDWIJNING, VERKEERDE PLAATSING, STROOMSCHOMMELINGEN EN -PIEKEN, AANSLUITINGEN OP ONJUISTE SPANNING OF VERKEERDE ELEKTRISCHE NETSPANNING, VIRUSSEN, MALWARE, ROEKELOOS, OPZETTELIJK OF BEWUST GEDRAG OF NALATIGHEID. SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONDERHOUD AAN HET PRODUCT DAT NIET VOORAF DOOR LUXOTTICA IS GOEDGEKEURD. SCHADE VEROORZAAKT DOOR GEBRUIK DAT NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DE INSTRUCTIES/ DOCUMENTATIE VAN HET PRODUCT. SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES/DOCUMENTATIE VAN HET PRODUCT OF HET NIET UITVOEREN VAN REINIGING OF PREVENTIEF ONDERHOUD. SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE COMBINATIE VAN HET PRODUCT MET ANDERE PRODUCTEN DIE NIET ALS LUXOTTICA ZIJN GEMERKT, ACCESSOIRES, ONDERDELEN OF COMPONENTEN OF HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, APPARATUUR,

SYSTEMEN, VOORZIENINGEN, DIENSTEN, SOFTWARE, ONDERDELEN, ACCESSOIRES, APPLICATIES, INSTALLATIES, REPARATIES, EXTERNE BEKABELING OF CONNECTOREN DIE NIET DOOR LUXOTTICA ZIJN GELEVERD OF TOEGESTAAN EN DIE HET PRODUCT BESCHADIGEN. SIGNAALPROBLEMEN, ONTVANGSTPROBLEMEN EN VERVORMING DOOR RUIS, ECHO, STORING OF ANDERE PROBLEMEN MET SIGNAALOVERDRACHT EN -LEVERING. ALLE APPARATUUR OF ONDERDELEN DIE NIET BIJ UW PRODUCT WERDEN GELEVERD OF INBEGREPEN WAREN BIJ DE OORSPRONKELIJKE VERKOOP. NORMALE SLUITAGE. SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONJUIST TRANSPORT OF VERPAKKING BIJ HET RETOURNEREN VAN HET PRODUCT AAN LUXOTTICA OF EEN INZAMELINGSDEALER. SCHADE VEROORZAAKT DOOR WIJZIGING OF AANPASSING DIE NODIG KAN ZIJN OM EEN PRODUCT TE LATEN WERKEN IN EEN ANDER LAND DAN HET LAND WAARVOOR HET IS ONTWERPEN, GEFABRICEERD, GOEDGEKEURD EN/OF TOEGESTAAN, OF REPARATIE VAN HET PRODUCT DIE SCHADE VEROORZAAKT ALS GEVOLG VAN DEZE WIJZIGINGEN. SCHADE AAN PRODUCTEN WAARBIJ DE ANTI-VERVALSINGSCODE (OF EQUIVALENT) IS VERWIDDERD, UITGEVAAGD, BESCHADIGD, AANGEPAST OF ONLEESBAAR GEMAAKT.

Deze garantie bevat geen specifieke garanties dat het product foutloos zal zijn. Behalve in de VS en voor zover verboden door toepasselijke wetgeving in enig ander land, vervalt deze garantie als een product geretourneerd wordt met verwijderde, beschadigde of gemanipuleerde labels of enige wijzigingen (met inbegrip van het ongeoorloofd verwijderen van een onderdeel of externe behuizing).

IMPLICIETE GARANTIES

BEHALVE IN DE EU, EVA EN HET VK, EN BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IN EEN ANDER LAND, WORDT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK AFGEWEEZEN. ALLEEN VOOR DE VS GELDT DAT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, UITDRUKKELIJK BEPERKT ZIJN TOT DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIEPERIODE ZOALS VERMELD IN DEZE GARANTIE. ALS U EEN CONSUMENT BENT DIE ONDER DE QUEBEC CONSUMER PROTECTION ACT VALT, BEPERKT DE AFWIJZING VAN GARANTIE IN DEZE SECTIE UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN ONDER DEZE WET NIET, INCLUSIEF HET RECHT OM EEN CLAIM IN TE DIENEN OP BASIS VAN EEN VAN DE WETTELIJKE GARANTIES DIE WORDEN VERSTREKT ONDER ARTIKELN 34 TOT 54 VAN DEZE WET.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS LUXOTTICA OP GROND VAN DEZE GARANTIE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DOOR SCHENDING VAN EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERBODEN, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LUXOTTICA VOOR EEN CLAIM VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE GARANTIE BEPERKT TOT DE AANKOOPPRIJS DIE U VOOR HET PRODUCT BETAALDE, PLUS EVENTUELE WETTELIJK TOEGESTANE RENTE, ONGEACHT DE VORM VAN DE CLAIM. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS LUXOTTICA NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEBEURTENISSEN TIJDEN HAAR INVLOEDSSFEER, ZOALS OVERMAGT, VIRUSSEN, SCHADE AAN EIGENDOM, **VERLIES VAN GEBRUIK, ONDERBREKING** VAN DE BEDRIJFSVOERING, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE SCHADE OF BIJZONDERE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK DAARVAN, VOORTVLOEIEND UIT EEN SCHENDING VAN DEZE GARANTIE, UIT OVEREENKOMST OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID).

Deze Garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten onder de toepasselijke staats- en nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. In sommige landen, staten, provincies en gebieden (waaronder de EU, EVA en het VK) is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, de uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schade of verlies, of zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan. Daarom zijn de beperkingen of uitsluitingen die in deze garantie worden beschreven mogelijk niet op u van toepassing.

RETOURNEREN EN RUILEN:

Als u Nuanco Audio™-producten heeft gekocht bij een EssilorLuxottica-verkooppunt, kunt u deze binnen 30 dagen na de aankoopdatum retourneren, of binnen een langere periode die uitdrukkelijk is bepaald door de toepasselijke wetgeving of het specifieke EssilorLuxottica-verkooppunt. Nuanco Audio™-producten die via niet-EssilorLuxottica-winkels zijn gekocht, moeten worden geretourneerd aan die winkels volgens hun retourbeleid. Voor meer informatie over het retourneren bij EssilorLuxottica, kunt u terecht op: <http://www.nuancoaudio.com/nl-nl/c/ondersteuning/zenden-en-retourneren>.



Luxottica Group S.p.A.

Piazzale Cadorna 3,
20123 Milaan, Italië



Gemaakt in China Fa-
briqué en Chine



www.nuanceaudio.com



Voor de meest recente gebruiksaanwijzing, veiligheidsinstructies en ga-
rantie-informatie, raadpleeg de instructies in het ondersteuningsgedeelte
van de Nuance Audio™ app en de volgende webpagina:
nuanceaudio.com/ondersteuning/handleiding



Ondersteuning: nuanceaudio.com/contact-us

Deze snelstartgids is van toepassing op de AAW0001EL & REL0063A0 Nuance Audio™ laadpad

