




Nuance Audio Charging Pad

**Bruksanvisning
säkerhet och garanti**

Laddning

1

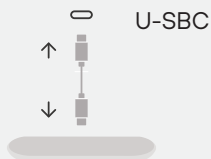

2



3



LED-indikatorer



Green battery icon 20-100%

Red battery icon 0-20%

FÖR SVERIGE

Nuance Audio™ Charging Pad

* Produkttillgänglighet, regulatoriska krav och garantivillkor kan variera från land till land. Observera att den lokala produktkategorin för Nuance Audio™ Glasses kan variera beroende på den marknad inom vilken produkten säljs, och att vissa länder inte har en särskild lokal kategori (t.ex. Storbritannien, Australien och Nya Zeeland). Därför kan terminologin som används för att beteckna produktens kategori variera mellan språkversionerna i denna bruksanvisning – Säkerhet och garanti (t.ex. "assistant d'écoute" i Frankrike jämfört med "hörselhjälpmedel" på andra håll). Eftersom detta dokument är organiserat efter språk snarare än efter land, återspeglar inte den terminologi som används för att omnämna produkten i en viss språkversion nödvändigtvis den kategori som är tillämplig i alla länder där det språket används. Till exempel: trots att franska är ett av Schweiz officiella språk, gäller inte den terminologi som används i den franska versionen för den schweiziska marknaden; för Schweiz är den korrekta terminologin "aide auditive".

"Nuance Audio™ Charging Pad kallas inom dessa bruksanvisningar även för "Produkt", "Enhet" eller "Utrustning".

AVSEDDA ANVÄNDNINGAR OCH ANVÄNDARE

Avsedd användning. Nuance Audio™ Charging Pad är avsedd att möjliggöra Nuance Audio™ Glasses funktionalitet genom att ladda hörselglasögonen*. Nuance Audio™ Charging Pad ska endast användas tillsammans med Nuance Audio™ Glasses och är endast avsedd för användning av personer som är 18 år eller äldre. Nuance Audio™ Charging Pad används för att trådlöst ladda Nuance Audio™ Glasses. Den har en LED-lampa som syns ovanifrån, vilken ger information till användaren om laddningsstatusen för Nuance Audio™ Glasses. Den är batterilös och fungerar tack vare en USB-C-kabel.

Från 18 års ålder. Nuance Audio™ Charging Pad får endast användas tillsammans med Nuance Audio™ Glasses och är endast avsedd för användning av individer som är 18 år eller äldre.

Tillåt inte någon under 18 år att använda Nuance Audio™ Charging Pad. Barn kan sätta i halsen eller kvävas om de sväljer Nuance Audio™ Charging Pad. Håll Nuance Audio™ Charging Pad utom räckhåll för barn.

Se Snabbguiden för bilder och förklaringar avseende användningen av Nuance Audio™ Charging Pad.

Begränsningar avseende kombinationer. Nuance Audio™ Charging Pad får endast användas tillsammans med Nuance Audio™ Glasses. För att ladda Nuance Audio™ Glasses använder du den medföljande USB-C laddningskabeln eller annan kabel av USB-C-typ, tillsammans med en USB-väggkontakt/-adapter (medföljer ej). Det avråds starkt från att ansluta Nuance Audio™ Charging Pad till en väggkontakt/ adapter som inte är certifierad för den marknad där Nuance Audio™ Charging Pad marknadsförs, och som inte har testats och godkänts enligt nationella och lokala standarder. Väggtaget/adaptern måste ha en lägsta uteffekt på DC5V/1A.

Läs instruktionerna. Läs och följ alla instruktioner som medföljer Nuance Audio™ Charging Pad innan du använder den.

Försiktighetsåtgärder.

1. Använd inte Nuance Audio™ Charging Pad om någon del av den är skadad eller överhettad eller om den avger något högt ovanligt ljud. Om detta händer ska du omedelbart koppla ur Nuance Audio™ Charging Pad från strömkällan. Besök oss sedan på www.nuanceaudio.com för att få hjälp och kontaktinformation.
2. Gör inga obehöriga ändringar på Nuance Audio™ Charging Pad.

VIKTIGT! Om Nuance Audio™ Glasses batteri inte laddas upp helt var sjätte månad från senaste användning, kan detta leda till permanent skada på batteriet, vilket kan göra Nuance Audio™ Glasses obrukbara.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

WARNING För att minska risken för personskador, obehag eller skador på egendom, ska du läsa och följa hälsosäkerhetsinformationen nedan innan du använder Nuance Audio™ Charging Pad.

Störning av personliga medicinska apparater. Nuance Audio™ Charging Pad innehåller magnetiskt material och komponenter som avger radiovågor, vilket kan påverka funktionen hos medicinska enheter såsom, men inte begränsat till, pacemakers, insulinpumpar och andra bärbara eller implanterbara elektriska enheter. Konsultera din läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten innan du använder Nuance Audio™ Charging Pad. Koppla ur Nuance Audio™ Charging Pad från strömkällan

och flytta den bort från den andra medicinska apparaten om du märker av någon störning av din medicinska enhet.

Interferens. Kontrollera innan du använder Nuance Audio™ Charging Pad på platser där det råder begränsningar avseende elektronik eller trådlösa enheter. Den kan orsaka interferens.

Vatten och vätskor. Sänk inte ner laddningsplattan i vatten och håll den borta från vätskor. Exponering för vatten eller andra vätskor kan skada Nuance Audio™ Charging Pad och leda till skador. Den är inte vattentålig och är inte utformad för att klara av nedsänkning eller exponering för andra vätskor. Torka Nuance Audio™ Charging Pad noggrant om den exponerats för vatten. Blötlägg den inte i vatten och placera den inte i fuktiga miljöer under någon längre tid.

WARNING Potentiellt explosiva atmosfärer

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som Nuance Audio™ Charging Pad. Använd inte Nuance Audio™ Charging Pad när du befinner dig i ett område med potentiellt explosiva atmosfärer.

Använd inte om den är trasig eller skadad.

Överhettning. Håll Nuance Audio™ Charging Pad borta från eld och för hög värme (t.ex. från förvaring i direkt solljus, nära sterinljus eller i en varm bil). Detta för att undvika brännskador eller skador på Nuance Audio™ Charging Pad. Nuance Audio™ Charging Pad ska inte överhettas vid normal användning. Om den gör det, ska du sluta använda den omedelbart och kontakta support. Håll Nuance Audio™ Charging Pad borta från eld och värmekällor.

Hantera med försiktighet och undvik skador. Nuance Audio™ Charging Pad är känslig elektronisk utrustning och bör hanteras med försiktighet. Värm inte upp och böj inte Nuance Audio™ Charging Pad, eftersom den kan skadas och till och med börja brinna. Tappa inte, slå inte och skaka inte Nuance Audio™ Charging Pad. Använd inte Nuance Audio™ Charging Pad om den är skadad. Försök inte öppna, demontera eller manipulera Nuance Audio™ Charging Pad. Exponera den inte för solljus. Placera den inte nära elektriska produkter med hög effekt. Ha den inte i en starkt magnetisk miljö. Om produkten slutar fungera kan dess normala funktion återställas genom att flytta bort den från det magnetiska fältet.

Interaktioner och miljöer

Användnings- och funktionsbegränsningar

1: Placera Nuance Audio™ Charging Pad plant på skrivbordet för att säkerställa att den inte vickar.

2: Placera Nuance Audio™ Glasses ihopvikta och upp och ner på Nuance Audio™ Charging Pad. Se Snabbstartsguiden för bilder.

3: Se till att Nuance Audio™ Glasses är i linje med de magnetiska komponenterna på Nuance Audio™ Charging Pad. LED-lampan på Nuance Audio™ Charging Pad kommer att lysa orange eller grönt när glasögonen är korrekt placerade. Om placeringen inte är exakt kan du försöka justera vinkeln eller positionen för Nuance Audio™ Glasses.

4: Under laddningsprocessen får Nuance Audio™ Glasses inte flyttas eller vibrera för mycket. Det skulle kunna påverka laddningseffekten.

5: Om Nuance Audio™ Charging Pad inte kan laddas ordentligt, eller om den inte fungerar som den ska, ska du omedelbart sluta använda den.

Detaljerade systemkrav och användarvillkor finns tillgängliga på – www.nuanceaudio.com.

Flygning. Kontrollera tillämpliga säkerhetsrestriktioner för personlig elektronik innan du flyger med Nuance Audio™ Charging Pad. Använd Nuance Audio™ Charging Pad i enlighet med alla tillämpliga lokala lagar, regler och förordningar. Använd sunt förnuft och respektera tredje parts rättigheter, integritet och konfidentialitet.

Driftsförhållanden. -10 °C till 45 °C; 101,3 kPa till 61,9 kPa; luftfuktighet mellan 20 % och 60 % under 35 °C i 1 000 timmar; maximal höjd på 13 000 fot i 1 timme vid 0 °C och 35 °C.

Transport och förvaring. Nuance Audio™ Charging Pad ska förbli funktionell efter återhämtning från minimala -30°C eller maximala 75°C lagringstemperaturer; hög luftfuktighet 90 % och temperatur 45°C i 288 timmar; exponering för höjd på 40 000 fot (12 192 m) (18,8 kPa) i 12 timmar vid både -10 °C och 45 °C.

Rengöring och underhåll. För att rengöra Nuance Audio™ Charging Pad, ska du använda en fuktig trasa och neutral tvål, samt undvika alla typer av sprayer, lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol eller ammoniak. Använd inte smutsiga eller abrasiva trasor som kan skada Nuance Audio™ Charging Pad. Håll Nuance Audio™ Charging Pad torr. Om produkten blir överdrivet våt finns det en risk för att laddningsfunktionen skadas. Torka den noggrant och förvara den i en behållare med torkmedel eller i en torkbox.

Laddning, elektrisk och värme

Laddning. Använd endast Nuance Audio™ Charging Pad för att ladda Nuance Audio™ Glasses. Använd den medföljande USB-C laddningskabeln eller andra kablar av USB-C-typ, C till C, med en

USB-väggkontakt/adapter (medföljer ej). Det avråds starkt från att ansluta Nuance Audio™ Charging Pad till en väggkontakt/ adapter som inte är certifierad för den marknad där Nuance Audio™ Charging Pad marknadsförs, och som inte har testats och godkänts enligt nationella och lokala standarder. Väggkontakten/adaptern måste ha en minsta uteffekt på DC5V/1A.

Rengör inte Nuance Audio™ Charging Pad medan du laddar den. Ladda inte Nuance Audio™ Glasses på metalltytor eller i starka elektriska eller magnetiska fält. Inspektera regelbundet Nuance Audio™ Charging Pad och USB-C laddningskabeln avseende skador eller tecken på slitage. Använd inte om någon del är skadad eller sprucken, eller om någon inre komponent är exponerad. Försök inte att reparera Nuance Audio™ Charging Pad eller byta delar själv, kontakta istället supporten på www.nuanceaudio.com.

Tillbehör. Använd endast med de kompatibla USB-C-kablar och väggkontakter/adaptrar som anges ovan. Användning av icke-godkända tillbehör kan permanent skada Nuance Audio™ Charging Pad eller Nuance Audio™ Glasses, ogiltigförklara Luxottica Limited Warranty och öka risken för skador eller skador på annan egendom.

NYCKELFUNKTIONER

TRÅDLÖS LADDNING

Överföringsfrekvens	13,56 MHz
Mottagningsfrekvens	13,56 MHz
Max/Effektiv utstrålad effekt	1,8 W
Modulationstyp för sändning	ASK 100% modifierad Miller
Modulationstyp för mottagning	Lastmodulering fc/848) 16 kbit/s) OOK Manchester

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batteri	Batterilös
Livstid	3 år
Hållbarhetstid	5 år

TRANSPORT- OCH FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

Temperatur	Från -30 °C till 75 °C
Luftfuktighet	Från 20 % till hög luftfuktighet 90 % och temperatur 45 °C i 288 timmar
Höjd och atmosfäriskt tryck	Höjd på 12 192 m (40,000 ft) (18,8 kPa) i 12 timmar vid båda. -10°C och 45°C

DRIFTSVILLKOR

Temperatur	Från -10 °C till 45 °C
Luftfuktighet	Från 20 % till 60 % luftfuktighet under 35 °C i 1 000 timmar
Höjd och atmosfäriskt tryck	Höjd på 13 000 fot i 1 timme vid 0 °C och 35 °C; 101,3 kPa till 61,9 kPa

Observera: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Ingen del av detta verk får reproduceras, modifieras, distribueras eller på annat sätt användas utan föregående skriftligt tillstånd.

EU-försäkran om överensstämmelse

Luxottica Group S.p.A försäkrar härmed att denna enhet uppfyller direktivet för radioutrustning 2014/53/EU, EU:s förordning om medicintekniska produkter 2017/745 om medicintekniska produkter och RoHS II-direktivet 2011/65/EU. Den fullständiga texten avseende EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: [www.essilorluxottica.com/en/ brands/ conformity-declaration](http://www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration). Håll Nuance Audio™ Charging Pad på avstånd från gravida kvinnors mage. Håll Nuance Audio™ Charging Pad på avstånd från undomars nedre bukdelar.

Använd Nuance Audio™ Charging Pad under goda mottagningsförhållanden för att minska mängden elektromagnetisk strålning som tas emot.



Slutanvändaren är skyldig att rapportera alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med användningen av enheten till behörig myndighet i det medlemsland där incidenten inträffade, samt till tillverkaren av enheten.

Information om kassering

Nuance Audio™ Charging Pad och USB-C-laddningskabel får inte kasseras bland hushållsavfall, utan ska lämnas in på återvinningsstation. För mer information om korrekt avfallshantering: www.nuanceaudio.com. Symbolerna med den överstrukna soptunnan nedan betyder att Nuance Audio™ Charging Pad och USB-C laddningskabel ska kasseras separat från hushållsavfall i enlighet med lokala lagar och förordningar. När Nuance Audio™ Charging Pad och/eller laddningskabel når sin livslängd, ska de tas med till en återvinningsstation. Alternativt kan Nuance Audio™ Charging Pad och USB-C-laddningskabel till en ansluten butik. Den separata insamlingen och återvinningen av Nuance Audio™ Charging Pad och laddningskabel vid tidpunkten för kasseringen kommer att bidra till att bevara naturresurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön.



LUXOTTICAS BEGRÄNSADE GARANTI

Denna begränsade konsumentgaranti ("Garantin") tillhandahålls av Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italien ("Luxottica"). Denna garanti täcker defekter och funktionsfel hos den Luxottica-produkt som den åtföljer. Garantin fortlöper i ett (1) år från inköpsdatumet för produkten (den "begränsade garantiperioden"). Om du köper produkten inom EU, Storbritannien eller EFTA, är dock den begränsade garantiperioden två (2) år.

Denna garanti gäller endast de länder där Nuance officiellt marknadsförs och stöds, det vill säga länder där produkten är certifierad och Luxottica är auktoriserad att distribuera den ("garantitäckningsområde").

Vi garanterar att Produkten, vid normal och avsedd användning, kommer att fungera i enlighet med de tekniska specifikationerna eller den medföljande produktdokumentationen (den "Garanterade Funktionaliteten") under den Begränsade Garantiperioden. För tydlighets skull kan alla tjänster som krävs för att uppnå den garanterade funktionaliteten uppdateras, modifieras eller begränsas, så länge de fortsätter att upprätthålla (eller överträffa) den garanterade funktionaliteten. Denna garanti gäller inte för produkter som köpts från någon annan källa än Luxottica eller en auktoriserad återförsäljare. Denna garanti är giltig endast med ett kvitto som tydligt visar inköpsdatumet. Om du skickar oss en produkt utan giltigt kvitto, förbehåller vi oss rätten att returnera produkten till dig till din bekostnad, under förutsättning att kostnaden är förbetald, eller, om sådana kostnader inte är förbetalda, så kommer vi att behålla produkten i trettio (30) dagar så att du kan hämta den.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter enligt konsumentskyddslagarna eller -förordningar i det land där produkten köptes eller, om det skiljer sig åt, där du befinner dig, förutsatt att denna produkt officiellt marknadsförs där vid den tidpunkt då garantiservicen behövs. Sådana rättigheter varierar från stat till stat och land till land. De förmåner som denna garanti ger gäller utöver och påverkar inte några rättigheter och åtgärder som följer av sådana konsumentskyddslagarna och -förordningar (inklusive, men inte begränsat till, nationella lagar som implementerar direktiv 1999/44/EG och direktiv 2019/771). Du har rätt till kostnadsfria åtgärder om produkten inte överensstämmer med de krav som anges i lagarna i garantitäckningsområdet. De andra åtgärder du har rätt till enligt lagstiftningen i garantitäckningsområdet påverkas inte av denna garanti. För fullständig information om dina rättigheter enligt lagarna i garantitäckningsområdet: se nedan och/eller kontakta din lokala konsumenträttsorganisation/konsumentvägledning.

Besök oss på www.nuanceaudio.com för information om de länder Luxottica stöder, samt för att få hjälp och kontaktinformation. Omfattningen av den tekniska support som erbjuds av Luxottica består av att hjälpa till att diagnostisera och lösa problem med defekter i produkten. Notera att när du kontaktar Luxottica via telefon, kan långdistansavgifter tillkomma, beroende på varifrån du ringer.

REGISTRERING

Produktregistrering krävs inte som en förutsättning för täckning under denna garanti, men vissa Luxottica-produkter kräver periodisk anslutning till ett onlinekonto för att säkerställa full funktionalitet.

SÅ GÖR DU ETT GARANTIANSPRÅK

Om det uppstår ett problem med din produkt, måste du, förutsatt det inte anges specifikt någon annanstans i denna garanti och med undantag för vad som föreskrivs i tillämplig nationell lag,

för att göra ett garantianspråk, returnera din produkt till den auktoriserade återförsäljare där produkten köptes, tillsammans med ditt köpebevis. Besök www.nuanceaudio.com för att få hjälp och kontaktinformation.

Om ditt garantianspråk bedöms vara giltigt, och vi bekräftar en defekt eller funktionsstörning som omfattas av denna garanti, kommer lämplig åtgärd att fastställas. Beroende på omständigheterna kan vi vidta en av följande åtgärder: i) Reparera produkten, endast där reparation är tekniskt genomförbar (med tanke på den högteknologiska innehållet i produkten, är den enda tillgängliga reparationen linsbyte); eller (ii) Ersätta produkten; eller (iii) Återbetala det betalda inköpspriset för produkten, om varken reparation eller ersättning är möjligt eller lämpligt. Med förbehåll för dina rättigheter enligt tillämpliga lokala lagar i garantitäckningsområdet, ligger valet av åtgärd hos företaget.

Med förbehåll för dina rättigheter enligt lokala lagar kan, om vi bedömer att en produkt bör bytas ut, bytet bestå av en ny, renoverad eller ombyggd produkt. Den begränsade garantiperioden förlängs med en tid som är lika med den tid under vilken vi hade produkten i vår besittning för att uppfylla garantin enligt beskrivningen ovan. Med undantag för de rättigheter och åtgärder du har rätt till enligt lokal lagstiftning, så återställer eller förlänger inte tillhandahållandet av en reparerad eller ersatt produkt den begränsade garantiperioden.

Vi kanske inte återlämnar den ursprungliga produkten till dig. Om ditt garantianspråk inte bedöms vara giltigt, förbehåller vi oss rätten att returnera produkten till dig till din bekostnad, under förutsättning att kostnaden är förbetald, eller, om sådana kostnader inte är förbetalda, så kommer vi att behålla produkten i trettio (30) dagar så att du kan hämta den innan den bortskaffas.

Förutom i den utsträckning lagen kräver något annat, kommer eventuella kostnader som du ådrar dig för att returnera produkten för garantibedömning att täckas av Luxottica. Om du behöver returnera din produkt till Luxottica kommer du att få en förbetald etikett. Om garantianspråket bedöms vara ogiltigt och vi inte hittar något fel eller någon funktionsstörning som omfattas av denna garanti, kommer vi att kontakta dig för att se om du vill att vi ska utföra reparationer på din bekostnad och du kommer, i vilket fall som helst och baserat på Luxotticas standardfraktpriser, att debiteras för frakten för att returnera din produkt.

BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG

DENNA GARANTI TÄCKER INTE, OCH LUXOTTICA ANSVARAR INTE FÖR: LEVERANS ELLER INSTALLATION, ELLER ARBETSKOSTNADER FÖR INSTALLATION AV PRODUKTEN OCH/ELLER JUSTERING AV KUNDENS KONTROLLER PÅ PRODUKTEN. SKADOR ORSAKADE AV FELAKTIG ANVÄNDNING, OTILLÅTEN ANVÄNDNING, OLYCKOR, BRAND, STÖLD, FÖRSVINNANDE, FELPLACERING, FLUKTUATIONER OCH SPÄNNINGSTOPPAR, ANSLUTNING TILL FEL SPÄNNING ELLER FEL ELEKTRISK ELNÄTSPÄNNING, VIRUS, MALWARE, ELLER VÅRDSLÖS, AVSIKTLIG ELLER MEDVETEN HANDLING ELLER FÖRSUMMELSE. SKADOR ORSAKADE AV SERVICE AV PRODUKTEN SOM INTE PÅ FÖRHAND HAR GODKÄNTS AV LUXOTTICA.

SKADOR ORSAKADE AV ANVÄNDNING SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED PRODUKTENS INSTRUKTIONER/DOKUMENTATION. SKADOR ORSAKADE AV UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA PRODUKTENS INSTRUKTIONER/DOKUMENTATION, ELLER UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA RENGÖRING ELLER FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL. SKADOR ORSAKADE AV KOMBINATIONEN AV PRODUKTEN MED ANDRA ICKE-LUXOTTICA-MÄRKTA PRODUKTER, TILLBEHÖR, DELAR ELLER KOMPONENTER, ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTER, UTRUSTNING, SYSTEM, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, DELAR, TILLBEHÖR, APPLIKATIONER, INSTALLATIONER, REPARATIONER, EXTERNT KABLAG ELLER ANSLUTNINGAR SOM INTE TILLHANDAHÅLLITS ELLER GODKÄNTS AV LUXOTTICA OCH SOM SKADAR PRODUKTEN. SIGNALPROBLEM, MOTTAGNINGSPROBLEM OCH DISTORTION RELATERAD TILL BRUS, EKO, INTERFERENS ELLER ANDRA SIGNALÖVERFÖRINGS- OCH LEVERANSPROBLEM. EVENTUELL UTRUSTNING ELLER KOMPONENTER SOM INTE MEDFÖLJDE DIN PRODUKT SOM DEN URSPRUNGLIGEN SÄLDES. NORMALT SLITAGE. SKADA ORSAKAD AV FELAKTIG TRANSPORT ELLER FÖRPACKNING/EMBALLERING VID RETUR AV PRODUKTEN TILL LUXOTTICA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE. SKADOR ORSAKADE AV MODIFIERING ELLER ANPASSNING SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT EN PRODUKT SKA KUNNA FUNGERA I NÅGOT ANNAT LAND ÄN DET LAND FÖR VILKET DEN VAR UTFORMAD, TILLVERKAD, GODKÄND OCH/ ELLER AUKTORISERAD, ELLER REPARATION AV PRODUKTEN SOM RESULTERAR I SKADA TILL FÖLJD AV DESSA MODIFIERINGAR. SKADA PÅ PRODUKTER DÄR ANTI-FÖRFALSKNINGSKODEN (ELLER MOTSVARANDE) HAR TAGITS BORT, RADERATS, FÖRLORATS, ÄNDRATS ELLER GJORT OÄLSLIG.

Denna garanti inkluderar inga specifika garantier för att produkten kommer att vara felfri. Förutom i USA och i den utsträckning som det är förbjudet enligt tillämplig lag i något annat land, är denna garanti ogiltig om en produkt returneras med borttagna, skadade eller manipulerade etiketter, eller med några ändringar (inklusive obehörig borttagning av någon komponent eller yttre skydd).

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

FÖRUTOM I EU, EFTA OCH STORBRIANNIEN OCH FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT NÅGON TILLÄMPLIG LAG I NÅGOT ANNAT LAND, AVSÄGER VI OSS ALLT ANSVAR FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

FÖR USA ENDAST, ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM ENLIGT LAG INTE KAN UTESLUTAS, UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSADE TILL VARAKTIGHETEN AV DEN BEGRÄNSADE GARANTITID SOM ANGES I DENNA GARANTI.

OM DU ÄR EN KONSUMENT SOM OMFATTAS AV QUEBECS KONSUMENTSKYDDSLAG, BEGRÄNSAR INTE GARANTIFRISKRIVNINGEN I DETTA AVSNITT DINA RÄTTIGHETER OCH RÄTTSMEDEL ENLIGT DENNA LAG, INKLUSIVE RÄTTEN ATT GÖRA ANSPRÅK ENLIGT NÅGON AV DE LAGSTADGADE GARANTIER SOM ANGES I AVSNITT 34 TILL 54 I DEN LAGEN.

ANSVARSBEGRÄNSNING

FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA LUXOTTICA INTE, ENLIGT DENNA GARANTI, HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, BEGRÄNSAS LUXOTTICAS MAXIMALA ANSVAR FÖR NÅGOT KRAV SOM UPPSTÅR UR, ELLER RELATERAR TILL, DENNA GARANTI, TILL DEN KÖPESUMMA DU BETALAT FÖR PRODUKTEN, SAMT EVENTUELL LAGENLIG RÄNTA, OAVSETT ANSPRÅKETS FORM.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, ANSVARAR LUXOTTICA INTE FÖR HÄNDELSER SOM LIGGER UTANFÖR DESS KONTROLL, SÅSOM NATURKATASTROFER, VIRUS, SKADOR PÅ EGENDOM, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, AVBROTT

I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT HUR DESSA ORSAKATS, VID BROTT MOT DENNA GARANTI, AVTAL ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET).

Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter enligt tillämplig statlig och nationell lagstiftning avseende försäljning av konsumentvaror.

Vissa länder, stater, provinser och territorier (inklusive EU, EFTA och Storbritannien) tillåter inte undantag eller begränsning av indirekta skador eller följskador, eller undantag eller begränsning av vissa skador eller typer av förlust, och tillåter inte heller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti eller ett villkor kan gälla, så de begränsningar eller undantag som beskrivs i denna garanti kanske inte gäller för dig.

RETURER OCH BYTEN:

Om du har köpt Nuance Audio™-produkter från en EssilorLuxottica-bannerannons kan du returnera dem inom 30 dagar från inköpsdatumet, eller under en längre period som uttryckligen anges av tillämplig lag eller den specifika EssilorLuxottica-bannerannonsen. Nuance Audio™ produkter som köpts genom icke-EssilorLuxottica-återförsäljare måste returneras till dessa återförsäljare i enlighet med dessas returpolicyer. Här finner du mer information om EssilorLuxottica-returer:

<http://www.nuanceaudio.com/sv-se/c/support/shipping-and-returns>.



Luxottica Group S.p.A.

Piazzale Cadorna 3,
20123 Milano, Italien



Tillverkad i Kina



www.nuanceaudio.com



De senaste och uppdaterade bruksanvisningarna – säkerhet och garanti hittar du under Instruktioner i supportavsnittet i Nuance Audio™ App och på följande webbsida: nuanceaudio.com/support/manual-guide



Support: nuanceaudio.com/contact-us

Denna snabbstartsguide gäller för Nuance Audio™ Charging Pad
AAW0001EL och REL0063A0



Raccolta carta
Papel y cartón

