



Nuance Audio Remote Control

**Bruksanvisning
säkerhet och garanti**

Första parkoppling

1 Tryck och håll ned

2 Dra i fliken



• Blinkande blå LED - Parkoppling pågår

• Fast blå LED - Parkoppling klar

Ytterligare parkoppling

1 A. Fäll ihop glasögonen
B. Tryck och håll ned knappen

2 Tryck och håll ned sidoknappen



• Släpp upp när den blå LED-lampen blinkar

LED-indikationer



Återanslutning



Låg
batterinivå



Glasögonen
hittades inte

Ljudlägen Tryck




Volym Tryck +/-



Batteri CR2450

1

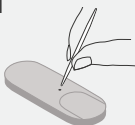

2



3



FÖR SVERIGE

Nuance Audio™ Remote Control

* Produkttillgänglighet, regulatoriska krav och garantivillkor kan variera från land till land. Observera att den lokala produktkategorin för Nuance Audio™ Glasses kan variera beroende på den marknad inom vilken produkten säljs, och att vissa länder inte har en särskild lokal kategori (t.ex. Storbritannien, Australien och Nya Zeeland). Därför kan terminologin som används för att beteckna produktens kategori variera mellan språkversionerna i denna bruksanvisning – Säkerhet och garanti (t.ex. "assistant d'écoute" i Frankrike jämfört med "hörselhjälpmedel" på andra håll). Eftersom detta dokument är organiserat efter språk snarare än efter land, återspeglar inte den terminologi som används för att omnämna produkten i en viss språkversion nödvändigtvis den kategori som är tillämplig i alla länder där det språket används. Till exempel: trots att franska är ett av Schweiz officiella språk, gäller inte den terminologi som används i den franska versionen för den schweiziska marknaden; för Schweiz är den korrekta terminologin "aide auditive".

"Nuance Audio™ Remote Control kallas inom dessa bruksanvisningar även för "Produkt", "Enhet" eller "Utrustning".

AVSEDDA ANVÄNDNINGAR OCH ANVÄNDARE

Avsedd användning. Tillbehöret Nuance Audio™ Remote Control är avsett att stödja Nuance Audio™ Glasses funktionalitet när det gäller att kontrollera inställningar på hörselglasögonen*. Nuance Audio™ Remote Control används för att trådlöst styra volymen och lägena på Nuance Audio™ Glasses. De två möjliga ljudlägena är:

- Frontal: när denna funktionalitet är vald, är de förstärkta ljuden de som kommer från den riktning du tittar mot, och alla andra ljud dämpas. Generellt används denna funktion i en bullrig miljö när du vill höra personen som pratar med dig bättre.
- All-around: denna funktion förstärker alla ljud runt omkring dig.

Nuance Audio™ Remote Control är avsedd att användas endast tillsammans med Nuance Audio™ Glasses och är endast avsedd för användning av personer som är 18 år eller äldre.

Nuance Audio™ Remote Control fungerar när den är parkopplad till glasögonen via Bluetooth, och den inkluderar ett knappcells batteri. Knappcells batteriet (CR2450) kan bytas av kunden.

Nuance Audio™ Glasses är en medicinsk enhet. Nuance Audio™ Remote Control ska användas som ett tillbehör till Nuance Audio™ Glasses.

Från 18 års ålder och över. Nuance Audio™ Remote Control är avsedd att användas endast tillsammans med Nuance Audio™ Glasses och är endast avsedd att användas av personer som är 18 år och äldre. Låt inte någon under 18 år att använda Nuance Audio™ Remote Control. Barn kan kvävas eller få andningssvårigheter om de sväljer denna produkt. Håll denna produkt utom räckhåll för barn. Se användarhandboken för bilder och instruktioner för Nuance Audio™ Remote Control.

Begränsningar avseende kombinationer. Nuance Audio™ Remote Control fungerar endast med Nuance Audio™ Glasses, vilket innebär att produkten inte kan fungera med andra enheter.

Läs instruktionerna. Läs och följ alla instruktioner som medföljer Nuance Audio™ Remote Control innan du använder den.

Försiktighetsåtgärder.

1. När du justerar volymen ska du höja den gradvis tills du når en behaglig lyssningsnivå.
2. Använd inte Nuance Audio™ Remote Control om någon del av den är skadad eller överhettad. Om detta händer ska du sluta använda Nuance Audio™ Remote Control omedelbart, och besöka oss på www.nuanceaudio.com för att få hjälp och kontaktinformation.

Gör inga obehöriga ändringar på denna produkt.

HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION

WARNING För att minska risken för personskador, obehag eller skador på egendom, ska du läsa och följa hälsosäkerhetsinformationen nedan innan du använder Nuance Audio™ Remote Control.

Störning av personliga medicinska enheter. Denna produkt innehåller magnetiskt material och komponenter som avger radiovågor, vilket kan påverka funktionen hos medicinska enheter såsom, men inte begränsat till, pacemakers och andra bärbara och implanterbara enheter, exempelvis insulinpumpar. Konsultera din läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten innan du använder produkten. Stäng av de elektroniska funktionerna i produkten om du märker någon störning med din medicinska enhet.

Störningar. Kontrollera innan du använder Nuance Audio™ Remote Control på platser där det råder

begränsningar avseende elektronik eller trådlösa enheter. Den kan orsaka störningar.

Körning. Använd inte Nuance Audio™ Remote Control medan du kör.

Vatten och vätskor. Exponera inte för, eller sänk ner i, vatten. Långvarig exponering för vatten kan skada Nuance Audio™ Remote Control. Nuance Audio™ Remote Control är inte designad för att klara av nedsänkning eller långvarig exponering för vatten eller andra vätskor. Vid exponering för vatten ska Nuance Audio™ Remote Control noggrant torkas med en torr trasa.

WARNING Potentiellt explosiva atmosfärer. Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva material i samma utrymme som Nuance Audio™ Remote Control. Stäng av din Nuance Audio™ Remote Control, och ta inte bort eller installera batterier när du befinner dig i ett område med potentiellt explosiva atmosfärer.

Använd inte om den är trasig eller skadad.

Inspektera regelbundet Nuance Audio™ Remote Control avseende skador eller tecken på slitage. Använd den inte om någon del är skadad, spräckt eller om någon intern komponent är exponerad. Försök inte att reparera Nuance Audio™ Remote Control själv, utan kontakta supporten på www.nuanceaudio.com.

Överhettning. Håll Nuance Audio™ Remote Control borta från öppna lågor och för hög värme (t.ex. från förvaring i direkt solljus, nära sterinljus eller i en varm bil). Detta för att undvika brännskador eller skador på Nuance Audio™ Remote Control. Nuance Audio™ Remote Control bör inte överhettas vid normal användning. Om den gör det ska du sluta använda den omedelbart och kontakta support.

Hantera varsamt och undvik skador. Nuance Audio™ Remote Control är känslig elektronisk utrustning. Den innehåller känslig elektronisk hårdvara och bör hanteras med ansvar och omsorg. Värm inte upp den eller böj den. Den kan skadas och till och med börja brinna. Tappa inte, stöt inte till, och skaka inte Nuance Audio™ Remote Control.

Använd inte Nuance Audio™ Remote Control om den är skadad. Försök inte att öppna, demontera eller manipulera Nuance Audio™ Remote Control.

Interaktioner och miljöer. Var uppmärksam. Att interagera med Nuance Audio™ Remote Control kan distrahera dig eller öka din reaktionstid vid fara. Var alltid uppmärksam på din omgivning, inklusive skyltar och hinder.

Livslängd. Den förväntade livslängden för Nuance Audio™ Remote Control är 5 år från tillverkningsdatum.

Användningsbegränsningar. Använd inte Nuance Audio™ Remote Control i miljöer med starka elektriska eller magnetiska fält. Det effektiva användningsavståndet för Nuance Audio™ Remote Control är mindre än 25 meter.

Flygning. Kontrollera tillämpliga säkerhetsrestriktioner för personlig elektronik innan du flyger med Nuance Audio™ Remote Control. Använd Nuance Audio™ Remote Control i enlighet med alla tillämpliga lokala lagar, regler och förordningar.

Driftsförhållanden. -10 °C till 45 °C; 101,3kPa till 61,9kPa; luftfuktighet mellan 20 % och 60 % under 35°C i 1 000 timmar; maximal höjd på 13 000 fot i 1 timme vid 0 °C och 35 °C.

Transport och förvaring. -40 °C till 85 °C; luftfuktighet mellan 20 % och 90 %; fjärrkontrollen ska förbli funktionell efter återhämtning från icke-operativ exponering vid en höjd på 40 000 fot (18,8 kPa) i 12 timmar vid både -10 °C och 45 °C.

Rengöring och underhåll. För att rengöra Nuance Audio™ Remote Control använder du en fuktad trasa och neutral tvål. Undvik alla typer av sprayar, lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol eller ammoniak.

Använd inte smutsiga eller slipande trasor som kan skada Nuance Audio™ Remote Control. Om produkten blir överdrivet våt finns det en risk för att den skadas. Torka den noggrant och förvara den i en behållare med torkmedel eller i en torkbox.

Batteri. Nuance Audio™ Remote Control innehåller ett knappcells batteri som kan bytas av användaren. Batteriet kan utgöra en brandrisk eller kemisk brännskaderisk om det används felaktigt. Lämna inte batteriet i bilen under direkt solljus, exponera det inte för överdriven värme och bränn det inte. Kassera batteriet enligt instruktionerna och lokala krav. Ta bort och återvinn eller kassera omedelbart använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter. Håll dem utom räckhåll för barn. Kassera INTE batterier i hushållsavfallet och bränn dem inte. Ta bort batterier från utrustning som inte används under en längre tid, och återvinn eller kassera dem omedelbart enligt lokala föreskrifter. Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, såsom alkaliska, kol-zink eller uppladdningsbara batterier. Förväntad batteritid är minst 6 månader under normala användningsförhållanden från det att batteriets skyddsklaff dras ut. För proceduren för batteribyte: följ anvisningarna i användarhandboken som följer med Nuance Audio™ Remote Control och använd en nål som är lika liten som en pennspets eller tandpetare för att öppna fjärrkontrollens lock. Var försiktig när du byter batteri för att undvika att skada strukturen på Nuance Audio™ Remote

Control. Se till att batterierna installeras korrekt vad avser polariteten (+ och -). Säkerställ alltid att batterifacket är helt stängt. Om batterifacket inte stängs ordentligt ska du sluta använda produkten, ta bort batterierna och hålla dem utom räckhåll för barn. Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas om. Tvinga inte fram urladdning, ladda inte om, demontera inte, värm inte över 100 °C, och bränn dem inte. Att göra så kan leda till skador på grund av gasutsläpp, läckage eller explosion som resulterar i kemiska brännskador. Batterirelaterade faror är brand, explosion och brännskada. Kortslut inte, krossa inte, bränn inte batteriet och exponera inte innehållet för vatten. Håll alltid dina batterier utom räckhåll för barn för att förhindra att de sväljs. Förtär inte batteriet. Kompatibla batterier är litium 3V CR2450 knappcells batterier. Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Ring Giftinformationscentralen för behandlingsinformation.

NYCKELFUNKTIONER	
Ljudlägeskontroll	Via knapp på enheten
Volymkontroll	Via knappar på enheten
TRÅDLÖS ANSLUTNING	
Bluetooth® -kompatibel	Ja, BLE
Bluetooth®- samtalskompatibel	Nej
Driftsfrekvens	2402-2480 MHz
Maximal utstrålad effekt	Max EIRP för fritt utrymme är -3,22 dBm
Modulering	GFSK
Kanalavstånd	2MHz
Kanalbandbredd	2MHz
Antal kanaler	40
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Batteri	Litium 3V CR2450 knappcells batteri
Livstid	5 år
Hållbarhetstid	5 år
TRANSPORT- OCH FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN	
Temperatur	Från -40 °C till 85 °C
Luftfuktighet	Från 20 % till hög luftfuktighet 90 % och temperatur 45 °C i 288 timmar
Höjd och atmosfäriskt tryck	Höjd på 40 000 fot (18,8 kPa) i 12 timmar vid både -10 °C och 45 °C
DRIFTSVILLKOR	
Temperatur	Från -10 °C till 45 °C
Luftfuktighet	Från 20 % till 60 % luftfuktighet under 35 °C i 1 000 timmar
Höjd och atmosfäriskt tryck	Höjd på 13 000 fot i 1 timme vid 0 °C och 35 °C ; 101,3 kPa till 61,9 kPa

Observera: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Ingen del av detta verk får reproduceras, modifieras, distribueras eller på annat sätt användas utan föregående skriftligt tillstånd.

EU-försäkringen om överensstämmelse

Luxottica Group S.p.A försäkrar härmed att denna enhet uppfyller direktivet för radioutrustning 2014/53/EU, EU:s förordning om medicintekniska produkter 2017/745 om medicintekniska produkter och RoHS II-direktivet 2011/65/EU. Den fullständiga texten avseende EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration Radiofrekvens och effekt: produktens BLE: 2402–2480 MHz < 20dBm;

Håll Nuance Audio™ Remote Control på avstånd från gravida kvinnors mage. Håll Nuance Audio™ Remote Controlen på avstånd från andomars nedre bukdelar. Använd Nuance Audio™ Remote Control under goda mottagningsförhållanden för att minska mängden elektromagnetisk strålning som tas emot.



Slutanvändaren är skyldig att rapportera alla allvariga incidenter som inträffar i samband med användningen av enheten till behörig myndighet i det medlemsland där incidenten inträffade, samt till tillverkaren av enheten.

Information om kassering

Nuance Audio™ Remote Control får inte kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in på återvinningsstation. För mer information om korrekt avfallshantering: www.nuanceaudio.com.

De överstrukna soptunnorna nedan betyder att batteriet till Nuance Audio™ Remote Control och/eller Nuance Audio™ Remote Control, enligt lokala lagar och förordningar, ska avfallshandteras separat från hushållsavfall. När Nuance Audio™ Remote Control når sin livslängd, ska den och batteriet tas med till en återvinningsstation. Alternativt ska produkten och batteriet tas med butiken där produkten köptes. Batteriet kan säkert tas bort av slutanvändaren enligt de anvisningar som ges i användarhandboken. Den separata insamlingen och återvinningen av produkten och/eller dess batteri vid kassering kommer att bidra till att bevara naturresurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön.



Information om EE-avfall

Luxottica åtar sig att säkerställa korrekt hantering, återanvändning och återvinning av avfall från elektronisk och elektrisk utrustning (EE-avfall). Detta avfall får inte kasseras i vanliga hushållssopor. Kassera batterier på ett miljövänligt sätt i enlighet med kommunal och nationell lagstiftning. För mer information om korrekt avfallshantering: www.nuanceaudio.com.

Säkerhetscertifieringar avseende fjärrkontrollens batteri

Denna artikel beskriver de internationella säkerhetsstandarder som fjärrkontrollens batteri uppfyller. Alla fjärrkontrollens batterier är testade, certifierade och uppfyller dessa internationella säkerhetsstandarder:

- Förenta nationernas (FN) transportregler UN38.3: Täcker batterisäkerhet under flygtransport.
- Förordning (EU) 2023/1542
- UL1642 Standard för litiumbatterier

WARNING: Batteriet innehåller inget kvicksilver. Punktera eller bränn inte, kläm inte eller sänk ner i vatten.

Nuance Audio™ är ett registrerat varumärke från Essilor International SAS.

LUXOTTICAS BEGRÄNSADE GARANTI

Denna begränsade konsumentgaranti ("Garantin") tillhandahålls av Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milano, Italien ("Luxottica"). Denna garanti täcker defekter och funktionsfel hos den Luxottica-produkt som den åtföljer. Garantin fortlöper i ett (1) år från inköpsdatumet för produkten (den "begränsade garantiperioden"). Om du köper produkten inom EU, Storbritannien eller EFTA, är dock den begränsade garantiperioden två (2) år.

Denna garanti gäller endast de länder där Nuance officiellt marknadsförs och stöds, det vill säga länder där produkten är certifierad och Luxottica är auktoriserad att distribuera den ("garantitäckningsområde").

Vi garanterar att Produkten, vid normal och avsedd användning, kommer att fungera i enlighet med de tekniska specifikationerna eller den medföljande produktdokumentationen (den "Garanterade Funktionaliteten") under den Begränsade Garantiperioden. För tydlighets skull kan alla tjänster som krävs för att uppnå den garanterade funktionaliteten uppdateras, modifieras eller begränsas, så länge de fortsätter att upprätthålla (eller överträffa) den garanterade funktionaliteten. Denna garanti gäller inte för produkter som köpts från någon annan källa än Luxottica eller en auktoriserad återförsäljare. Denna garanti är giltig endast med ett kvitto som tydligt visar inköpsdatumet. Om du skickar oss en produkt utan giltigt kvitto, förbehåller vi oss rätten att returnera produkten till dig till din bekostnad, under förutsättning att kostnaden är förbetald, eller, om sådana kostnader inte är förbetalda, så kommer vi att behålla produkten i trettio (30) dagar så att du kan hämta den.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter enligt konsumentskyddslagarna eller -förordningar i det land där produkten köptes eller, om det skiljer sig åt, där du befinner dig, förutsatt att denna produkt officiellt marknadsförs där vid den tidpunkt då garantiservicen behövs. Sådana rättigheter varierar från stat till stat och land till land. De förmåner som denna garanti ger gäller utöver och påverkar inte några rättigheter och åtgärder som följer av

sådana konsumentskyddslagar och -förfordningar (inklusive, men inte begränsat till, nationella lagar som implementerar direktiv 1999/44/EG och direktiv 2019/771). Du har rätt till kostnadsfria åtgärder om produkten inte överensstämmer med de krav som anges i lagarna i garantitäckningsområdet. De andra åtgärder du har rätt till enligt lagstiftningen i garantitäckningsområdet påverkas inte av denna garanti. För fullständig information om dina rättigheter enligt lagarna i garantitäckningsområdet: se nedan och/eller kontakta din lokala konsumenträttsorganisation/konsumentvägledning.

Besök oss på www.nuanceaudio.com för information om de länder Luxottica stöder, samt för att få hjälp och kontaktinformation. Omfattningen av den tekniska support som erbjuds av Luxottica består av att hjälpa till att diagnostisera och lösa problem med defekter i produkten. Notera att när du kontaktar Luxottica via telefon, kan långdistansavgifter tillkomma, beroende på varifrån du ringer.

REGISTRERING

Produktregistrering krävs inte som en förutsättning för täckning under denna garanti, men vissa Luxottica-produkter kräver periodisk anslutning till ett onlinekonto för att säkerställa full funktionalitet.

SÅ GÖR DU ETT GARANTIANSPRÅK

Om det uppstått ett problem med din produkt, måste du, förutsatt det inte anges specifikt någon annanstans i denna garanti och med undantag för vad som föreskrivs i tillämplig nationell lag, för att göra ett garantianspråk, returnera din produkt till den auktoriserade återförsäljare där produkten köptes, tillsammans med ditt köpebevis. Besök www.nuanceaudio.com för att få hjälp och kontaktinformation.

Om ditt garantianspråk bedöms vara giltigt, och vi bekräftar en defekt eller funktionsstörning som omfattas av denna garanti, kommer lämplig åtgärd att fastställas. Beroende på omständigheterna kan vi vidta en av följande åtgärder: i) Reparera produkten, endast där reparation är tekniskt genomförbar (med tanke på den högteknologiska innehållet i produkten, är den enda tillgängliga reparationen linsbyte); eller (ii) Ersätta produkten; eller (iii) Återbetala det betalda inköpspriset för produkten, om varken reparation eller ersättning är möjligt eller lämpligt. Med förbehåll för dina rättigheter enligt tillämpliga lokala lagar i garantitäckningsområdet, ligger valet av åtgärd hos företaget.

Med förbehåll för dina rättigheter enligt lokala lagar kan, om vi bedömer att en produkt bör bytas ut, bytet bestå av en ny, renoverad eller ombyggd produkt. Den begränsade garantiperioden förlängs med en tid som är lika med den tid under vilken vi hade produkten i vår besittning för att uppfylla garantin enligt beskrivningen ovan. Med undantag för de rättigheter och åtgärder du har rätt till enligt lokal lagstiftning, så återställer eller förlänger inte tillhandahållandet av en reparerad eller ersatt produkt den begränsade garantiperioden.

Vi kanske inte återlämnar den ursprungliga produkten till dig. Om ditt garantianspråk inte bedöms vara giltigt, förbehåller vi oss rätten att returnera produkten till dig till din bekostnad, under förutsättning att kostnaden är förbetald, eller, om sådana kostnader inte är förbetalda, så kommer vi att behålla produkten i trettio (30) dagar så att du kan hämta den innan den bortskaffas.

Förutom i den utsträckning lagen kräver något annat, kommer eventuella kostnader som du ådrar dig för att returnera produkten för garantibedömning att täckas av Luxottica. Om du behöver returnera din produkt till Luxottica kommer du att få en förbetald etikett. Om garantianspråket bedöms vara ogiltigt och vi inte hittar något fel eller någon funktionsstörning som omfattas av denna garanti, kommer vi att kontakta dig för att se om du vill att vi ska utföra reparationer på din bekostnad och du kommer, i vilket fall som helst och baserat på Luxotticas standardfraktpriser, att debiteras för frakten för att returnera din produkt.

BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG

DENNA GARANTI TÄCKER INTE, OCH LUXOTTICA ANSVARAR INTE FÖR: LEVERANS ELLER INSTALLATION, ELLER ARBETSKOSTNADER FÖR INSTALLATION AV PRODUKTEN OCH/ELLER JUSTERING AV KUNDENS KONTROLLER PÅ PRODUKTEN. SKADOR ORSAKADE AV FELAKTIG ANVÄNDNING, OTILLÅTEN ANVÄNDNING, OLYCKOR, BRAND, STÖLD, FÖRSVINNANDE, FELPLACERING, FLUKTUATIONER OCH SPÄNNINGSTOPPAR, ANSLUTNING TILL FEL SPÄNNING ELLER FEL ELEKTRISK ELNÄTSPÄNNING, VIRUS, MALWARE, ELLER VÅRDSLÖS, AVSIKTLIG ELLER MEDVETEN HANDLING ELLER FÖRSUMMELSE. SKADOR ORSAKADE AV SERVICE AV PRODUKTEN SOM INTE PÅ FÖRHAND HAR GODKÄNTS AV LUXOTTICA.

SKADOR ORSAKADE AV ANVÄNDNING SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED PRODUKTENS INSTRUKTIONER/DOKUMENTATION. SKADOR ORSAKADE AV UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA PRODUKTENS INSTRUKTIONER/DOKUMENTATION, ELLER UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA RENGÖRING ELLER FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL. SKADOR ORSAKADE AV KOMBINATIONEN AV PRODUKTEN MED ANDRA ICKE-LUXOTTICA-MÄRKTA PRODUKTER, TILLBEHÖR, DELAR ELLER KOMPONENTER, ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTER, UTRUSTNING, SYSTEM, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, DELAR, TILLBEHÖR, APPLIKATIONER, INSTALLATIONER, REPARATIONER, EXTERNT KABLAG ELLER ANSLUTNINGAR SOM INTE TILLHANDAHÅLLITS ELLER GODKÄNTS AV

LUXOTTICA OCH SOM SKADAR PRODUKTEN. SIGNALPROBLEM, MOTTAGNINGSPROBLEM OCH DISTORTION RELATERAD TILL BRUS, EKO, INTERFERENS ELLER ANDRA SIGNALÖVERFÖRINGS- OCH LEVERANS-PROBLEM. EVENTUELL UTRUSTNING ELLER KOMPONENTER SOM INTE MEDFÖLJDE DIN PRODUKT SOM DEN URSPRUNGLIGEN SÅLDES. NORMALT SLITAGE. SKADA ORSAKAD AV FELAKTIG TRANSPORT ELLER FÖRPACKNING/EMBALLERING VID RETUR AV PRODUKTEN TILL LUXOTTICA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE. SKADOR ORSAKADE AV MODIFIERING ELLER ANPASSNING SOM KAN KRÄVAS FÖR ATT EN PRODUKT SKA KUNNA FUNGERA I NÅGOT ANNAT LAND ÄN DET LAND FÖR VILKET DEN VAR UTFORMAD, TILLVERKAD, GODKÄND OCH/ ELLER AUKTORISERAD, ELLER REPARATION AV PRODUKTEN SOM RESULTERAR I SKADA TILL FÖLJD AV DESSA MODIFIERINGAR. SKADA PÅ PRODUKTER DÄR ANTI-FÖRFÄLSKNINGSKODEN (ELLER MOTSVARANDE) HAR TAGITS BORT, RADERATS, FÖRLORATS, ÄNDRATS ELLER GJORT OLÄSLIG.

Denna garanti inkluderar inga specifika garantier för att produkten kommer att vara felfri. Förutom i USA och i den utsträckning som det är förbjudet enligt tillämplig lag i något annat land, är denna garanti ogiltig om en produkt returneras med borttagna, skadade eller manipulerade etiketter, eller med några ändringar (inklusive obehörig borttagning av någon komponent eller yttre skydd).

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

FÖRUTOM I EU, EFTA OCH STORBRITANNIEN OCH FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT NÅGON TILLÄMPLIG LAG I NÅGOT ANNAT LAND, AVSÄGER VI OSS ALLT ANSVAR FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

FÖR USA ENDAST, ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM ENLIGT LAG INTE KAN UTESLUTAS, UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSADE TILL VARAKTIGHETEN AV DEN BEGRÄNSADE GARANTITID SOM ANGES I DENNA GARANTI.

OM DU ÄR EN KONSUMENT SOM OMFATTAS AV QUEBECS KONSUMENTSKYDDSLAG, BEGRÄNSAR INTE GARANTIFRISKRIVNINGEN I DETTA AVSNITT DINA RÄTTIGHETER OCH RÄTTSMEDEL ENLIGT DENNA LAG, INKLUSIVE RÄTTEN ATT GÖRA ANSPRÅK ENLIGT NÅGON AV DE LAGSTADGADE GARANTIER SOM ANGES I AVSNITT 34 TILL 54 I DEN LAGEN.

ANSVARSBEGRÄNSNING

FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA LUXOTTICA INTE, ENLIGT DENNA GARANTI, HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, BEGRÄNSAS LUXOTTICAS MAXIMALA ANSVAR FÖR NÅGOT KRAV SOM UPPSTÅR UR, ELLER RELATERAR TILL, DENNA GARANTI, TILL DEN KÖPESUMMA DU BETALAT FÖR PRODUKTEN, SAMT EVENTUELL LAGENLIG RÄNTA, OAVSETT ANSPRÅKETS FORM.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, ANSVARAR LUXOTTICA INTE FÖR HÄNDELSER SOM LIGGER UTANFÖR DESS KONTROLL, SÅSOM NATURKATASTROFER, VIRUS, SKADOR PÅ EGENDOM, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, AVBROTT

I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR, OAVSETT HUR DESSA ORSAKATS, VID BROTT MOT DENNA GARANTI, AVTAL ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET).

Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter enligt tillämplig statlig och nationell lagstiftning avseende försäljning av konsumentvaror.

Vissa länder, stater, provinser och territorier (inklusive EU, EFTA och Storbritannien) tillåter inte undantag eller begränsning av indirekta skador eller följskador, eller undantag eller begränsning av vissa skador eller typer av förlust, och tillåter inte heller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti eller ett villkor kan gälla, så de begränsningar eller undantag som beskrivs i denna garanti kanske inte gäller för dig.

RETURER OCH BYTEN:

Om du har köpt Nuance Audio™-produkter från en EssilorLuxottica-bannerannons kan du returnera dem inom 30 dagar från inköpsdatumet, eller under en längre period som uttryckligen anges av tillämplig lag eller den specifika EssilorLuxottica-bannerannonsen. Nuance Audio™ produkter som köpts genom icke-EssilorLuxottica-återförsäljare måste returneras till dessa återförsäljare i enlighet med dessas returpolicyer. Här finner du mer information om EssilorLuxottica-returer:

<http://www.nuanceaudio.com/sv-se/c/support/shipping-and-returns>.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milano, Italien



Tillverkad i Kina



www.nuanceaudio.com



De senaste och uppdaterade bruksanvisningarna – säkerhet och garanti hittar du under Instruktioner i supportavsnittet i Nuance Audio™ App och på följande webbsida: nuanceaudio.com/support/manual-guide



Support: nuanceaudio.com/contact-us

Denna snabbstartsguide gäller för Nuance Audio™ Remote Control
AAW0002EL och REB0080A0.



Raccolta carta
Papel y cartón

