




Nuance Audio Remote Plus




Geführte Einführung in Remote Plus Flow einrichten

Mit der Remote Plus können Sie Ihre Brille aktivieren und einrichten. Sie führt Sie durch die Ersteinrichtung, lässt Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen und begleitet Sie durch eine schnelle, personalisierte Kalibrierung, um Ihnen ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten.

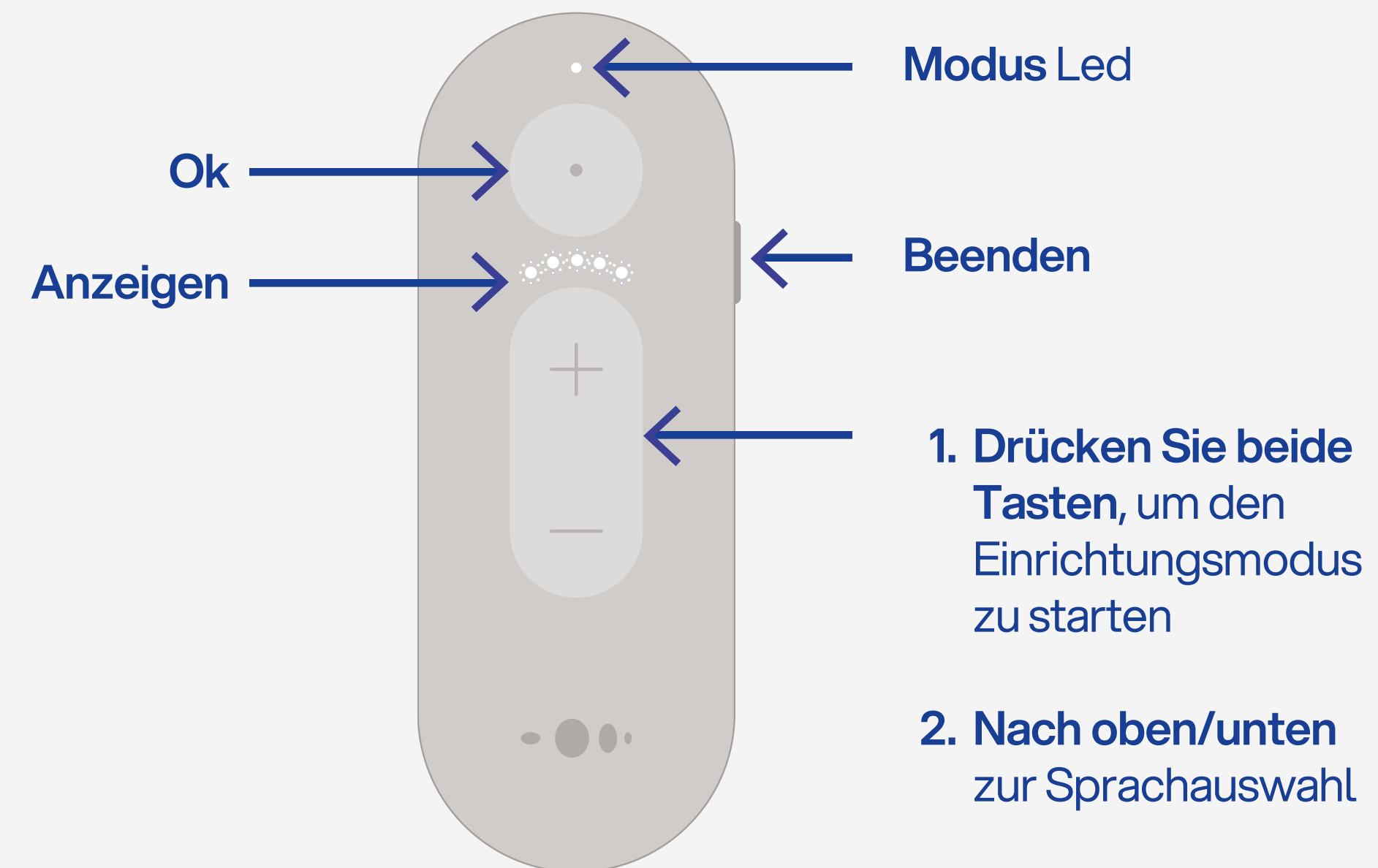




Geführte Einführung in Remote Plus Flow einrichten

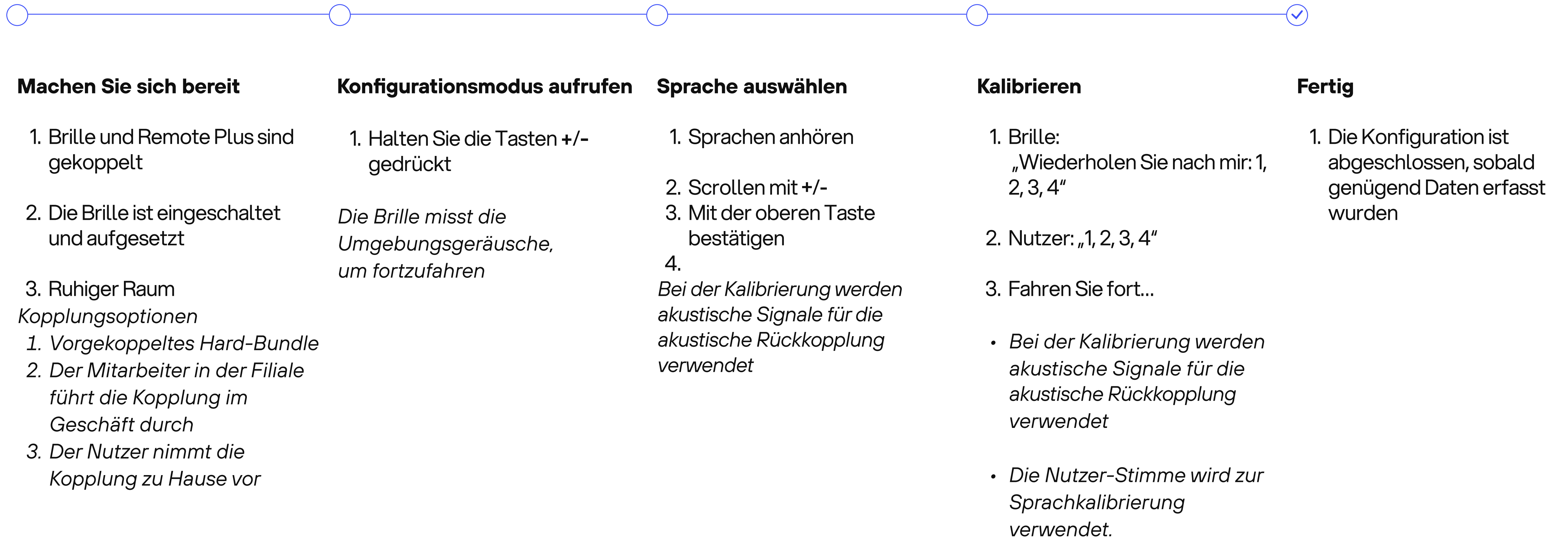




Benutzeroberfläche der Remote Plus

Rahmenkopplung und Einrichtung

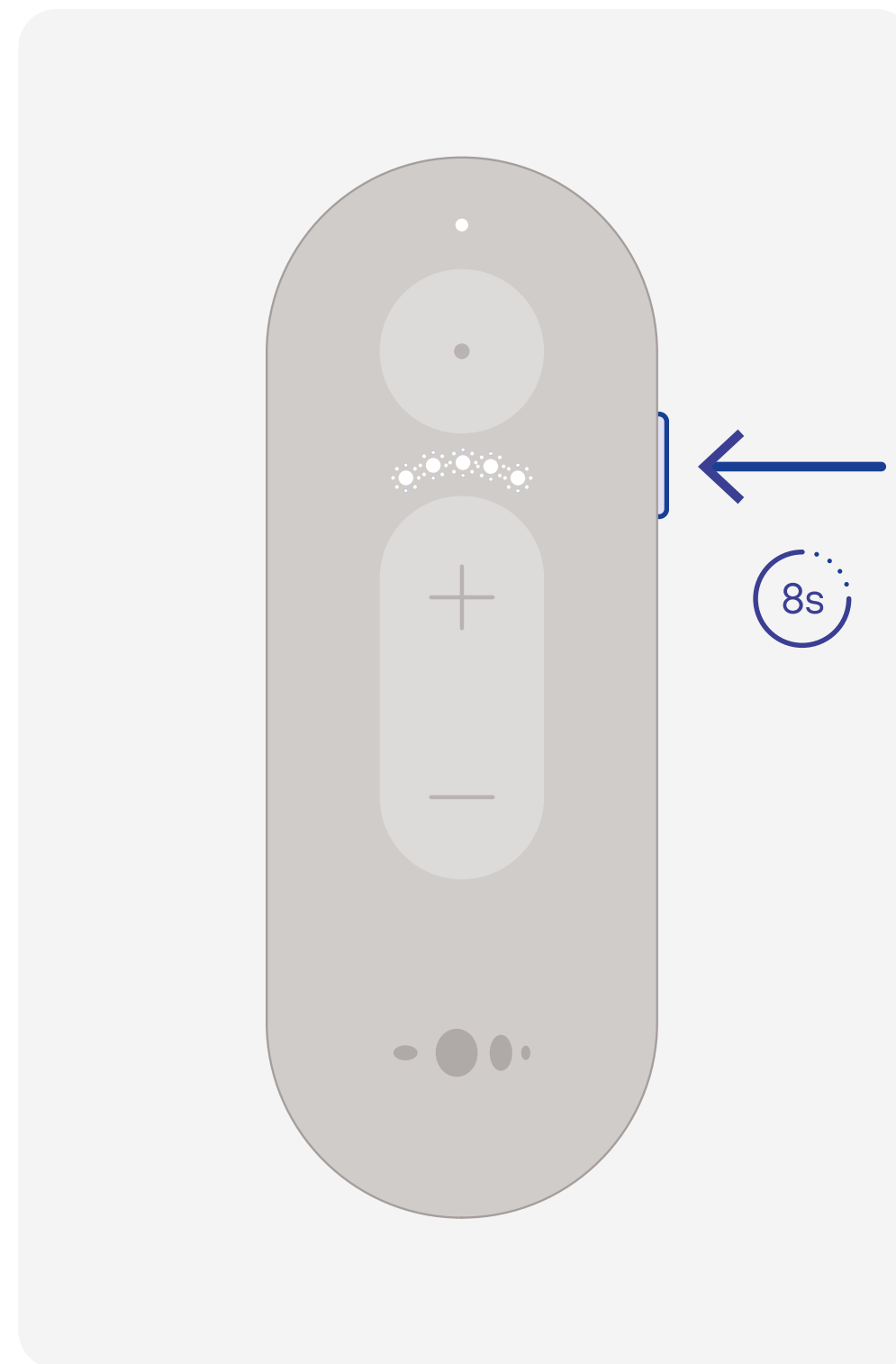

Kopplung

Entfernen Sie vor dem Fortfahren die Batterieschutzlasche von der Fernbedienung. Halten Sie bei eingeschalteter Brille die Lautstärketaste „+“ oder „-“ am Rahmen gedrückt, bis die blaue LED blinkt. Halten Sie dann die **Seitentaste** 8 Sekunden lang gedrückt.

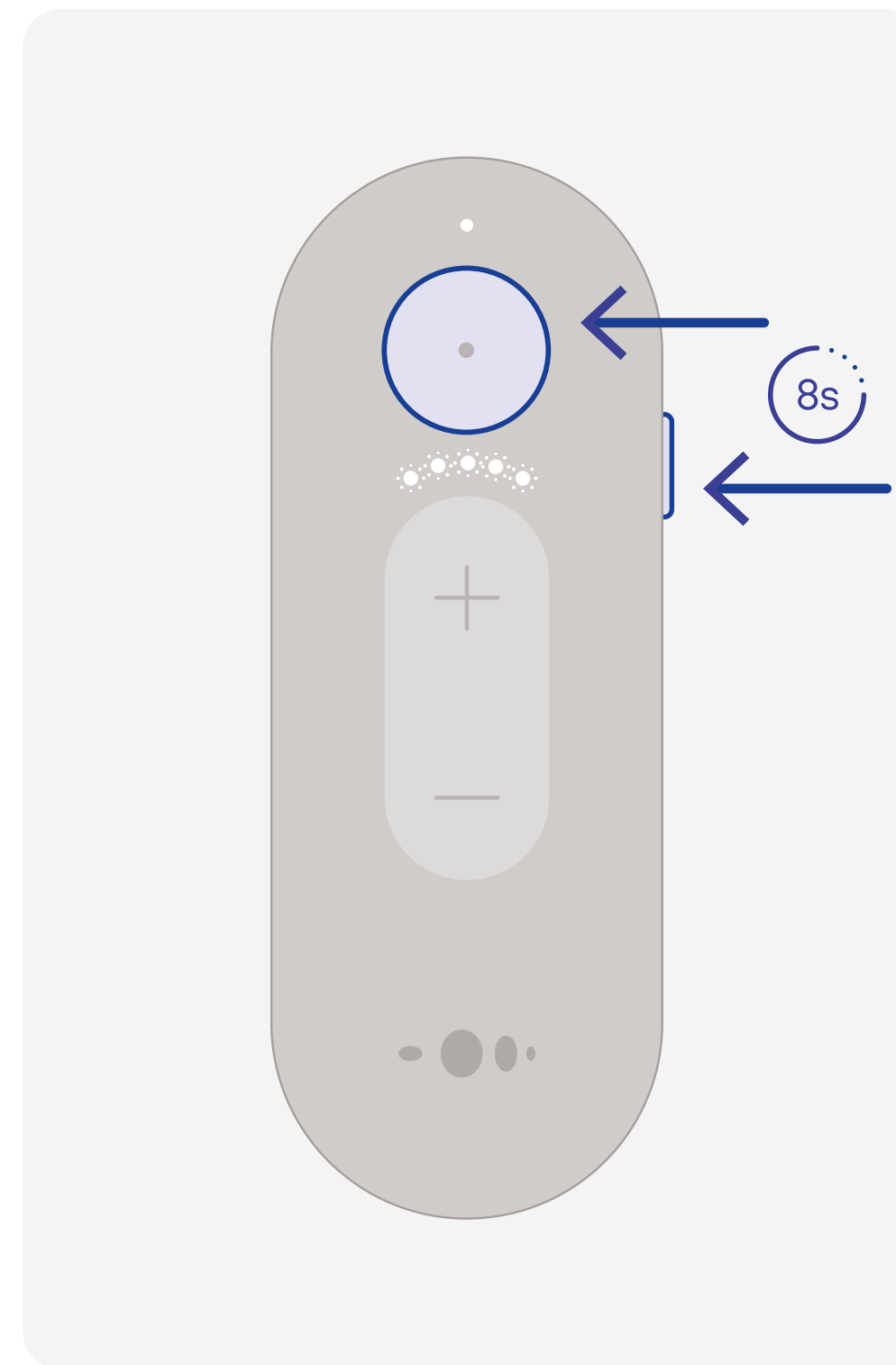


Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie die obere Taste und die Seitentaste. Halten Sie beide 8 Sekunden lang gedrückt.




Benutzeroberfläche der Remote Plus


Rahmenkopplung und Einrichtung

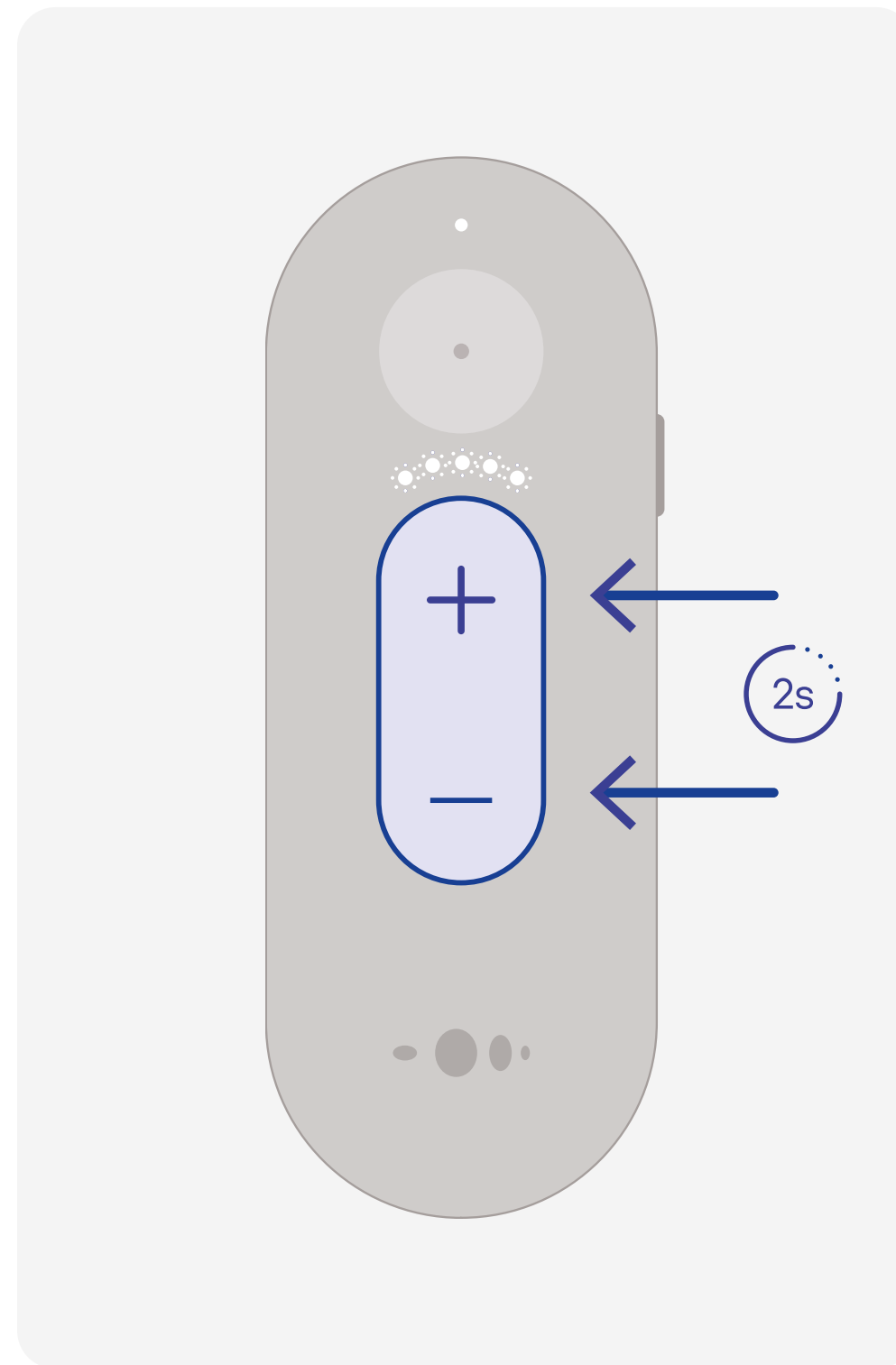

Konfigurationsmodus aufrufen
Halten Sie sowohl (+) als auch (−) für 2 Sekunden gedrückt.

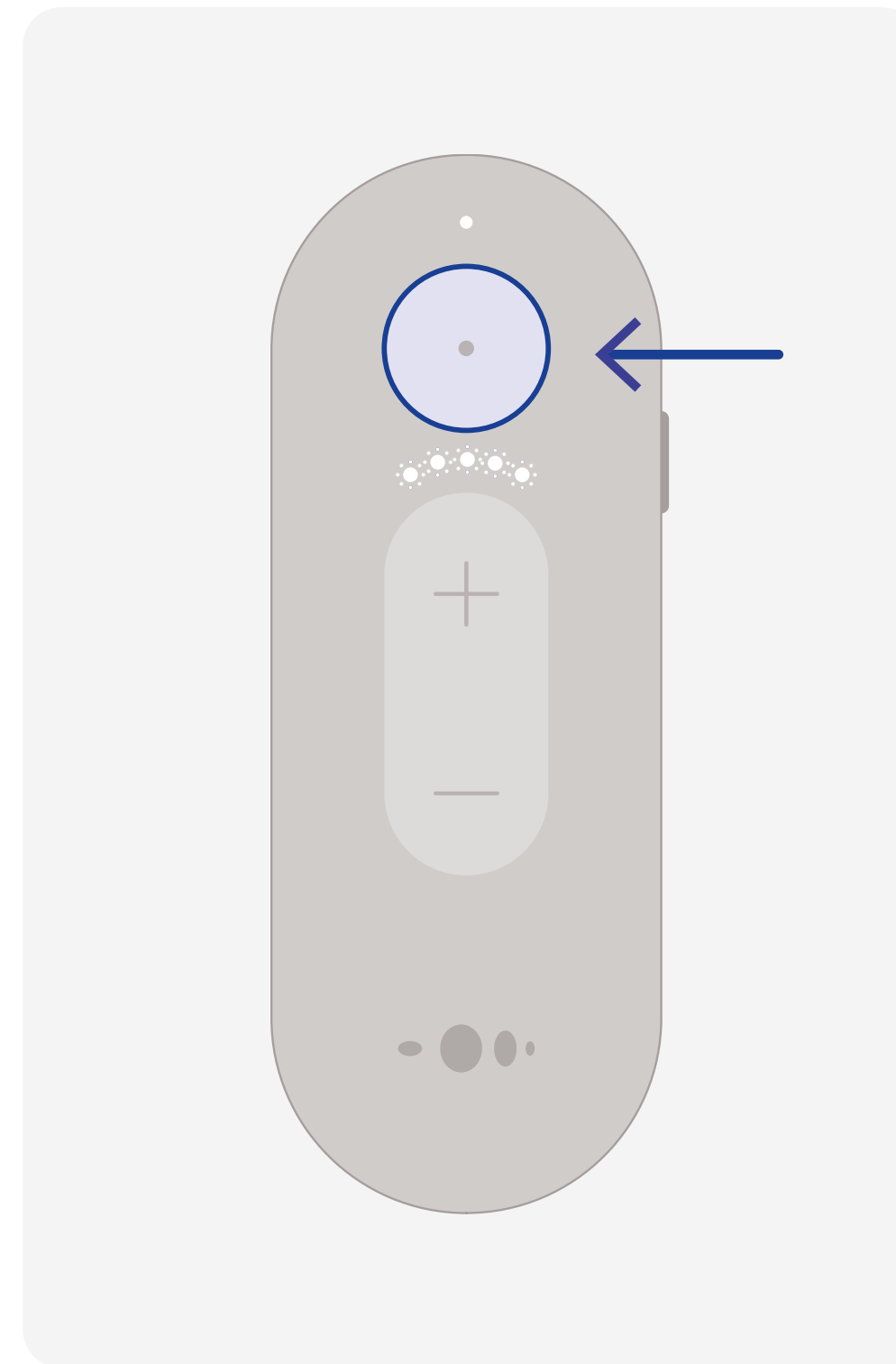

OK
Oberen Knopf drücken

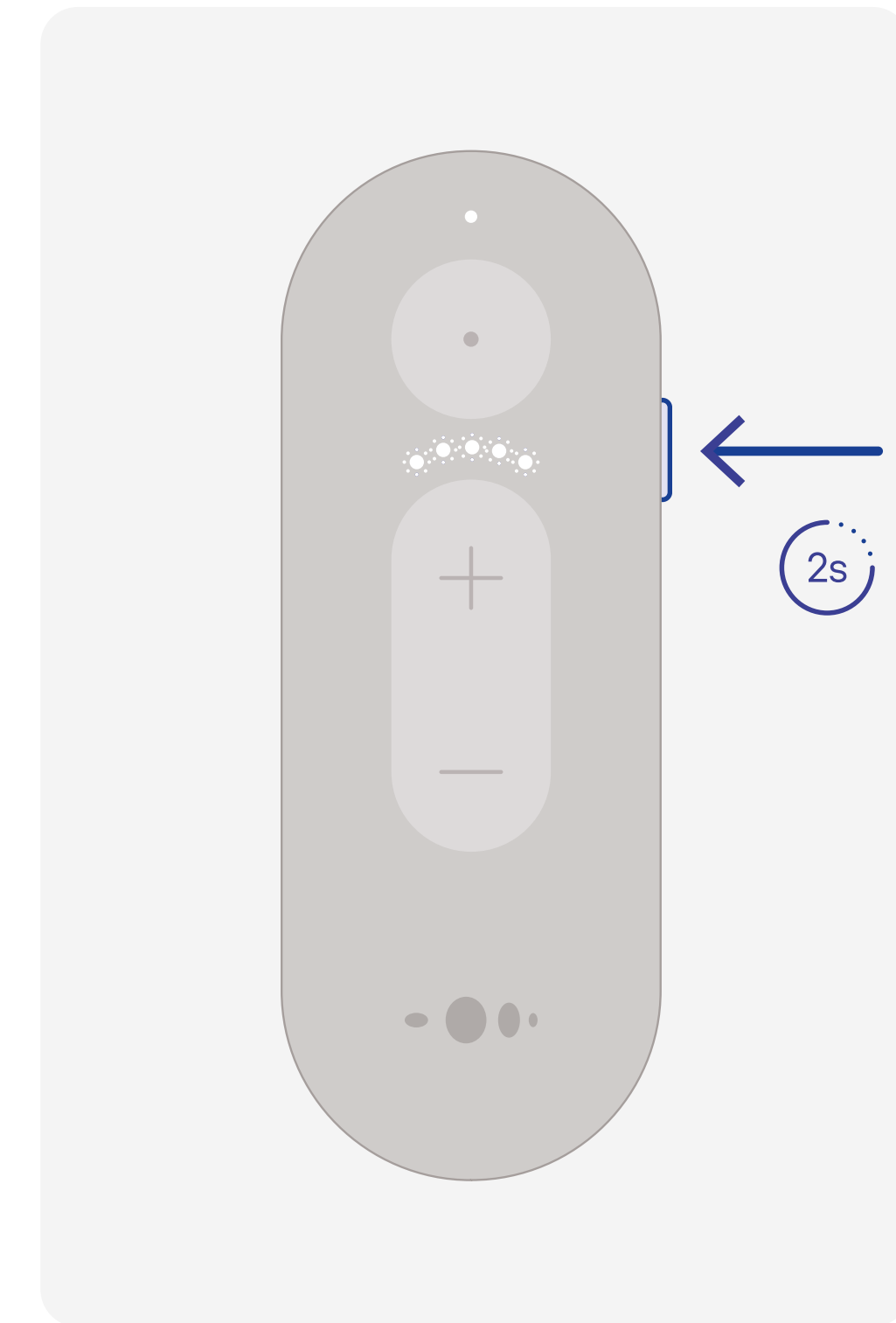


Konfiguration beenden
Halten Sie die Seitentaste 2 Sekunden lang gedrückt.




Benutzeroberfläche der Remote Plus

Rahmeneinrichtung

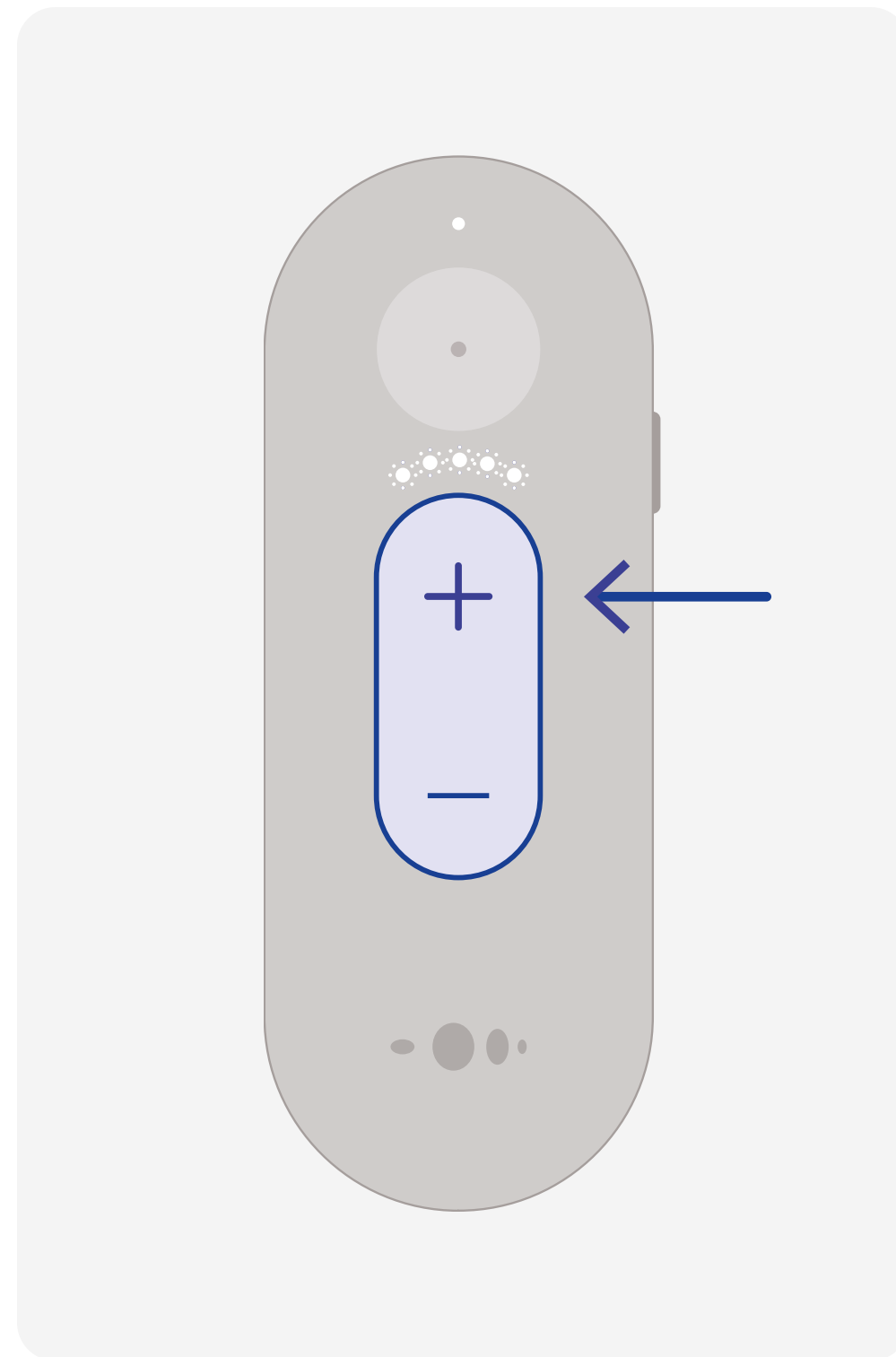

Nächste Sprache
Drücken Sie (+)

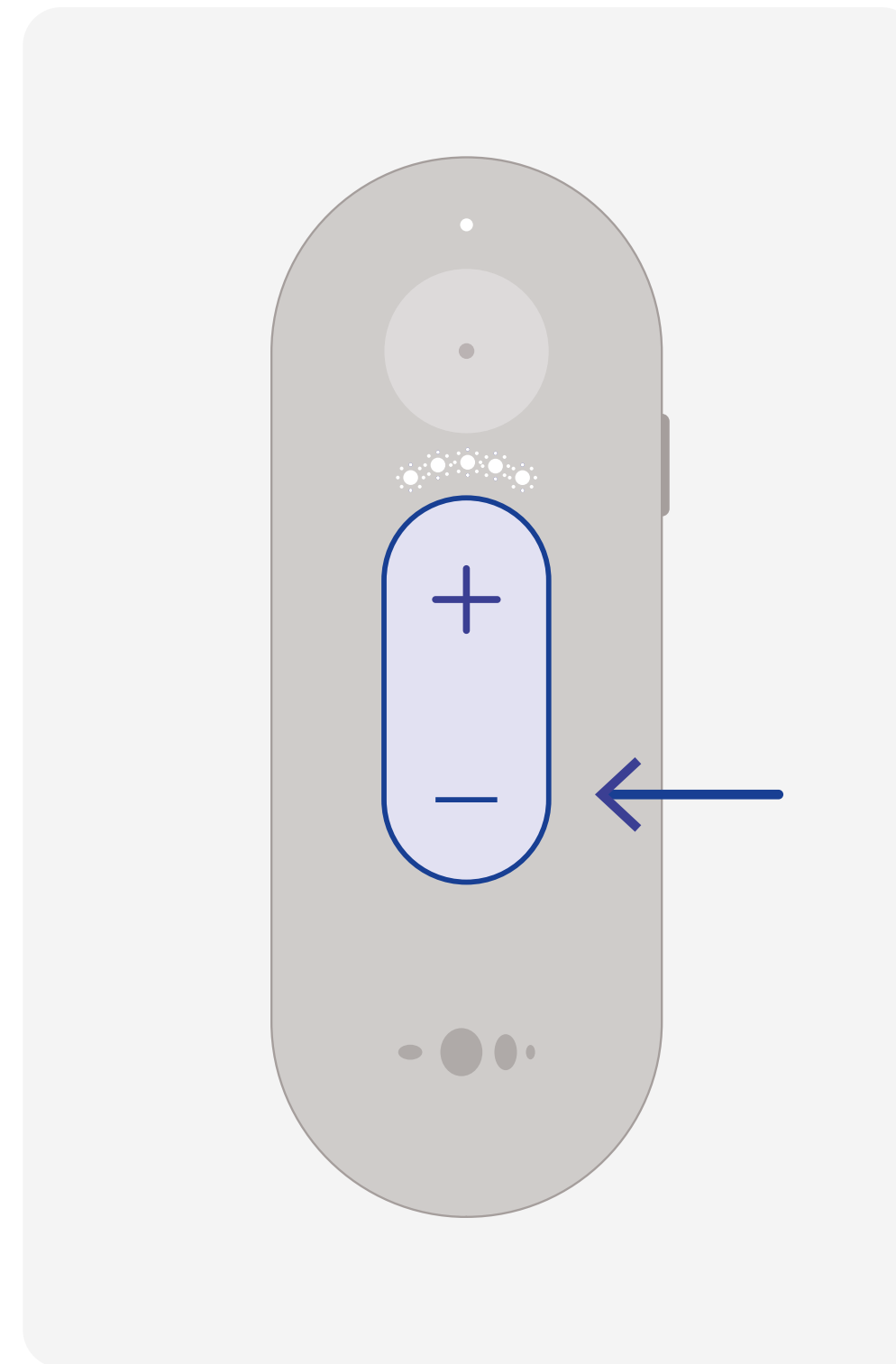


Vorherige Sprache
Drücken Sie (-)




Oberfläche der Remote Plus

Hören

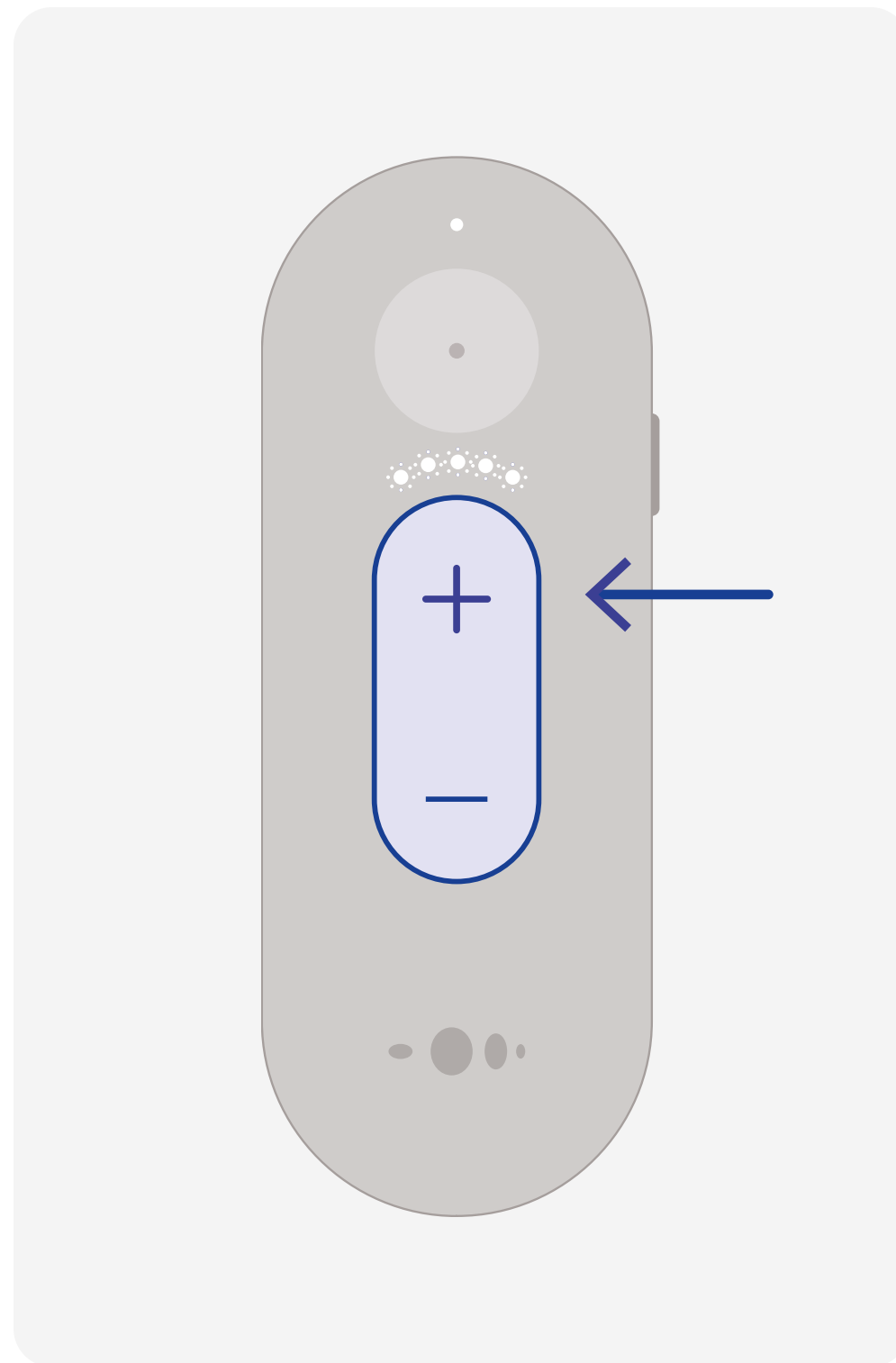

Lautstärke erhöhen
Drücken Sie (+)

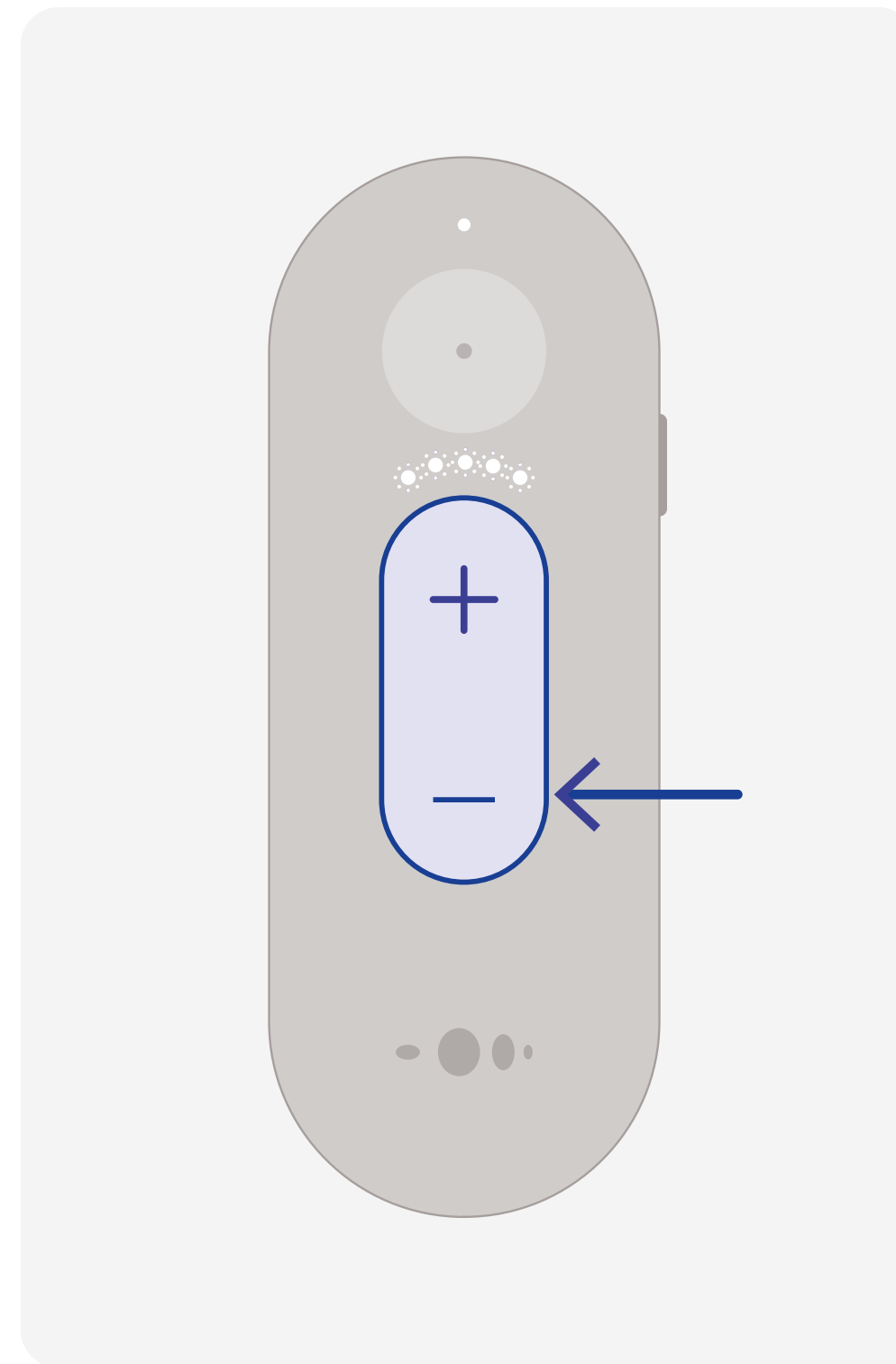


Lautstärke verringern
Drücken Sie (-)




Benutzeroberfläche der Remote Plus

Hören

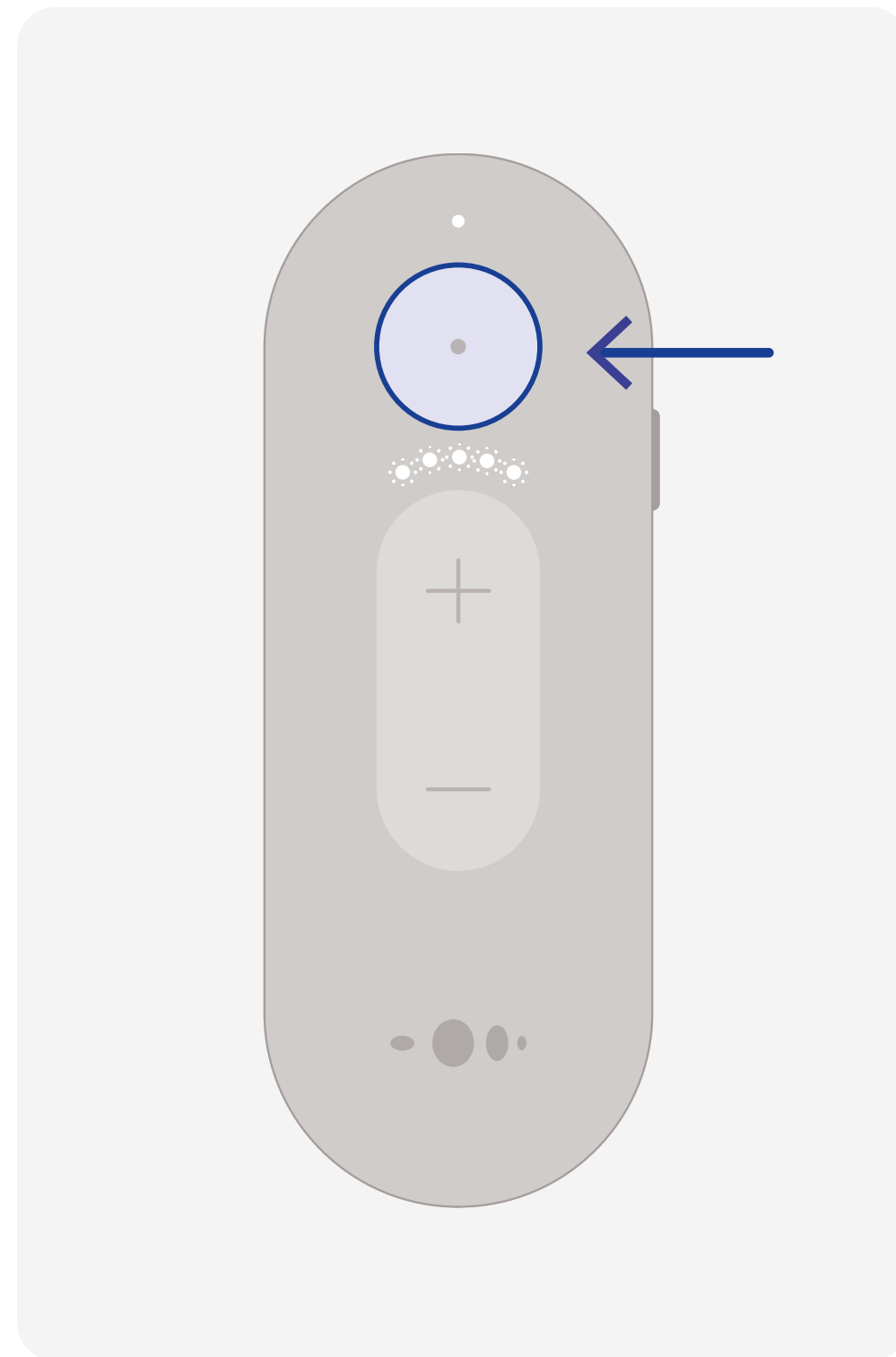

**Audio-Modus
wechseln**
Oberen Knopf
drücken

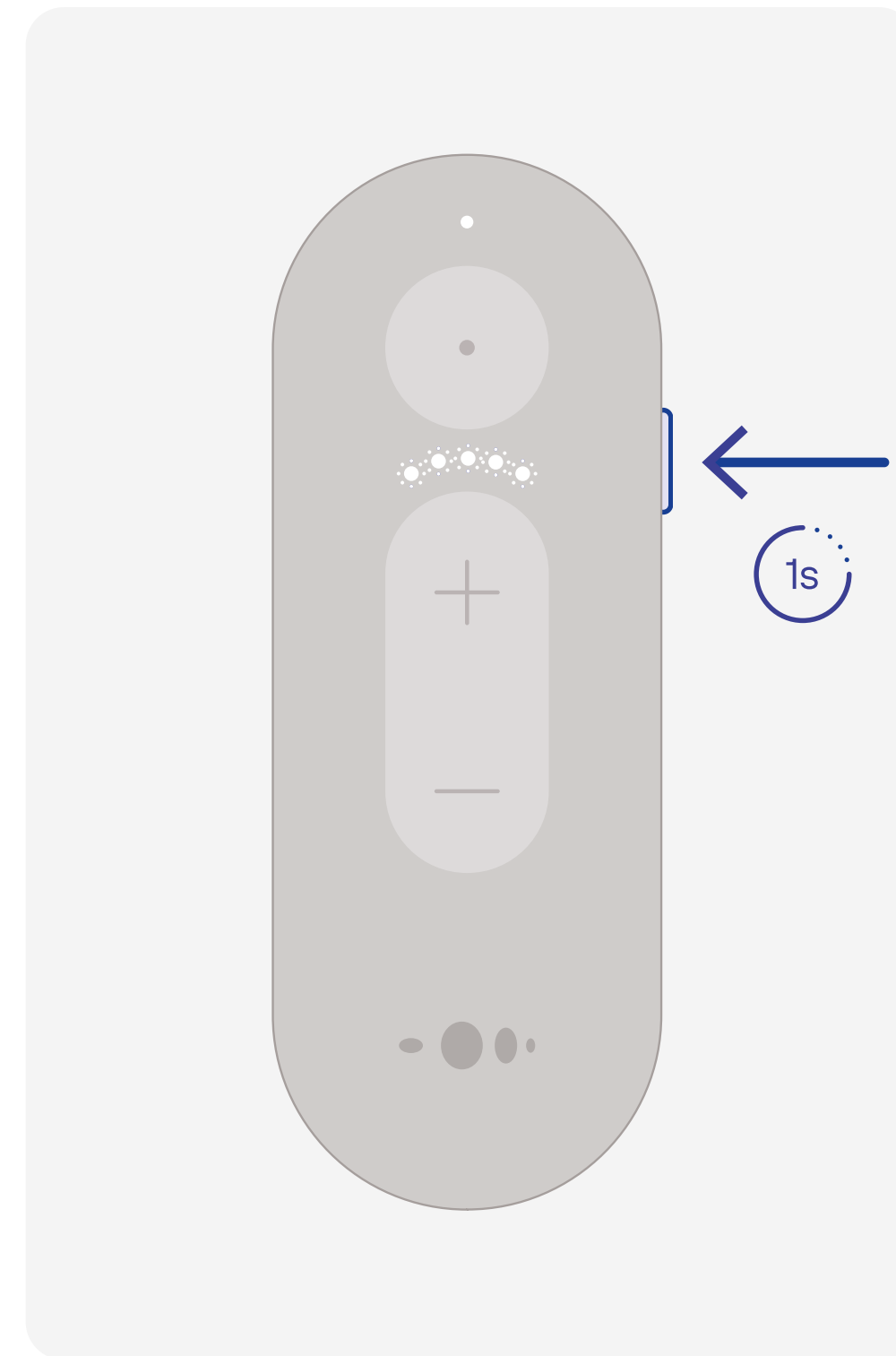


**Zur nächsten
Voreinstellung**
Seitentaste drücken
und 1 Sekunde lang halten.




Benutzeroberfläche der Remote Plus

Anrufen

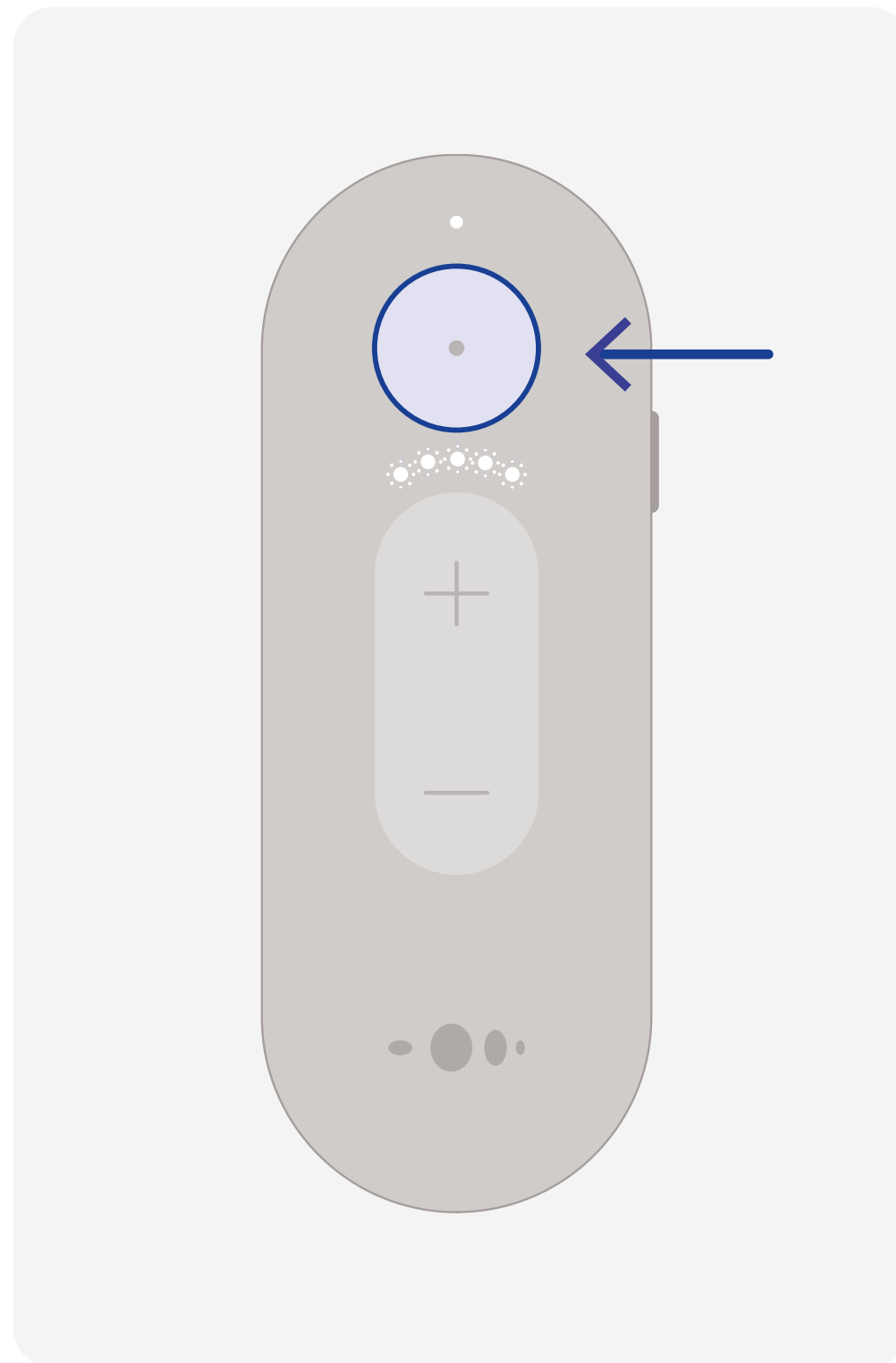

**Anruf
beantworten**
Oberen Knopf
drücken

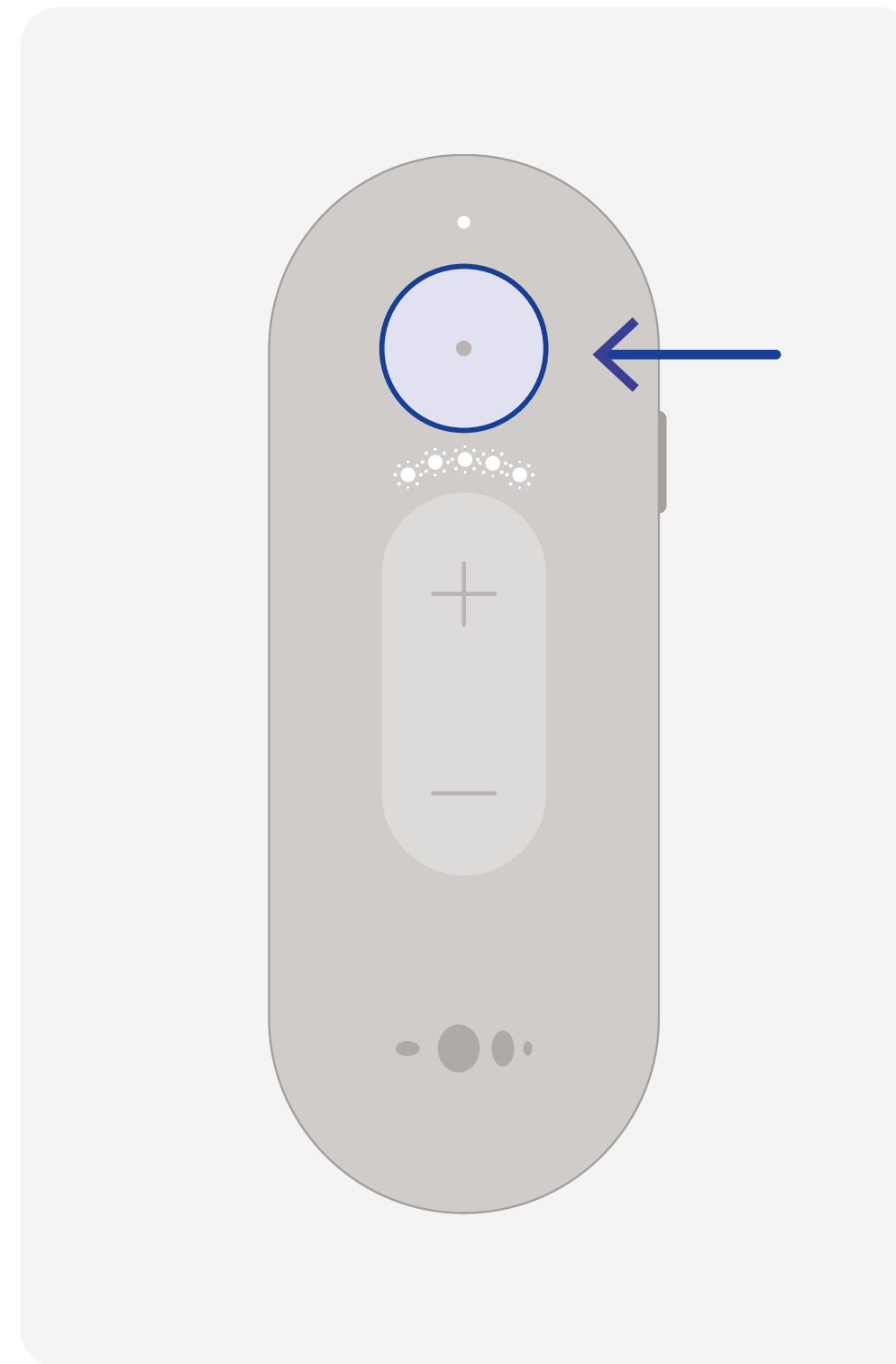

Anruf beenden
Oberen Knopf drücken



Brauchen Sie zusätzliche Hilfe?

Sehen Sie sich das Einführungsvideo zur Remote Plus an



Für die aktuellsten Gebrauchsanweisungen
folgen Sie bitte diesem Link.

[↗ Anleitung anzeigen](#)