




Nuance Audio Remote Plus



Configuration guidée Remote Plus

Processus de configuration


La télécommande Remote Plus est utilisée pour activer et configurer vos lunettes. Elle vous guide dans le processus de configuration, vous permet de choisir votre langue préférée et vous accompagne dans un rapide étalonnage personnalisé afin que tout soit parfaitement adapté à vos besoins.

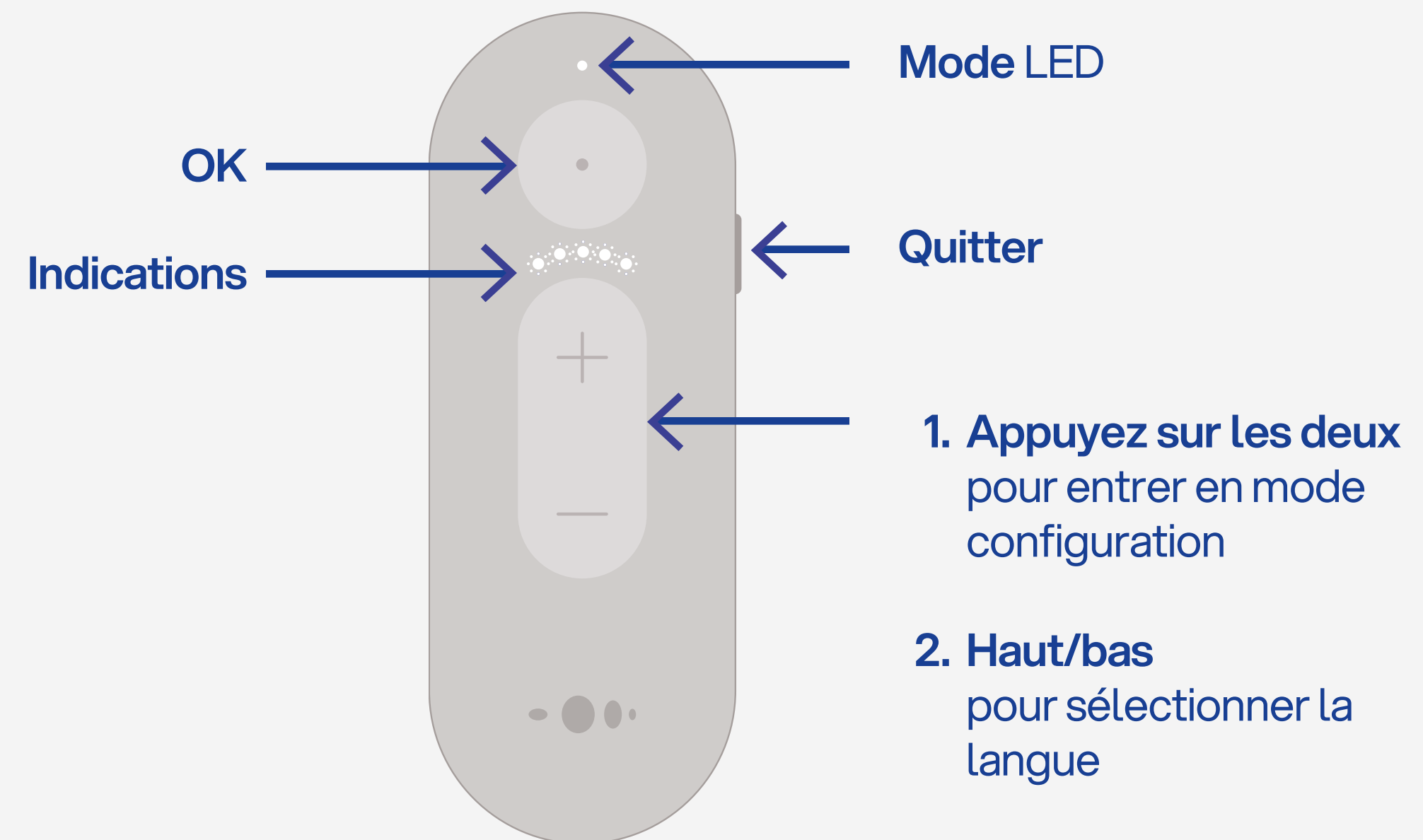



Configuration guidée Remote Plus


Processus de configuration

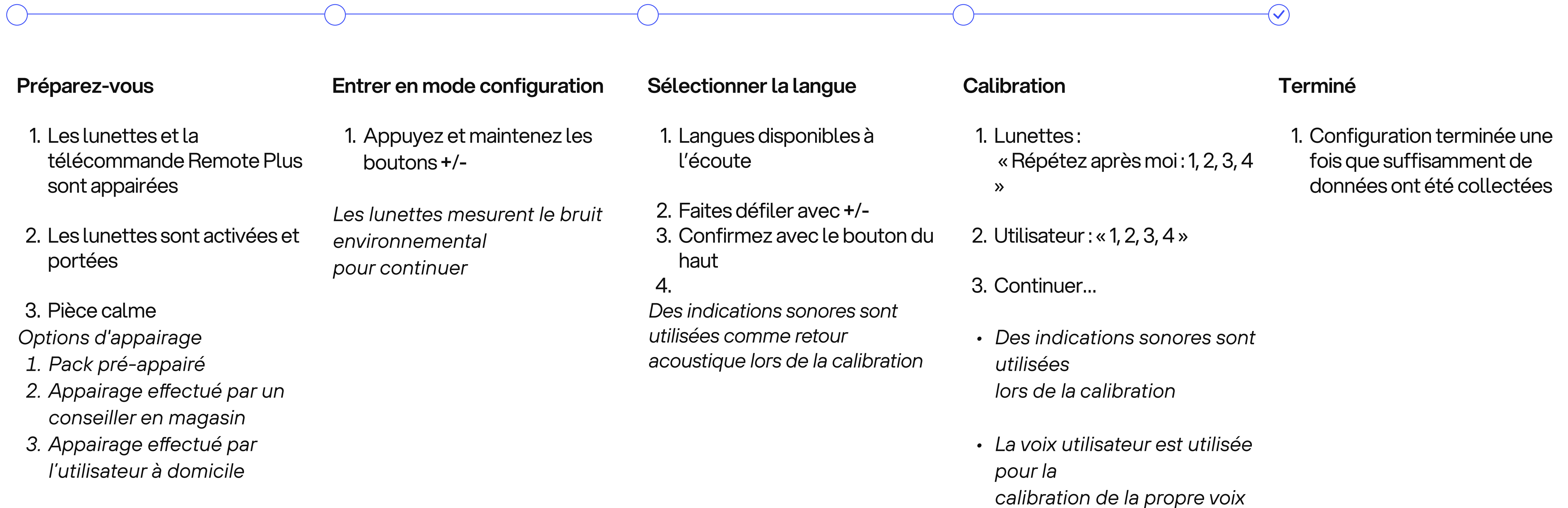




Interface utilisateur Remote Plus

Appairage et configuration de la monture

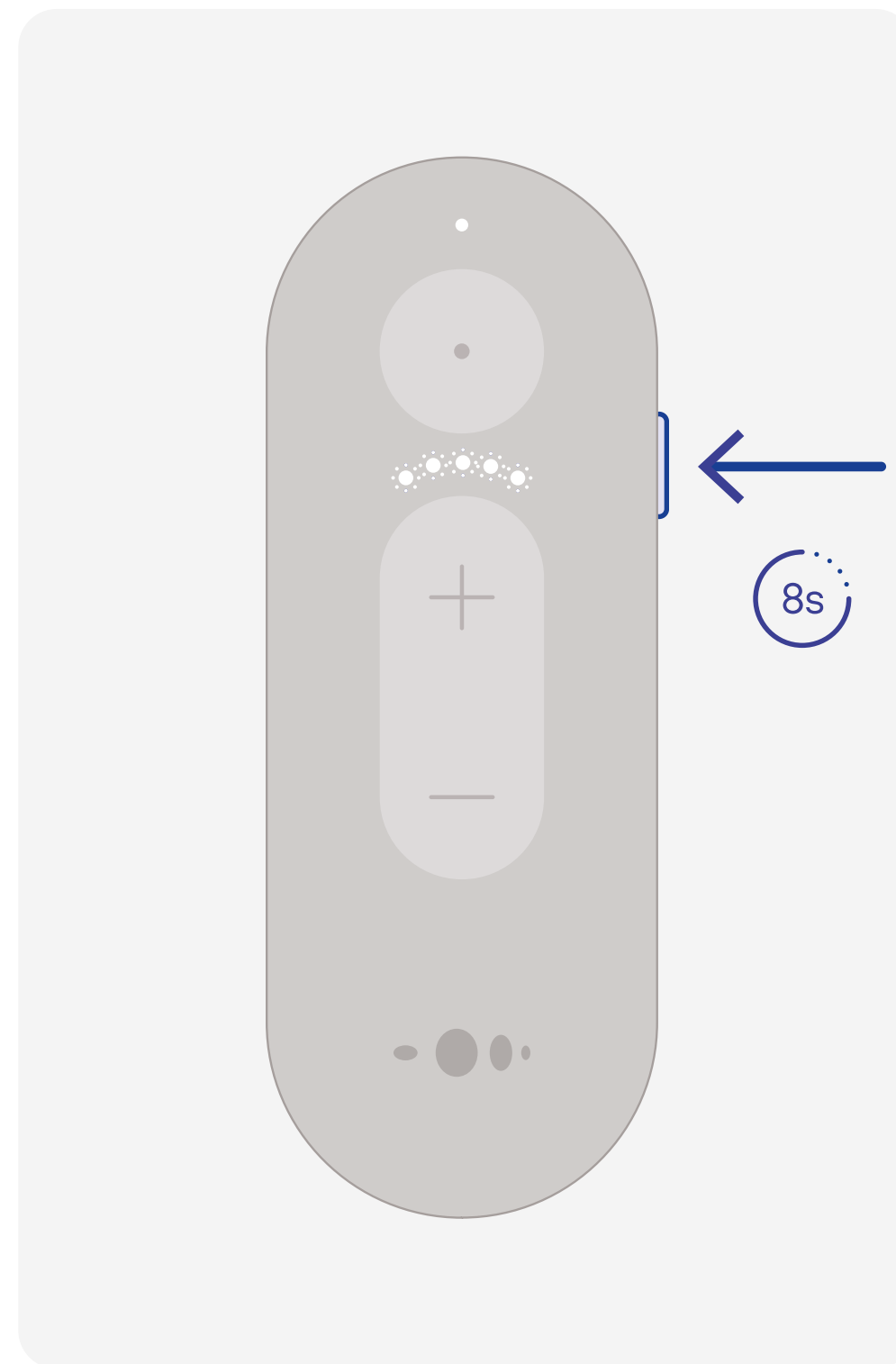

Appairage
Retirez la languette de la batterie de la télécommande avant de continuer. Lorsque les lunettes sont allumées, appuyez longuement sur le bouton de volume « + » ou « - » sur la monture jusqu'à ce que la LED bleue clignote. Ensuite, appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes.

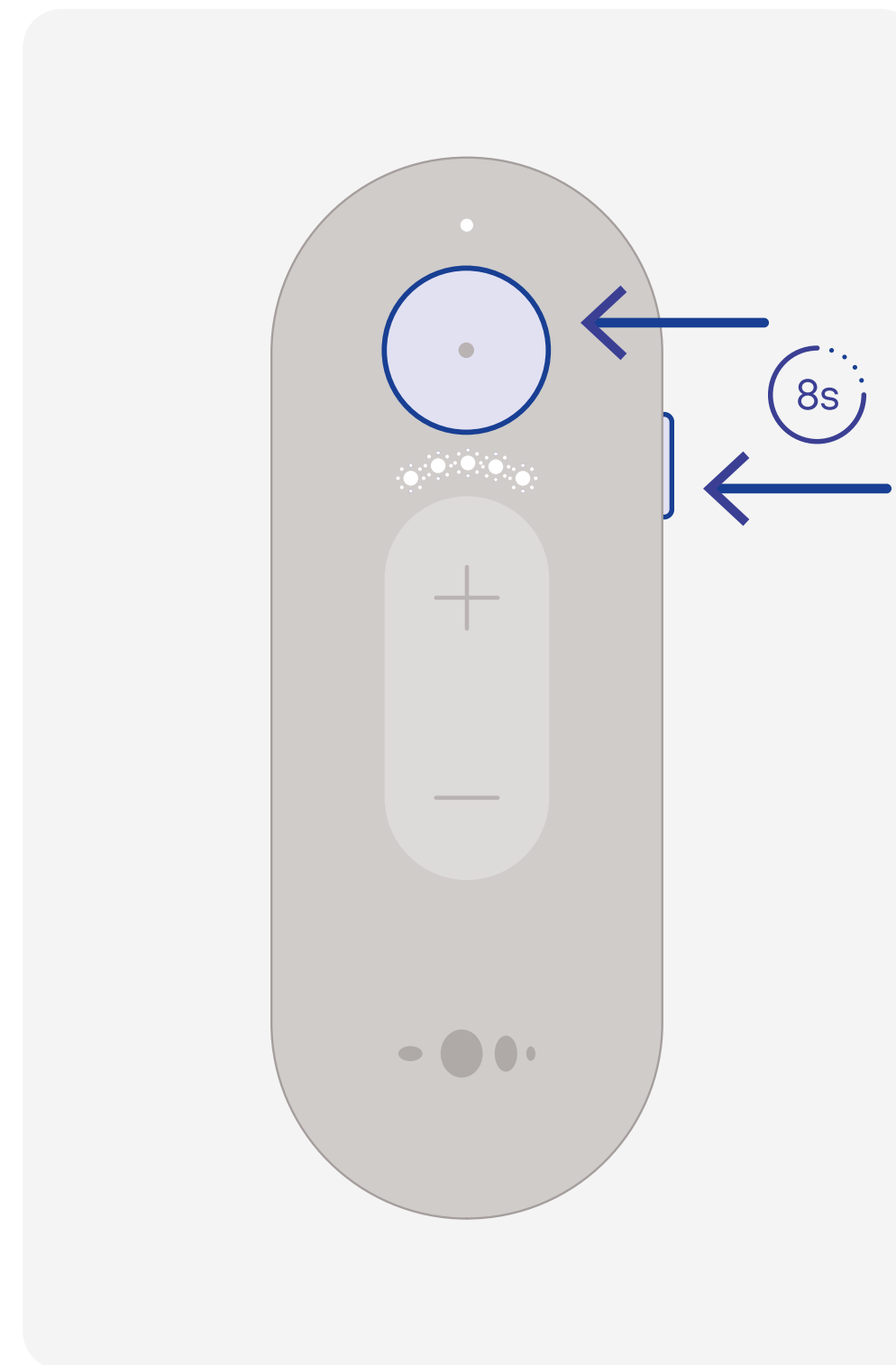


Restauration des paramètres d'usine
Appuyez sur le bouton supérieur et le bouton latéral. Maintenez les deux enfoncés pendant 8 secondes.




Interface utilisateur Remote Plus


Appairage et configuration de la monture

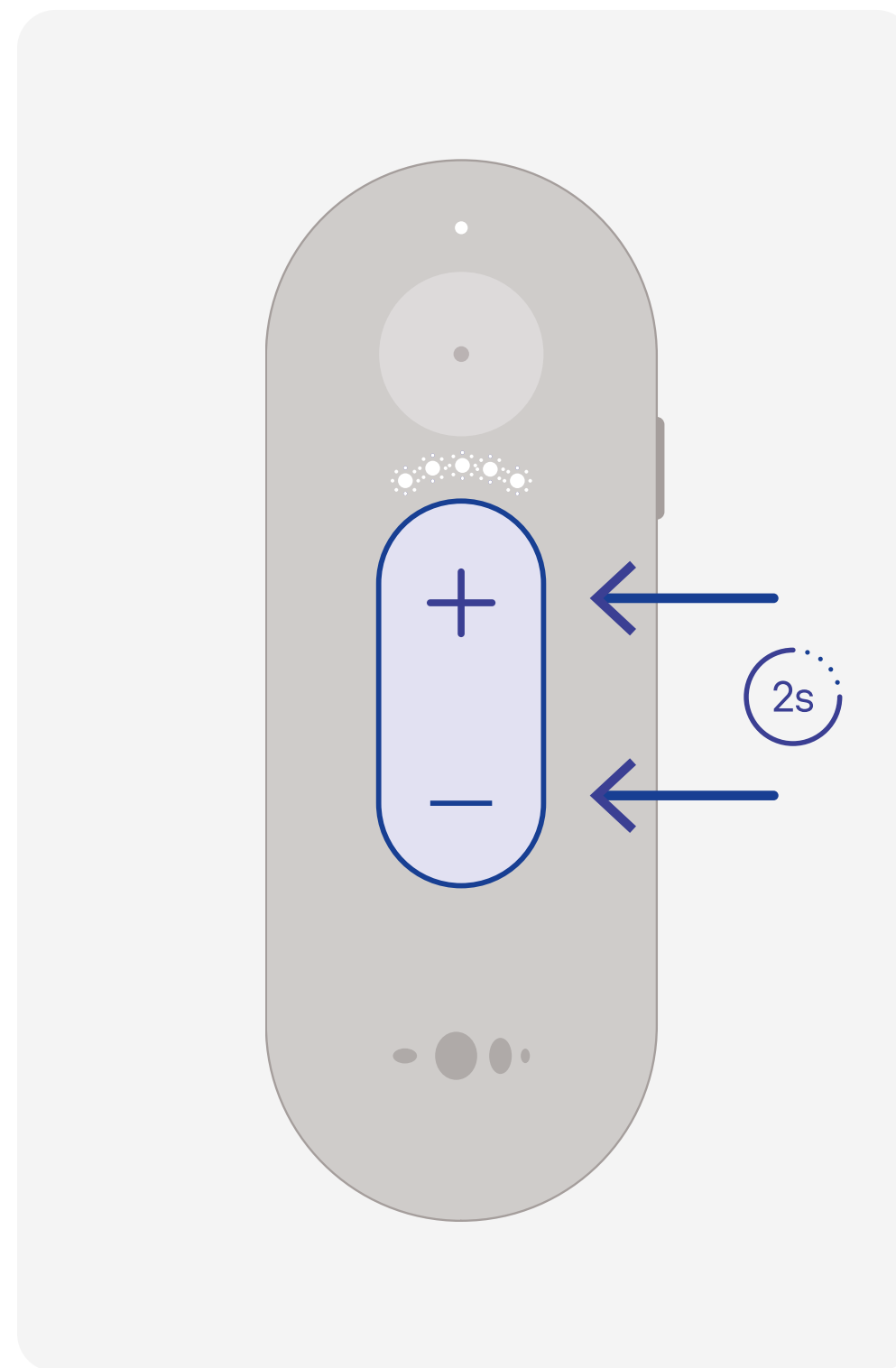

Entrer en mode configuration
Appuyez simultanément sur (+) et (-) pendant 2 secondes.

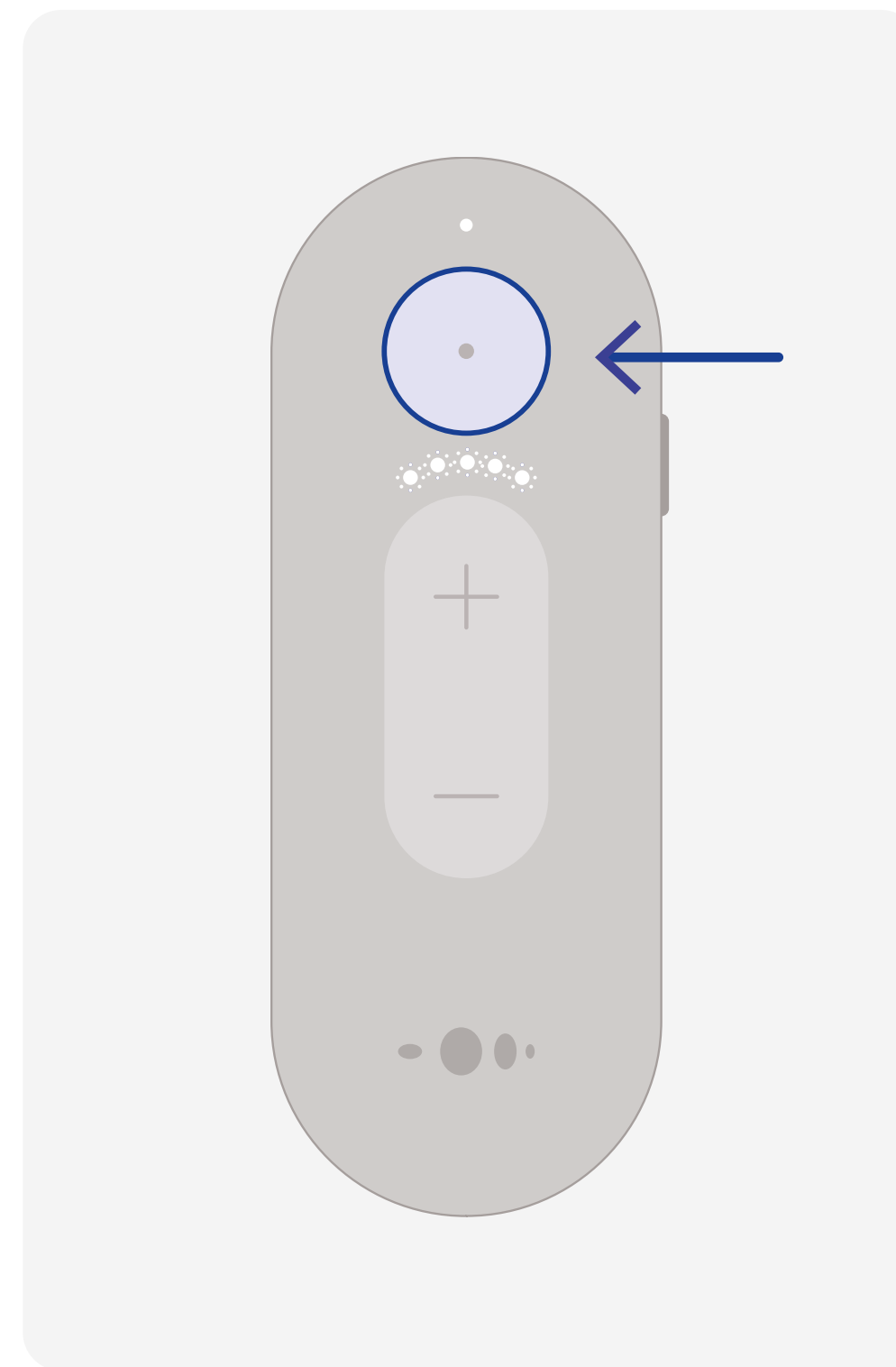

OK
Appuyez sur le bouton du haut

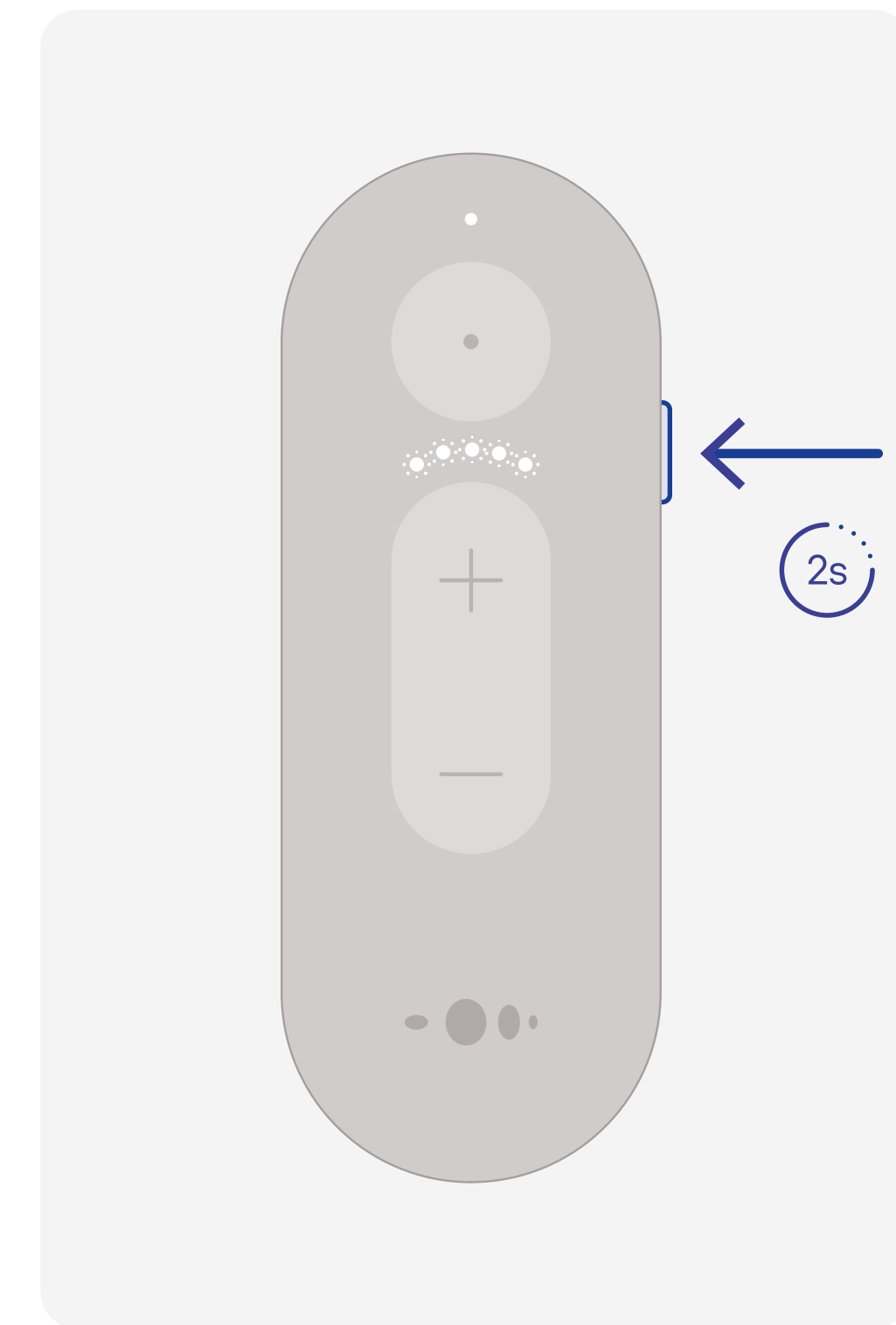


Quitter la configuration
Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.




Interface utilisateur Remote Plus

Configuration de la monture

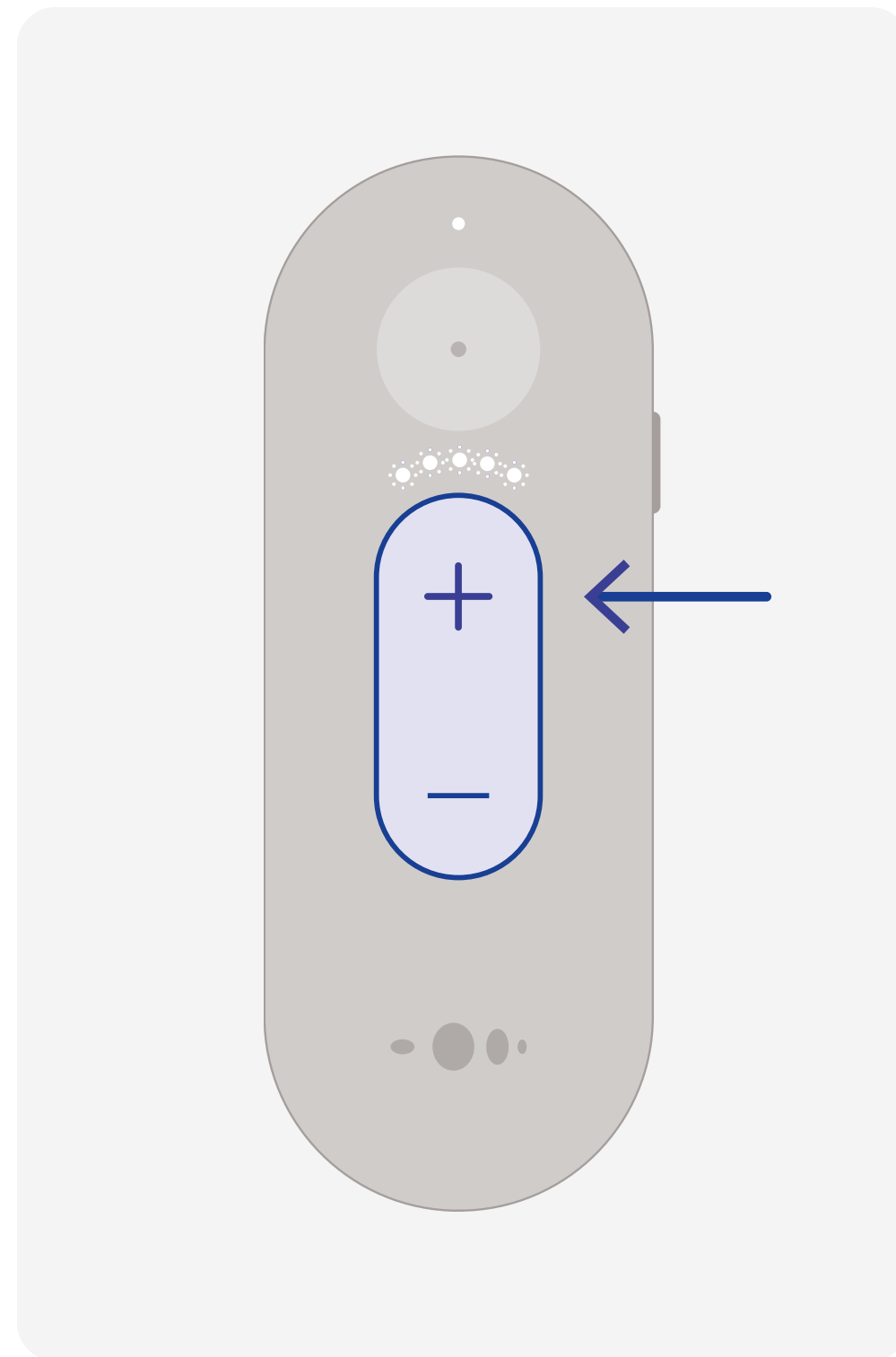


Langue suivante
Appuyez sur (+)

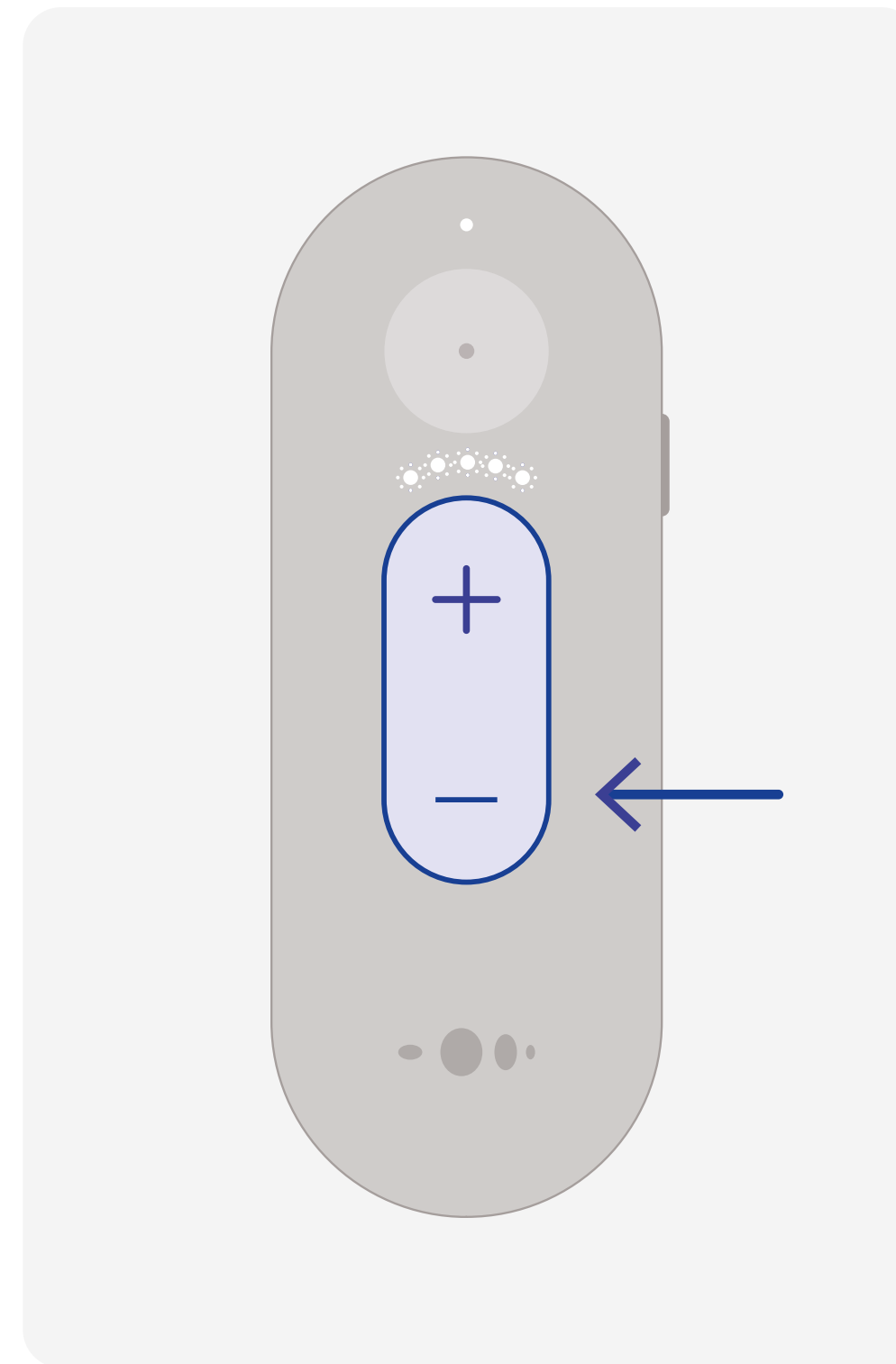


Langue précédente
Appuyez sur (-)



Interface Remote Plus Audition

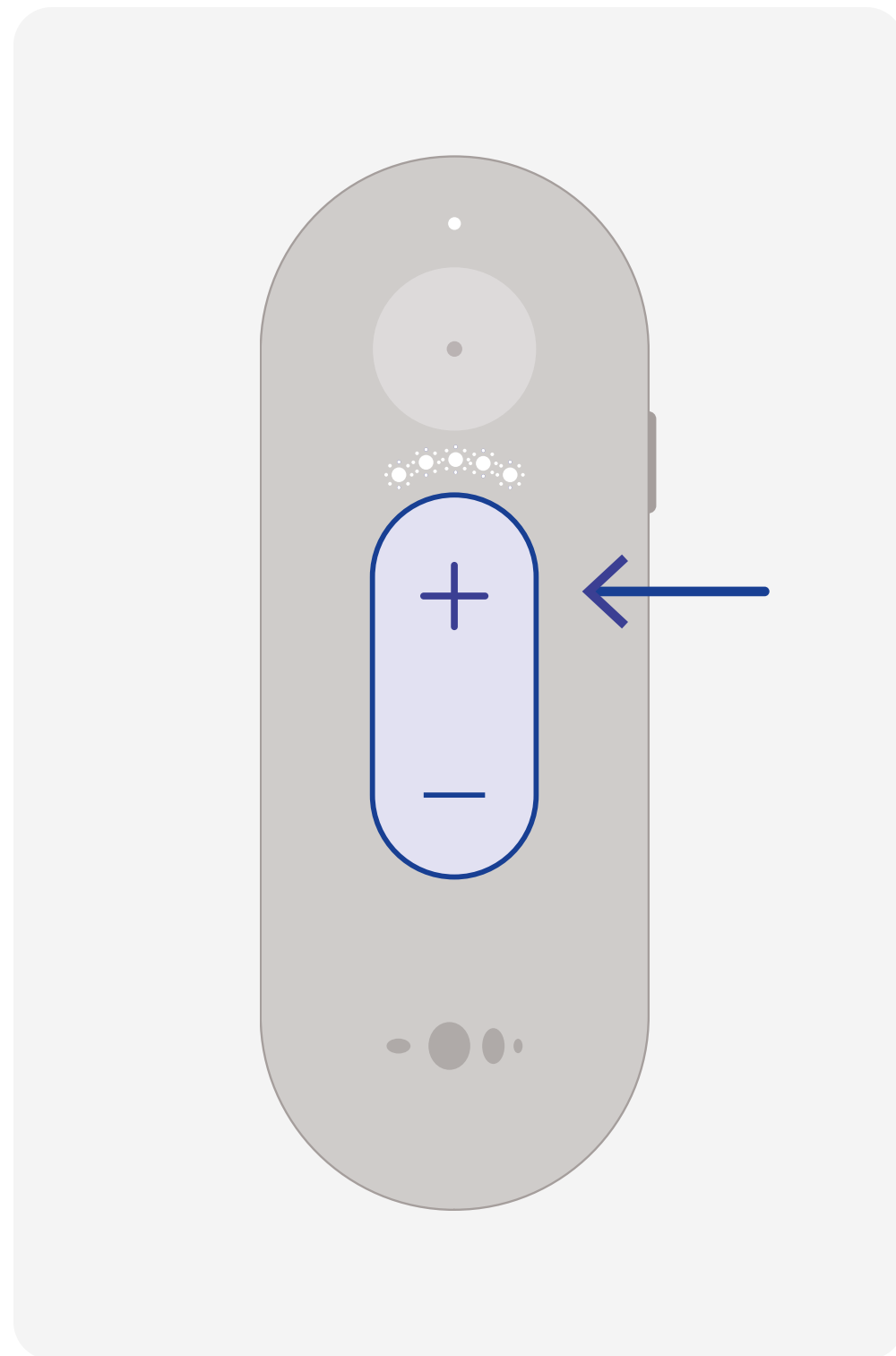


Augmenter le volume
Appuyez sur (+)

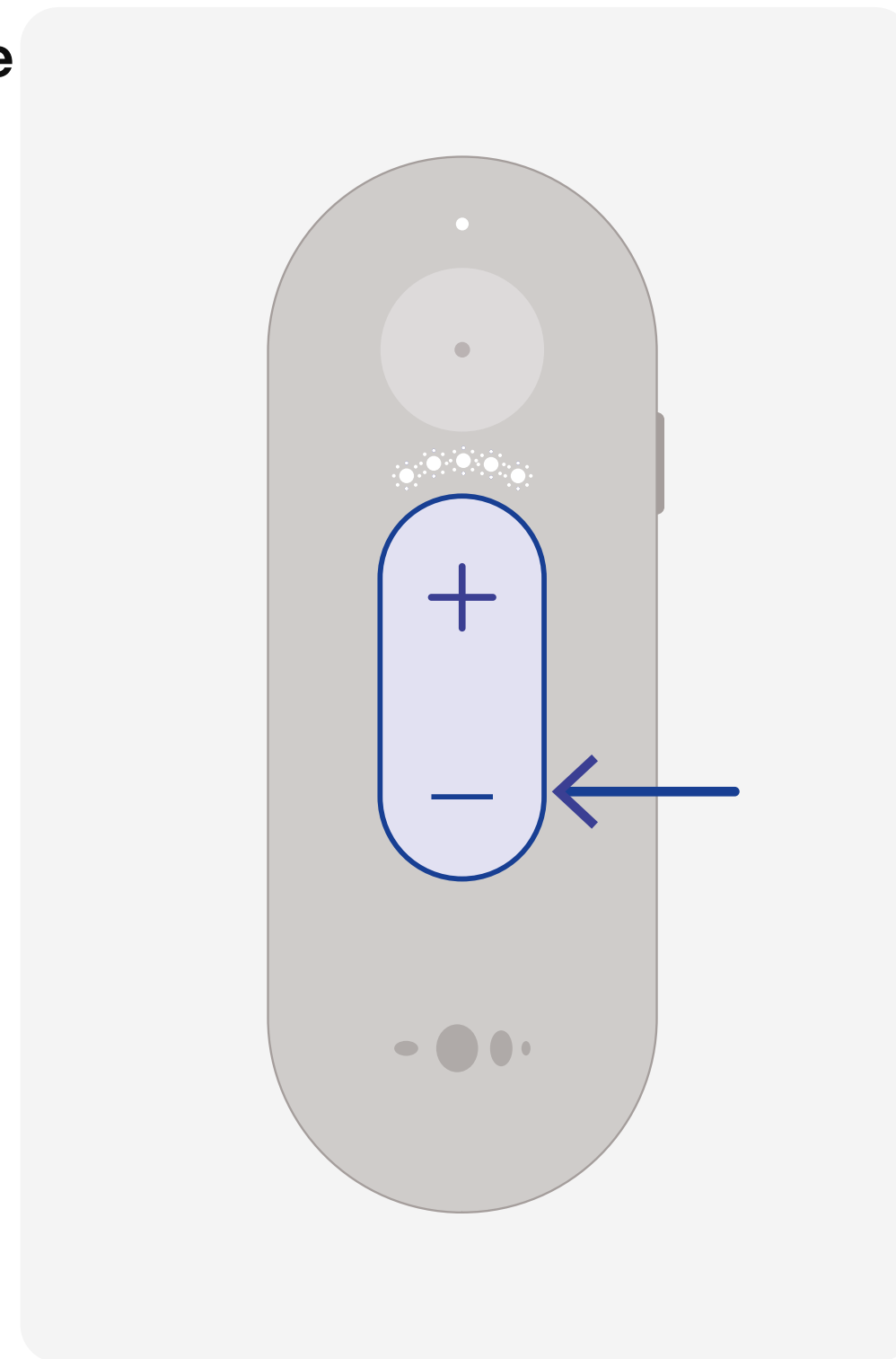


Baisser le volume
Appuyez sur (-)



Interface utilisateur Remote Plus Audition

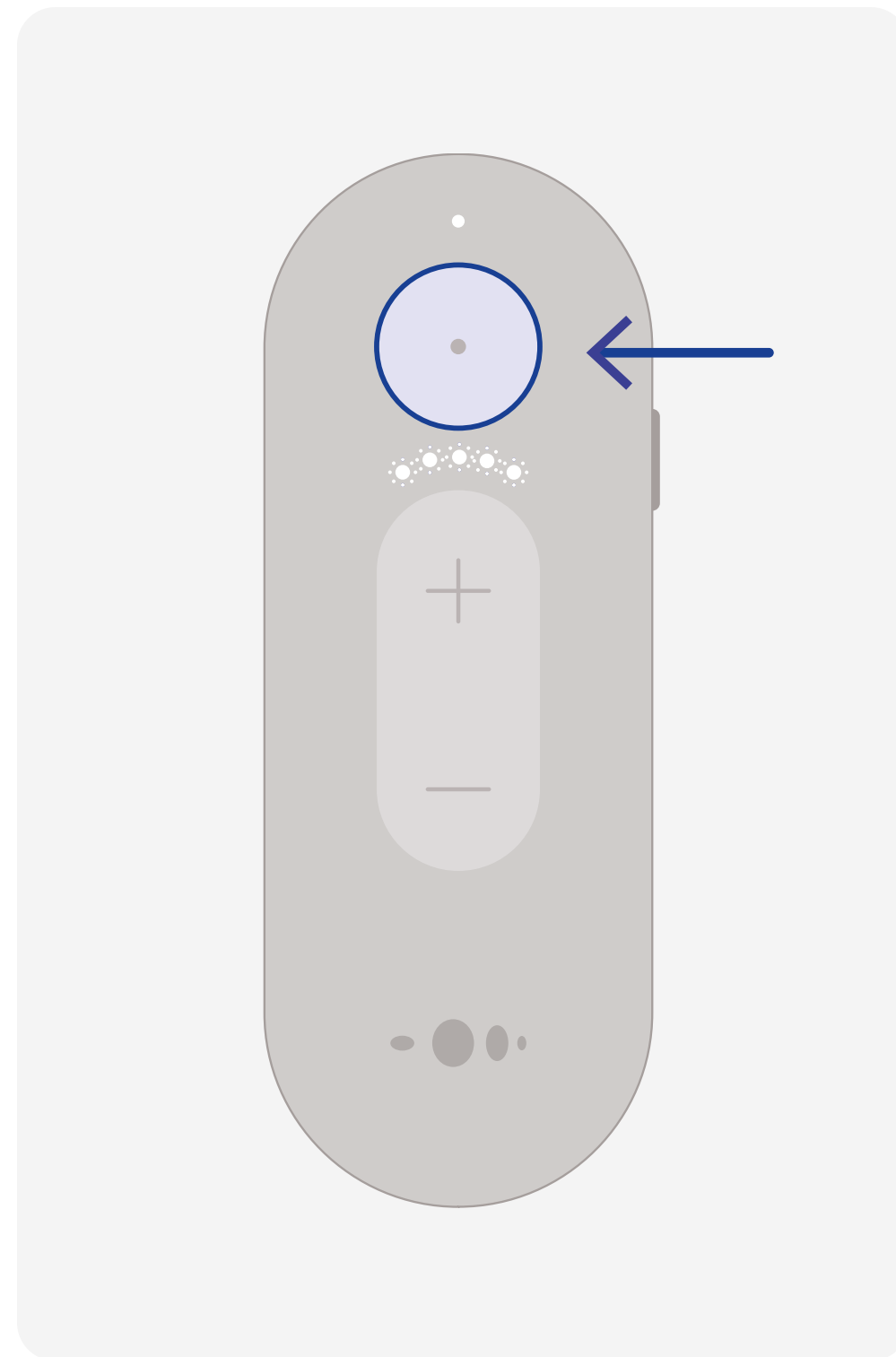

Changer le mode audio
Appuyez sur le bouton du haut

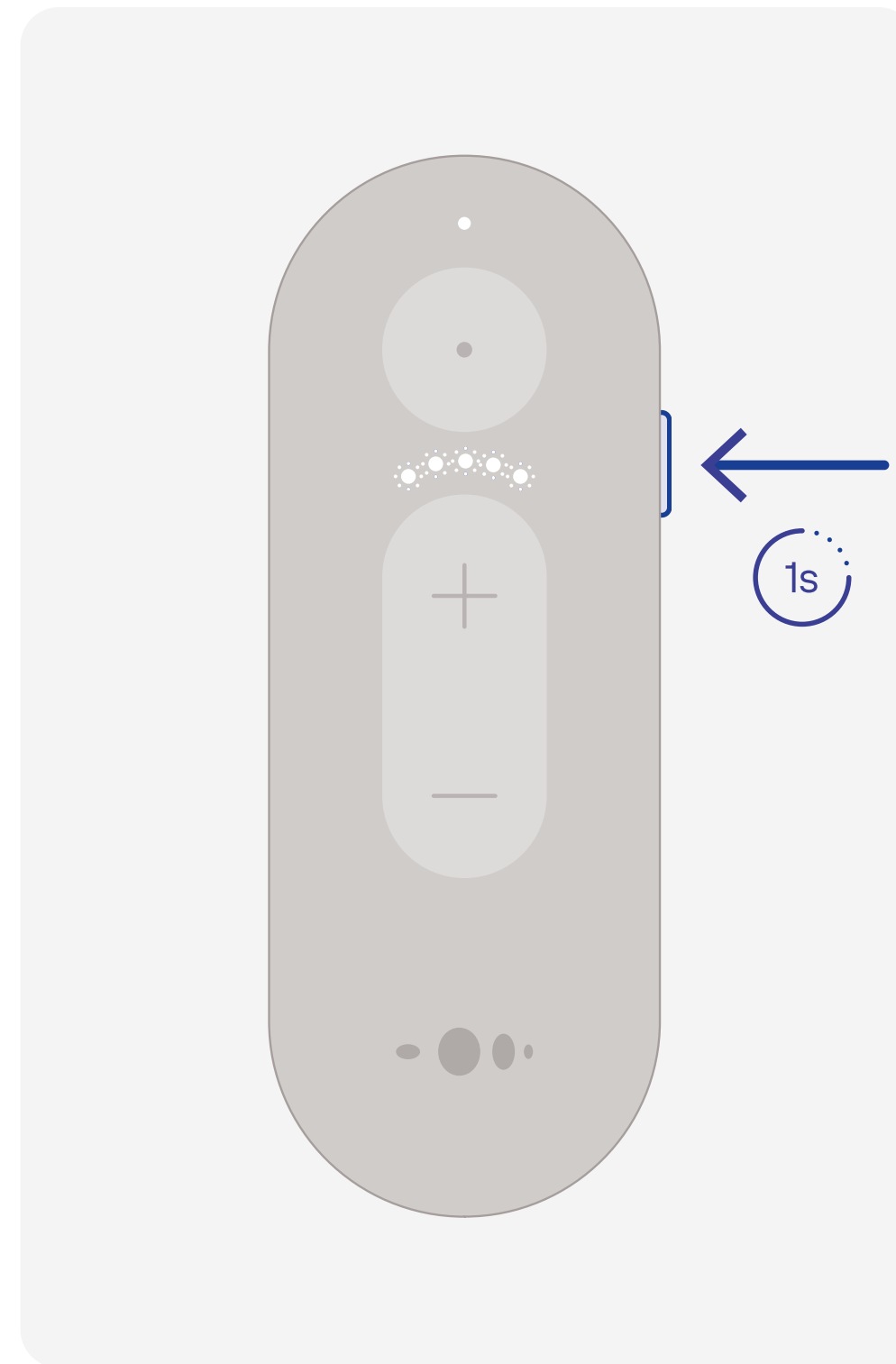


Passer au préréglage suivant
Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.




Interface utilisateur Remote Plus

Appelez

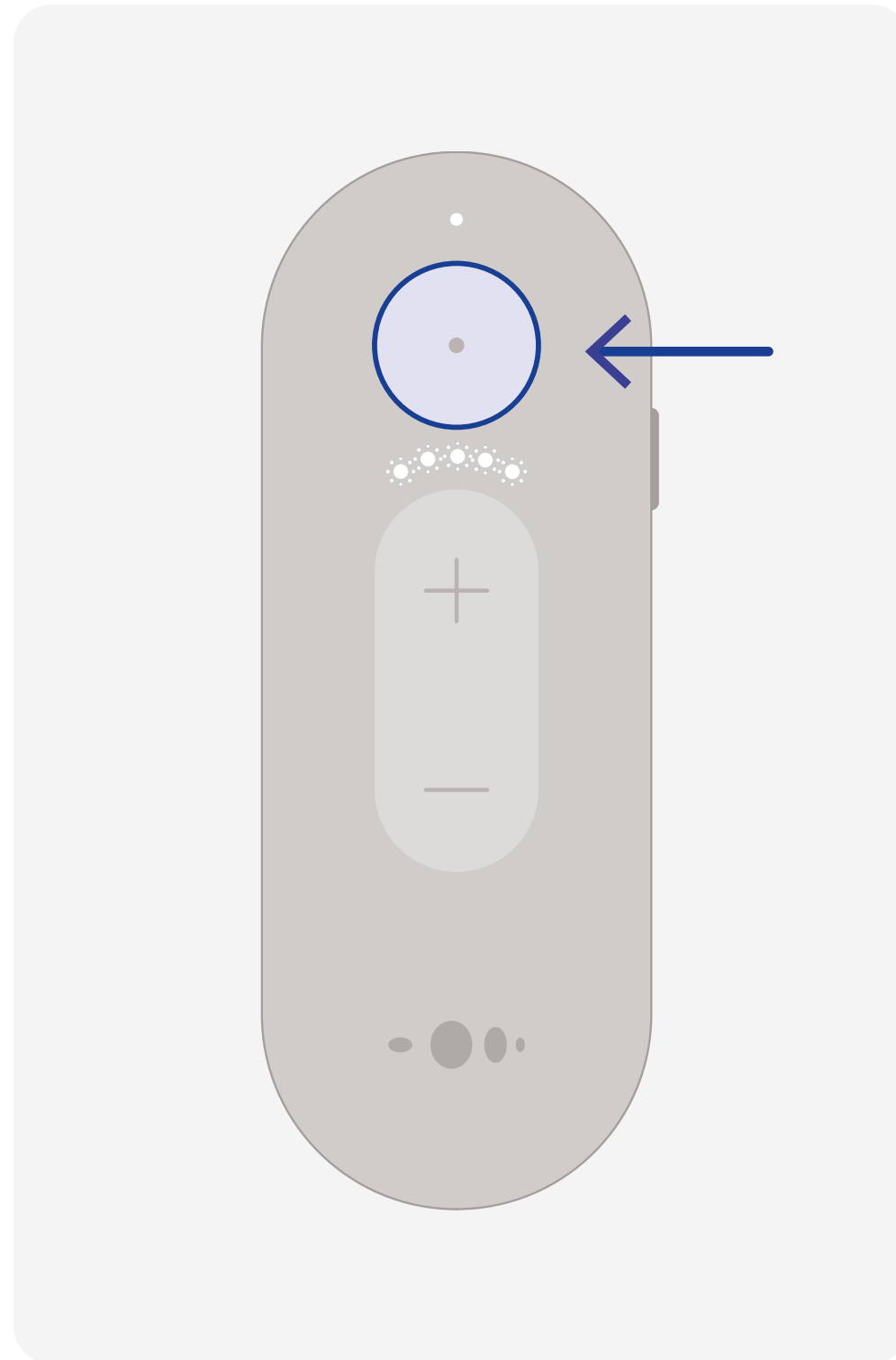

Répondre à l'appel
Appuyez sur le bouton du haut

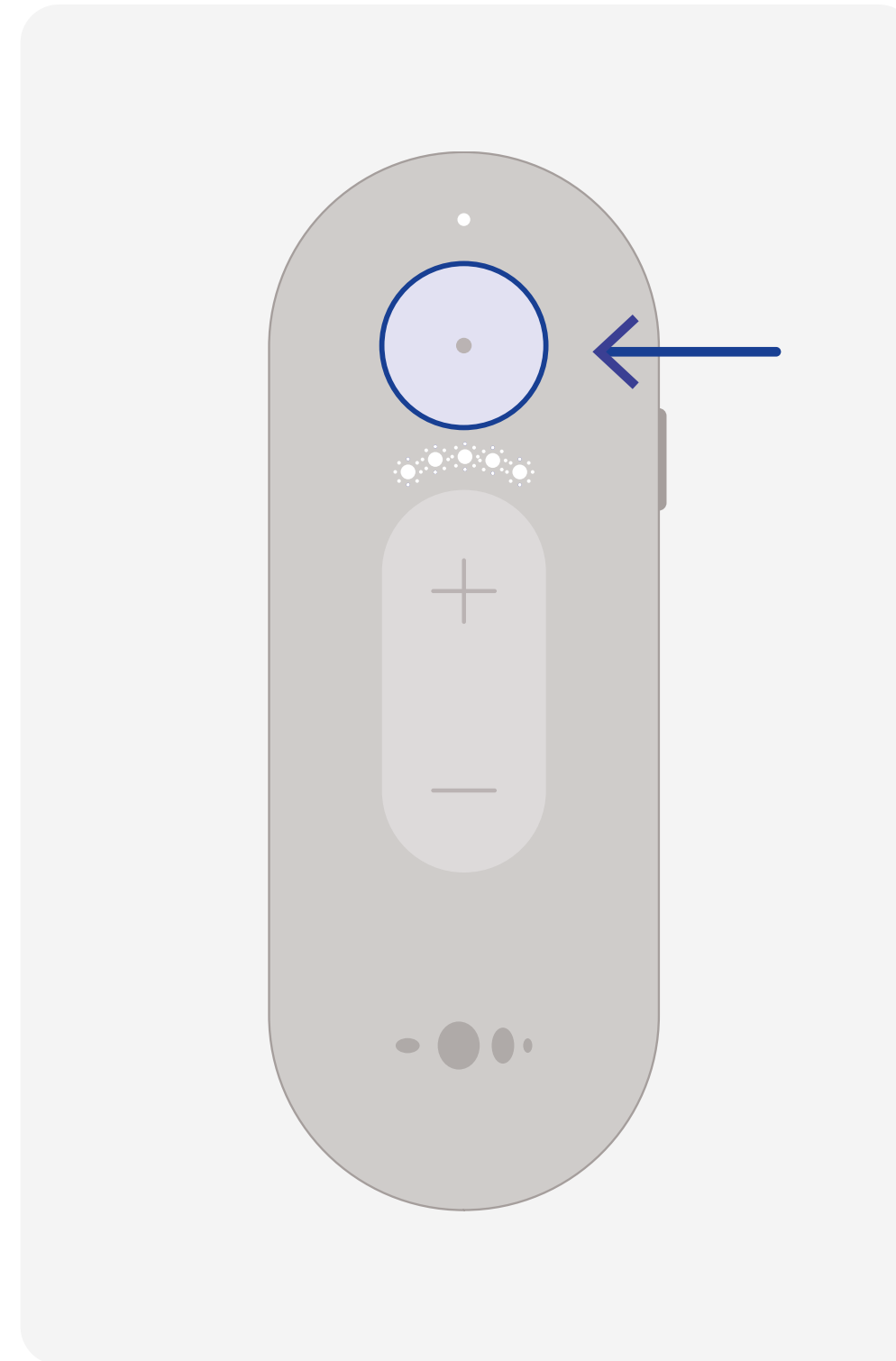

Terminer l'appel
Appuyez sur le bouton du haut



Besoin de plus d'aide ?

Regardez la vidéo de configuration de Remote Plus



Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes,
veuillez suivre ce lien

[↗ Voir les instructions d'utilisation](#)