




Nuance Audio Remote Plus



Introduzione guidata a Remote Plus

Imposta flusso


Remote Plus viene utilizzato per attivare e configurare i tuoi occhiali. Ti guida nella configurazione iniziale, ti permette di scegliere la lingua preferita e ti guida attraverso una rapida calibrazione personalizzata, per offrirti un'esperienza su misura.

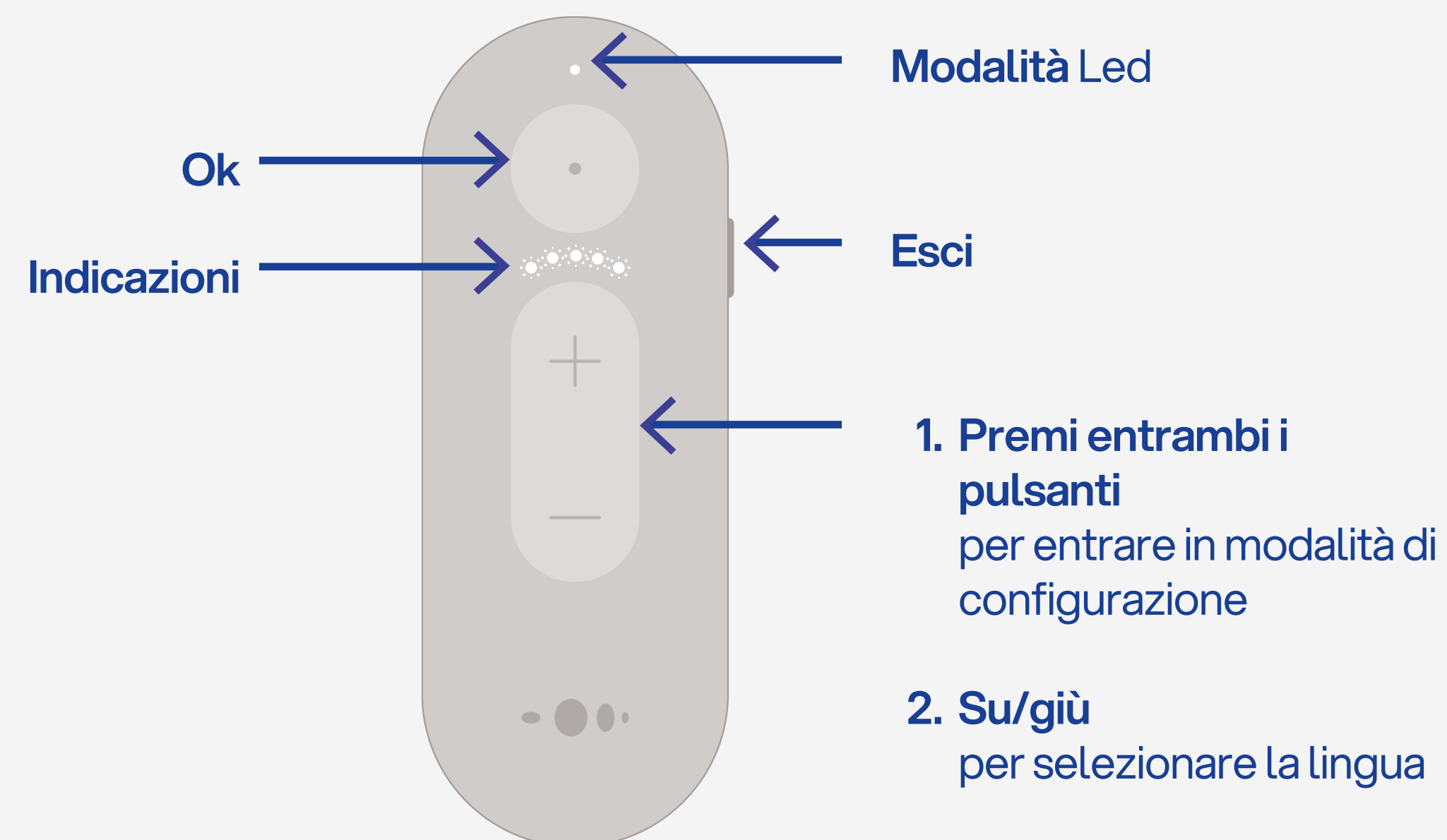



Introduzione guidata a Remote Plus


Imposta flusso

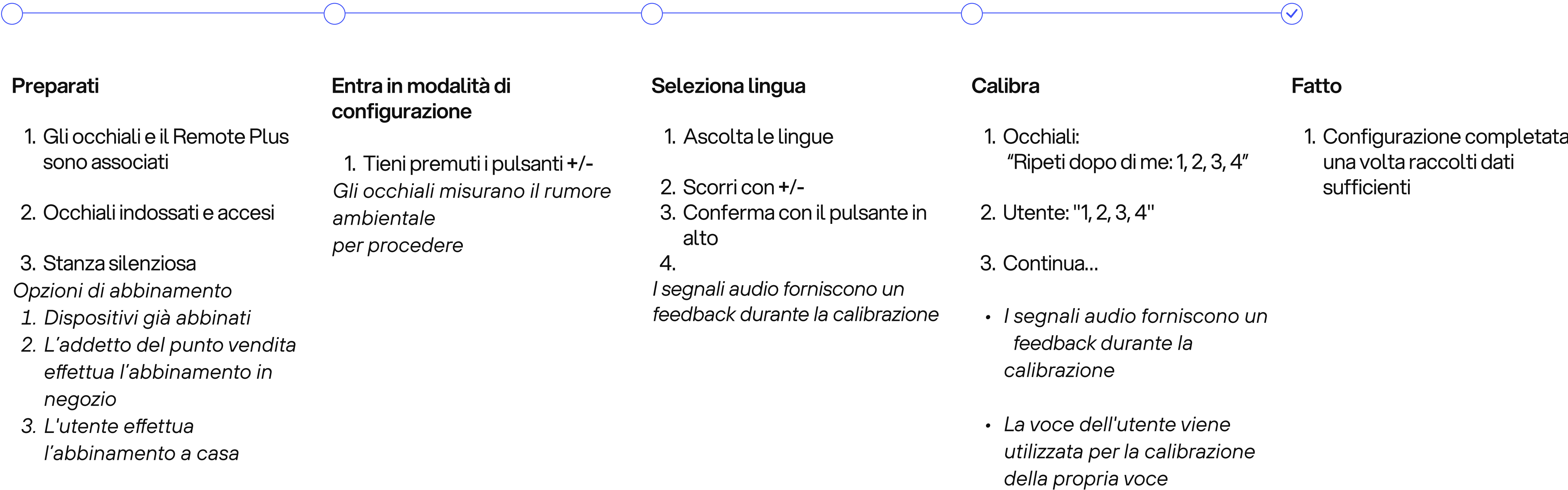




Interfaccia utente Remote Plus

Abbinamento della montatura e configurazione

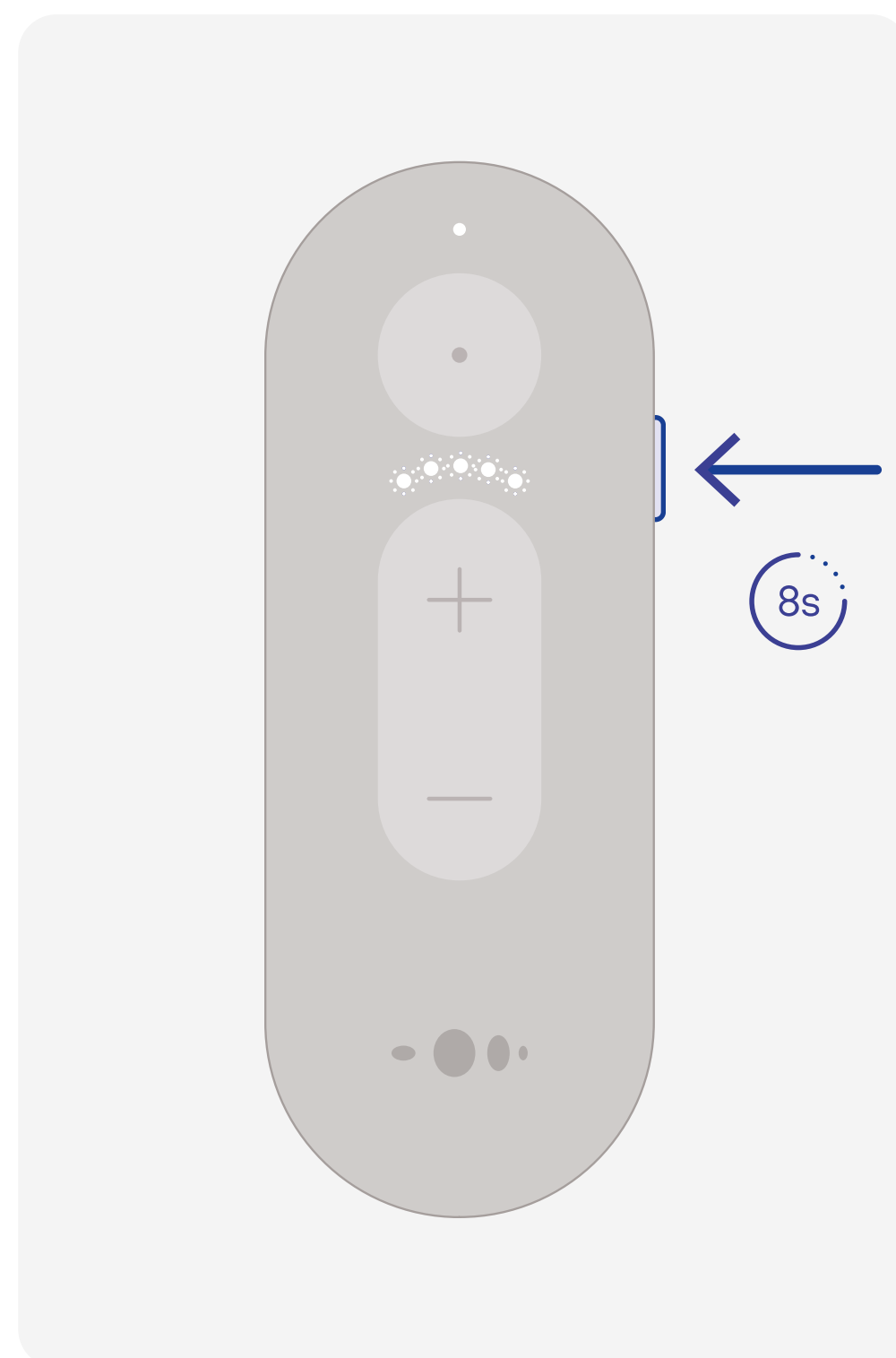

Abbinamento

Prima di procedere, rimuovi la linguetta della batteria dal telecomando. Quando gli occhiali sono accesi, tieni premuto il tasto "+" o "-" sulla montatura finché il LED blu lampeggia. Poi, **tieni premuto il pulsante laterale per 8 secondi.**

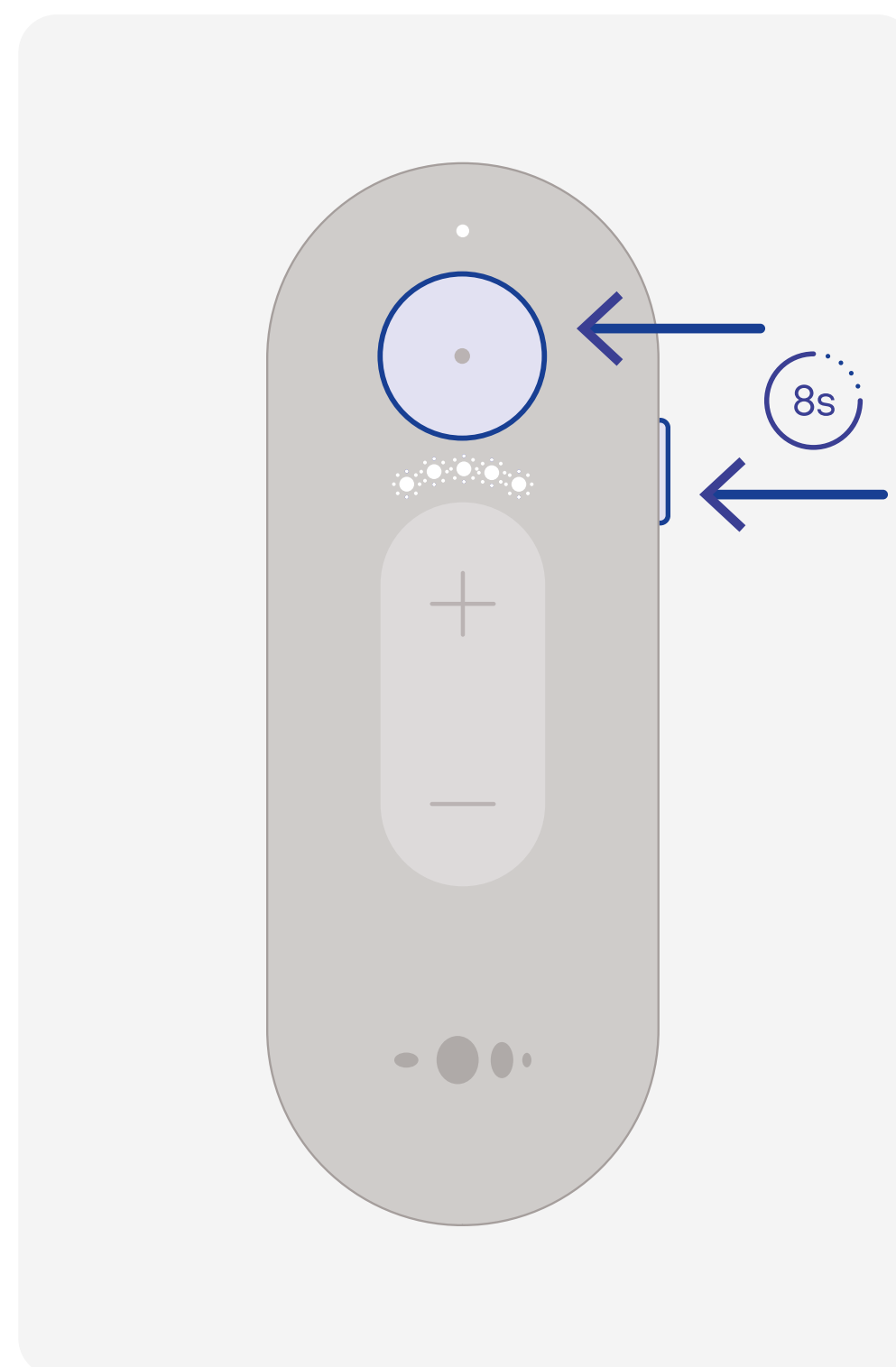


Reset impostazioni di fabbrica

Premi il pulsante in alto e il pulsante laterale. Tieni premuti entrambi per 8 secondi.




Interfaccia utente Remote Plus


Abbinamento della montatura e configurazione

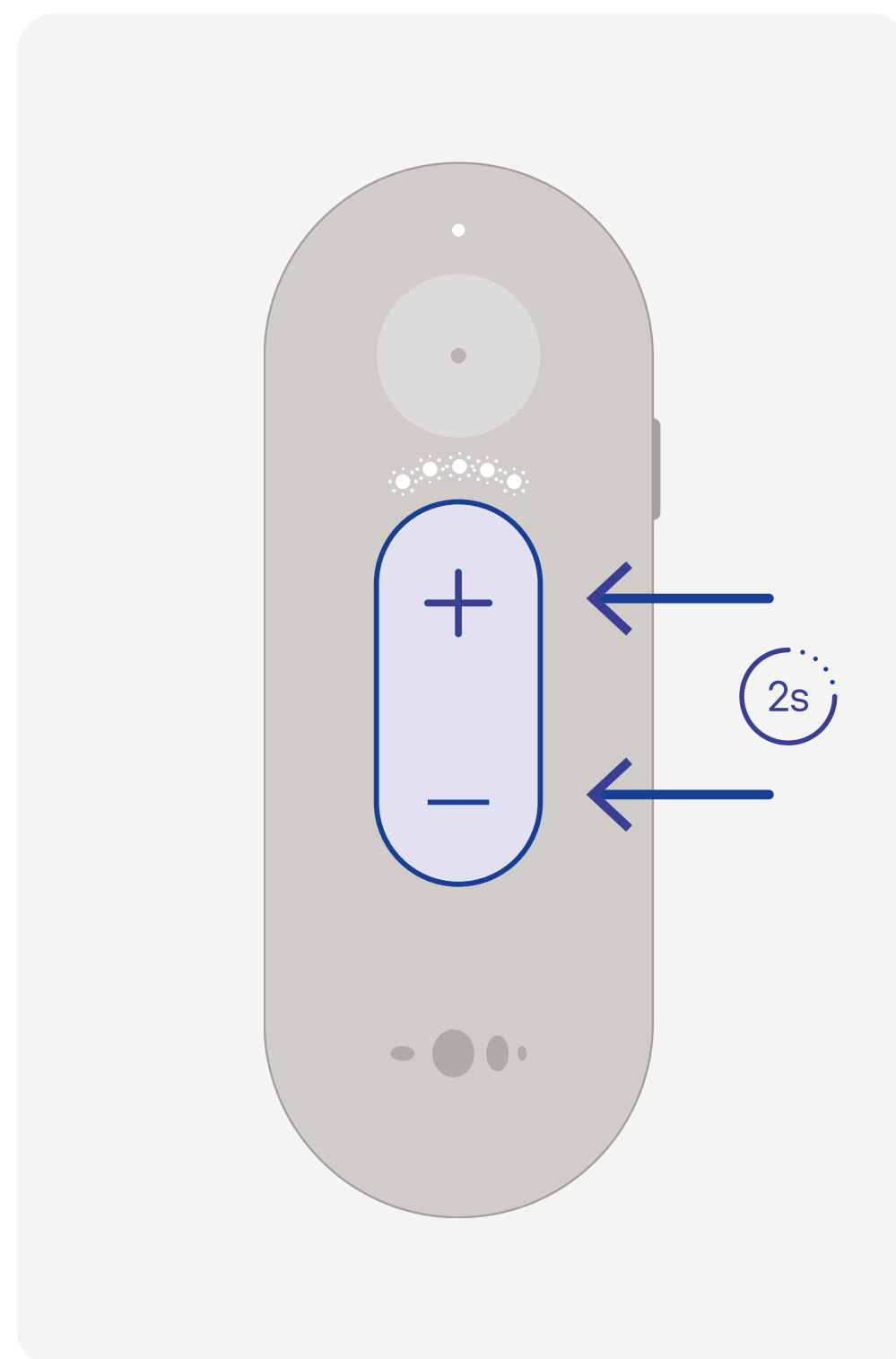

Entra in modalità di configurazione
Tieni premuti entrambi (+) e (-) per 2 secondi.

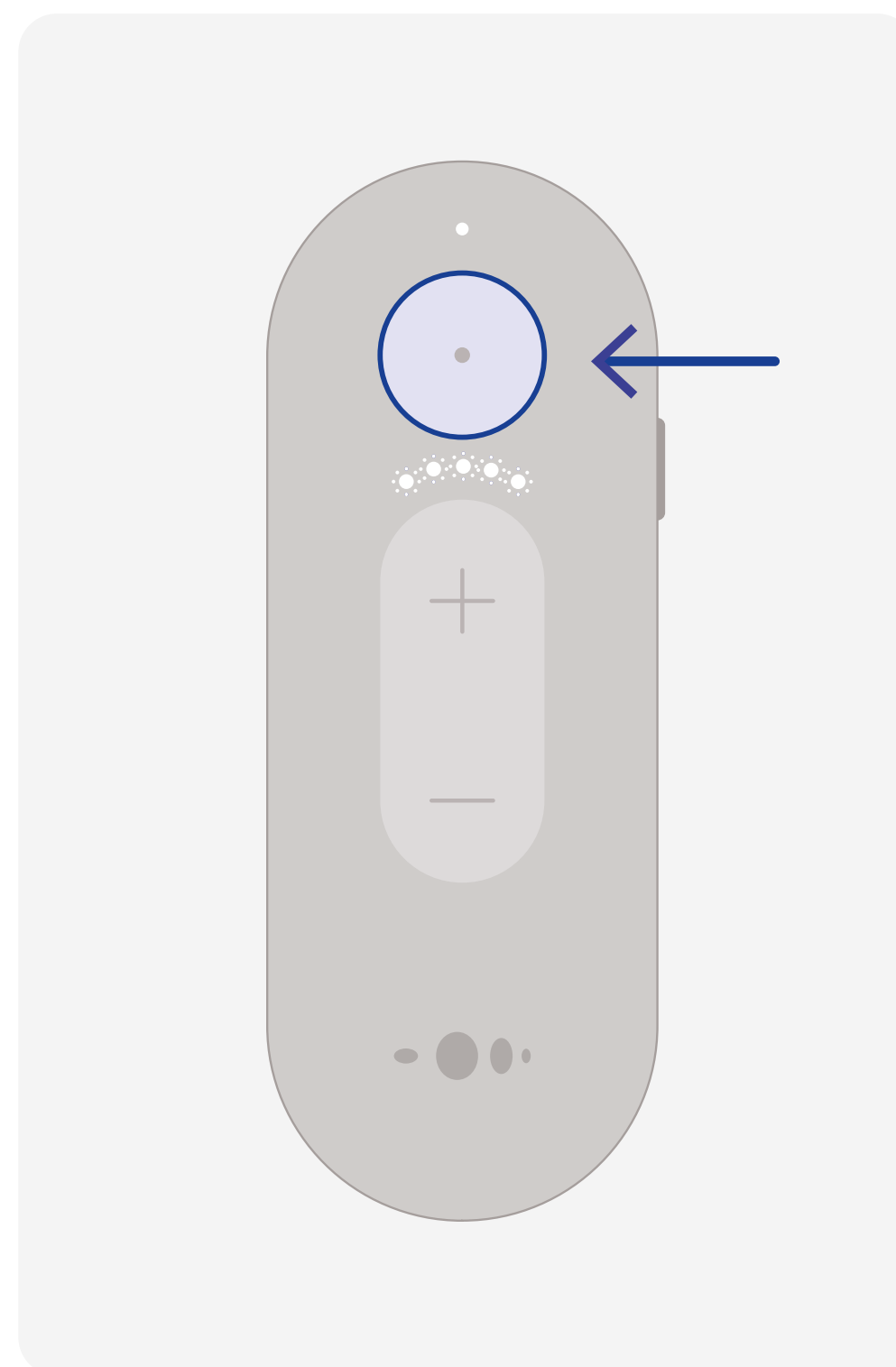

OK
Premi il pulsante in alto

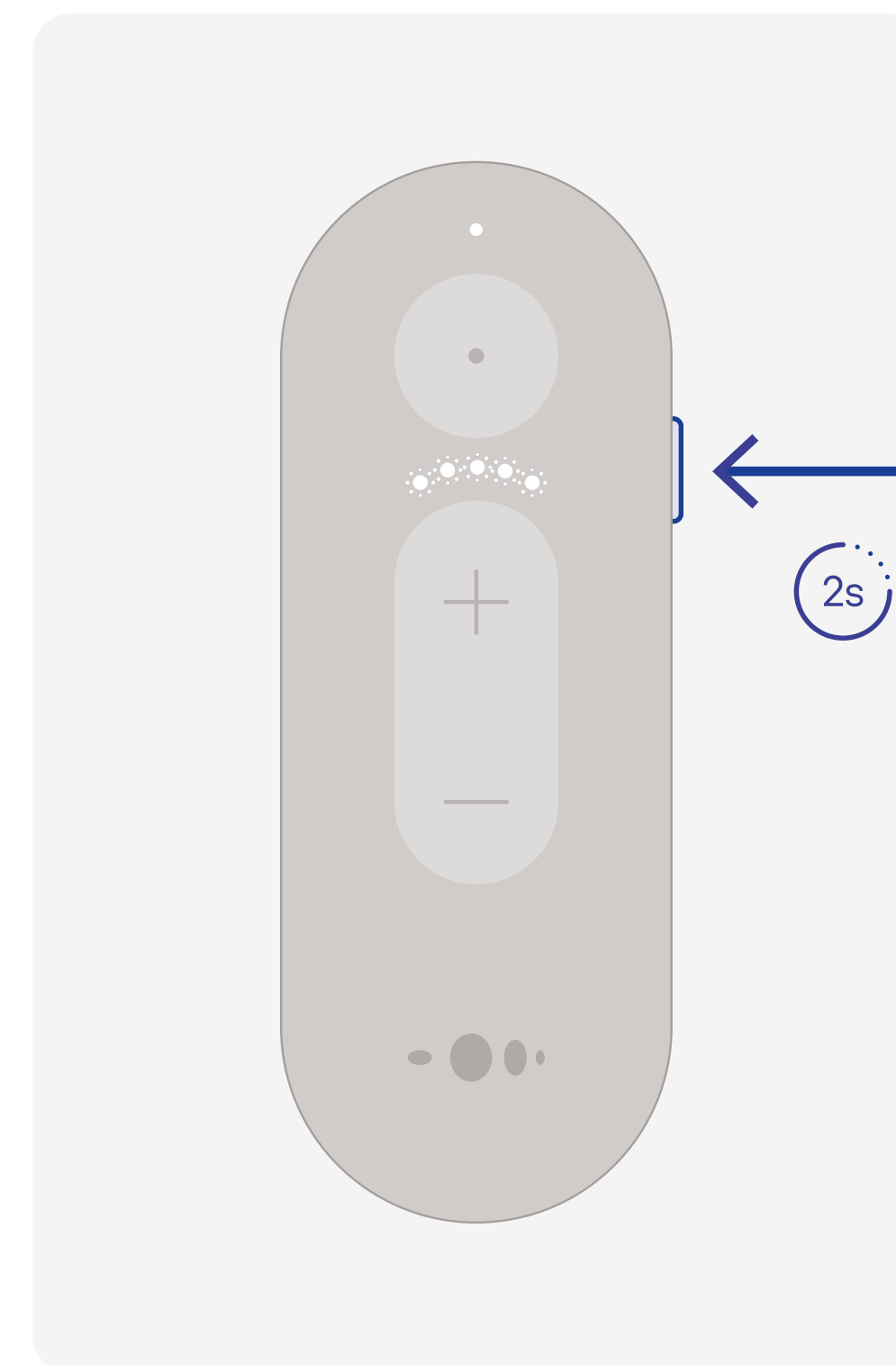


Esci dalla configurazione
Tieni premuto il pulsante laterale per 2 secondi.




Interfaccia utente Remote Plus

Configurazione della montatura

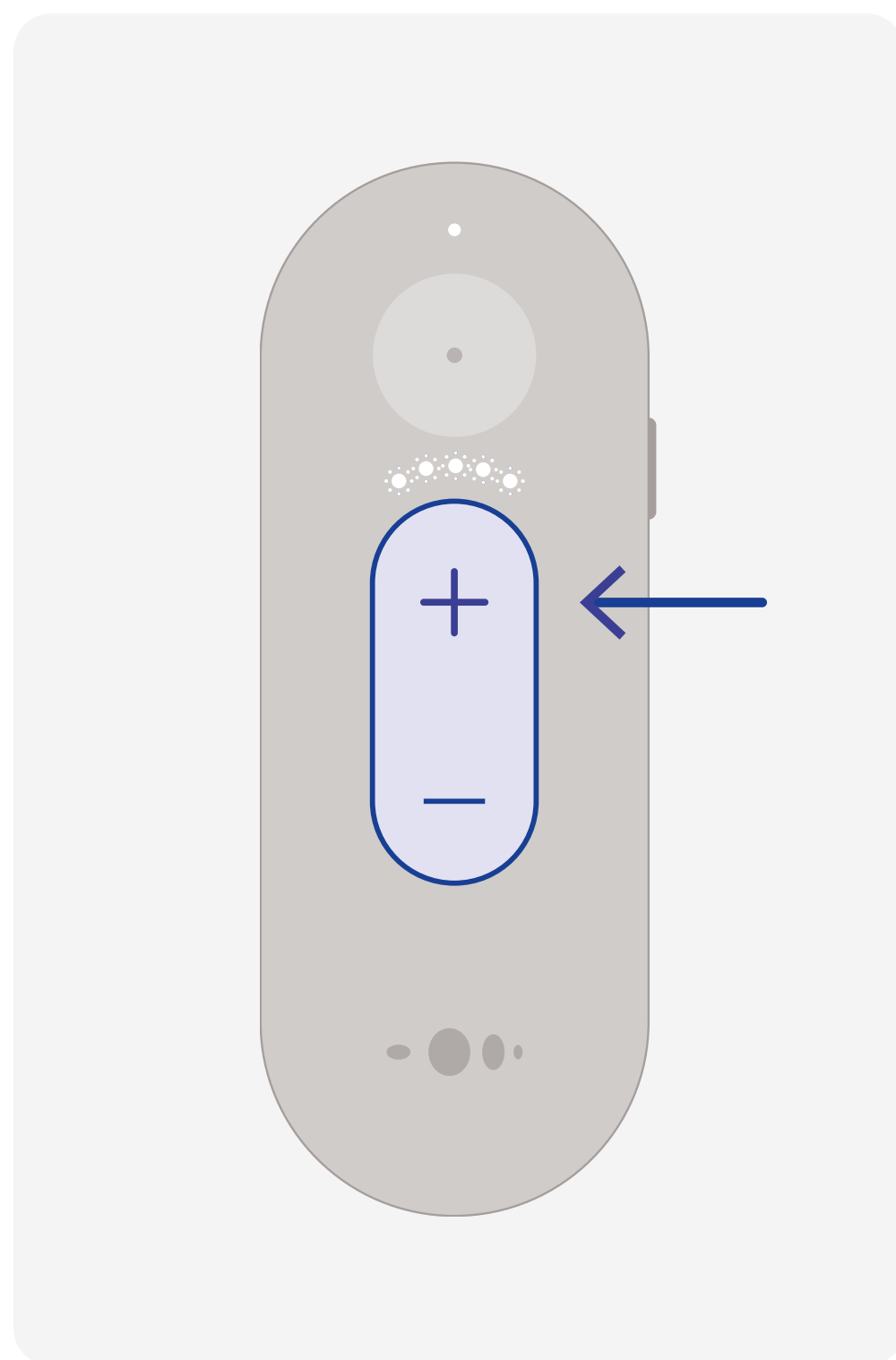

Lingua successiva
Premi (+)

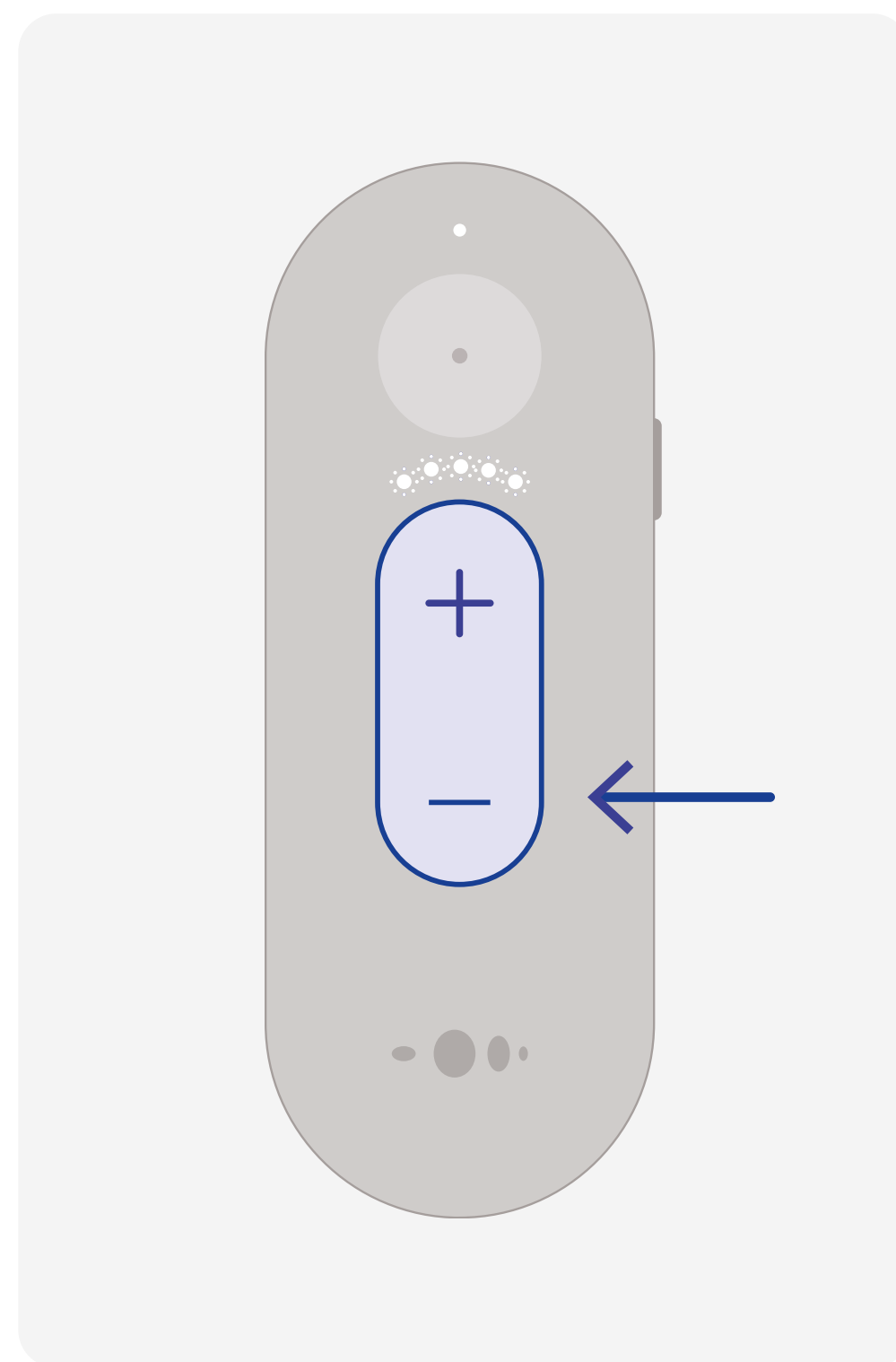


Lingua precedente
Premi (-)




Interfaccia Remote Plus

Udito

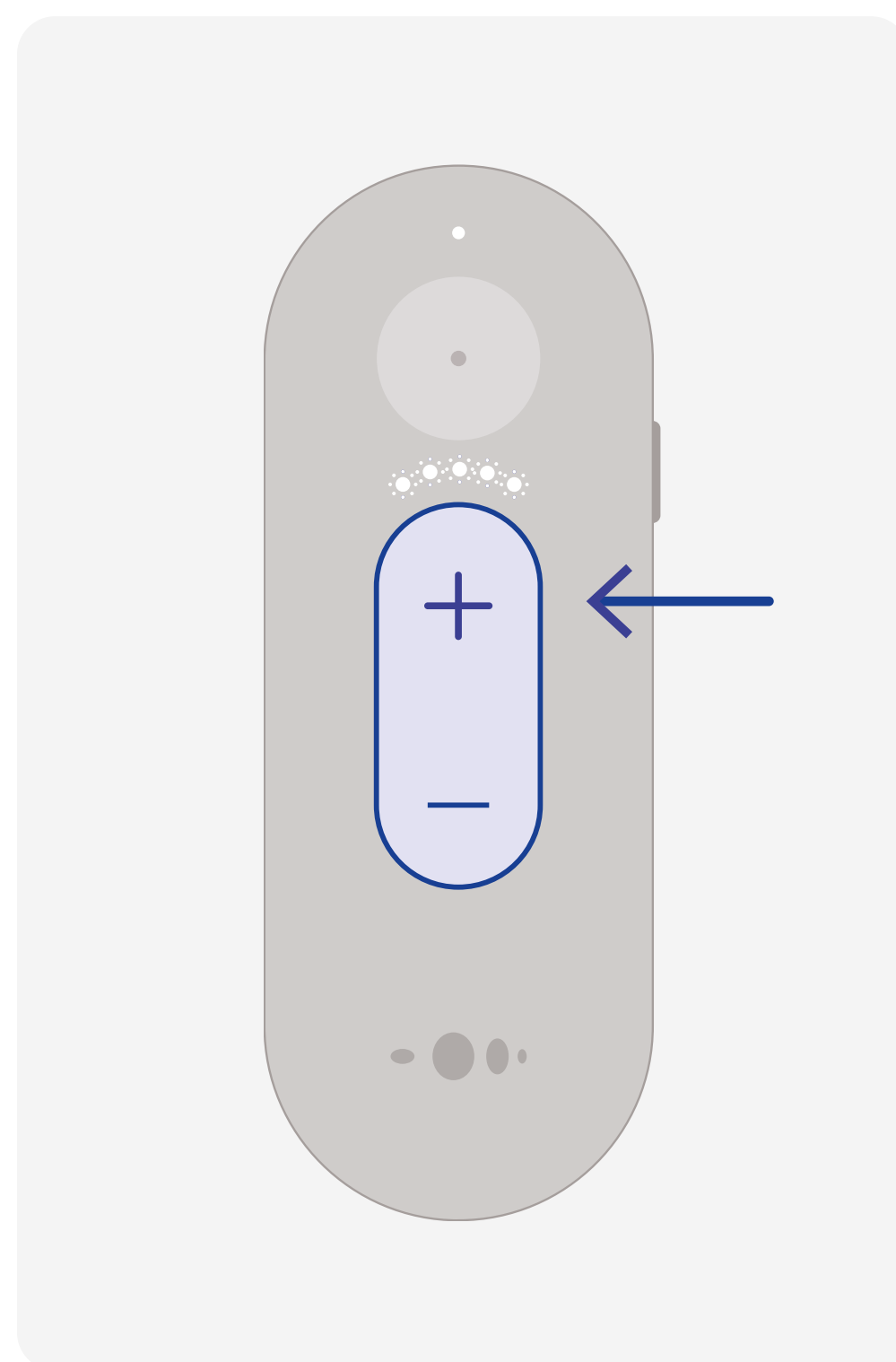

Alza il volume
Premi (+)

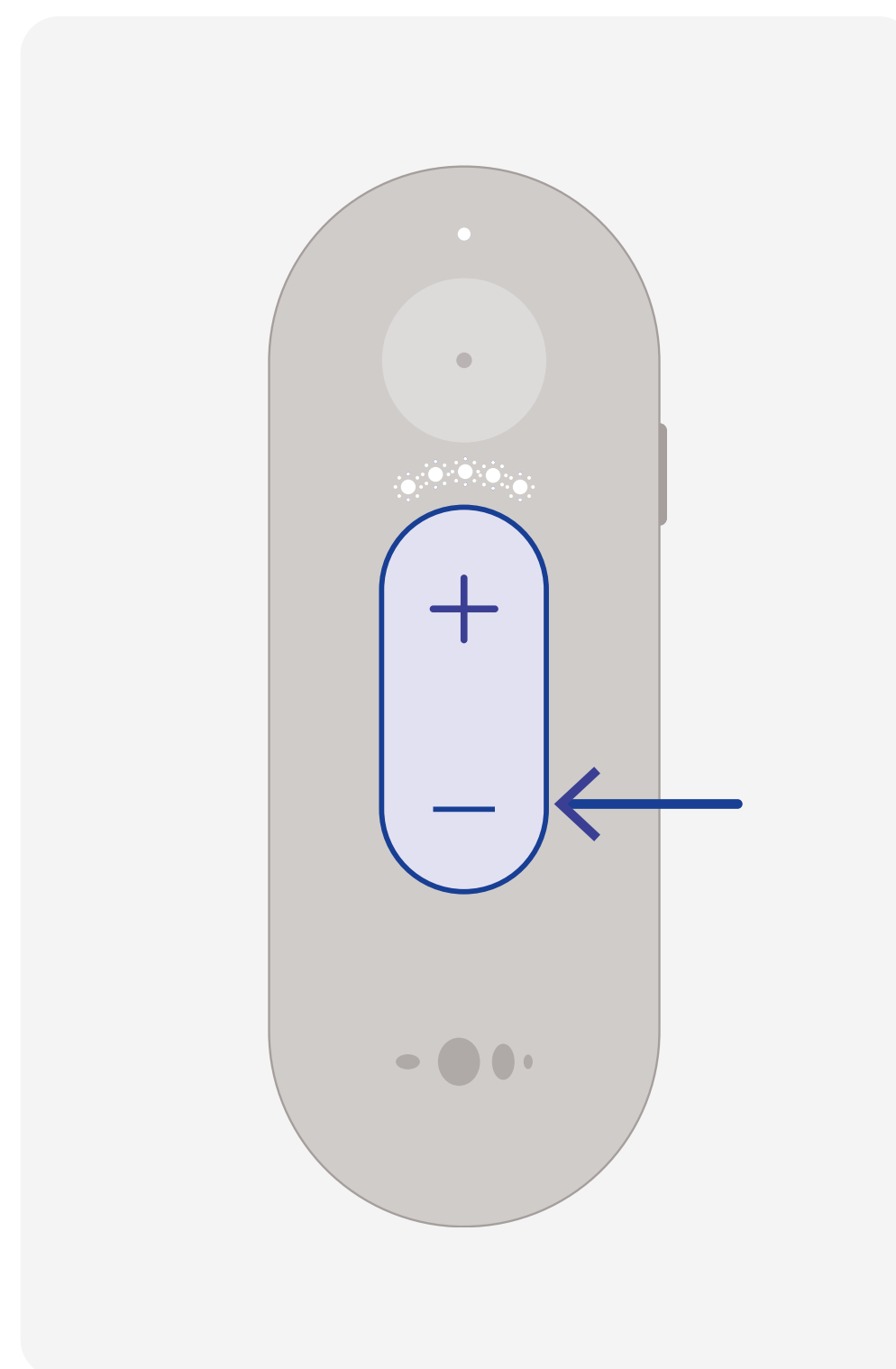


Abbassa il volume
Premi (-)




Interfaccia utente Remote Plus

Udito

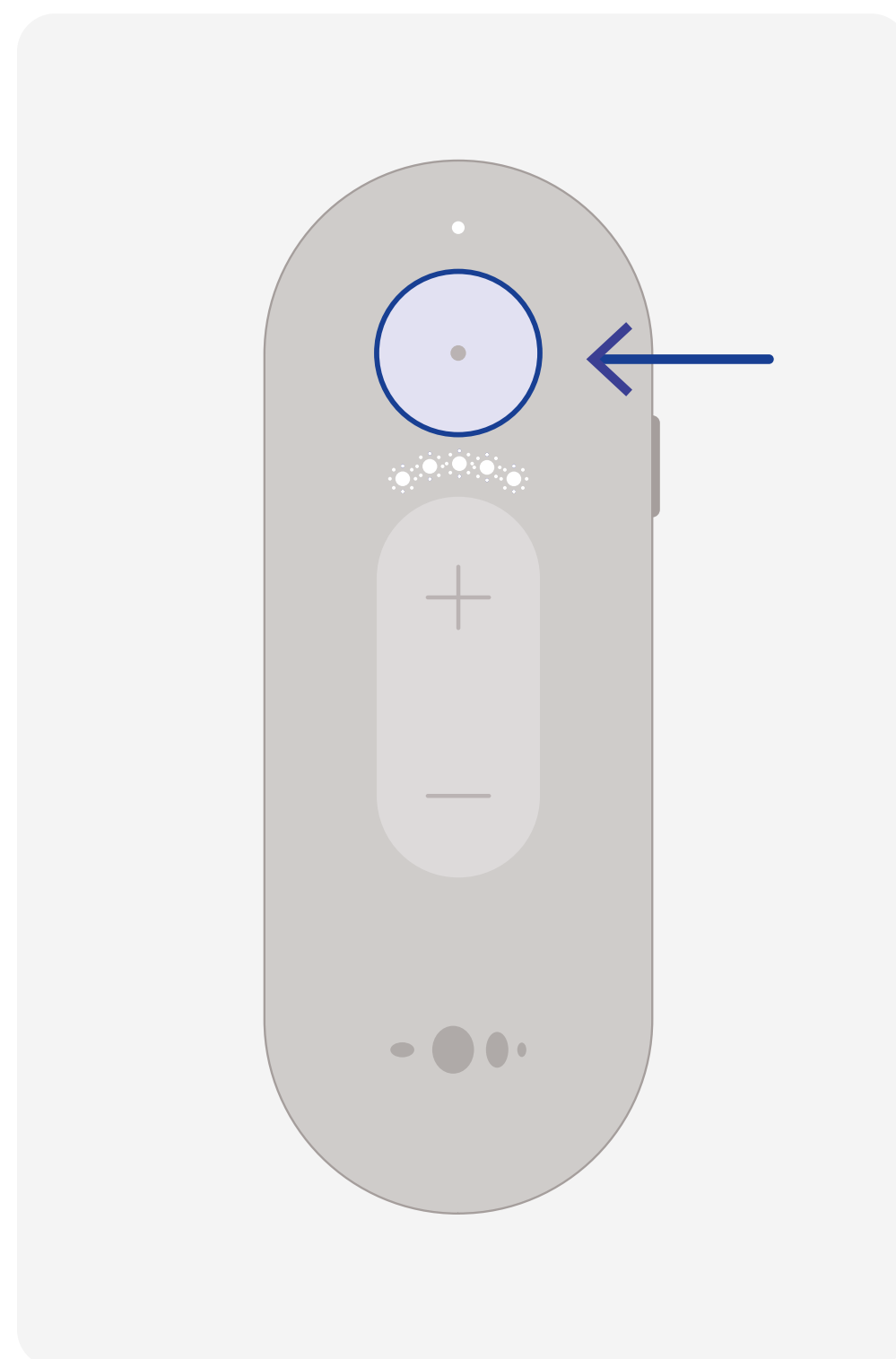

Cambia modalità audio
Premi il pulsante in alto.

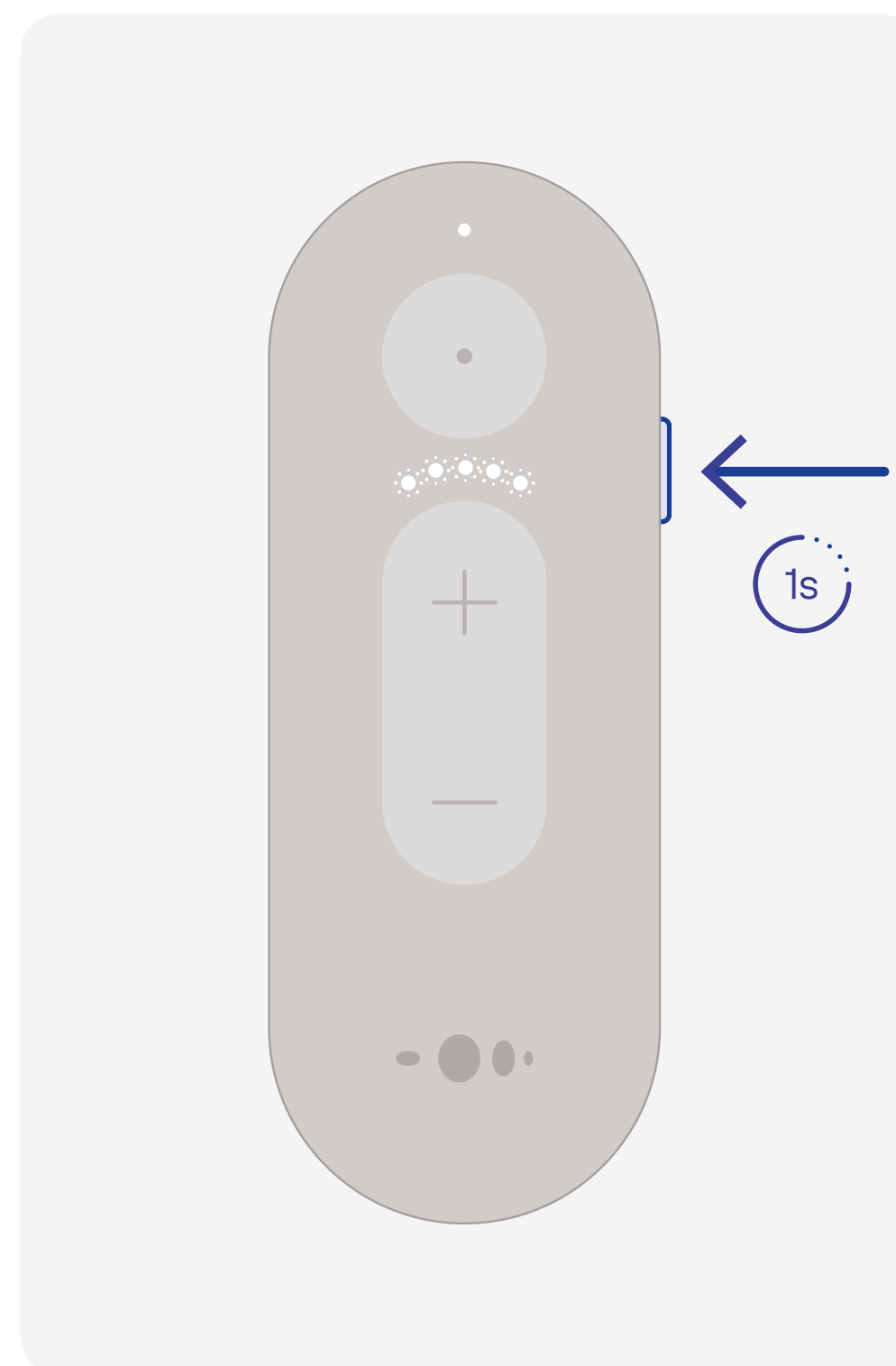


Passa al profilo successivo
Tieni premuto il pulsante laterale per 1 secondo.




Interfaccia utente Remote Plus

Chiama

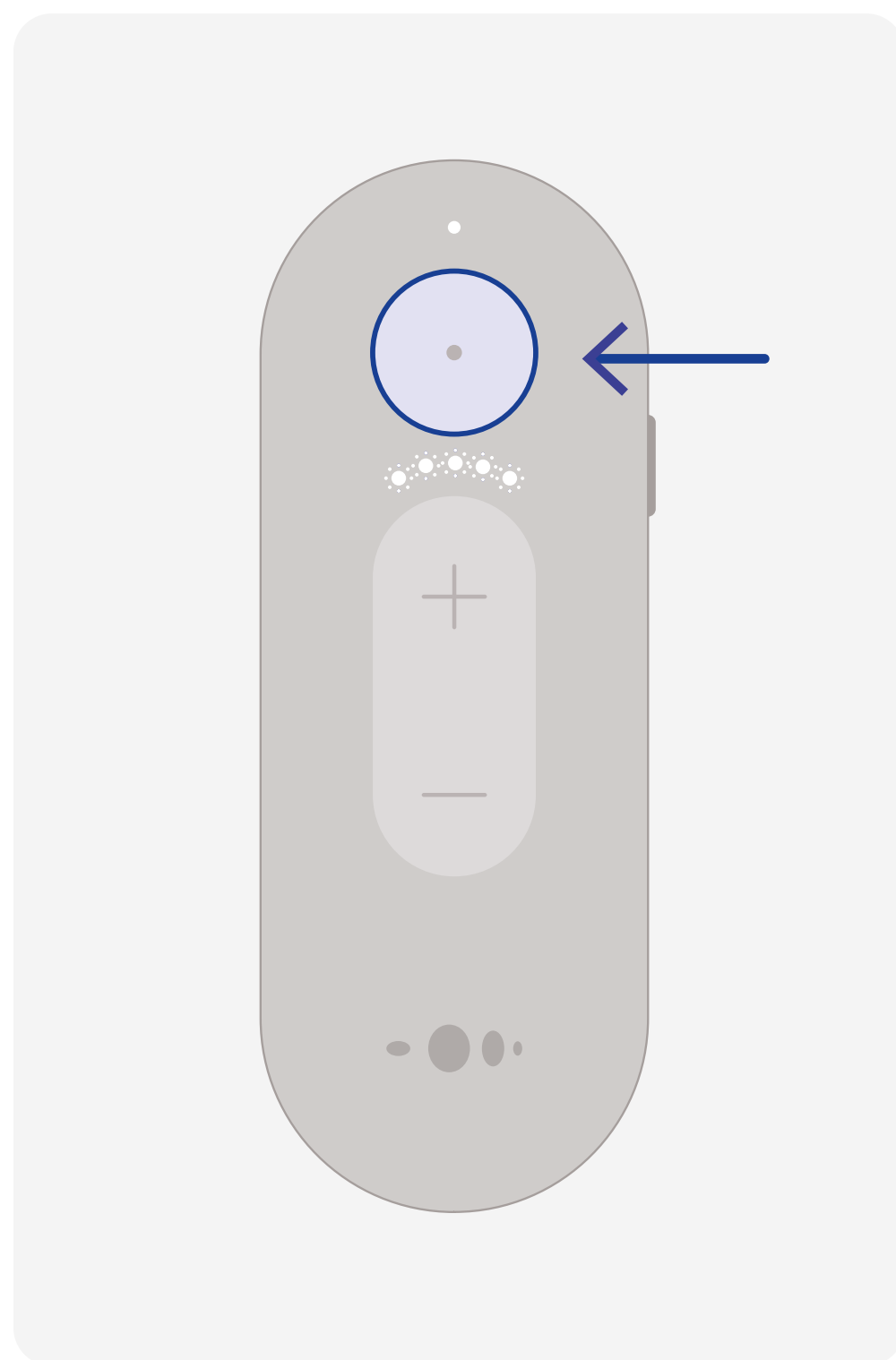

Rispondi alla chiamata
Premi il pulsante in alto.

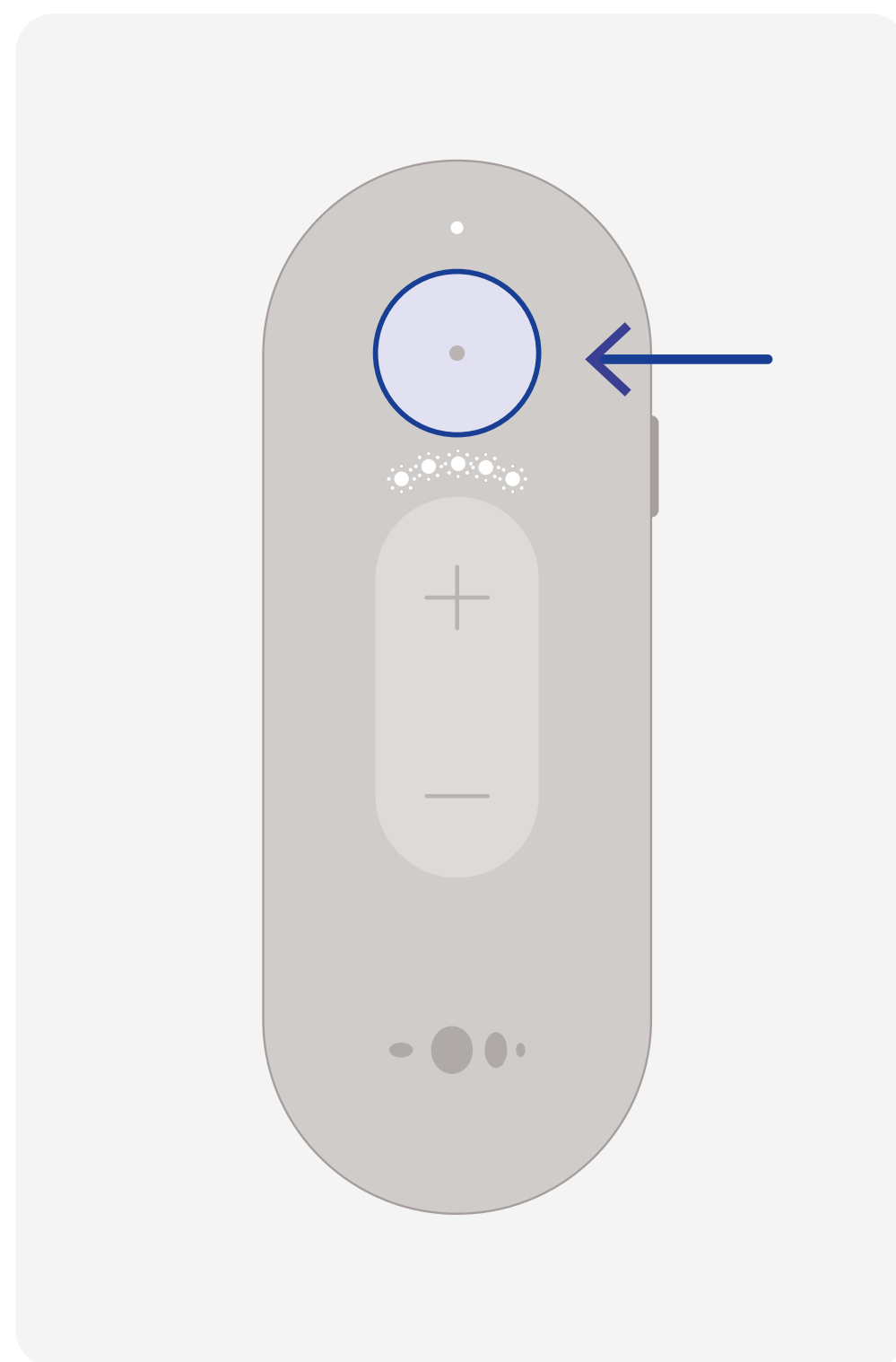

Termina chiamata
Premi il pulsante in alto.



Hai bisogno di ulteriore supporto?
[Guarda la video introduzione di Remote Plus](#)



nuance audio

in tune with life

Per le istruzioni per l'uso aggiornate,
seguì questo link

[↗ Visualizza istruzioni per l'uso](#)