




Nuance Audio Remote Plus



Configuração guiada do Remote Plus

Configuração do fluxo


O Remote Plus é utilizado para ativar e configurar os seus óculos. Guia-o durante o processo de configuração, permite-lhe escolher o seu idioma preferido e ajuda-o numa rápida calibração pessoal para que tudo fique perfeito para si.

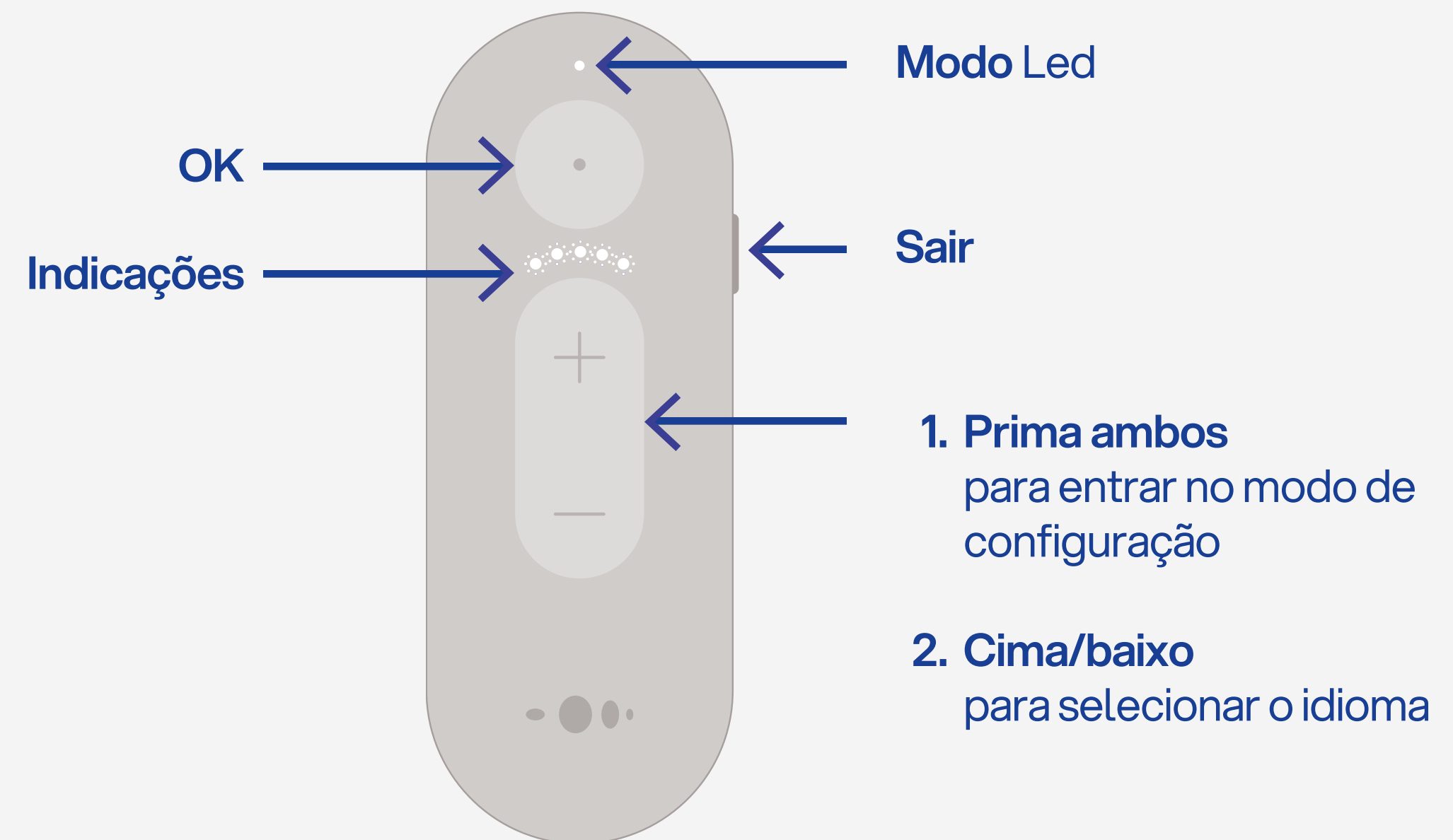



Configuração guiada do Remote Plus

Configuração do fluxo

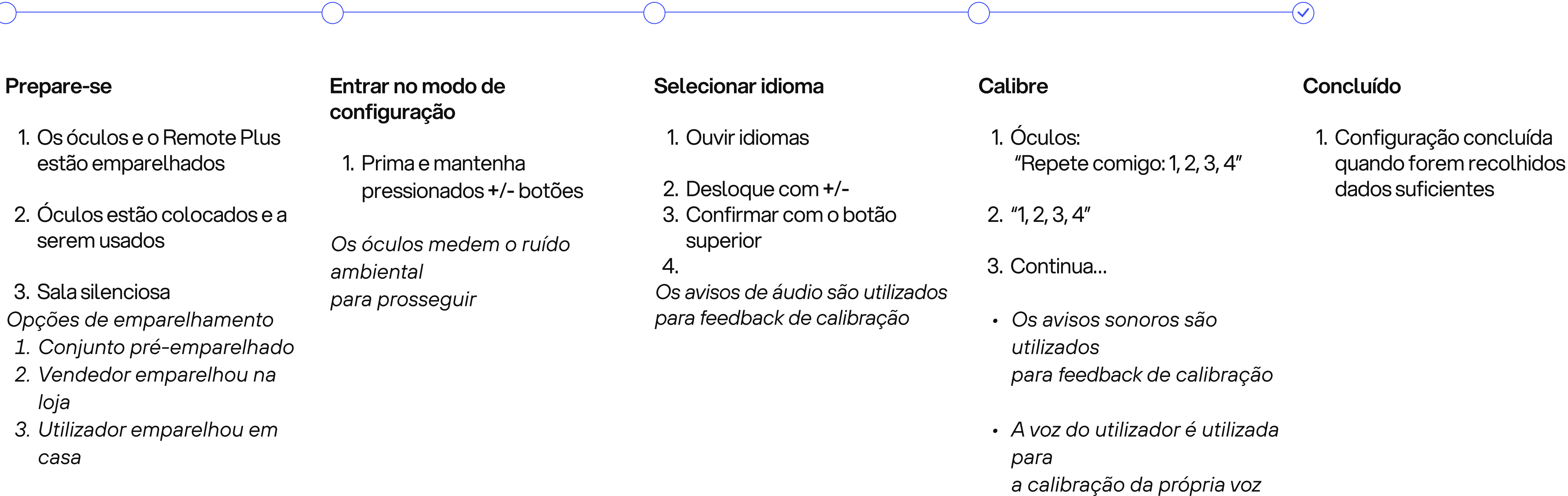




Interface do utilizador Remote Plus

Emparelhamento e Configuração de Armação



A emparelhar

Remova a aba da bateria do comando antes de prosseguir. Quando os óculos estiverem ligados, prima e mantenha premido o botão de volume "+" ou "-" na armação até que o LED azul pisque. Em seguida, **prima o botão lateral e mantenha-o premido durante 8 segundos.**

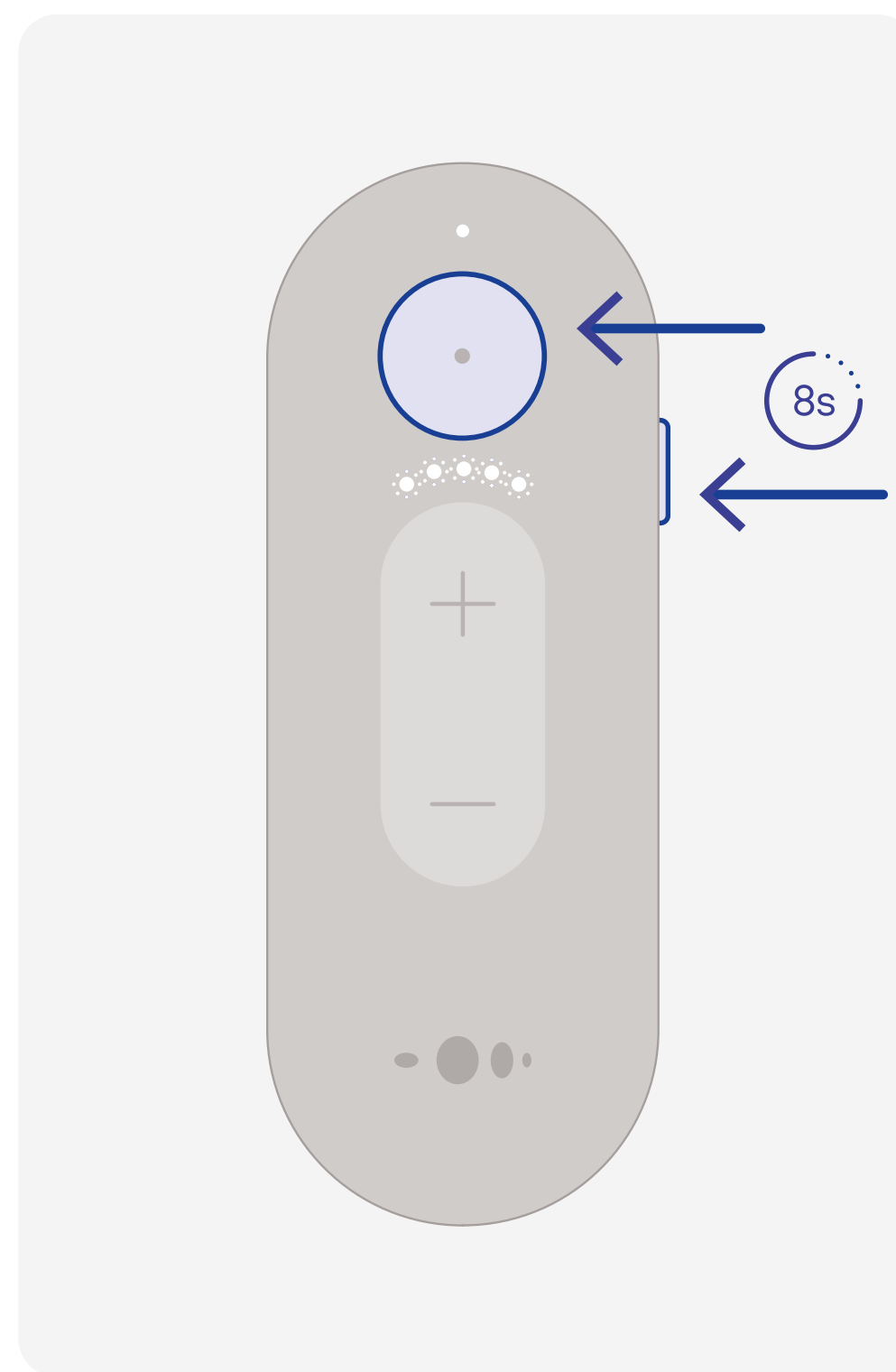


Reposição de fábrica

Prima o botão superior e o botão lateral. Mantenha ambos pressionados durante 8 segundos.




Interface do utilizador Remote Plus


Emparelhamento e Configuração de Armação

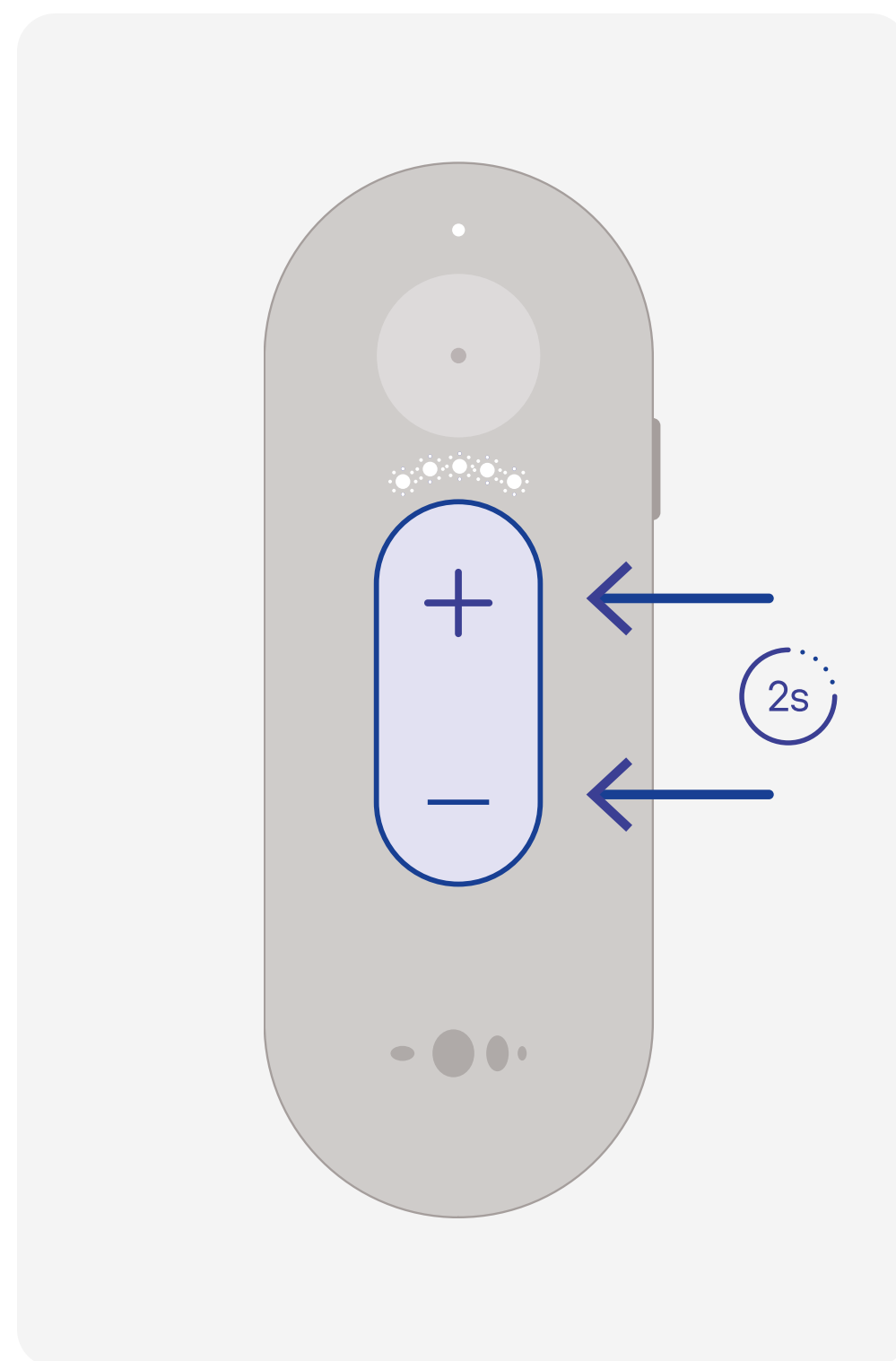

Entrar no modo de configuração
Prima e mantenha pressionado ambos (+) e (-) durante 2 segundos.

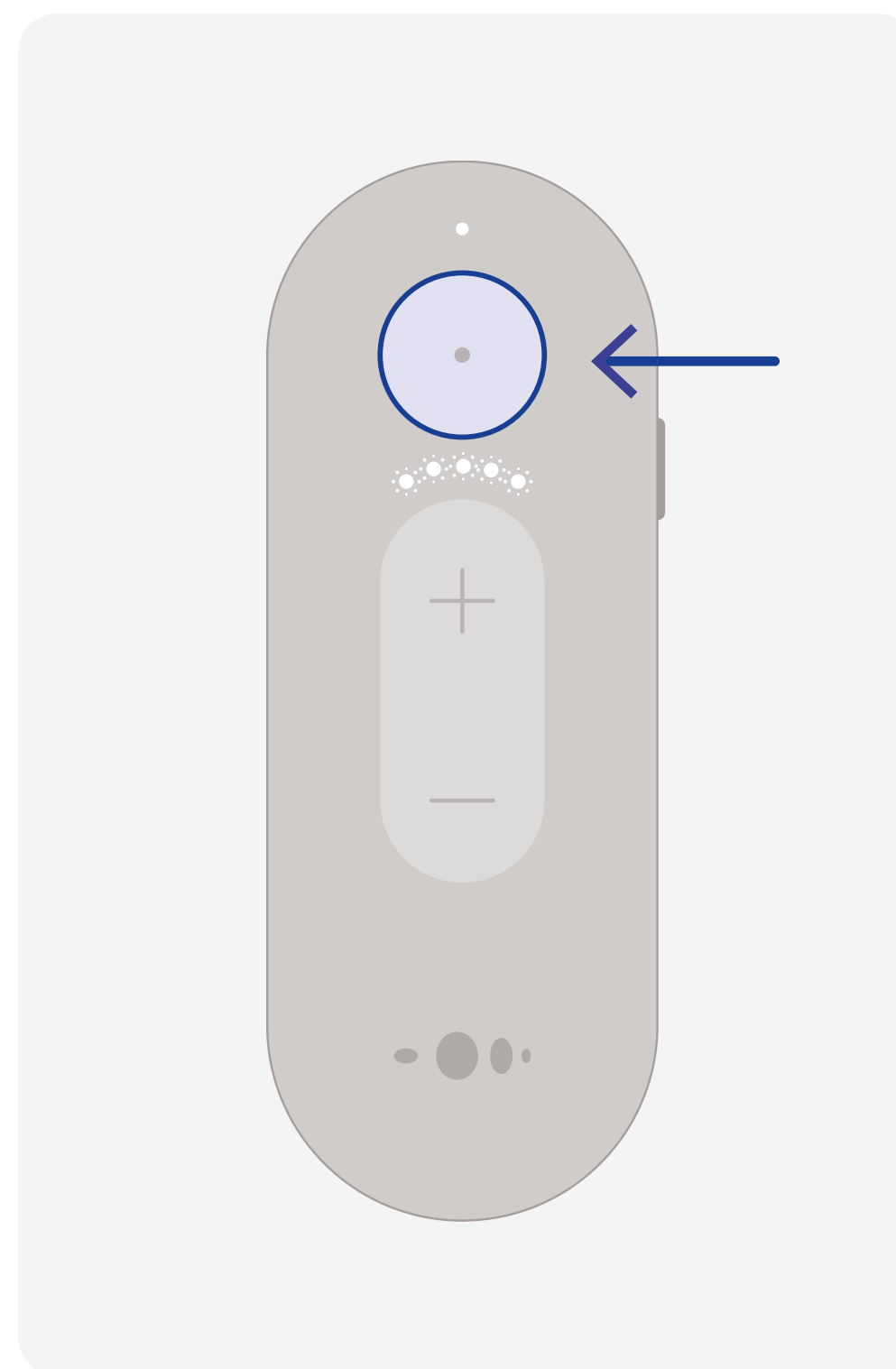

OK
Prima o botão superior

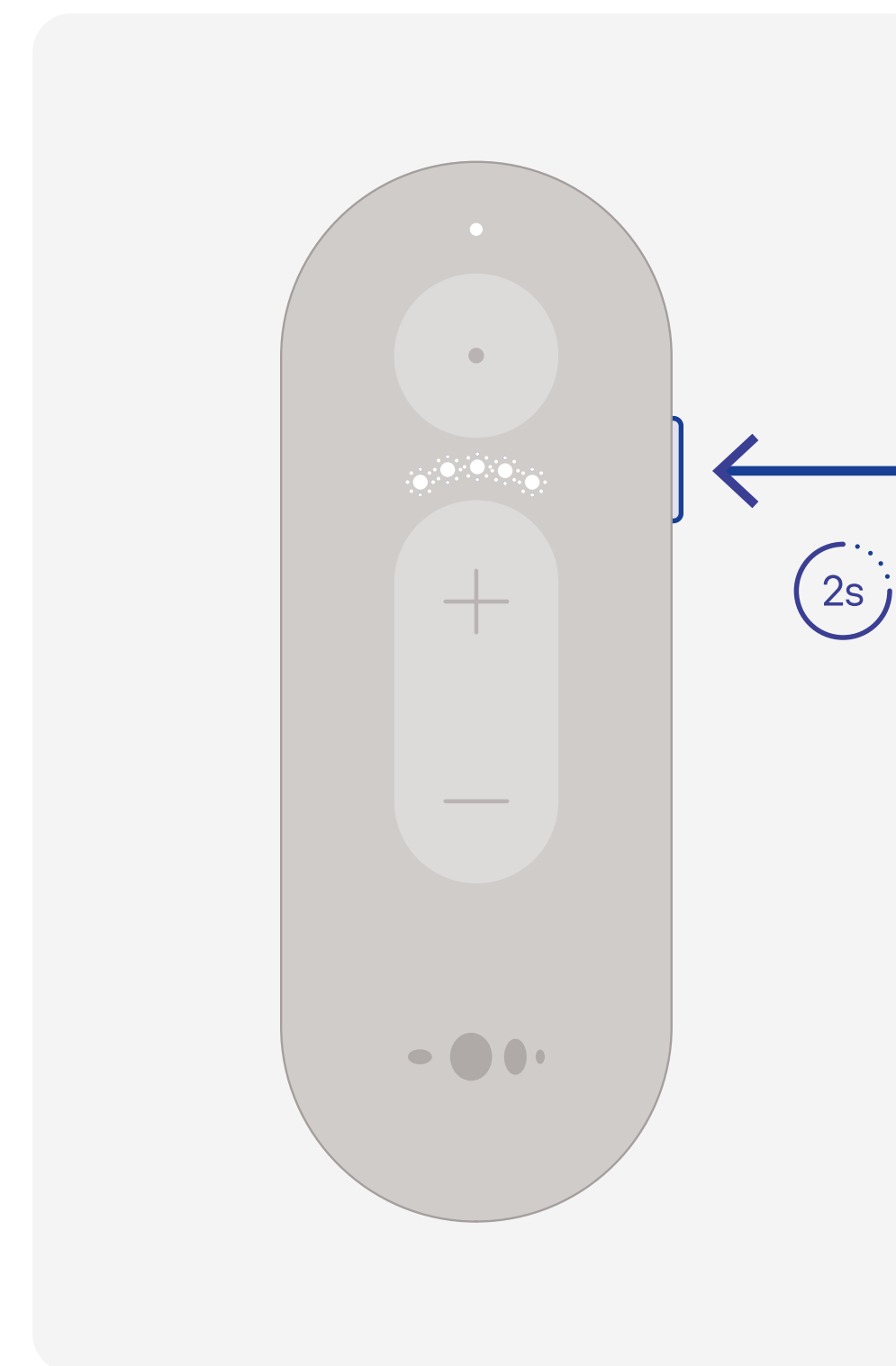


Sair da configuração
Prima o botão lateral e mantenha pressionado durante 2 segundos.




Interface do utilizador Remote Plus

Configuração da armação

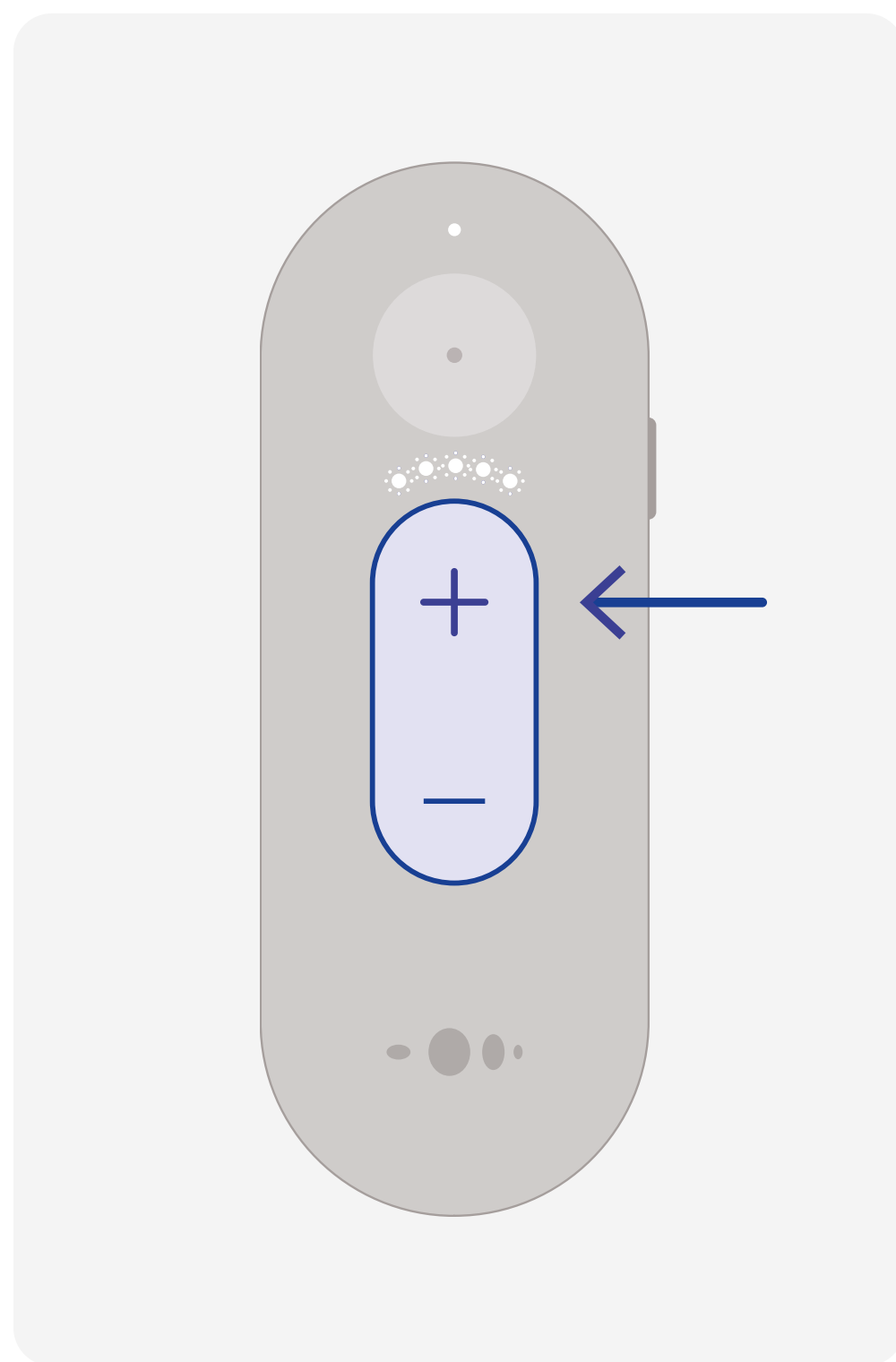


Próximo idioma
Prima (+)

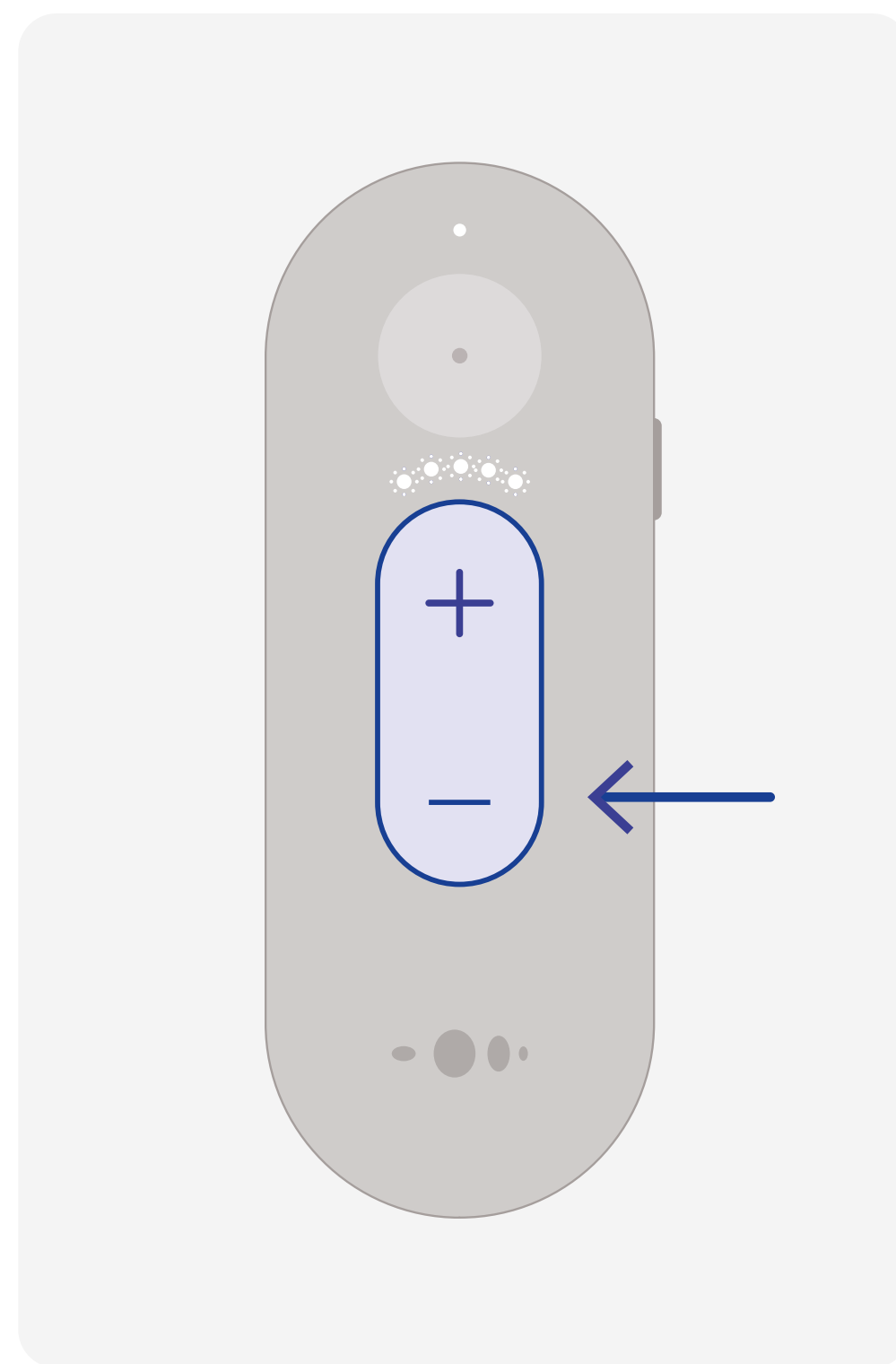


Idioma anterior
Prima (-)



Interface do Remote Plus Auditiva

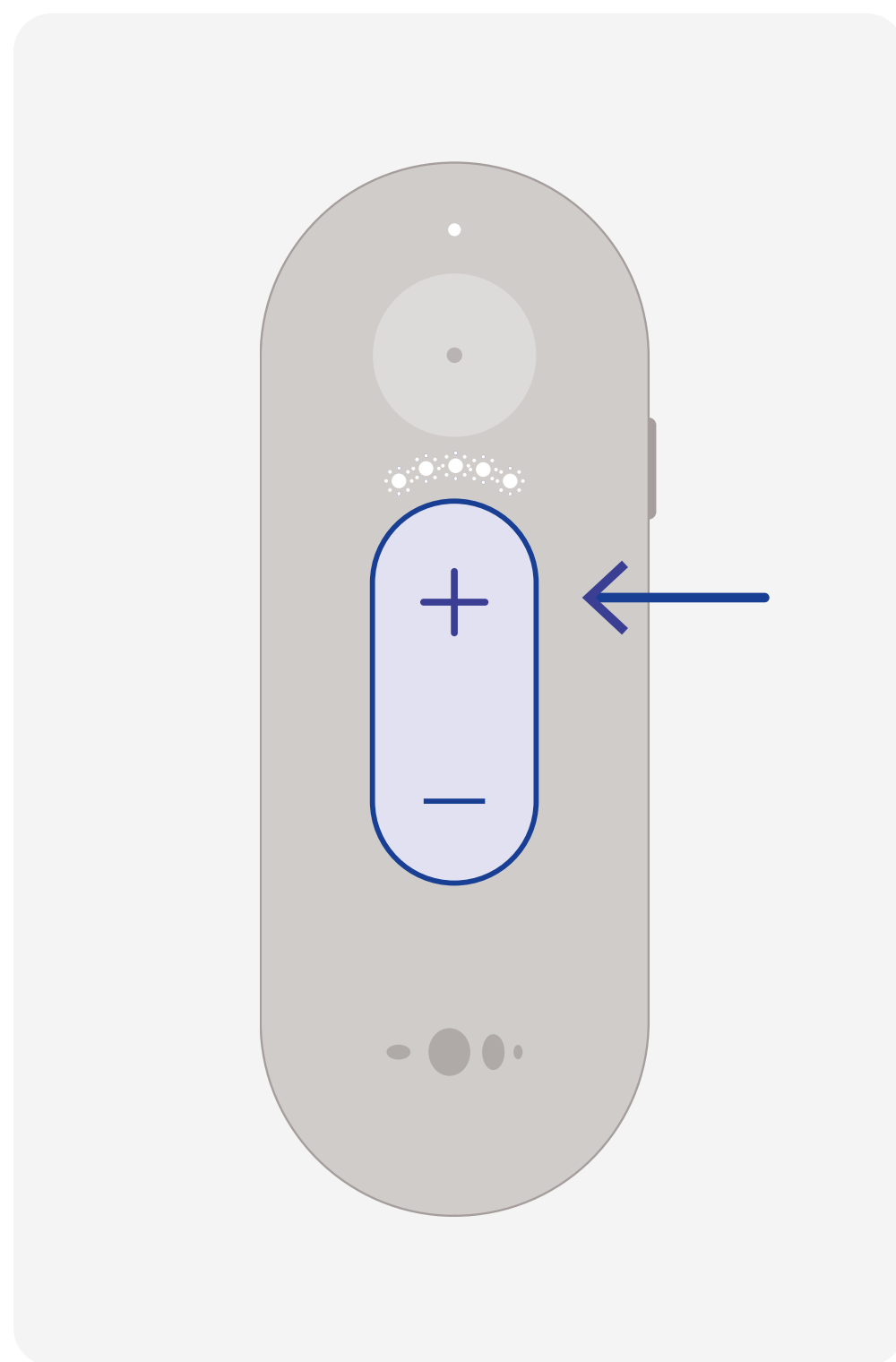


Aumentar o volume
Prima (+)

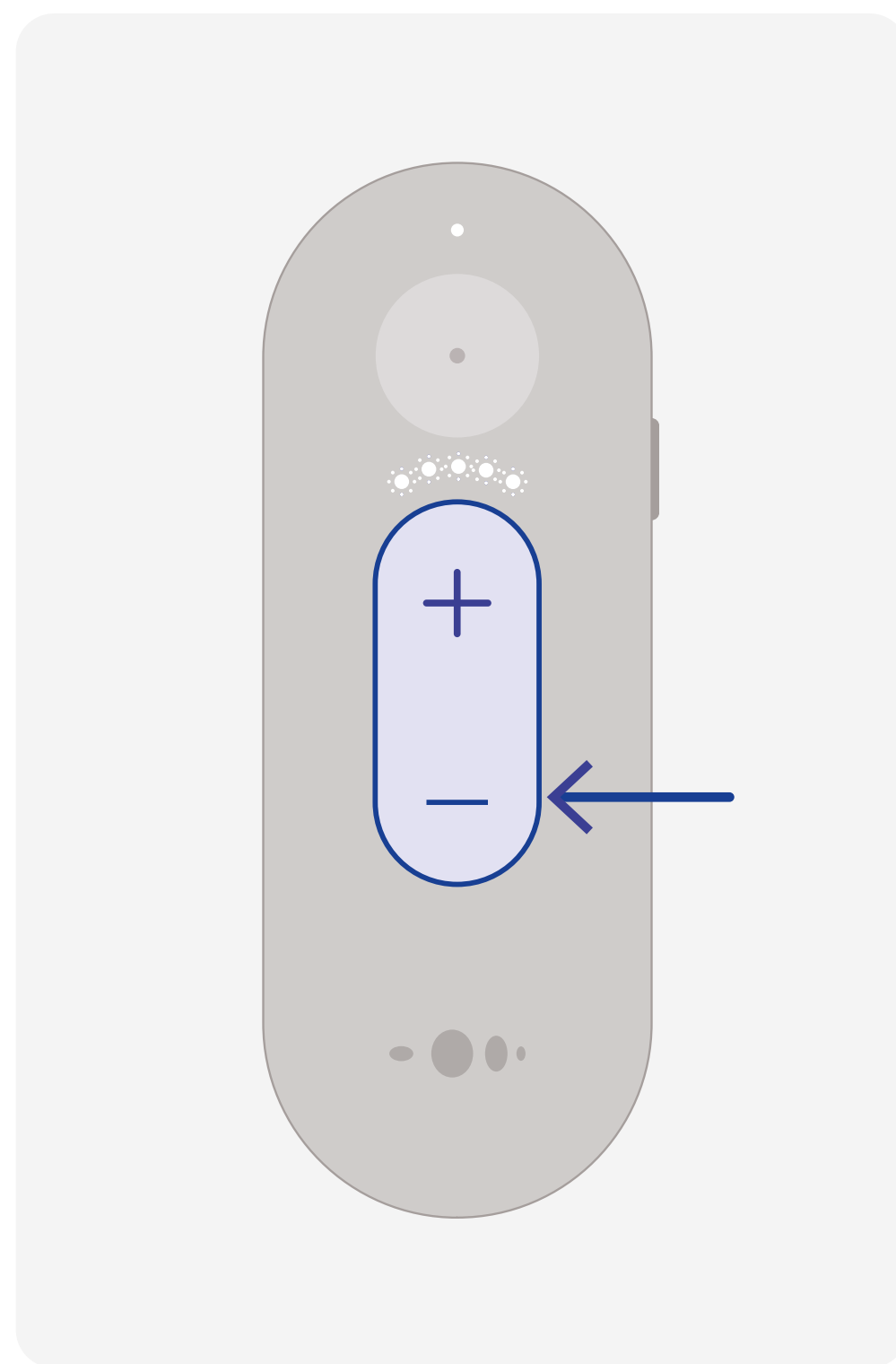


Abaixar volume
Prima (-)



Interface do utilizador Remote Plus Auditiva

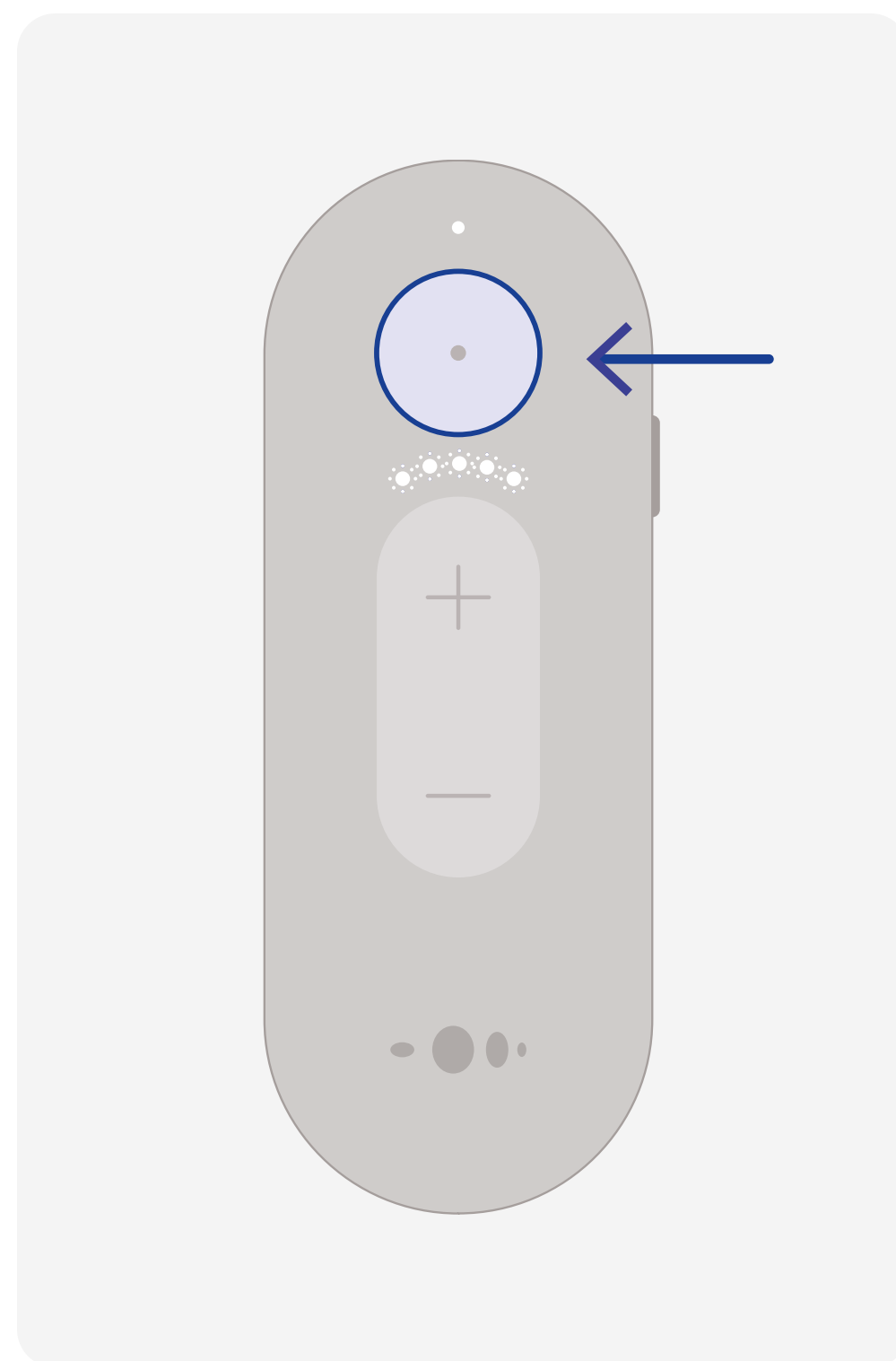

Mudar o modo de áudio
Prima o botão superior

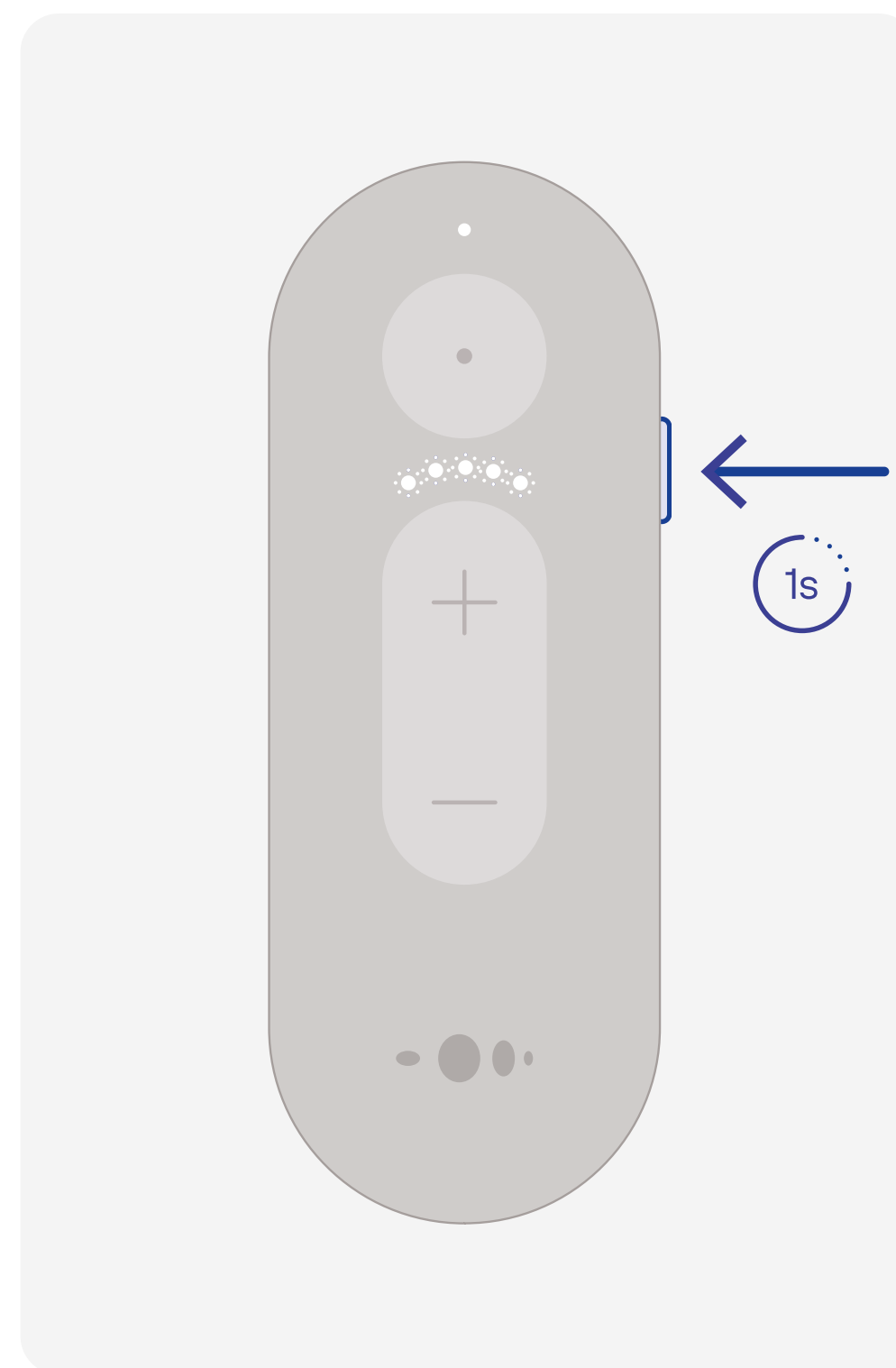


Ciclo de predefinição sucessiva
Prima o botão lateral e mantenha premido durante 1 segundo.




Interface do utilizador Remote Plus

Chamada

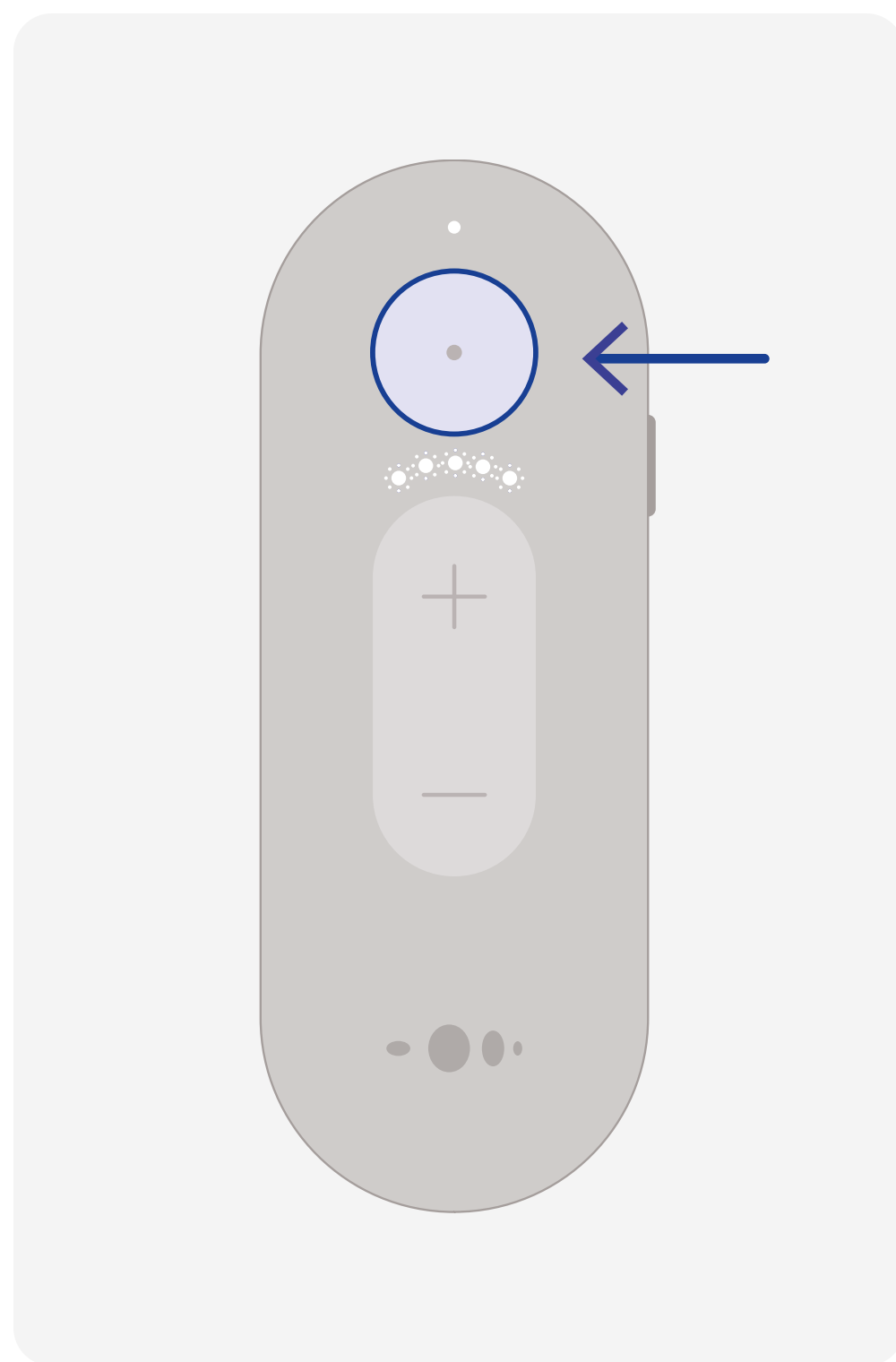

Atender chamada
Prima o botão superior

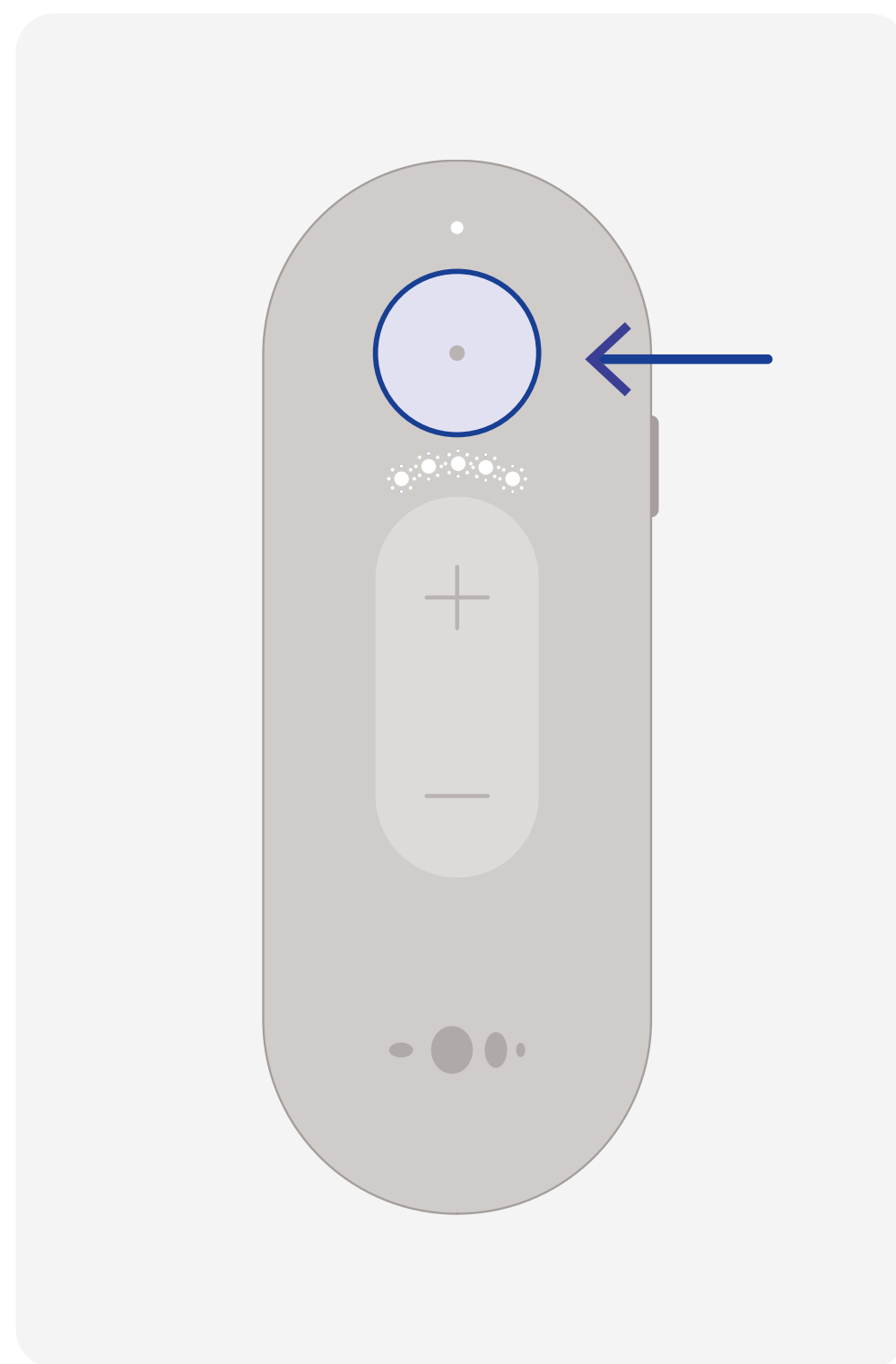

Terminar chamada
Prima o botão superior



Precisa de mais apoio?

Veja o vídeo de Configuração do Remote Plus



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas,
siga este link

↗ [Veja as instruções para utilização](#)