

Appels téléphoniques gestion




Gestion des appels téléphoniques

Avec Nuance Audio Plus, vous pouvez passer des appels téléphoniques et via des applications directement depuis vos lunettes, sans avoir à tenir votre téléphone.

Les appels pris en charge incluent les appels mobiles standards et les applications VoIP telles que WhatsApp, Telegram et FaceTime.

Les appels téléphoniques sont actuellement disponibles uniquement pour les iPhones Apple.



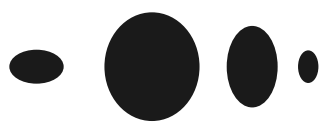


Étape 1 — Configuration iOS (obligatoire)


Pour configurer les appels téléphoniques sur iPhone (partie 1)



Apparez votre Nuance Audio Plus à l'application.

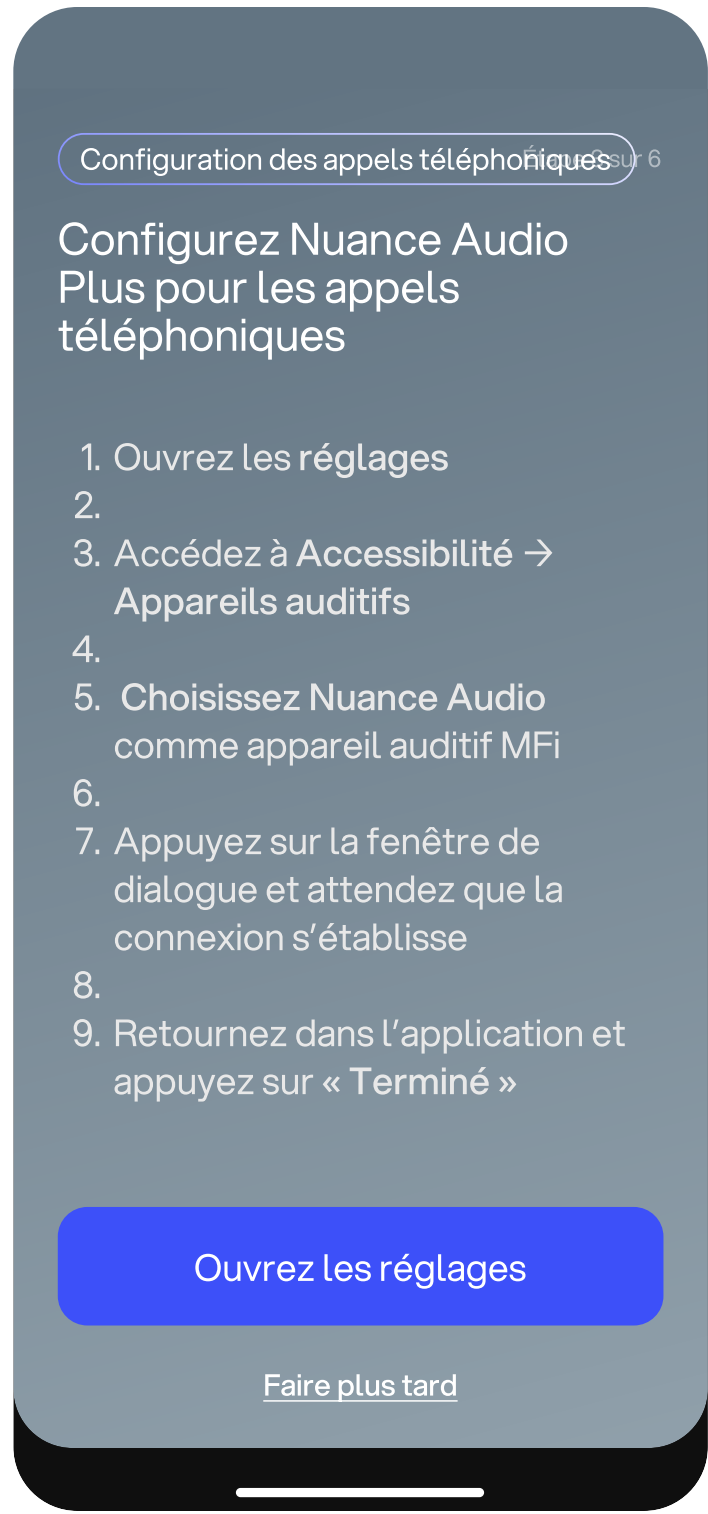

Ouvrez les réglages.

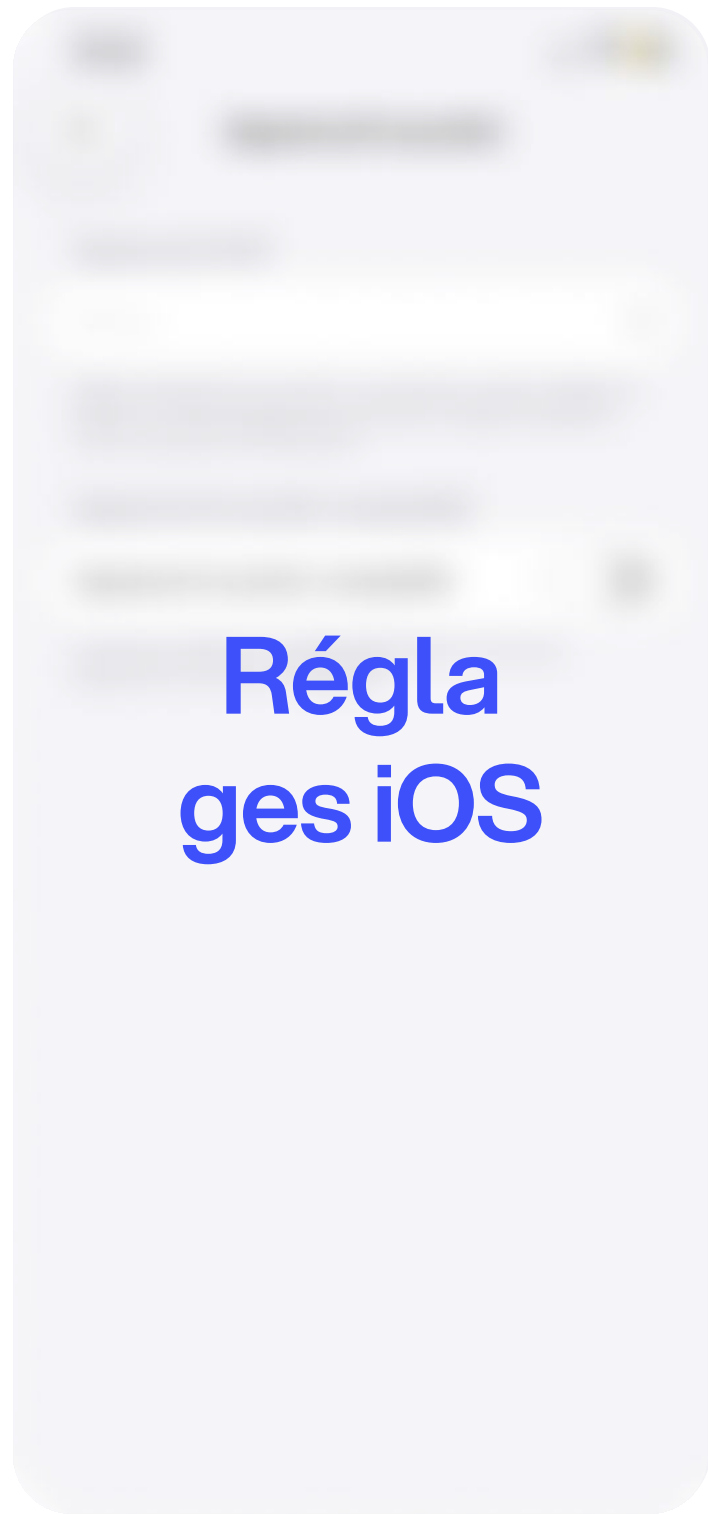


Accédez à **Accessibilité** → **Appareils auditifs**




Étape 1 — Configuration iOS (obligatoire)


Pour configurer les appels téléphoniques sur iPhone (partie 2)

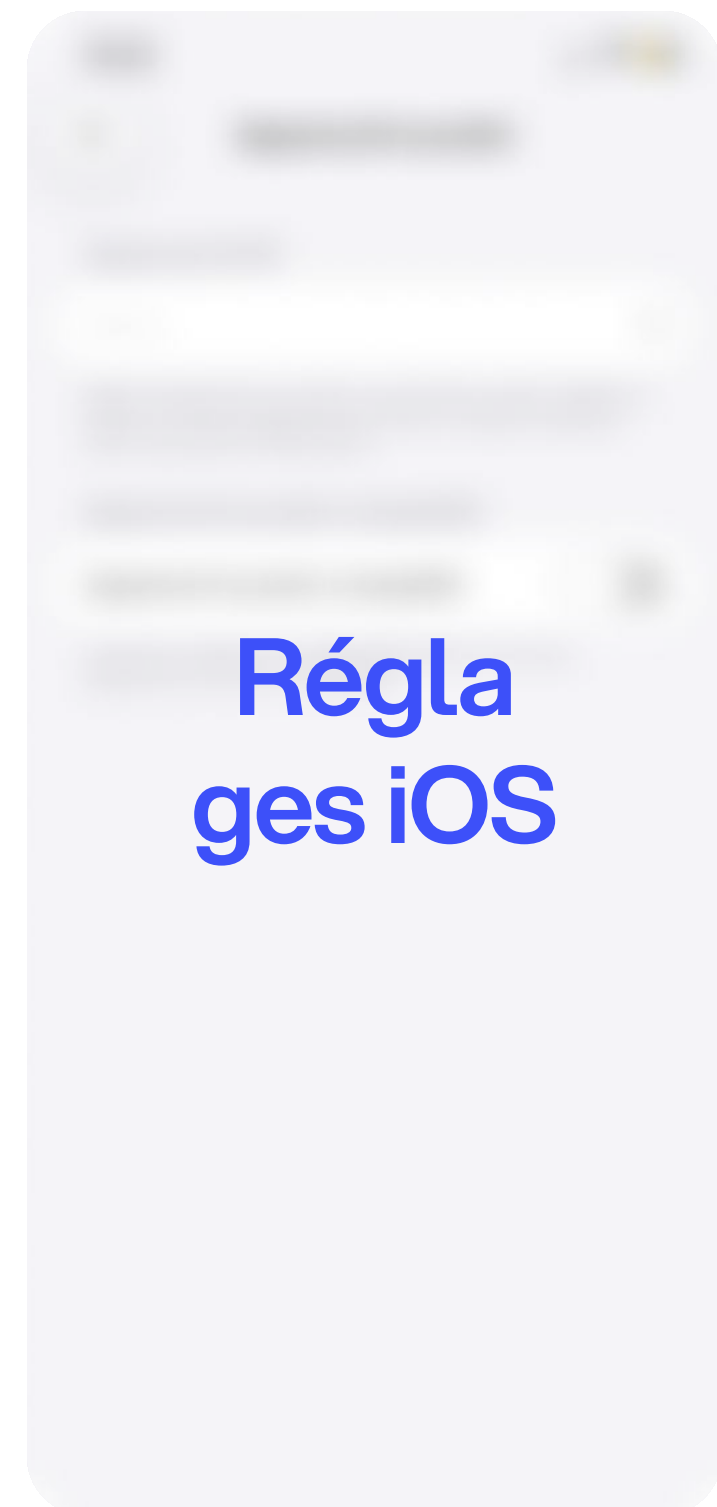

Choisissez **Nuance Audio Plus** comme appareil auditif MFi.

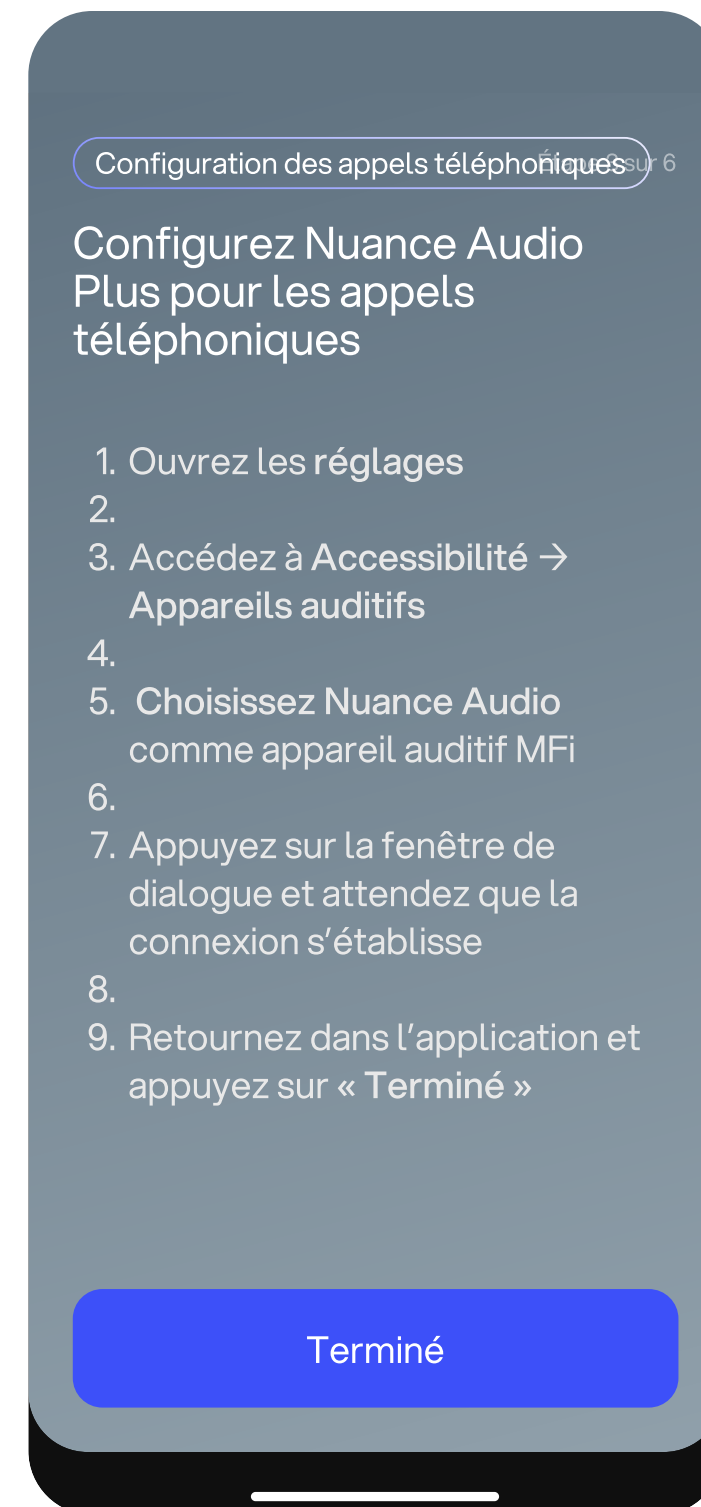

Appuyez sur la fenêtre de dialogue et attendez que la connexion s'établisse.

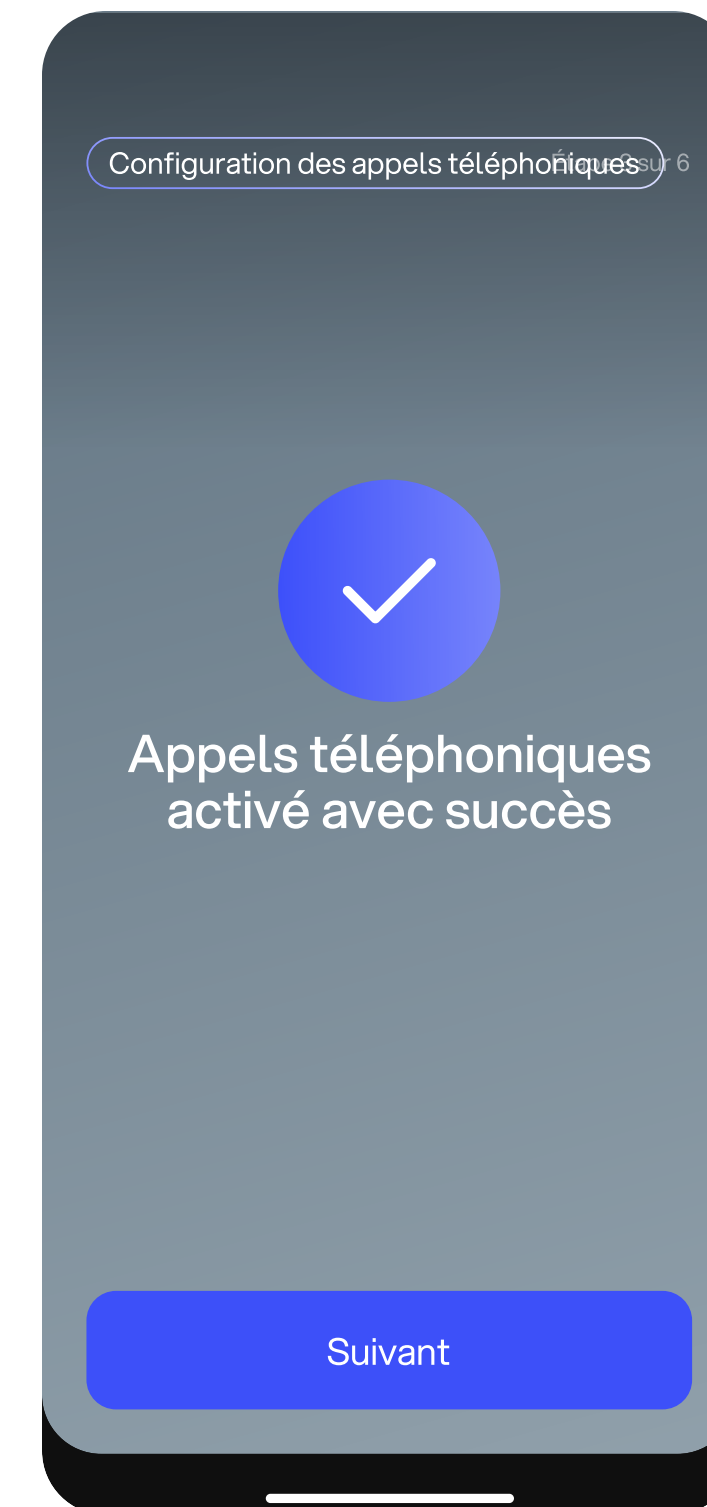


Revenez dans l'application, puis cliquez sur « Terminé ».




Étape 2 — Répondre et gérer les appels

Vous pouvez gérer les appels soit depuis votre iPhone, soit directement depuis les lunettes

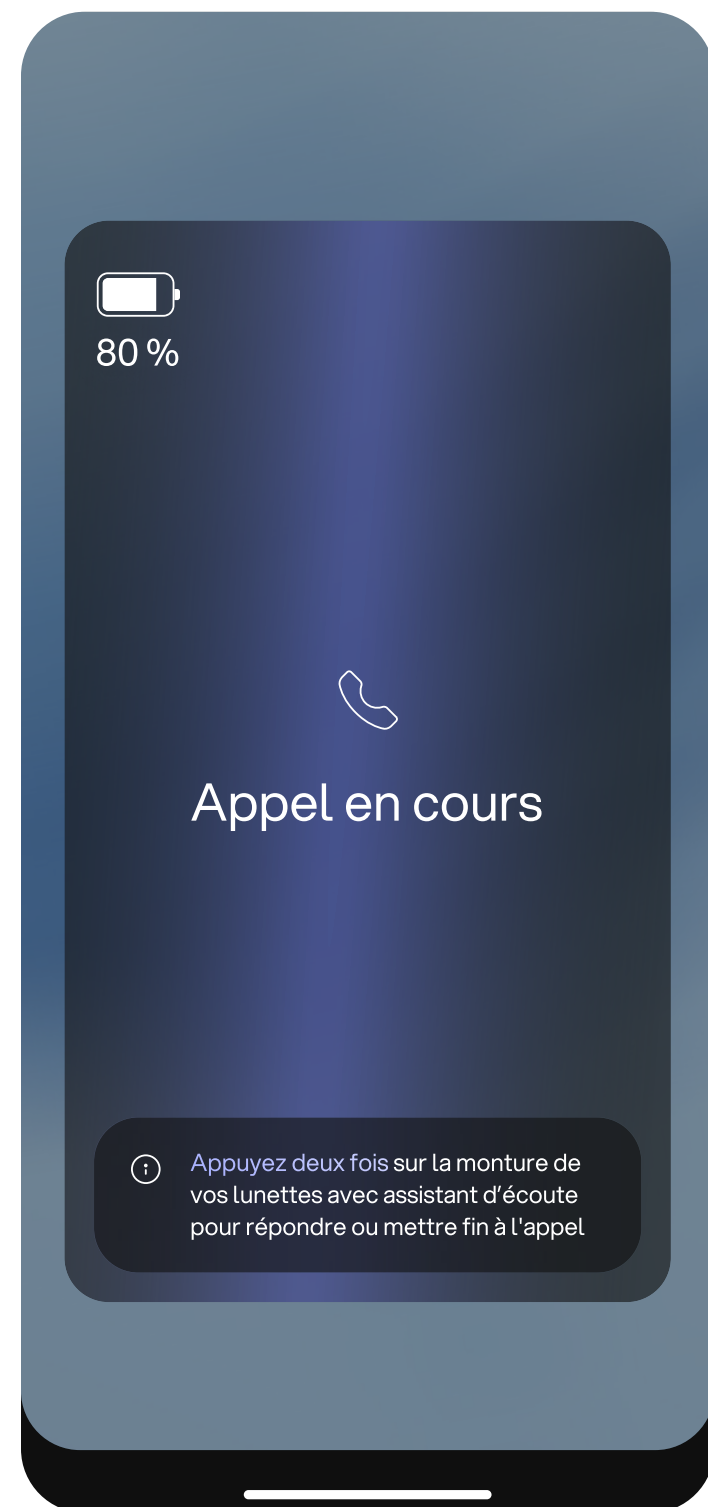

Option A — Depuis votre iPhone

Répondez ou terminez les appels directement depuis l'écran.

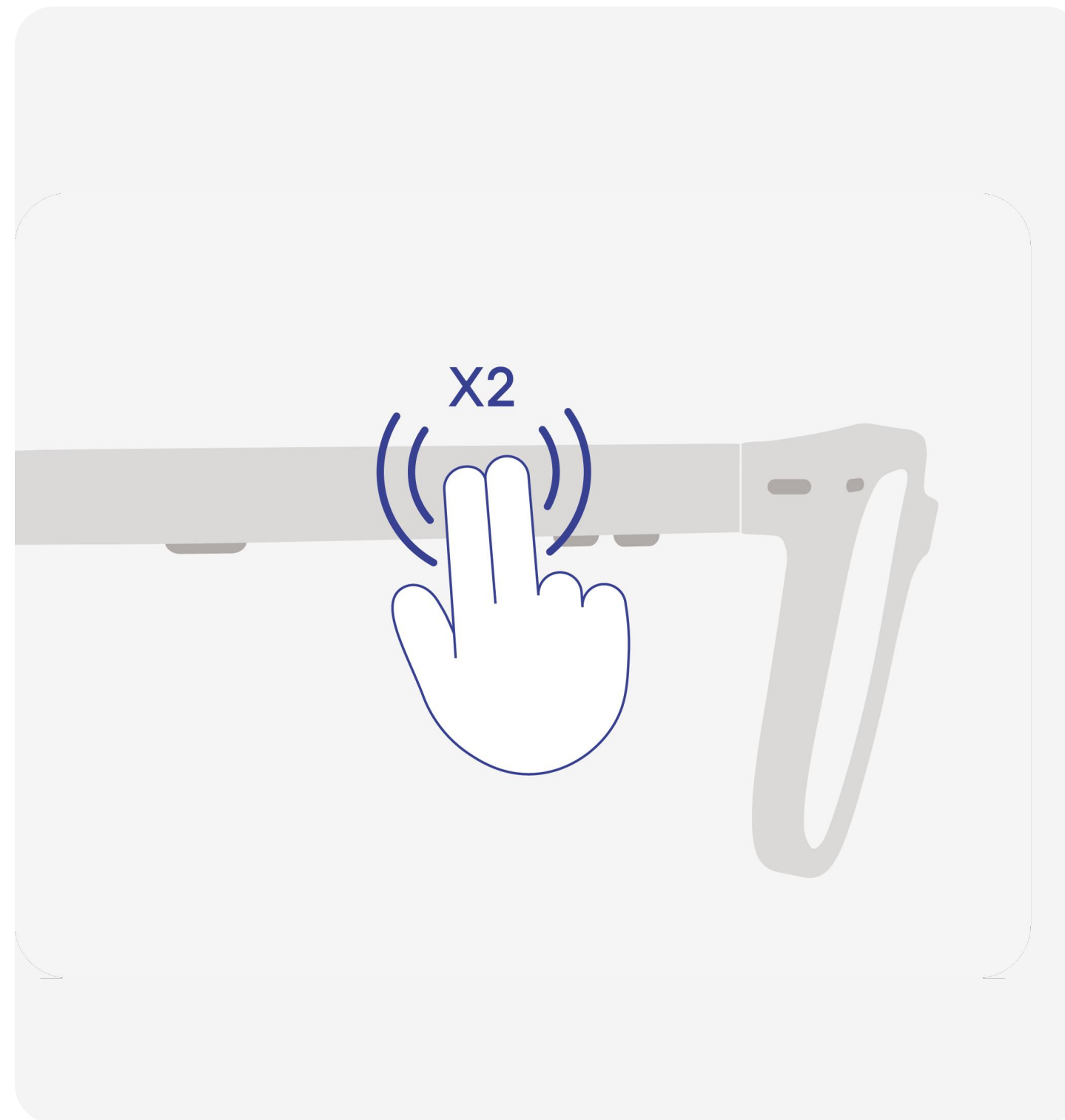

Option B — Depuis les lunettes (mains libres)

Activez d'abord les raccourcis :
Allez dans **Menu** > **Paramètres** > **Raccourcis** > Activez "**Double clic**"

Ensuite :

- Appuyez deux fois sur la branche droite pour répondre à un appel
- Appuyez deux fois de nouveau pour terminer l'appel



Informations supplémentaires

Les lunettes peuvent être appairées avec jusqu'à 5 téléphones.

Un seul téléphone à la fois peut être connecté activement.



Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes,
veuillez suivre ce lien

↗ [Voir les instructions d'utilisation](#)